



NanoPhotometer® N120/NP80/N60/N50/C40

User Manual

Version 4.6.7

Software Version 4.6n





The end user of the NanoPhotometer® product ("End User") hereby takes full responsibility for safe storage and backup of all files and/or data that may be created, saved on or transferred from the device. End User acknowledges that it is possible that data and/or files may be lost or damaged, and further acknowledges and agrees that it has sole responsibility to maintain all appropriate backup of files and data. By using the NanoPhotometer® device, End User hereby agrees to these terms, and agrees that Implen shall not be held liable for any loss, deletion or damage of any data or files for any reason, including any damages attributable thereto.

Telephone support is available using one of the following phone numbers from your geographic region:

Europe, Asia, South Pacific,
Middle East, Africa

Phone: +49 89 72637180
Fax: +49 89 726371854
Email: info@implen.de
Website: www.implen.de

Implen GmbH
Schatzbogen 52
81829 München
Germany

North and South America

Phone: +1 818 748 6400
Fax: +1 818 449-0416
Email: info@implen.com
Website: www.implen.com

Implen, Inc.
Unit 104
31194 La Baya Drive
Westlake Village, CA 91362
USA

Windows and Excel are trademarks of Microsoft Corporation Redmond, WA
macOS is a trademark of Apple Inc. Cupertino, CA



Declaration of Conformity

1. *Product model / product:*
 Product NanoPhotometer®
 Model/type C40/N50/N60/NP80/N120

2. *Manufacturer / Authorized Representative:*
 Name Implen GmbH
 Address Schatzbogen 52, D-81829 Munich, Germany

3. *This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.*

4. *Object of the declaration:*
 Product NanoPhotometer®

5. *The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:*
 2014/35/EU Low Voltage Directive
 2014/53/EU Radio Equipment Directive
 2014/30/EU The Electromagnetic Compatibility Directive
 2011/65/EU The Restriction of Hazardous Substances Directive
 FCC 47 CFR Part15 §15.107 and §15.109

6. *References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:*

Reference & Date	Title
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3	Radio and ancillary equipment for portable use (portable equipment); EUT Operating frequency range: 2.4 - 2.4835 GHz
ESTI EN 300 328 V2.2.2	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
ESTI EN 301 489-17 V2.2.1	Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM)
IEC 62281:2019	Battery certification and transport test
IEC 61010-1:2010	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use. General requirements.
EN IEC 61326-1:2013	Electromagnetic compatibility- generic emission standard electrical equipment for measurement, control and laboratory use.
EN 18031-1/-2:2024	Common security requirements for radio equipment
IEC 60529:1989/AMD2:2013	Degrees of protection prohibited by enclosures (IP 20)

The product is SGS certified in accordance with UL 61010-1, 3rd Edition (Rev. July 19, 2019) and CAN/CSA C22.2 No. 61010-1, 3rd Edition (A1:2018).

7. *Additional information:*
The technical documentation for the machinery is available from:
 Name: Implen GmbH
 Address: Schatzbogen 52, D-81829 Munich, Germany

Signed for and behalf of: Implen GmbH
Place of issue: Munich, Germany
Date of issue: 01.08.2025
Name: Martin Sahiri
Function: Managing Director
Signature:



Contents

1. NanoPhotometer® at a Glance	10
NanoPhotometer® Overview.....	10
NanoPhotometer® N120	11
NanoPhotometer® NP80	12
NanoPhotometer® N60	13
NanoPhotometer® N50	14
NanoPhotometer® C40	15
Instrument Rear Panel (N120/NP80/N60/N50/C40)	16
Instrument Bottom View (N120/NP80/N60/N50/C40)	16
Accessories.....	17
Standard Accessories	17
Optional Accessories.....	18
Connectivity	22
NanoPhotometer® Specifications.....	23
2. Getting Started	25
Spectrophotometer Installation	25
Safety Information	25
Unpacking and Positioning.....	26
Software Installation	27
NPOS Overview	27
Requirements and Compatibility	27
Installing Software on Computer	28
Installing NanoPhotometer® App on Tablet or Smartphone.....	29
First Steps and Configuration Wizard	29
Printer Installation.....	30
3. NanoPhotometer® Basics.....	31
Applications Overview.....	31
Icons	33
Buttons	34
Measurement Screens	35
Single Sample Methods	35
Multi Sample Methods.....	37
Data Processing Dialogs	43
Print	43
Save	45
Delete	47
Store Methods	48
Basic Operation	49
NanoVolume Single Sample Measurement Basics (N50/N60/NP80).....	49
NanoVolume Multi Sample Measurement Basics (N120).....	50
Cuvette Measurement Basics (C40/NP80)	52
Submicroliter Cell Measurements Basics (C40)	53
Sample Handling Tips	54

Solvent Compatibility (N50/N60/N120/NP80/C40 with submicroliter cell)	56
Data Transfer via File Server	56
Battery Operation.....	57

4. NanoPhotometer® Applications.....59



Nucleic Acids.....	59
Method Overview	59
Measurement Protocol Single Sample.....	59
Measurement Protocol Multi Sample (N120).....	62
Calculations.....	66



Protein UV.....	71
Method Overview	71
Measurement Protocol Single Sample.....	72
Measurement Protocol Multi Sample	75
Calculations.....	79



Protein Assays.....	83
Method Overview	83
Measurement Protocol Single Sample.....	84
Measurement Protocol Multi Sample	87
Saving and Loading Standard Curves	92
Calculations.....	92



Kinetics.....	93
Method Overview	93
Measurement Protocol	93
Calculations.....	95










OD600.....	96
Method Overview	96
Measurement Protocol	97
Calculations.....	99



More Apps.....	100
-----------------------	------------



More Apps: Wavelength.....	100
Method Overview	100

Measurement Protocol Single Sample	100
Measurement Protocol Multi Sample	103
Calculations	106
 More Apps: Wavescan	107
Method Overview	107
Measurement Protocol Single Sample	107
Measurement Protocol Multi Sample	109
Calculations	112
 More Apps: Absorbance Ratio	113
Method Overview	113
Measurement Protocol	113
Calculations	115
 More Apps: Concentration	116
Method Overview	116
Measurement Protocol	116
Calculations	119
 More Apps: Standard Curve	120
Method Overview	120
Measurement Protocol	120
Saving and Loading Standard Curves	122
Calculations	123
 Custom Apps	123
 Stored Results	124
 Stored Methods	125
5. Preferences	126
General	126
Date and Time	126
Display	127
About	128
Storage	128
Language	128



Illumination Sample Window	128
Enable NanoVolume	128
Dyes	129
Warning Messages.....	131
Blank Control.....	131
Sample Quality Control	131
Network.....	132
Network Settings	132
WLAN Settings	133
File Server Access	133
Network Folder	134
Printer	136
Network Printer.....	136
Report Configuration	137
CFR21	137
6. Troubleshooting.....	138
Initialization test.....	138
Messages.....	138
Important Warning Messages:	138
Important Alert Messages:	139
System Freeze.....	140
7. Assistance	141
Support.....	141
Report Problem	141
User Manual	142
Software Maintenance	142
NPOS update	142
Create Log File.....	143
Factory Reset.....	143
Create Backup.....	143
Diagnostics	144
Remote Access	144
License Information.....	145
End-User License Agreement (EULA)	145
Trademarks	145
Contact Implen.....	146
8. Maintenance	147
Maintenance Free Technology.....	147
Replacement Parts.....	147
Cleaning and General Care	148
9. Warranty.....	149

10. Appendix 1- Instalace Spektrofotometru	150
Bezpečnostní informace.....	150
Vybalení a umístění.....	150
11. Appendix 2 - Installatie Spectrofotometer	152
Veiligheidsinformatie	152
Uitpakken en plaatsen	152
12. Appendix 3 - Installation du spectrophotomètre	154
Informations de sécurité	154
Déballage et positionnement	155
13. Appendix 4 – Installation Spectrophotometer	156
Sicherheitsinformationen	156
Auspacken und Platzieren.....	157
14. Appendix 5 – Installazione dello Spettrofotometro	158
Informazioni di sicurezza.....	158
Disimballaggio e collocazione	159
15. Appendix 6 – Instalacja Spektrofotometru	160
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	160
Rozpakowywanie i umiejscowienie	161
16. Appendix 7 – Instalación del Espectrofotómetro	162
Información de seguridad	162
Desembalaje e instalación.....	164
17. Appendix 8 – Spektrofotometerinstallation.....	165
Säkerhetsinformation	165
Uppackning och placering	166
18. Appendix 9 – Instalação de Espectrofotómetro.....	167
Informações de Segurança	167
Desembalamento e Posicionamento	168
19. Appendix 10 - ИНСТАЛАЦИЯ НА СПЕКТРОФОТОМЕТЪР	169
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	169
РАЗПАКОВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ	170
20. Appendix 11 - SPEKTROFOTOMETRI PAIGALDAMINE	171
OHUTUSTEAVE.....	171
PAKENDAMINE JA PAIGALDAMINE.....	172
21. Appendix 12 – SPEKTROFOTOMETRIN ASENNUS.....	173
TURVALLISUUSTIEDOT	173

ΠΑΚΚΑΑΜΙΝΕΝ JA Sijoittaminen	174
22. Appendix 13 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΕΚΤΡΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ	175
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	175
ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	176
23. Appendix 14 - SPEKTROFOTOMÉTER TELEPÍTÉS.....	178
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	178
CSOMAGOLÁS ÉS HELYEZÉS	179
24. Appendix 15 - SPEKTROFOTOMETRA INSTALĚŠANA.....	180
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA	180
IEPAKOŠANA UN NOVIETOŠANA	181
25. Appendix 16 - SPEKTROFOTOMETRO ĮRENGIMAS.....	182
SAUGOS INFORMACIJA.....	182
PAKAVIMAS IR PLACIRAVIMAS	183
26. Appendix 17 - INSTALLAZZJONI SPETTROFOTOMETRU	184
INFORMAZZJONI TA' SIGURTÀ	184
IMBALLAGĠĠ U POŻIZZJONAMENT.....	185
27. Appendix 18 - INSTALLATION AF SPEKTROFOTOMETER	186
SIKKERHEDSINFORMATION	186
UDPAKNING OG PLACERING	187
28. Appendix 19 - SUITEÁIL SPECTROFÓTÓIMÉADAIR.....	188
EOLAÍOCHT SHABHÁILTEACHTA.....	188
DÍPHACÁIL AGUS SUÍOMH	189
29. Appendix 20 - INSTALAREA SPECTROFOTOMETRULUI	190
INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ	190
DEFACEREA AMBALAJULUI ȘI AMPLASARE	191
30. Appendix 21 - INŠTALÁCIA SPEKTROFOTOMETRA	193
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	193
VYBALENIE A UMIESTNENIE.....	194
31. Appendix 22 - NAMESTITEV SPEKTROFOTOMETRA.....	195
VARNOSTNE INFORMACIJE	195
ODPAKIRANJE IN NAMESTITEV.....	196
32. Alphabetical Appendix	198

1. NanoPhotometer® at a Glance

NanoPhotometer® Overview

The Implen NanoPhotometer® is a mobile, simple to use UV/Visible spectrophotometer with a CCD array detector with options ranging from NanoVolume to standard cuvette. The NanoPhotometer® family comprises five different models.

There are four single sample models available:

The NP80 spectrophotometer is a combination of NanoVolume and cuvette option, the N60 and N50 are NanoVolume spectrophotometers only and the C40 is a standard cuvette solution with the option to upgrade to NanoVolume measurements.

The NanoPhotometer® N120 is a multi-sample spectrophotometer which can measure up to 12 NanoVolume samples simultaneously.

The NanoPhotometer® runs on a Linux-based operating system (NPOS) that is designed for the use of pre-programmed and custom applications with a high degree of flexibility and processing power.

Sample Compression Technology™ provides easy sample handling which is independent of surface tension. This technology squeezes the sample between two quartz surfaces allowing for unmatched precision and accuracy without the need for dilutions. Combined with our True Path Technology™ the system offers lifetime accuracy and precision without the need for maintenance or recalibration.

Note: It is recommended to use a properly calibrated pipette with high-quality tips to ensure delivery of appropriate sample volumes for NanoVolume sample applications.

Sample Control™ is a quality control technology that identifies air bubbles, sample impurities, turbidity, lint residues and potential contaminations. Sample Control™ monitors handling characteristics and sample quality in real time to ensure that the measured concentrations are reproducible and most precise.

Blank Control™ gives a warning message for blanks with high background. High background absorbance can be caused by a contaminated blank, blank buffer or by residues from previous users. Insufficient blank readings are the main cause for inaccurate measurements. Blank Control™ will protect the user from wasting time and precious sample on inaccurate readings caused by high background blanks or inappropriate cleaning. For more detailed information see also Technical Note #1 Blank Control™.

NanoPhotometer® N120



Item Number	Touchscreen	Battery Pack
N120-Touch	+	-
N120-Mobile	+	+

NanoPhotometer® NP80



Item Number	Touchscreen	Battery Pack
NP80	-	-
NP80-Touch	+	-
NP80-Mobile	+	+

NanoPhotometer® N60

Off Switch

7" Color Touch Screen

Illuminated Sample Window

Low Vibration Vortexer

Front USB Port



Item Number	Touchscreen	Battery Pack
N60	-	-
N60-Touch	+	-
N60-Mobile	+	+

NanoPhotometer® N50

Off Switch

7" Color Touch Screen

**Illuminated
Sample Window**



Front USB Port

Item Number	Touchscreen	Battery Pack
N50	-	-
N50-Touch	+	-

NanoPhotometer® C40

Off Switch

7" Color Touch Screen


**Temperature Controlled
Cuvette Holder**



Front USB Port

Item Number	Touchscreen	Battery Pack
C40	-	-
C40-Touch	+	-
C40-Mobile	+	+

Instrument Rear Panel (N120/NP80/N60/N50/C40)

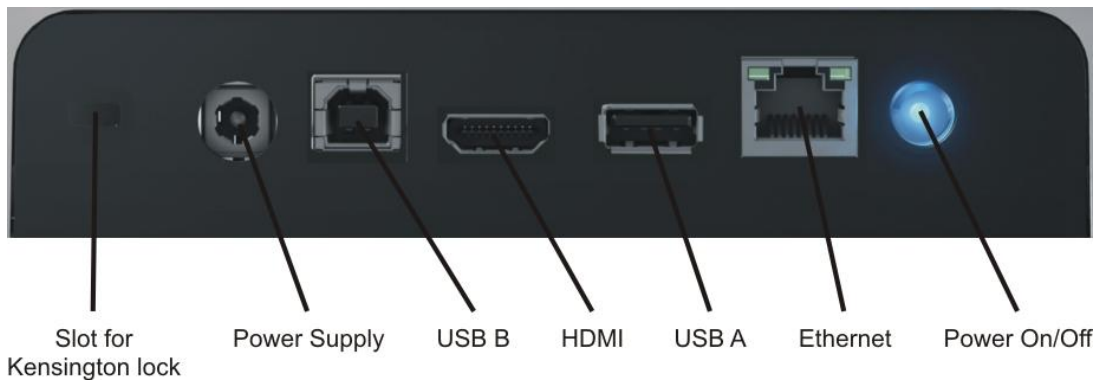

To boot/shut down the NanoPhotometer® push shortly (< 1 second) on the power on/off button at the back of the NanoPhotometer®.

Note: A long push (> 3 seconds) initiate a hard reset. Only activate a hard reset of the NanoPhotometer® when necessary. To avoid unnecessary hard reboots, it is recommended to power down the unit from the onboard touch screen by pressing the power button (⏻) in the bottom left corner of the home screen.

Instrument Bottom View (N120/NP80/N60/N50/C40)



Model name, device serial number and FCC ID are located on the identification plate on the bottom of the instrument.

Accessories

Standard Accessories

- **Connecting Cable**



USB connecting cable to connect the NanoPhotometer® to a computer to control the NanoPhotometer® via computer (please see page 27 Software Installation).

- **NanoPhotometer® Power Adapter**



Power adapter for the NanoPhotometer® and for charging the optional built-in battery pack.

Note: Use only the power adapter supplied with your instrument or a replacement part from the manufacturer or your supplier.

- **Dust Cover**

Optional Accessories

- **Didymium Glass Filter (C40/NP80)**



The certified didymium glass filter can be used to verify the wavelength and photometric accuracy of the NanoPhotometer® cuvette applications.

- **Standard Solution (N120, NP80, N60, N50)**



The NanoPhotometer® is recalibration free therefore it is not necessary to review the photometric accuracy on a regular basis. If the SOPs of a laboratory require a routine control of the photometric accuracy standard solutions can be used.

Note: Specifications of the standard solution are guaranteed for at least one year. Please see expiration date. Once a vial is opened it can be used for 30 minutes.

Note: Please read the Material Safety Data Sheet carefully prior to using this product.

- **IQ/OQ documentation (N120, NP80, N60, C40)**

The NanoPhotometer® IQ/OQ package consists of a Standard Solution and/or a Didymium Glass Filter and a corresponding Excel-based software tool depending on the type of instrument. The Excel-based software produces an automated report displaying all relevant data for an audit.


Note: The IQ/OQ documentation is not available for the NanoPhotometer® N50.

▪ **DiluCell™ (C40/NP80 only)**

The DiluCell™ is a **disposable cuvette** with shortened path length for automatic dilution of cuvette-based samples. This technology eliminates the need for the manual dilution of higher concentration samples, thereby reducing dilution errors and cross-contamination, making DiluCells™ ideal for use in GLP environments. Combined with small sample volume requirements (only 300µl required) and bubble free filling, the DiluCell™ allows for convenient spectrophotometric analysis from 340 - 950 nm.

The wide range of applications of our DiluCell™ 10 cuvettes include but are not limited to:

- General absorbance/transmittance measurements
- Cell Density (OD600) – Monitoring bacterial/yeast/fungal growth
- Enzyme Kinetics
- Colorimetric Assays
- Turbidity/McFarland analyses

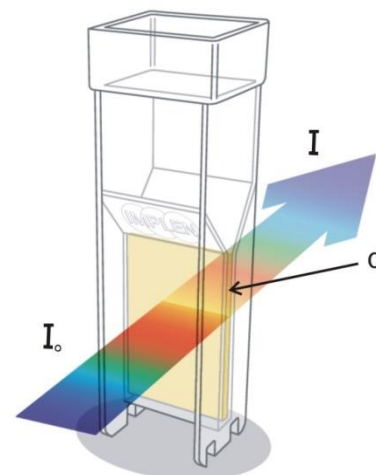

IMPLEN DiluCell™



Specifications

Parameter	DiluCell™ 10
Wavelength Range	340 nm – 950 nm
Optical Pathlength	1 mm (at 8.5 mm center height)
Volume Requirement	300 µl
Tolerance	±10%
Dilution Factor	1:10
Product Code	DC 10
Packaging	96 disposable cuvettes per pack

▪ **Field Kit**

Implen aluminum roller case for safe transportation, designed to fit in most airplane overhead bins; special compartments for all necessary accessories, cleaning tools and samples.



Note: Delivered w/o NanoPhotometer® and accessories

Note: Operate the NanoPhotometer® in the roller case only when cover is open. Ensure that air circulation is possible. Always switch NanoPhotometer® off for transportation.

▪ **Barcode Reader**

It is possible to import sample names from 1D and 2D barcodes. Connect a compatible barcode reader to the USB port of the NanoPhotometer® and push on the sample name input window. After

scanning a barcode the sample name will be shown in the input window. The imported name can then be edited or replaced completely.

Barcode readers that have been tested and verified compatible:

1D: Honeywell Voyager 95X0 Single-Line Laser Scanner
Datalogic Touch65
1D & 2D: AGPtEK SC36
Honeywell Xenon 1900g

▪ DYMO Label Printer

It is possible to connect a DYMO Label printer to the NanoPhotometer® for direct printing on standard or cryo labels. Recommended and tested printers are the DYMO LabelWriter 4XL/5XL (label size 10.3 x 15.8 cm) and the DYMO LabelWriter 450/550 (5.4 x 10 cm).


Cryo labels can be printed with DYMO Label printer 4XL and 450 using the following label format: 26 x 12.7 mm and 9.5 mm circle (landscape).

We also support generation 5 DYMO Label Printes.

Note: Cryo label paper is not available/compatible for the DYMO Label printer 5XL and 550.

Note: After starting the NanoPhotometer®, plug in the DYMO printer. The home screen will be shown. Wait at least for 30 seconds for driver installation.

Cryo labels (26 x 12.7 mm and 9.5 mm circle):

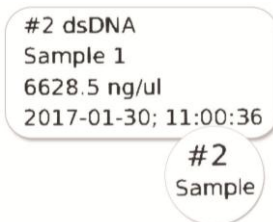

Note: Orientation of cryo labels on carrier foil needs to be landscape.

Connectivity

▪ USB A

There is a USB A port on the front as well as the rear panel of the NanoPhotometer® which is compatible with standard portable USB 2.0 storage devices (back) and USB 3.0 (front) for direct data transfer in a variety of formats including Excel. It is also possible to connect a mouse, keyboard, barcode reader, DYMO printer or HP printer directly to the NanoPhotometer®.

Note: We recommend using FAT/FAT32 formatted 2.0 USB flash drives. The USB flash drive size is due to the standard formatting currently limited to 32 GB. Encrypted USB flash drives are not compatible with the NanoPhotometer®.

Note: Cordless Bluetooth mice are not supported. Use wired mice only.

Note: Connect mouse and keyboard before starting the NanoPhotometer®.

▪ USB B

There is a USB B port located on the rear panel of the instrument which is compatible with the USB cable provided to connect the NanoPhotometer® to a computer. This USB connection can be used to control the NanoPhotometer® via computer.

▪ LAN

There is an Ethernet (LAN) connection port on the rear panel of the instrument which enables the NanoPhotometer® to connect with the local network. This Ethernet connection can be used for data transfer from the NanoPhotometer® to a local network, to control the NanoPhotometer® via a control device and network printing.

Data transfer is possible by saving on a defined network folder (see page 134 Network Folder) or on the NanoPhotometer® file server (see page 56 Data Transfer via File Server).

Note: Plug in the LAN cable before starting the NanoPhotometer®.

Note: The maximum LAN cable length is 10 meters. Bit rate is 1 Gbit/s

▪ Wi-Fi® (WiFi)

The NanoPhotometer® is equipped with Wi-Fi®, which can be used as a Wi-Fi® network or as a Wi-Fi® Hotspot. The Wi-Fi® network allows same functionality as the Ethernet connection including direct printing via AirPrint / IPP compatible printers supporting PDF format.

Note: IPP version 2.2 is required and some printer configuration settings might need to be changed in order to allow communication with the NanoPhotometer®

The Wi-Fi® Hotspot provides the option to control the NanoPhotometer® by other Wi-Fi® devices like computer, tablets or smartphones (tablets and smartphones not for N120).

Wi-Fi® Hotspot connection details:

SSID: NanoPhotometer® serial number

Password: Implenuser

Note: Due to the limitations of some handheld devices saving to a wireless device is limited to 40 measurements per dataset. Larger datasets can be saved on the NanoPhotometer® itself.

▪ HDMI

There is an HDMI port located on the rear panel of the NanoPhotometer® which is compatible with HDMI 1.4 cables (or better) to connect the NanoPhotometer® to HDMI compatible monitors.

Note: The maximum HDMI cable length is 5 meters.

NanoPhotometer® Specifications

NanoVolume Performance

Detection Range dsDNA	N60, NP80: 1 - 16,500 ng/μl N50: 5 - 7,500 ng/μl N120: 2 - 8,000 ng/μl
Detection Range BSA	N60, NP80: 0.03 - 478 mg/ml N50: 0.15 - 217 mg/ml N120: 0.06 - 230 mg/ml
Sample Volume	N50, N60, NP80: 0.3 - 2 μl N120: 2 - 3.5 μl
Photometric Range (10 mm equivalent)	N60, NP80: 0.02 - 330 A N50: 0.1 - 150 A N120: 0.04 - 160 A
Path length	N50, N60, NP80: 0.67 and 0.07 mm N120: 1 and 0.125 mm
Dilution Factor	N50, N60, NP80: 15 and 140 N120: 10 and 80
Vortex	N60, NP80: 2,800 rpm; tube size up to 2.0 ml

Cuvette Performance – NP80 & C40

Detection Range dsDNA	0.1 - 130 ng/μl
Detection Range BSA	0.003 - 3.7 mg/ml
Photometric Range	0 - 2.6 A
Center Height (Z-Height)	8.5 mm
Cell Types	outside dimension 12.5 x 12.5 mm
Heating	37°C ± 0.5°C

Optical Specifications

Wavelength Scan Range	C40, N60, NP80, N120: 200 – 900 nm N50: 200 - 650 nm
Measure Time For Full Scan Range	C40, N50, N60, NP80: 2.5 – 4.0 seconds N120: 1.7 – 2.5 seconds per sample
Wavelength Reproducibility	C40, N60, NP80, N120: ± 0.2 nm N50: ± 1nm
Wavelength Accuracy	C40, N60, NP80, N120: ± 0.75 nm N50: ± 1.5 nm
Bandwidth	C40, N60, NP80: < 1.5 nm N50: < 3 nm N120: < 2.5 nm
Absorbance Reproducibility	C40, NP80 (cuvette): < 0.002 A @ 0 - 0.3 A @ 280 nm CV < 1% @ 0.3 – 2.0 A @ 280 nm N60, NP80 (Lid 15): < 0.002 A (0.67 mm path) @ 0 – 0.3 A @ 280 nm CV < 1% @ 0.3 – 1.7 A @ 280 nm N50 (Lid 15): < 0.004 A (0.67 mm path) @ 280 nm CV < 1% @ 0.3 – 1.5 A @ 280 nm

N120 (Lid 10): < 0.004 A (1 mm path) @ 0 – 0.3 A @ 280 nm
CV < 0.4% @ 0.8 A @ 280 nm

Absorbance Accuracy	< 1.75 % @ 0.7 A @ 280 nm of the reading
Stray Light	N60, NP80, C40: < 0.5% @ 240 nm using NaI N50: < 2% @ 240 nm using NaI N120: < 1% @ 240 nm using NaI
Optical Arrangement	1 x 4096 CMOS Array
Lamp	Xenon flash lamp
Lifetime	10 ⁹ flashes, up to 10 years

Processing Power and Compatibility

Operating System	Linux based OS
Onboard Processor	Intel Celeron dual core 2.4 GHz
Internal Data Storage	C40, N50, N60, NP80: 64 GB N120: 128 GB
Software Compatibility	Windows 8, 10, 11 (32 & 64 bit), OS X (Intel x86 and Apple M1), iOS and Android OS

General Specifications

Main Body Size	200 mm x 200 mm x 120 mm
Weight	3.8 – 5.2 kg depending on configuration
Operating Voltage	90 - 250 V ± 10%, 50/60 Hz, 90 W, 18/19 VDC
Display	1024 x 600 pixels; touchscreen glove compatible
Built-in Battery Pack	Optional rechargeable lithium ion battery: C40, N60, NP80: 95 Wh, 6.6 Ah; 8 h N120: 47.5 Wh, 3.3 Ah, 3 h Min. charging cycles: 800
Certifications	CE, IEC 61010-1:2012 and EN 61326-1:2013
Battery Certification	IEC 62133 and UN38.3 transport test
In- and Output Ports	2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®
Security	Slot for Kensington lock

Features and specifications are subject to change without notice.

US Patents 20080204755 and 20080106742

Windows is a trademark of Microsoft. Mac OS & iOS are trademarks of Apple, Inc. Android OS is a trademark of Google. Linux is a trademark of Linus Torvalds.

2. Getting Started

Spectrophotometer Installation

Note: Translations of the Safety Information and Unpacking and Positioning are available in Appendix 1 (Czech), Appendix 2 (Dutch), Appendix 3 (French), Appendix 4 (German), Appendix 5 (Italian), Appendix 6 (Polish), Appendix 7 (Spanish), Appendix 8 (Swedish), Appendix 9 (Portuguese), Appendix 10 (Bulgarian), Appendix 11 (Estonian), Appendix 12 (Finnish), Appendix 13 (Greek), Appendix 14 (Hungarian), Appendix 15 (Latvian), Appendix 16 (Lithuanian), Appendix 17 (Maltese), Appendix 18 (Danish), Appendix 19 (Irish), Appendix 20 (Romanian), Appendix 21 (Slovak), and Appendix 22 (Slovenian)

Safety Information

Before commencing installation, please take time to familiarize yourself with warning labels and symbols on your instrument and their meaning. These are to inform you where potential danger exists or particular caution is required. Improper use may cause personal injuries or damage to the instrument. The instrument must only be operated by appropriately trained and experienced personnel. Please read the complete user manual prior to use.

 direct current

Overvoltage category: Class II

Maximum operating altitude: < 2000 m

Pollution degree: 2

Do not open the instrument as this can expose the operator to electrical power, UV light, and delicate fiber optics or damage the instrument.

If the submicroliter cell is used with the NanoPhotometer® C40 make sure that the lid is placed on the measurement head prior to the measurement.

WARNING: UV exposure when measuring without lid.

Do not use damaged power cords, accessories, and other peripherals with your NanoPhotometer®. Use only the delivered and specified power supply/charger.

Do not expose the NanoPhotometer® to strong magnetic, electrical fields, water, chemicals or any type of liquid as heavy rain or moisture.

Do not put the instrument into fire, as it may swell or explode (battery). Do not store at or use near any type of heat source, especially temperatures above 60°C or in an explosive atmosphere.


Do not leave your NanoPhotometer® on your lap or near any part of your body to prevent discomfort or injury from heat exposure.

Do not place objects on top of the NanoPhotometer®.

The NanoPhotometer® with battery pack (mobile version) has to be switched off during transportation. The on/off button has to be protected during transportation from turning on itself caused by shock or vibration.

Biological samples may contain or have the potential to transmit infectious diseases. Be aware of the health hazard presented by such samples and wear appropriate protective equipment. Handle such samples with the greatest of care and according to applicable regulatory and organization requirements before working with such potential infectious materials.

Note: Do not spill any biological samples on instrument components. If spill occurs, disinfect the instrument immediately following your laboratory protocols and the cleaning instruction of the instrument (see page 147 Maintenance).

The symbol  on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

Unpacking and Positioning

Note: Translations of the Safety Information and Unpacking and Positioning are available in the Appendix.

Check the contents of the package against the delivery note. If any shortages are discovered, inform your supplier immediately.

Inspect the instrument for any signs of damage caused in transit. If any damage is discovered, inform your supplier immediately.

Ensure your proposed installation site conforms to the environmental conditions for safe operation: indoor use or dry environment.

The NanoPhotometer® is designed and developed for use in a controlled, secure environment. This is described as a laboratory environment with restricted physical access within a company. The NanoPhotometer® may only be accessed by qualified users and may only be operated within a local company network. If a secure environment is not ensured, the NanoPhotometer® does not meet the following requirements of the Radio Equipment Directive (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Note: Do not expose your NanoPhotometer® near liquids, chemicals, rain, moisture or dusty environments.

Working temperature range 15 - 40°C (NP80, N60, N50 and C40) and 18 – 32°C (N120); If the cuvette heating is used the range is 15 - 27°C.

Storage temperature range is 0 - 40°C. Do not store the instrument below or above this temperature.

If the instrument is subjected to extreme temperature changes, it may be necessary to allow the instrument to equilibrate. Turn the instrument off and then on again once thermal equilibrium has been established (~2 - 3 hours).

Maximum relative humidity (non-condensing) of 80% up to 31°C decreasing linearly to 50% at 40°C.

The instrument must be placed on a stable, level surface that can support 4-5 kg. Ensure that air can circulate freely around the instrument. Confirm while powered on that no materials reduce air circulation. Avoid direct sunlight as it may bleach parts of the instrument and can cause damage to plastic parts.

The equipment should be positioned such that in the event of an emergency the main plug can be easily located and removed.

Always carry the instrument by holding the main corpus of the instrument and not e.g. on the optional attached display, pipetting support or NanoVolume pedestal.

The equipment must be connected to power with the 90W power supply/cord supplied by Implen. The power outlet must have a protective conductor (earth/ground). It can be used on 90-250 V ± 10%, 50-60 Hz power supply system.

For mobile models please charge the battery pack at least for 3 hours prior to the first use. To avoid deep discharging of the battery pack charge the battery pack at least once a month even if the NanoPhotometer® is not in use. Recharging of deep discharged batteries is not possible they need to be replaced by new ones.

Please read the complete user manual before first use.

Turn the instrument on using the power button on the rear panel after it has been plugged in. The instrument will perform a series of self-diagnostic checks.

Please contact original supplier immediately if technical or sample handling difficulties are experienced.

Note: If this equipment is used in a manner not specified or in environmental condition not suitable for safe operation, the protection provided by the equipment may be impaired and the instrument warranty voided.

Software Installation

NPOS Overview

NPOS is a Linux-based operating system designed for the NanoPhotometer®.

NPOS can store data either to a common directory or be configured to save to independent directories according to file format and/or instrument.

NPOS can save data in an Implen .IDS format, PDF or as an Excel format file.

Note: PDF and Excel files cannot be opened on the NanoPhotometer®. Files need to be transferred to a computer or device where Excel or a PDF reader is available.

Note: Please do not connect the instrument to a computer until the NanoPhotometer® NPOS software is installed on the computer.

Requirements and Compatibility

The NPOS user interface is designed that all features can be operated by using a touchscreen. If the software is installed on a computer without touchscreen, the user interface can be operated by using keyboard and mouse. Before starting the installation process, ensure that the software of the control device is compatible.

Compatible Control Devices

Computer:

PC: Windows 8 / Windows 10 (32 & 64 bit) / Windows 11

Mac: macOS Catalina / Big Sur (Intel x86 and Apple M1)

Tablets (minimum requirements):

iPad: iOS 13

Android (quad core 1.2 GHz with 1 GB RAM): Android version 10

Smartphones (minimum requirements):

iPhone: iOS 13

Android (quad core 1.2 GHz with 1 GB RAM): Android version 10

Windows is a trademark of Microsoft. Mac OS & iOS are trademarks of Apple. Android OS is a trademark of Google. Linux is a trademark of Linus Torvalds.

Note: There are two user interfaces of the software available; one for built-in touchscreen, computer and tablets and one for smartphones (not available for NanoPhotometer® N120).

Installing Software on Computer

The NanoPhotometer® software can be installed on compatible Windows and Mac computer systems. Various operating systems and computer hardware may cause the set-up procedure to differ from that described here. This process is given as guidance only; it may need adaptation for other systems.


Note: Do not connect the NanoPhotometer® to the PC/Mac before NPOS installation.

Note: If a previous version of the NPOS software is already installed on the computer, remove the USB cable and uninstall the NPOS software before installing the new software version.


Note: The Windows and Mac installation files are located on the Implen USB flash drive which is included with the NanoPhotometer® at time of delivery. The files are available for free download at any time in the download area of the Implen website (www.implen.de/downloads).

▪ NPOS installation for single/multi user on Windows computer

1. Check the installed version of the NanoPhotometer® firmware (Preferences/About) and update it to the latest version if necessary, before starting the installation/update of the NPOS software on your computer.
2. Start the NPOS installation file and follow the installation routine for **single user installation**. Installation file can be found on the Implen USB flash drive which is included with the NanoPhotometer® at time of delivery or can be downloaded from the Implen webpage: www.implen.de/downloads. Full administration rights are required for the installation. If you have insufficient privileges, installation may fail. If in doubt consult your computer administrator.
3. For **multi user installation** (only necessary for Windows installation) choose on the License Agreement dialog the option “Advanced” and on the following dialog “Install for all users of this machine”

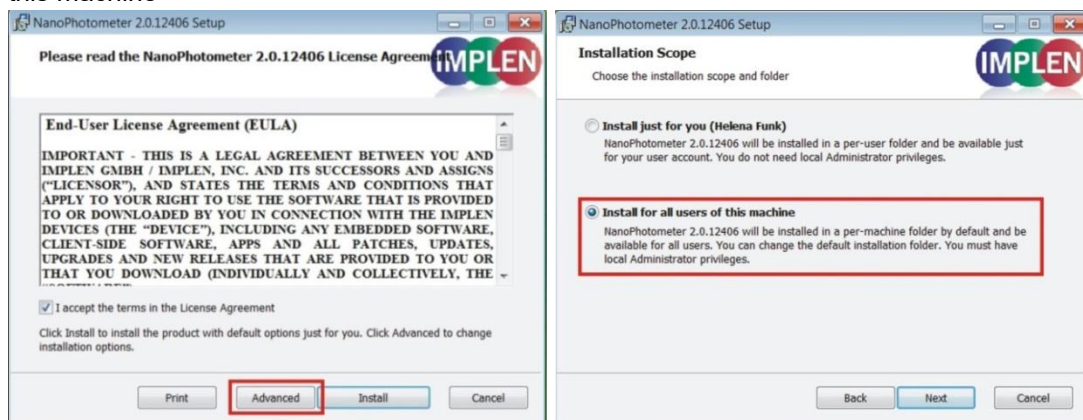

4. Start the NPOS software and select the desired connection. For a connection via USB cable, connect the NanoPhotometer® to the PC using the USB cable supplied. For a connection via Wi-Fi® hotspot, ensure a stable Wi-Fi® connection between the PC and NanoPhotometer® Wi-Fi® HotSpot (**SSID:** serial number, **password:** Implenuser). For a network connection, connect the NanoPhotometer® to the local network via an Ethernet cable or Wi-Fi® network (see page 132 Network).

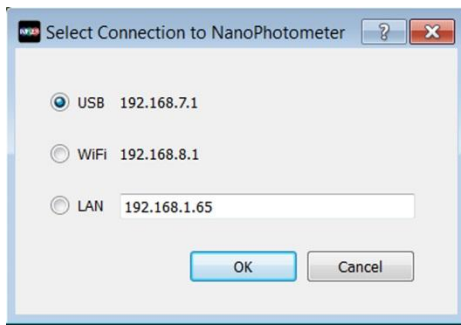


Note: If there is Avira installed on your computer, it is recommended to switch off the browser safety. This may interfere with the NPOS running on your computer.

Installing NanoPhotometer® App on Tablet or Smartphone

The NanoPhotometer® App can be installed as an application on tablets and smartphones with compatible Android and iOS operating systems (see page 27 Requirements and Compatibility). The NanoPhotometer® App is available for free download in the app store (Apple Store and Google Play Store).

1. Download and install the NanoPhotometer® App from the app store
2. Connect the tablet or smartphone via Wi-Fi® HotSpot (**SSID:** Serial number, **password:** Implenuser) or WLAN network to the NanoPhotometer®.
3. Open the NanoPhotometer® App and choose the connection type:

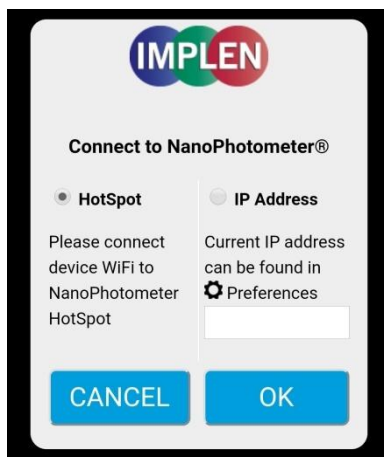

4. When connected the NanoPhotometer® will recognize the tablet/smartphone as a remote control device and measurements can be initiated from the tablet or smartphone.
5. Results will be shown on the tablet or smartphone once measurements have been taken.

Note: In order to install the NanoPhotometer® App on a tablet or smartphone, the device must have an established internet connection to access the app store for app download.

Note: The version of the app and the software of the NanoPhotometer® should be the same. Different versions may have not full functionality.

First Steps and Configuration Wizard

When starting the Implen NPOS the first time an Implen configuration wizard is shown. Please accept the End User License Agreement (EULA) and select the country in which the NanoPhotometer® is used and confirm.

Printer Installation

For printers connected via USB connection:

1. Switch NanoPhotometer® on / home screen
2. Connect DYMO/HP printer via USB cable
3. DYMO/HP printer is ready to use after 30 seconds

Note: Make sure that the home screen is shown when connecting a printer. If the USB connection between the printer and the NanoPhotometer® is established while a method is open, the printer function may fail.

Always return to the home screen before connecting a printer.

Note: Check printer compatibility (page 21 HP Printer)

For network printers:

1. Assure either LAN or Wi-Fi® network connection
2. Set printer IP in preferences (page 136 Network Printer)
3. Printer is available in methods for printing

Note: Check printer compatibility (page 21 HP Printer)


3. NanoPhotometer® Basics

The NanoPhotometer® product line offers a complete solution for NanoVolume (N120/NP80/N60/N50/C40) and standard cuvette (C40/NP80) applications. The NanoPhotometer® N120 is a multi-sample model that can measure up to 12 samples per run. The multi-channel option is available in Nucleic Acid, Protein UV, Protein Assay and Wavescan method.

NanoVolume applications start with a minimum sample volume of 0.3 µl (NP80/N60/N50) and 2 µl for the NanoPhotometer® N120. Standard cuvette applications can be performed with 10 mm, 5 mm, 2 mm, 1 mm and 0.5 mm path length quartz, glass, or plastic cuvettes with a center height of 8.5 mm.

Applications Overview

The NanoPhotometer® comes with pre-programmed applications as well as the ability to create custom applications. To select a method, tap the corresponding icon and the method opens immediately.

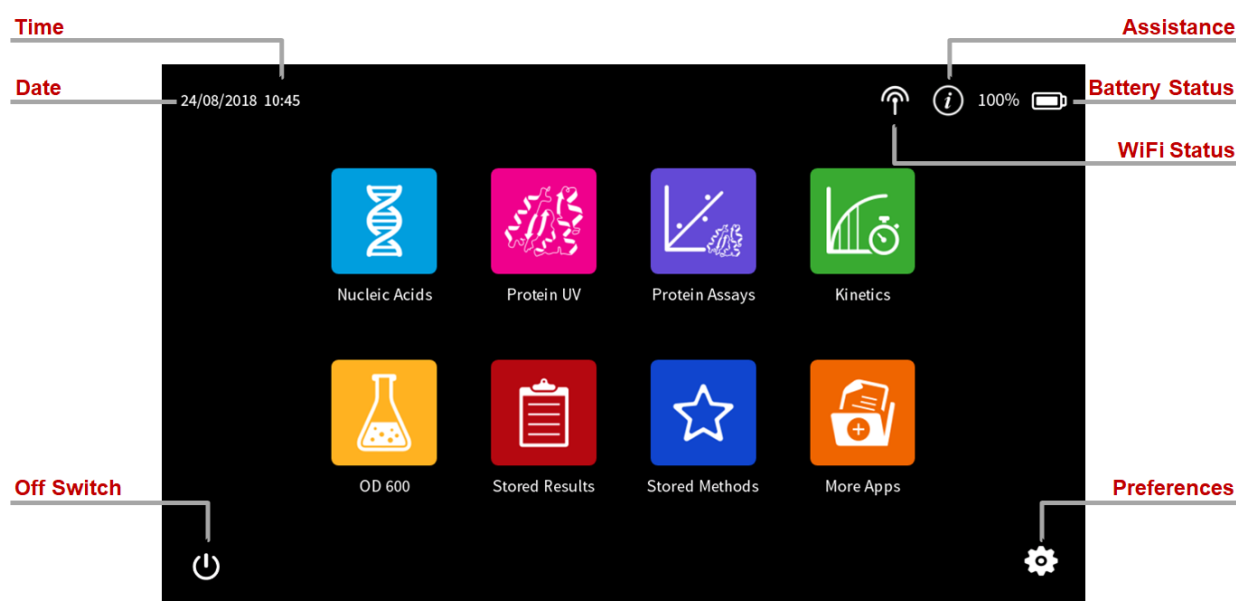

Method Icons



Nucleic Acids



Protein UV



Kinetics



Protein Assays

Description

Concentration, purity, and dye incorporation for DNA, RNA, Oligo, and other nucleic acids














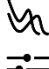

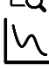












Protein UV determination at 280 nm (or in a range of 200 - 330 nm), purity and dye incorporation

Time vs. Absorbance readings

BCA (562 nm), Bradford (595 nm), Lowry (750 nm), and Biuret (546 nm; cuvette only) Assays

	OD600	Measures cell density at 600 nm (or in a range of 200 – 900 nm)
	Stored Results	Archive of stored results
	Stored Methods	Collection of stored custom methods
	More Apps	Additional applications found on a secondary method screen
	Wavelength	Define one or multiple wavelength between 200 – 900 nm (N50: 200 – 650 nm) for absorbance measurements
	Wavescan	Define desired full scan range anywhere between 200 - 900 nm (N50: 200 - 650 nm)
	Concentration	Define extinction coefficient for automatic concentration calculations
	Absorbance/ Ratio	Define two wavelengths absorbance/ratio calculation
	Standard Curve	Create a standard curve at a defined wavelength
	Custom Apps	Optional custom applications for personalized methods tailored to individual spectroscopy needs

Icons

Icon	Name	Action
	Wi-Fi® Network	Wi-Fi® network active; status of Wi-Fi® connection 
	Wi-Fi® Hotspot	Wi-Fi® hotspot active
	Assistance	Opens the assistance page
	Battery Status	Shows the actual battery status (only shown with optional battery pack)
	Preferences	Opens the preferences page
	Home Screen	Returns to home screen with application icons for method selection.
	Store Method	Opens a dialog pop up with the possibility to store the actual method parameter to a custom method
	Save Data	Opens a save dialog pop up
	Leave Method	Returns to the previous application selection
	Back	Returns to the previous page (smartphone only)
	Next/Confirm	Confirms parameter and opens next screen (smartphone only)
	Print Data	Opens a print dialog pop up (only shown when a printer is available)
	Delete Data	Opens a delete dialog pop up
	Sample ID	Opens sample ID pop up to define sample IDs (N120 only)
	Graph	Opens graph overlay for multi-channel mode (N120 only)
	Parameter	Opens parameter window
	Results	Opens result window
	Graph	Opens graph result window
	Table	Open/shows results in table format
	Sample Map	Opens sample map window for computer versions (N120 only)
	Standard Map	Opens standard map window in Protein Assay method to measure standard/replicates for defined standard curve (N120 only)
	Standard Curve	Opens standard curve window in Protein Assay method (N120 only)
	Add Folder	Adds a new folder to the directory
	Manage Data	Opens a dialog pop up with several action options including delete, rename or import folders/files/data as well as copying or move folders/files/data to defined directories
	Delete	Deletes added functions in parameter; empties input windows
	Full Scale	Restores graph to original size without zoom
	Cancel	Returns to the previous screen/closes window without implementing any changes

Buttons



When opening a method and starting a sample measurement, a blank measurement is required. For the blank measurement, either water or sample buffer can be used to give the NanoPhotometer® a reference of what zero should be. It is recommended to re-apply the blank solution and measure it as a sample to ensure the graph of the blank spectra is a flat line.



To initiate the spectral scan of the sample push the sample button. The data will be temporarily stored until the method is exited; at this time the user needs to define if the samples should be saved.




The auto sample button is disabled by default. When switched on sample measurements are started automatically as soon as the lid arm is closed. Auto sample function is only available for sample and not for blank measurements. **Note:** Auto sample function is only available NanoVolume methods and new NanoPhotometer® versions it may not be available after updating an older firmware version.



The Change to Cuvette button (NP80) is located at the bottom of the parameter window. The change to Cuvette/NanoVolume button toggles between NanoVolume and cuvette applications. Selecting the Change to Cuvette button activates the cuvette compartment (opens the sliding cover and switches the red arrow LED on). Only cuvette measurements are possible when this mode is selected. Selecting the Change to NanoVolume button while the cuvette port is activated will deactivate the cuvette compartment (closes the sliding cover and switches the LED off) and only NanoVolume measurements are possible.

Note: Please make sure that the lid arm is closed during cuvette measurements.

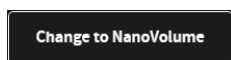

The Change to NanoVolume button (C40) is only shown when submicroliter cell applications are enabled in the preferences. The Change to NanoVolume/Cuvette button toggles between cuvette and submicroliter cell applications. With the NanoVolume submicroliter cell application the parameter of each method shows a list for lid selection (Lid 5, 10, 50, 100 and 250). Choose the correct lid and the results are automatically calculated considering the virtual dilution.

Measurement Screens

Single Sample Methods

Side Tab Bar

On the left side of the measurement screen there is a vertical tab bar that contains four tabs including: parameters, results, graph, and table. The different tabs allow the user to organize the measurement screen. It is possible to show or hide the different areas on the screen. Default screen for computer shows all areas, for the built-in screen and the tablet version the table is hidden.

Note: There is no tab bar available for smartphone versions. The parameter, results and graph screens are shown full screen. Parameters need to be confirmed (➤) to get to the measurement screen. It is possible to toggle between the results and graph area by swiping left and right. There is no table area available for smartphones.

Parameter area

In the parameter area it is possible to define all necessary parameters for a measurement as well as turn on cuvette mode and initiate cuvette heating. The standard measurement screen shows the parameter area open by default. The parameter area is automatically hidden when starting either a blank or sample measurement by pressing the Blank or Sample button. It is also possible to hide the parameter area by tapping the parameter tab in the vertical side tab bar.

Results area

The results area shows the method specific results of the grey highlighted measurement in the table including concentration, absorbances, and relevant ratios. It is also possible to change the units of the calculated concentrations in the results area with a dropdown selection menu.

Table area

The table area collects the results of all samples in an active method. The first table column shows a tick box. Selecting the samples with the tick box the graphs are overlaid in the graph area. With the header tick box it is possible to select/unselect all samples (maximum number of sample selection is 30). The second column of the table indicates whether the measurement is saved (📄) or not saved (blank field).

With the edit button the sample name of a single sample can be edited.

1. Select one sample in the table (selected sample will be highlighted in grey)
2. Push on Edit button
3. Change sample name
4. Confirm with the “Confirm” button


Note: It is not possible to edit sample names of opened IDS files.

Graph area

The graph area shows a chart with the graph of the actual measurement or the selected line(s) in the table (tick box selection). There is an overlay toggle switch on the left bottom of the graph area. If the overlay option is enabled the graphs of the measurements will be automatically overlaid. To change the overlaid graphs use the tick boxes in the table.

Note: It is only possible to overlay up to 30 graphs in a chart. If more than 30 data are selected a message will appear that says “More than 30 samples have been selected. Only 30 will be shown in graph.”

Note: The overlay button is not available on the NanoPhotometer® touch screen and smartphones, only on tablets and computer versions.

It is possible to zoom in and out any area of the diagram (x- and y-axis). Undo the zoom by pressing the full scale icon ().

Note: Maximum zoom is 20 nm for the x-axis and 0.01A for the y-axis.

As legend option the sample name in the table is colored in the same color as the graph in the chart. Pressing on the graph opens a pop up which shows the sample name, wavelength and absorbance of the selected wavelength. It is possible to display the results of other graphs by changing the sample name with the dropdown option.




Sample Name	L10
Wavelength	— 260 +
Absorbance	0.207


Multi Sample Methods

- **Change Screens**

Opening a multi sample method (Nucleic Acid, Protein UV, Protein Assay or Wavescan) shows the parameter screen first. To confirm the parameter swipe the screen to the left and the sample map is shown. It is possible to change between the parameter, sample map and result screens by swiping left or right at any time. At the bottom of the screen is a screen carousel that shows the active and available screens.

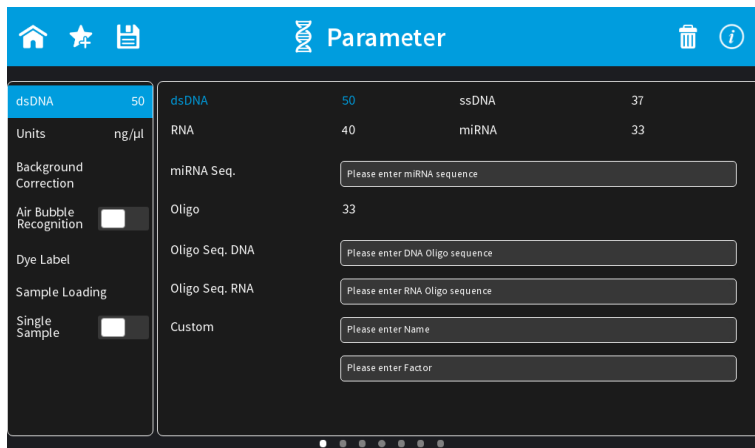

For computer versions without touchscreen a vertical tab bar is shown to change between the different screens (≡ parameter, 🗺️ sample map, 📄 results and 📊 graph; for Protein Assay additionally 📊 standard map and 📊 standard curve)

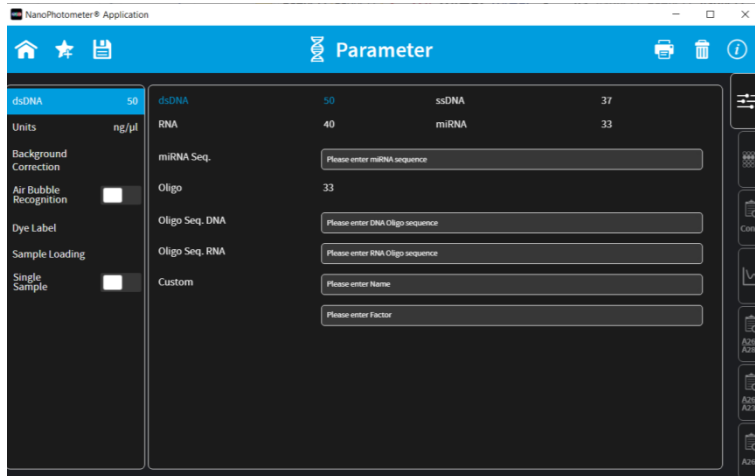


- **Sample Map / Definition of Sample IDs**



The sample map screen shows the sample IDs as defined or names it automatically if nothing is defined. For measurements it is not necessary to select any cell or define sample IDs. If no cell is selected/Sample ID defined, all 12 (horizontally) or 8 (vertically) samples are measured. Sample IDs are named automatically in this case.

Selection Options



Selection of cells is only possible in the sample map screen. Cell A01 must always be selected. A push in the top left corner selects/deselects all 96 cells at once:

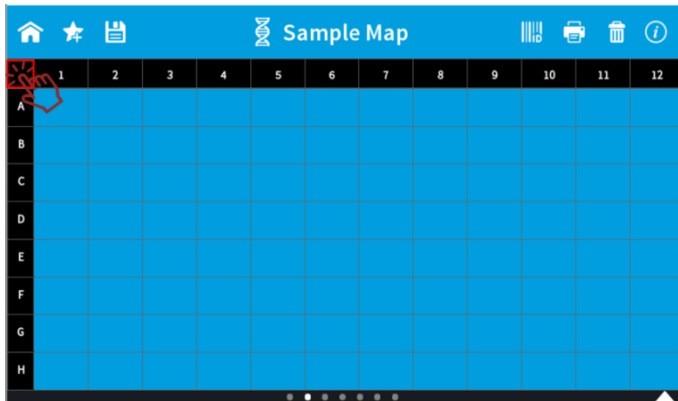


Manual selection is possible by selecting any area starting in cell A01.

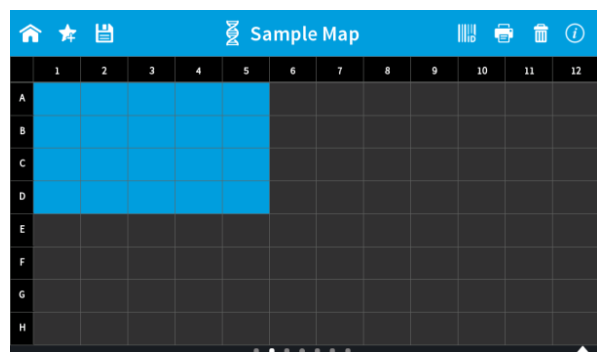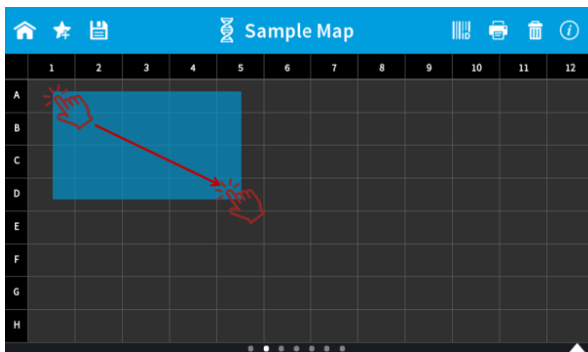

or by tapping any cell:

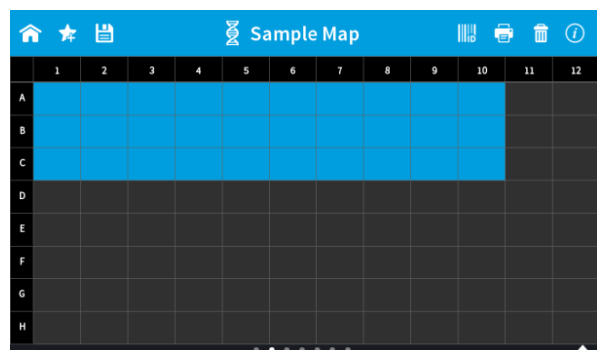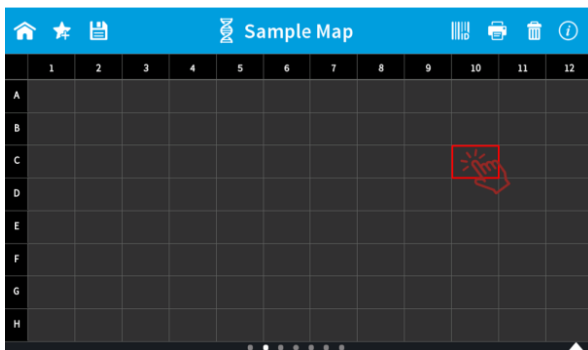

A push to the row/column header selects/deselects the whole row/column:

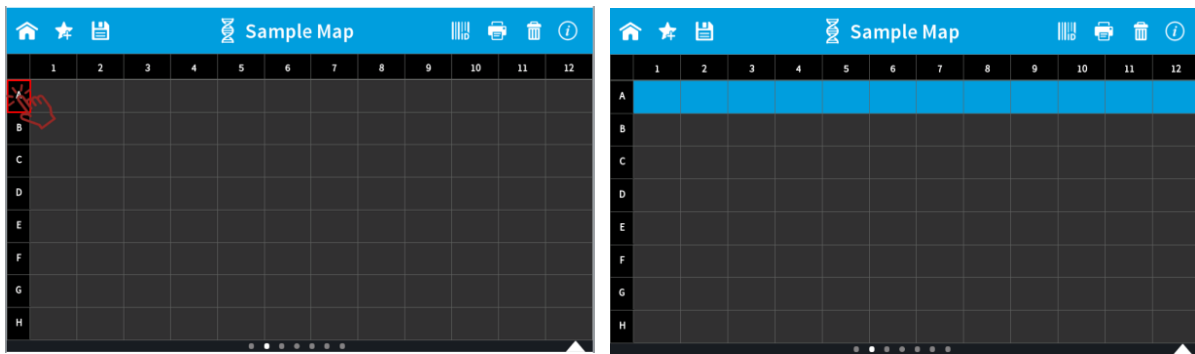


Note: As a blank is necessary for each measurement it is not possible to select more cells as in the previous row/column.


Sample ID Definition

There are multiple options to define Sample IDs. If no Sample IDs are defined the Sample IDs are named automatically.


To define sample IDs open the Sample ID pop up (☰) on the Sample Map screen. The Sample ID pop up offers options to set sample IDs, delete sample IDs, import or export sample IDs from a csv file.

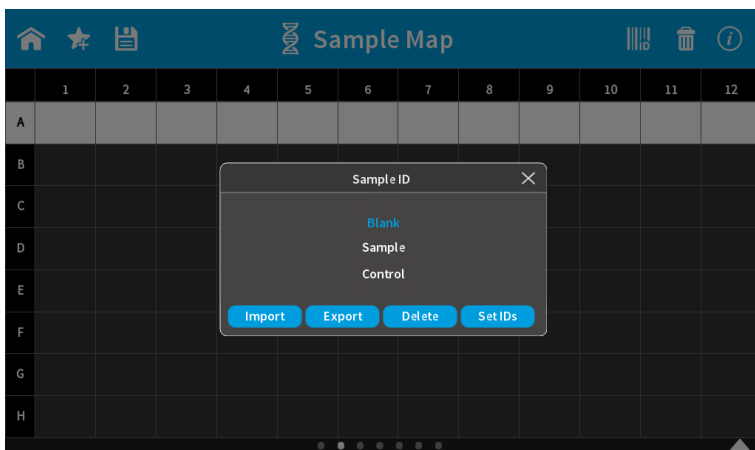

To set sample IDs, select Blank (BLK), Sample (SPL) or Control (CRL) and push on “Set IDs” button. Sample IDs are numbered automatically.

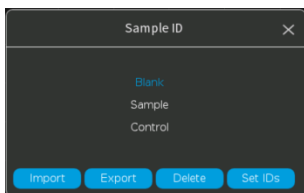

To delete sample IDs, close the pop up, select the row/column for which the sample IDs should be deleted and reopen the sample ID pop up and push the Delete button.

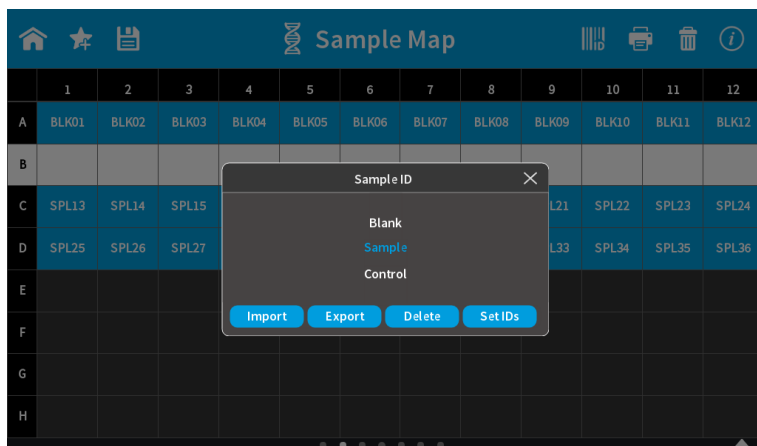

Individual Sample IDs can be changed by double-clicking on the Sample ID. To change several Sample IDs simultaneously, open the table view after a measurement and select Edit.

Sample IDs can be imported with the Import function. For the import of Sample IDs, the sample IDs must first be defined in the following format and saved as a csv file.

- for horizontal Sample Map:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Position	Content	Sample ID		Comments						
2	A01	B	BLK01								
3	A02	B	BLK02		Content field needs to be defined with B, C or S						
4	A03	B	BLK03		B = Blank measurement						
5	A04	B	BLK04		C = Control measurement						
6	A05	B	BLK05		S = Sample measurement						
7	A06	B	BLK06		It is not possible to mix Blank and Control/Sample measurements in one row.						
8	A07	B	BLK07		Control and Sample contents can be combined in one row.						
9	A08	B	BLK08								
10	A09	B	BLK09		Blank and Control have pre-defined sample IDs						
11	A10	B	BLK10		B = BLK01, BLK02, etc.						
12	A11	B	BLK11		C = CTRL01, CTRL02, etc.						
13	A12	B	BLK12		If anything else than the pre-defined sample IDs is entered for Blank and Control, the samp						
14	B01	C	CTRL01		Sample IDs for samples can be user-defined, if no sample IDs are defined for content (S) th						
15	B02	C	CTRL02		S = SPL01, SPL02, etc.						
16	B03	C	CTRL03								
17	B04	C	CTRL04		It is not necessary to set samples 1 - 12, any number > 1 is possible						
18	B05	C	CTRL05								
19	B06	C	CTRL06								

Note: Draft files are available for download on the Implen homepage (www.implen.de/downloads).

- for vertical Sample Map:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Position	Content	Sample ID		Comments						
2	A01	B	BLK01								
3	B01	B	BLK02		Content field needs to be defined with B, C or S						
4	C01	B	BLK03		B = Blank measurement						
5	D01	B	BLK04		C = Control measurement						
6	E01	B	BLK05		S = Sample measurement						
7	F01	B	BLK06		It is not possible to mix Blank and Control/Sample measurements in one column						
8	G01	B	BLK07		Control and Sample contents can be combined in one column						
9	H01	B	BLK08								
10	A02	C	CTRL01		Blank and Control have pre-defined sample IDs						
11	B02	C	CTRL02		B = BLK01, BLK02, etc.						
12	C02	C	CTRL03		C = CTRL01, CTRL02, etc.						
13	D02	C	CTRL04		If anything else than the pre-defined sample IDs is entered for Blank and Control, the samp						
14	E02	C	CTRL05		Sample IDs for samples can be user-defined, if no sample IDs are defined for content (S) th						
15	F02	C	CTRL06		S = SPL01, SPL02, etc.						
16	G02	C	CTRL07								
17	H02	C	CTRL08		It is not necessary to set samples 1 - 08, any number > 1 is possible						
18	A03	S									
19	B03	S									
20	C03	S									

Note: Draft files are available for download on the Implen homepage (www.implen.de/downloads).

Note: It is not possible to edit imported Sample IDs.

To import sample IDs open the sample ID pop up and push the import button. A file directory is shown. Select the .csv file and push on import button. Sample IDs will be imported.

To export sample IDs, press the export button in the sample ID pop up. Enter a file name, select a folder and confirm with export.

▪ Result Screens

There are multiple result screens available depending on parameter setting and method.

Nucleic Acids:

- Concentration
- Graph
- Ratio A260/A280
- Ratio A260/A230
- A260

Protein UV:

- Concentration
- Graph
- Ratio A260/A280
- A280

If a dye is added three additional screens are shown:

- Dye Concentration
- Dye Absorbance
- FOI / DOL

Protein Assay:

- Standard Map
- Standard Curve
- Concentration
- Graph
- Absorbance

Wavelength:

- Graph


Wavescan:

- Graph


Defined sample IDs are shown on all result screens as long as the sample is not measured. Once the sample is measured the result is shown. A white frame marks the sample IDs which will be measured next.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
B	SPL01	SPL02	SPL03	SPL04	SPL05	SPL06	SPL07	SPL08	SPL09	SPL10	SPL11	SPL12
C	SPL13	SPL14	SPL15	SPL16	SPL17	SPL18	SPL19	SPL20	SPL21	SPL22	SPL23	SPL24
D	SPL25	SPL26	SPL27	SPL28	SPL29	SPL30	SPL31	SPL32	SPL33	SPL34	SPL35	SPL36
E												
F												
G												
H												

A push on a result cell opens a single result overview:

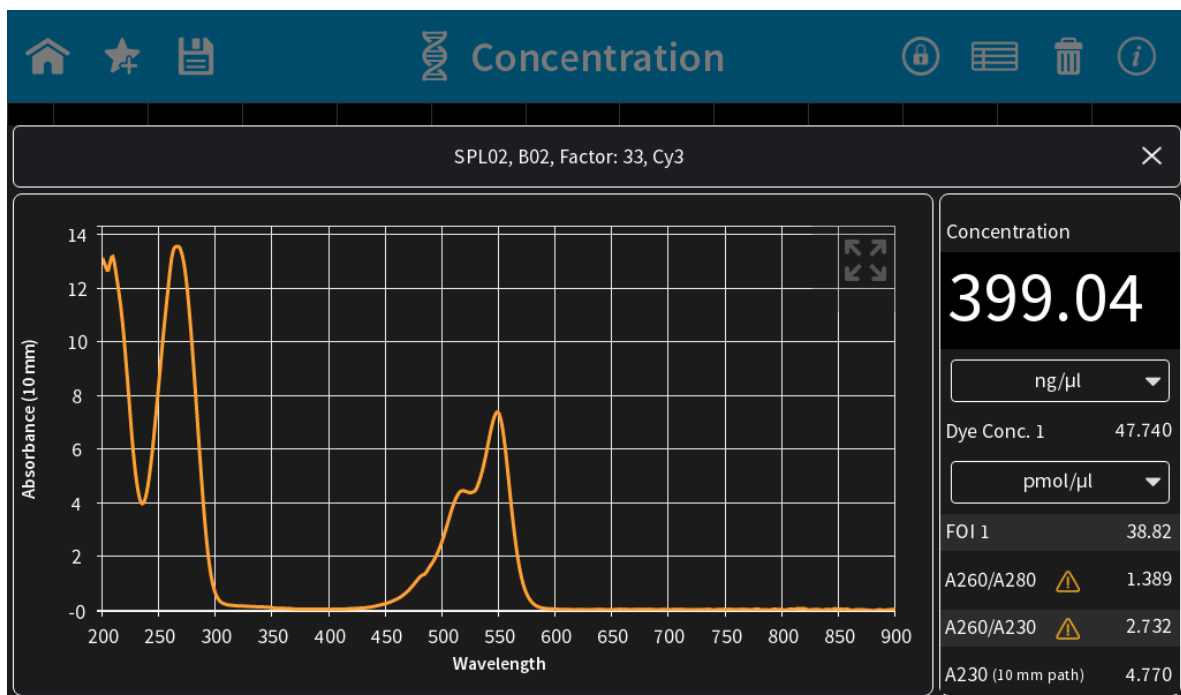

A double click to a result cell shows tick boxes for all measured samples. The tick boxes can be used in the graph screen to overlay up to 12 samples. Up to 12 ticked samples will be overlaid by pressing the graph icon (📊) in the navigation bar.

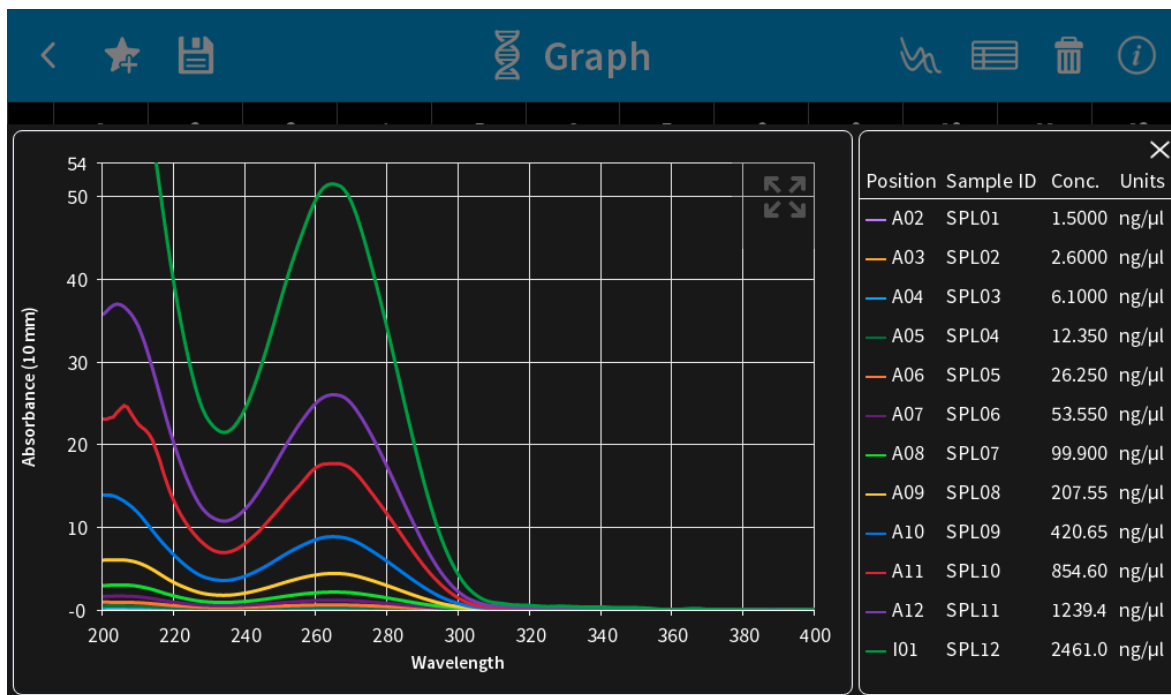

A table view (📄) is available on all result screens. The table lists all measured samples.

<input type="checkbox"/>	Edit	Position	Sample ID	Content	Conc.	Units	Method	1/ε	A230	A260	A280
<input type="checkbox"/>		A01	BLK01	B	0.0000	ng/μl	dsDNA	50.00	0.000	0.000	0.00
<input type="checkbox"/>		A02	BLK02	B	0.0000	ng/μl	dsDNA	50.00	0.000	0.000	0.00
<input type="checkbox"/>		A03	BLK03	B	0.0000	ng/μl	dsDNA	50.00	0.000	0.000	0.00
<input type="checkbox"/>		B01	SPL01	S	0.3000	ng/μl	dsDNA	50.00	0.010	0.005	-0.01
<input type="checkbox"/>		B02	SPL02	S	0.8000	ng/μl	dsDNA	50.00	0.028	0.018	0.00
<input type="checkbox"/>		B03	SPL03	S	---	ng/μl	dsDNA	50.00	-0.014	-0.009	-0.00

With the edit button selected Sample IDs can be changed.

Data Processing Dialogs


Print

Selecting the print icon (🖨️) opens a full screen dialog window with various print options. The print icon is only shown if a printer is available.

The print command is sent primarily to DYMO or HP printers if they are directly connected to the

NanoPhotometer® via USB cable. If no USB printer is available, the print command is sent to the defined network printer, if configured. Network printers can be configured in the preferences by entering the printer IP (see page 136 Network Printer). All ticked samples are printed.

Note: If a printer is directly connected to the NanoPhotometer® via USB, this printer will have the highest priority and will be used by default when selecting Print on NanoPhotometer®. In order to print utilizing a printer on the network, please disconnect the connected USB printer.

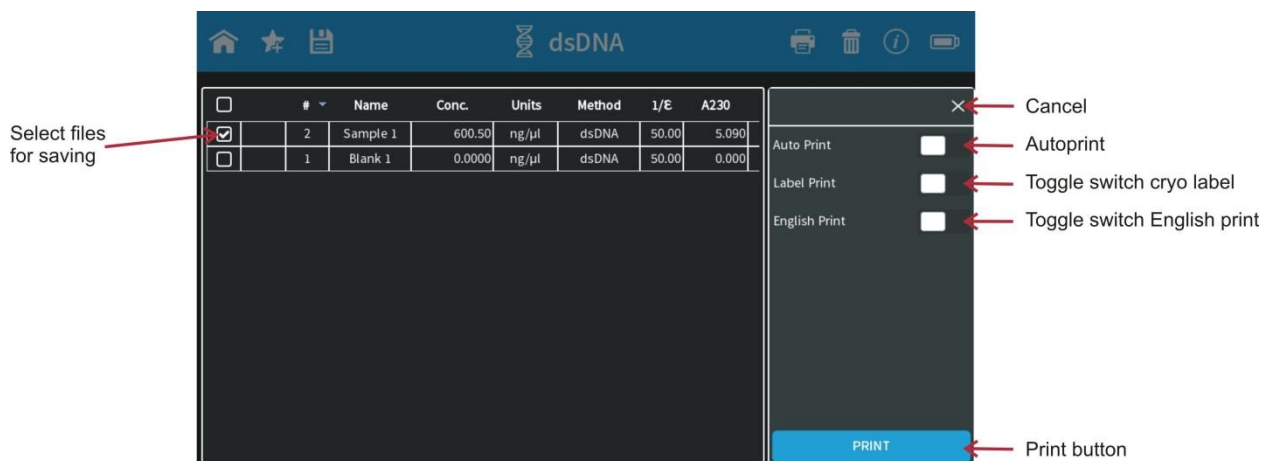

Note: The print icon is only shown, if a printer is available.

Note: It is only possible to operate one printer at a time. Do not connect more than one printer to the NanoPhotometer®.

Note: The print option is not available in smartphone apps.

▪ Auto Print

If the auto print function is enabled, each measurement will be printed directly after the measurement. Auto print function is available for DYMO printer, HP printer connected via USB cable and network printer.

Note: Default setting for auto print is off. If enabled in one method it is set default on for all methods and needs to be switched off if not required.

Note: The auto print function is not available for printing via control device (local computer printer).

▪ Cryo Label Print

To print on cryo labels connect a DYMO printer (4XL or 450) to the NanoPhotometer® and insert the specified cryo label paper (26 x 12.7 mm and 9.5 mm circle / landscape mode).

Note: Cryo label paper is not available/compatible for the DYMO Label printer 5XL and 550.


▪ English Print

Option to change the language of the printout from the selected language setting to English.

Note: English Print can also be selected in Preferences. When this setting is enabled in preferences, the toggle switch present in the print dialog has no function.

Save

Selecting the save data icon (📄) opens a full screen overlay dialog window with various save options.

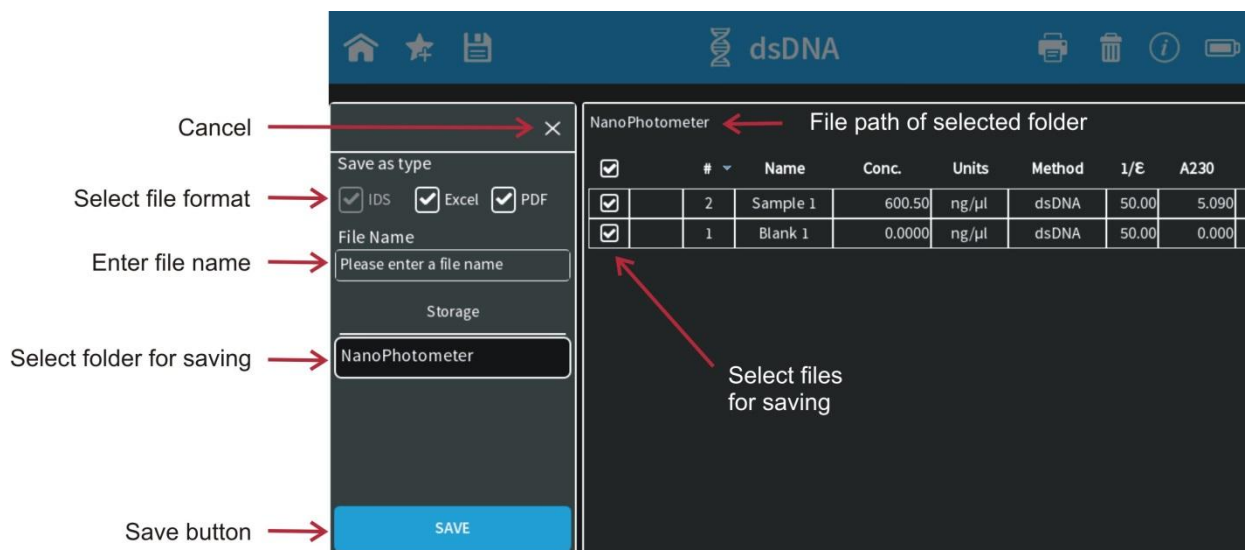

By default all samples are ticked in the first column of the table and will be saved. It is possible to select samples for saving by using the tick boxes. The header tick box selects/deselects all samples.

Note: In the smartphone app there are always all measurements saved, no selection possible.

▪ Save as Type

With the Save as Type option it is possible to specify the file type for saving. File type options include Excel, PDF and Implen Document Source (IDS). It is possible to save different file formats simultaneously.

Note: IDS files cannot be saved on control devices. IDS files can only be saved in the NanoPhotometer® storage, defined network folder or on a USB flash drive. It is not possible to save IDS files from opened data. In these cases the IDS tick box is greyed out.

Note: PDF and Excel files cannot be opened on the NanoPhotometer®. The files need to be transferred to a computer or device where Excel or PDF reader is available.

Note: All data saved on the NanoPhotometer® are stored on an internal micro SD card. It is recommended to back up the data regularly to a hard drive of a computer or network. In the rare case that the micro SD card crashes data loss cannot be ruled out.

Implen Document Source File

The Implen Document Source (IDS) file is a specific file format, which can only be opened with the NPOS software. It is a hardcopy file which cannot be changed. This file type contains all measurement information including raw data, results, values, and parameters.

Note: The saved files contain only the selected samples at the time the file is saved.

Excel File

Measurement data can be saved as Excel file. This file type contains all measurement information including raw data, results, and parameters.

Note: The saved files contain only the selected samples at the time the file is saved.

PDF File

Measurement data can be saved as PDF file. This file type contains all measurement information including raw data, results, and parameters.

It is possible to configure the table columns for PDFs and printouts in preferences (page 137 Report Configuration).

Note: The saved files contain only the selected samples at the time the file is saved.

▪ File Name

Enter the name for the file. Allowed characters are: A...Z a...z 0...9 , . - () @ ! = _ ~ ; [] { } ' .

Note: Blank characters are not allowed.

▪ Storage


Shows folder directory to select the save location. Options include: NanoPhotometer®, USB flash drive (if connected), Network folder (if defined) and Control Device. If Control Device is selected the data will be transferred to the control device that is currently connected with the NanoPhotometer®.


Note: It is not possible to save IDS files to a control device like computer (PC/Mac), tablets or smartphones.

▪ Auto Save

To prevent data loss, all measurements are automatically stored as IDS file on the internal memory of the NanoPhotometer®. These backup copies can be found in the Autosave folder of the NanoPhotometer® (Stored Results/NanoPhotometer/Autosave) for up to ten days. Files contain the base name Backup, the method name, and a time/date stamp.

After ten days the autosave files are automatically moved to an autosave archive folder. The autosave archive folder can only be accessed via NanoPhotometer® file server (see page 56 Data Transfer via File Server). Data in the autosave archive folder are not automatically deleted.


The content of the Autosave Archive folder can be deleted via the action button  in Stored Results:

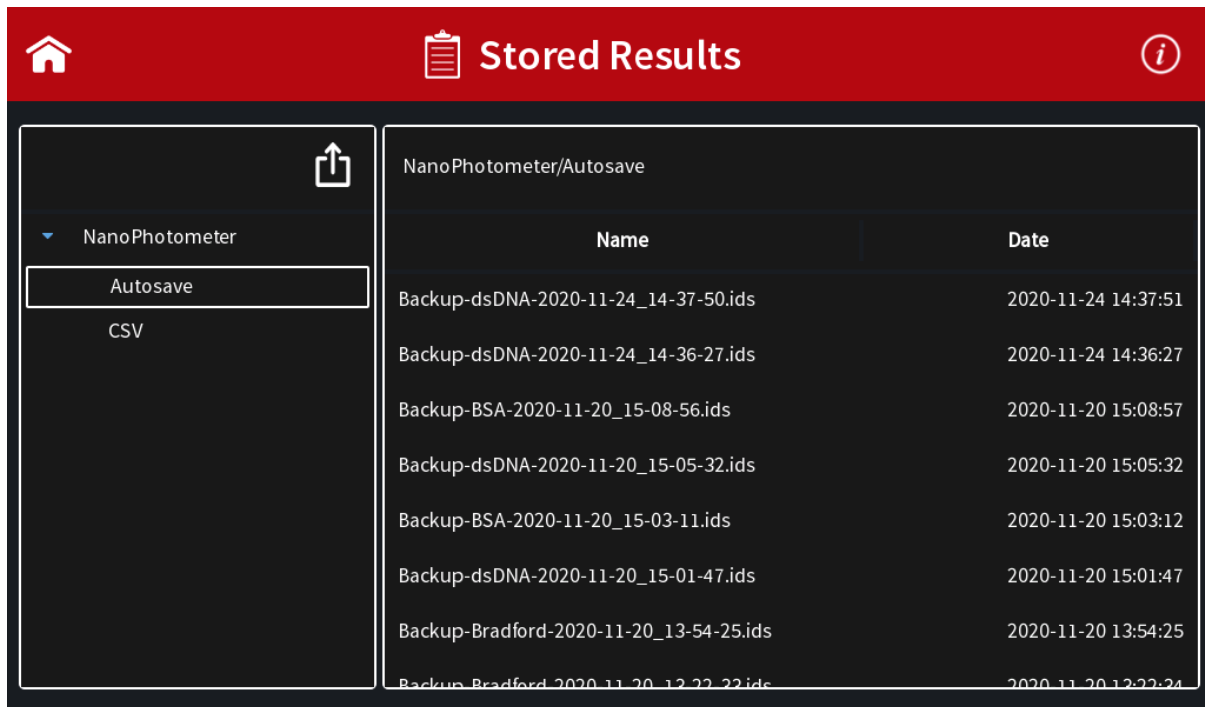

Delete


Selecting the delete icon (🗑️) opens a full screen overlay dialog window. All data which are selected (tick) in the first table column will be deleted. The header tick box selects/deselects all samples. Initiate the deletion with the delete button. Confirm the deletion in the following warning message: “Do you want to delete all/selected files?” select cancel (x) will return to the delete menu screen or confirm with delete to delete the selected data.

Note: The delete function is not available for the software version designed for smartphones.

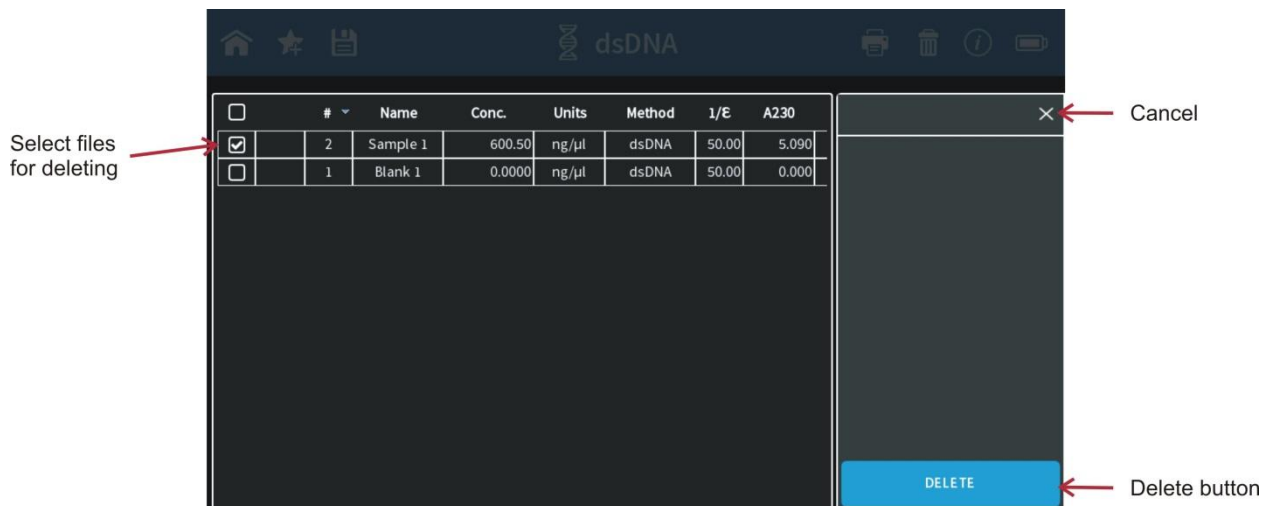

Store Methods

With the favorite icon ★ it is possible in each method to save the parameter settings for easy access of custom defined methods. Select the desired parameter settings and open the Stored Method dialog by pressing the favorite icon ★.

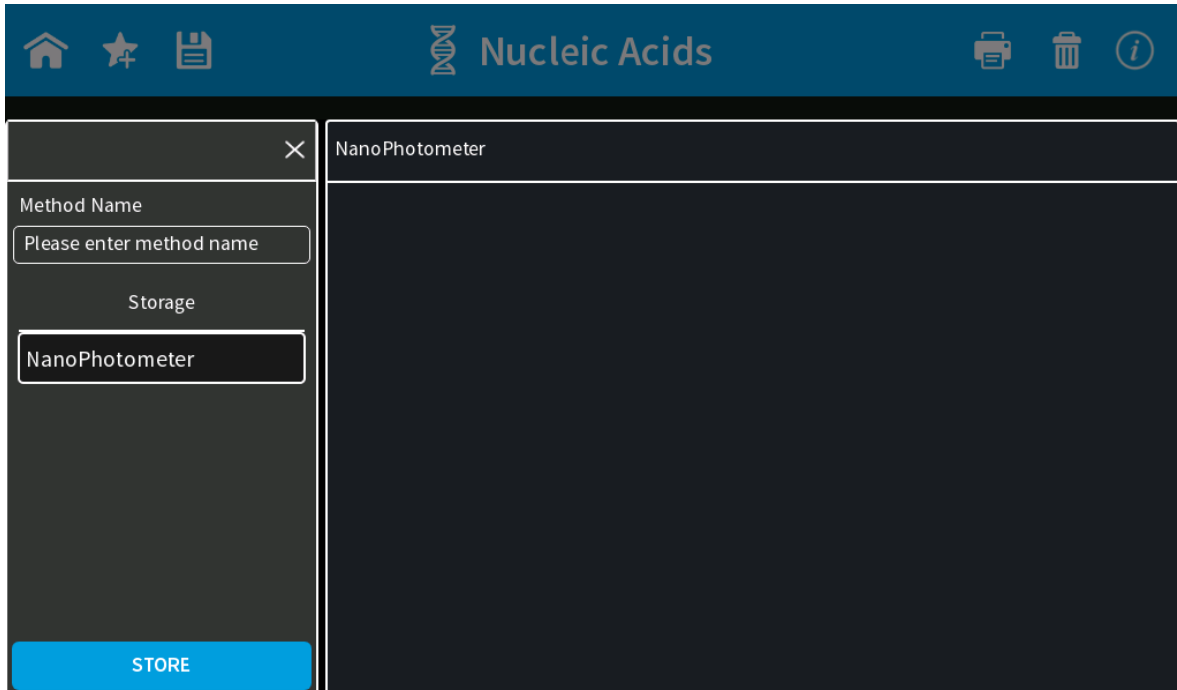

Enter a method name and select a save location in the folder. Options include: NanoPhotometer®, USB flash drive (if connected) and Network folder (if defined). Push the store button to save the method.

Stored Methods can be opened on the homescreen by opening Stored Methods (see page 125 Stored Methods)


Basic Operation

The NanoPhotometer® product line offers a complete solution for NanoVolume (N50/N60/NP80/N120/C40) and standard cuvette volume (C40/NP80) applications. With the NanoPhotometer® N50/N60/NP80 NanoVolume applications the sample volume ranges from 0.3 μl to a maximum sample volume of 2.0 μl . For the NanoVolume applications with the NanoPhotometer® N120 a minimum of 2 μl sample volume is necessary. Standard cuvette applications can be performed with quartz, glass or plastic cuvettes with a pathlength of 10 mm, 5 mm, 2 mm, 1 mm or 0.5 mm and a center height of 8.5 cm.


Note: NanoVolume application in the NanoPhotometer® C40 is only available with the optional accessory “submicroliter cell” from Implen.

NanoVolume Single Sample Measurement Basics (N50/N60/NP80)

1. Select a method depending on your sample and set the parameters for the measurement.
2. Ensure that the sample window on pedestal and the mirror in the lid arm are clean.
3. Use the integrated vortexer (N60 and NP80 only) to mix the sample to achieve a homogenous sample

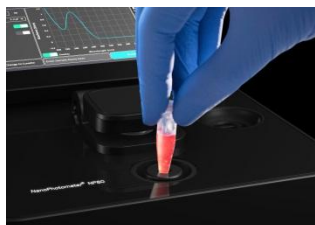

4. Raise the lid arm and pipette the appropriate amount of blank solution onto the illuminated sample window on pedestal. The illumination turns automatically off when the lid arm is lowered.

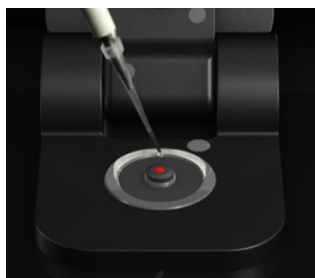

Note: Do not overfill the well.

Note: The low energy red light (LED) illumination can be switched off in Preferences

5. Lower the lid arm and initiate a blank measurement with the blank button
6. Clean the measurement window and mirror on the lid arm with a slightly wet lint-free tissue. Use water, 70% ethanol or isopropanol if needed.



Note: Make sure that the metal contact face (around the measurement window and the mirror) is clean.

Note: Do not use aggressive solvents such as strong acids or bases or organic solvents at any time (see page 56 Solvent Compatibility (N50/N60/N120/NP80/C40 with submicroliter cell). If unsure please contact support@implen.de for detailed information about your specific reagent/solvent.

- It is possible to enter a sample name for each sample in the input window “enter sample name”.

Note: Allowed characters are: A...Z a...z 0...9 , . ; () @ ! = _ ~ [] { } # \$ % + - / | > ` blank character


- Raise the lid arm and pipette the appropriate amount of sample solution onto the illuminated sample window. Upon completion of measurement raise lid arm, clean the surfaces and apply the next sample.


Note: Parameter setting Volume 1 - 2 μ l adjusts the path length automatically. The parameter setting Volume 0.3 μ l measures only the 0.07 mm path length for higher concentrations (dsDNA > 420 ng/ μ l / BSA > 12.6 mg/ml).

Note: The sample window on pedestal must be clean and residual fluff from any cleaning wipe must be removed for optimum performance.

NanoVolume Multi Sample Measurement Basics (N120)

Note: The multi sample mode is available for the following methods: Nucleic Acid, Protein UV, Protein Assay and Wavescan.

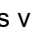- Select a multi-channel method depending on your sample and set the parameters for the measurement.
- Sample Map: Option to set sample IDs via the sample ID pop up () or import sample IDs with customized sample names (see page 37 Sample Map / Definition of Sample IDs for further details).

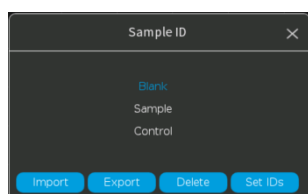

It is not necessary to define sample IDs in the sample map for measurements.

Note: Allowed characters for Sample IDs are: A...Z a...z 0...9 , . ; () @ ! = _ ~ [] { } # \$ % + - / | > ` blank character

- Ensure that the sample spots on pedestal and the mirrors in the lid arm are clean.
- Ensure that samples are mixed well to achieve homogenous samples.
- Raise the lid arm and pipette 2 μ l of blank solution onto the illuminated sample spots on pedestal. Only illuminated sample windows will be measured. The Illumination turns off automatically when the lid arm is lowered.



Note: It is recommended to use multi-channel pipettes to avoid evaporation.

Note: The low energy red light (LED) illumination can be switched off in Preferences.

6. Lower the lid arm and initiate a blank measurement with the blank button
7. Clean the measurement spots and mirrors in the lid arm with a slightly wet lint-free tissue. Use water, 70% ethanol or isopropanol if needed.



Note: Make sure that the metal contact face (around the measurement window and the mirror) is clean.


Note: Do not use aggressive solvents such as strong acids or bases or organic solvents at any time (see page 56 solvent compatibility). If unsure please contact support@implen.de for detailed information about your specific reagent/solvent.

8. Raise the lid arm and pipette 2µl of sample solution onto the illuminated sample windows. Upon completion of measurement raise lid arm, clean the surfaces and apply the next samples.

Note: The sample window on pedestal must be clean and residual fluff from any cleaning wipe must be removed for optimum performance.


Cuvette Measurement Basics (C40/NP80)

The NanoPhotometer® (NP80 and C40 only) is compatible with standard cuvettes having an 8.5 mm center height. The light path is indicated with a red status LED arrow for the NP80 model and with two white arrows for the C40 model.

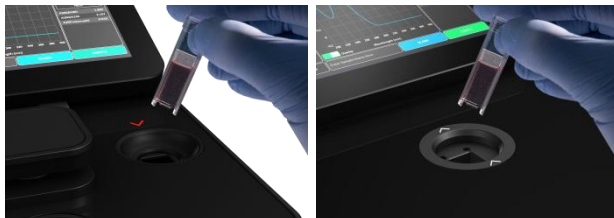

Note: For the NP80 the cuvette compartment needs to be activated by the “Change to Cuvette” button in the parameter area. Once the cuvette option is activated the sample compartment door will be opened automatically and a red arrow above the cuvette compartment will appear. The arrow indicates the light path.

1. Select a method depending on your sample and set the parameters for the measurement.
2. Open the automatic cuvette cover by pressing the “Change to Cuvette” button below the parameter area (NP80 only).

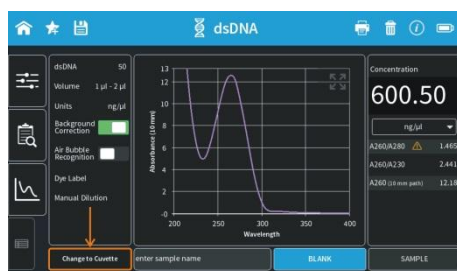

3. Add a blank solution to a cuvette and ensure that the filling volume is sufficient to allow light path to pass through the solution.
4. Insert cuvette into the cell holder.
5. Initiate a blank measurement with the blank button. Upon completion of measurement remove the cuvette.
6. Add sample to a cuvette and ensure that the sample volume is sufficient to allow light to pass through the sample.

It is possible to enter a sample name for each sample in the input window “enter sample name”.

Note: Allowed characters are: A...Z a...z 0...9 , . ; () @ ! = _ ~ [] { } # \$ % + - / | > ` blank character

7. Initiate a sample measurement with the sample button. Upon completion of measurement remove the cuvette.
8. Apply further samples.

Submicroliter Cell Measurements Basics (C40)

The Implen submicroliter cell can be used with the NanoPhotometer® C40. Insert the submicroliter cell to the cell holder with the cell windows facing the light beam. We recommend facing the Implen logo to the right side. The light beam is directed from BACK to FRONT as indicated with the white arrows.

Note: For best performance insert the submicroliter cell always in the same direction.

1. Select a method depending on your sample.
2. Enable the NanoVolume application with the “Change to NanoVolume” button below the parameter area.



Note: If there is no “Change to NanoVolume” button available in the method go to preferences/general and enable the NanoVolume option. We guarantee our submicroliter cell specifications only for Implen submicroliter cells which are aligned to the NanoPhotometer® C40 by Implen.

3. Set the parameter for the measurement. Choose the dilution lid depending on your sample concentration.

Lid	dsDNA (ng/µl)	BSA (mg/ml)	absorbance range 10 mm path
5 (optional)	2 – 375		0.05 – 7.5
10	5 – 750	0.15 – 22.5	0.10 – 15
50	25 – 3,750	0.75 – 112	0.50 – 75
100 (optional)	50 – 7,500	1.5 – 225	1.00 – 150
250 (optional)	125 – 18,750	3.75 – 562	2.50 – 375

Note: A new Blank is recommended when changing the dilution lid.

4. Ensure that the sample window and the mirror in the lid are clean.
5. Pipette the appropriate sample volume (blank solution) onto the center of the measuring window. The required volumes are also shown in the parameter area of the software.

Lid	Sample volume	Path length	Dilution
5 (optional)	3.5 – 5 µl	2 mm	1:5
10	1 – 3 µl	1 mm	1:10
50	0.3 – 2 µl	0.2 mm	1:50
100 (optional)	0.3 – 2 µl	0.1 mm	1:100
250 (optional)	0.3 – 2 µl	0.04 mm	1:250

Note: Do not overfill the well.

Note: A new Blank is recommended when changing the dilution lid.

6. For measurements, ensure that the lid fits exactly onto the positioning supports mounted to the body of the cell and initiate a blank measurement with the blank button.
Note: Possible UV exposure. Only initiate a measurement when the lid is closed.
7. Clean the measurement window and mirror in the lid with a slightly wet lint-free tissue. Use water, 70% EtOH or isopropanol, if needed.
Note: Do not use aggressive solvents such as strong acids or bases or organic solvents at any time (see page 56 solvent compatibility). If unsure please contact support@implen.de for detailed information about your specific reagent/solvent.

It is possible to enter a sample name for each sample in the input window "enter sample name".
Note: Allowed characters are: A...Z a...z 0...9 , . ; () @ ! = _ ~ [] { } # \$ % + - / | > ` blank character
8. Mix the sample very well to achieve a homogenous sample.
9. Apply the appropriate amount of sample solution onto the measurement window and initiate the sample measurement with the sample button. Upon completion of measurement remove the lid, clean the surfaces and apply the next sample.

Sample Handling Tips

▪ NanoVolume Methods (NP80/N60/N50)



- The NanoPhotometer® includes an integrated vortexer (N60/NP80 only) to assure sample homogeneity. It is recommended to vortex every sample right before the measurement.
- The sample window on pedestal is illuminated (NP80/N60/N50 only) with a low energy red light to assist with accurate sample application. The red light is switched off once the lid arm is closed. It is possible to disable the illumination feature in preferences of the NPOS software.
- The minimum volume that can be used for NanoVolume samples is 0.3 µl (NP80/N60/N50 dsDNA > 420 ng/µl and BSA > 12.6 mg/ml and for submicroliter cell in the C40 dsDNA > 25 ng/µl and BSA > 0.7 mg/ml). For automatic path length setting at least 1µl is needed (NP80/N60/N50 only).
- The maximum volume that can be used for NanoVolume samples is 2.0 µl (NP80/N60/N50) and 5 µl for the submicroliter cell with lid 5.
- The sample can be fully recovered after measurement with a pipette if desired.
Note: Minimal cross contamination cannot be avoided on molecular level.
- Proper cleaning is important to ensure accurate measurements. In most cases a dry lint-free laboratory wipe is sufficient to clean the sample quartz surfaces. In the case of highly concentrated samples or certain proteins, the recommended procedure for cleaning is to use a slightly wet lint-free laboratory wipe (with water or 70% EtOH depending on sample type) to thoroughly clean the sample surface.
- It is mandatory that the metal contact face around the measurement window and the mirror is clean.


▪ NanoVolume Methods (N120)



- The sample windows on pedestal are illuminated with a low energy red light to assist with accurate sample application. Depending on selected samples, the red lights are turned on for measurement spots, which will be measured. Apply samples on illuminated measurement spots. **Note:** Multiple samples should always be applied to the spots using a multichannel pipette. The use of a single-channel pipette is only recommended in single-channel mode. Otherwise deviations are to be expected.


The red light is switched off once the lid arm is closed. It is possible to disable the illumination feature in preferences of the NPOS software.

e.g. 12 samples selected:

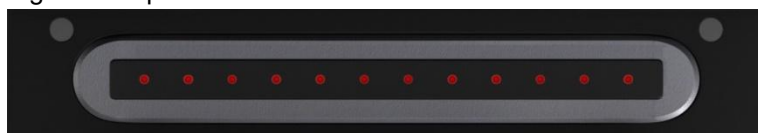

- For blank and sample measurements 2 μ l of sample volume are necessary. Pathlength will be set automatically, if necessary.
- Proper cleaning is important to ensure accurate measurements. In most cases a dry lint-free laboratory wipe is sufficient to clean the sample quartz surfaces. In the case of highly concentrated samples or certain proteins, the recommended procedure for cleaning is to use a slightly wet lint-free laboratory wipe (with water or 70% EtOH depending on sample type) to thoroughly clean the sample surface.
- It is mandatory that the metal contact face around the measurement window and the mirror is clean.
- Close the lid arm carefully. Do not push the lid arm down forcefully. Do not touch the lid arm during measurements.

▪ Cuvette Methods

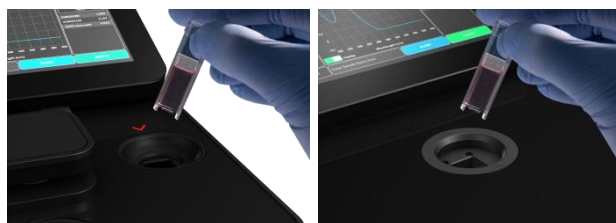

- The cuvette holder (NP80/C40 only) is compatible with standard 10 mm path length quartz, glass and plastic cuvettes with an optical height of 8.5 mm.
- It is also possible to use cuvettes with 5 mm, 2 mm, 1 mm or 0.5 mm path lengths, but there may be an adapter necessary. Please ask your cuvette supplier for a suitable adapter.

- The minimum volume for accurate measurements depends on the cuvette type used; it is necessary that the light passes through the sample for accurate measurements. Center height is 8.5 mm.

Note: The cuvette holder is not removable. Do not pour any cleaning solution into the cuvette holder as larger amounts of liquids can get into the instrument and cause damage.

Solvent Compatibility (N50/N60/N120/NP80/C40 with submicroliter cell)

Most solvents typically used in life science laboratories are compatible with the NanoPhotometer® NanoVolume sample surfaces. The following solvents are compatible for use with the NanoPhotometer® models N50, N60, N120 and NP80 at room temperature:

- Acetone ($\leq 5\%$)
- Acetonitrile
- Benzene
- Butanol
- Carbon tetrachloride
- Chloroform
- Ethanol
- Ether
- HEPES
- Hexane
- Isopropanol
- MES
- Methanol
- Methylene chloride
- MOPS
- Phenol ($\leq 1\%$)
- N-propanol
- Toluene
- Phosphate containing buffers
- PBS (pH 4-10)
- Citrate
- Borate
- Chloride salts
- Acids $> \text{pH } 2$
- Bases $< \text{pH } 10$

Note: Highly concentrated acids and bases are not recommended. It is recommended to wipe the sample surface with a lint-free laboratory wipe immediately upon completion of each measurement. For more information about compatibility of specific solvents not listed above, please contact the Implen support team (support@implen.de) to check the compatibility.

Data Transfer via File Server


All data saved on the NanoPhotometer® can easily be accessed from and transferred to a computer via the NanoPhotometer® file server. Connection options are LAN/WLAN, USB cable or Wi-Fi® Hotspot.

It is possible to create user accounts for password secured file server access. User accounts for file server access can be activated in Preferences see page 133 File Server Access.

▪ File Server Access via LAN/WLAN


For the file server access via LAN/WLAN it is necessary that both the computer and the NanoPhotometer® are connected to the same LAN/WLAN network. For connection of the NanoPhotometer® to LAN/WLAN see page 132 Network.

For **Windows computer** open the Windows explorer and enter the serial number or the NanoPhotometer® IP in the address bar of the Windows Explorer (e.g. \\M80798\ or \\Assigned IP Address\).

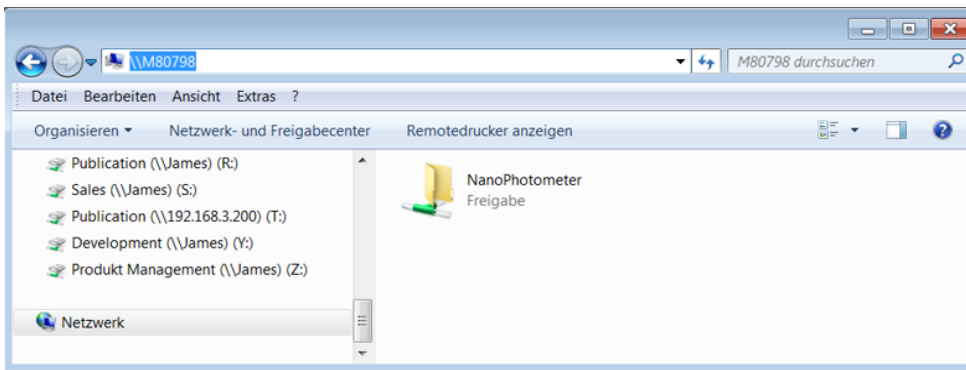

Note: Serial number and IP address of the NanoPhotometer® can be found in the NanoPhotometer® software under Preferences/General/About.

For a **MAC computer** open the "Connect to Server" dialog in the "Go" menu of the Mac OS X Finder and enter the NanoPhotometer® serial number or the active NanoPhotometer® IP address in the server address field to connect.

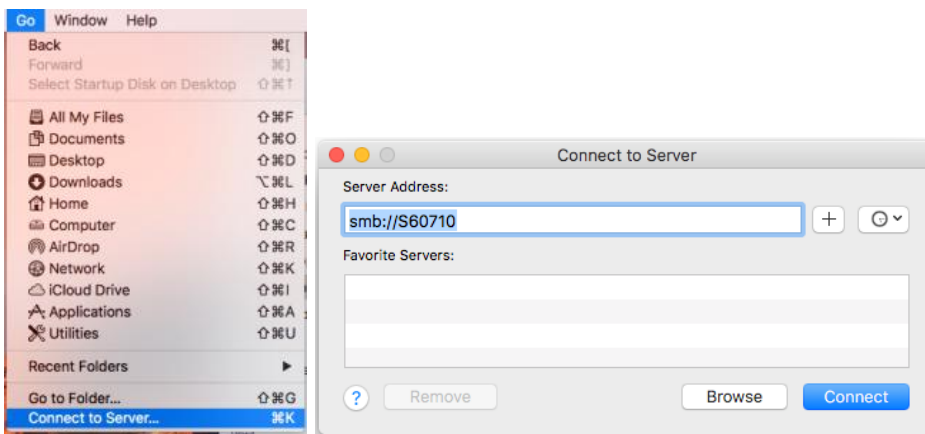

Note: Serial number and IP address of the NanoPhotometer® can be found in the NanoPhotometer® software under Preferences/General/About.

▪ File Server Access via USB cable

For file server access via USB cable connection, connect the NanoPhotometer® with a USB A/B cable to the computer and open the Windows Explorer or Connect to Server option for Mac (see file server access via LAN/WLAN) and enter \\192.168.7.1 for connection.

▪ File Server Access via Wi-Fi® Hotspot

For file server access via Wi-Fi® Hotspot the Wi-Fi® Hotspot needs to be active on the NanoPhotometer®. For activation see page 133 WLAN Settings. The computer needs to be connected to the NanoPhotometer® Wi-Fi® Hotspot (SSID: NanoPhotometer® serial number; password: Implenuser). Open the Windows Explorer or Connect to Server option for Mac (see file server access via LAN/WLAN) and enter \\192.168.8.1 for connection.

Battery Operation

The optional battery operation is only available for the NanoPhotometer® N120/NP80/N60/C40 models (N120-Mobile, NP80-Mobile, N60-Mobile and C40-Mobile) and not for the NanoPhotometer® N50. A full battery pack can be operated for approximately 8 hours (NP80/N60/C40) and 3 hours (N120) within normal usage, i.e. 20 - 30 measurements per hour.

Note: Screen saver activation will influence the time for battery operation. To prolong battery operation, switch the screen saver off.

When the battery gets low there will be a first warning message “Battery low” and a beep is sounded. At this status it is possible to use the instrument under standard conditions for at least one hour. It is recommended to charge the battery at this status. If the battery is not charged there will be a second warning message when the battery is empty and several beep sounds before the instrument is automatically shutting down within 10 to 15 seconds.

Note: Battery operation time is depending on display usage. Activating the screen saver video may reduce the battery operation time.

Note: Unsaved data can be found in the auto save folder in Stored Results. If the NanoPhotometer® is shut down during a measurement process the data of this measurement are lost.

The battery pack is designed for 800 full charging cycles. Afterwards the capacity and operation time of the battery may vary. A fully charged battery pack will self-discharge (switched off NanoPhotometer®) over a time of 10 – 14 days. To avoid deep discharging of the battery pack charge the battery pack at least once a month even if the NanoPhotometer® is not in use.

Note: Recharging of deep discharged batteries is not possible they need to be replaced by new ones.

Charging time for an empty battery pack is 3 hours.

4. NanoPhotometer® Applications


The NanoPhotometer® comes with pre-programmed applications as well as the ability to create custom applications. Any application method can be selected by tapping the icon once or pressing the icon (computer based software).

Note: Within each method selection of NanoVolume or cuvette mode (NP80/C40) is possible. The “Change to Cuvette” or “Change to NanoVolume” button is located at the bottom of the parameter area.




Nucleic Acids

Method Overview

Nucleic acids in solution absorb light with a peak in the ultraviolet region of 260 nm. For determination of nucleic acid concentration in solution the absorbance at wavelength 260 nm is used along with the Beer-Lambert law. In addition to calculating concentrations of nucleic acids, absorbance measurements are also useful for estimating purity of nucleic acids by calculating the 260/280 nm and 260/230 nm ratios. Further, it is possible to determine the degree of labeling of nucleic acids with probes including fluorescent dyes. Sample Control™ gives useful information about sample conditions. It recognizes air bubbles, sample impurities, turbidity, lint residues and potential contaminations. If Sample Control™ detects any inconsistency an alert icon  is shown in the result/table area. A push on the alert icon shows additional information about the inconsistency.

Measurement Protocol Single Sample

- Select the Nucleic Acids icon on the home screen.
- To change between NanoVolume and cuvette application (NP80/C40 only), press the Change to Cuvette/NanoVolume button below the parameter area.



Change to Cuvette

Change to NanoVolume
- To change the nucleic acid type push on dsDNA and a list with available options opens on the right side.

Options are: dsDNA, ssDNA, RNA miRNA, miRNA Sequence, Oligo, Oligo Sequence and Custom (see Table 1 on page 66).

 - The miRNA sequence and Oligo sequence options allow the sequence to be entered and the extinction coefficient will be automatically calculated. A minimum of 4 bases is required.
 - The default setting for Custom is 50. The extinction coefficient ($1/\epsilon$) can be set in a range of 15 - 150. It is possible to enter a name for the custom nucleic acid factor for documentation.
 - The default setting for Custom Molar Extinction Coefficient (Mol. Ext. Coeff.) is 10 and be set within a range of 0 - 15. It is possible to enter a name for the custom molar extinction coefficient for documentation.



dsDNA	50	dsDNA	50	ssDNA	37
Volume	1 µl - 2 µl	RNA	40	miRNA	33
Units	ng/µl	miRNA Seq.	<input type="text" value="Please enter miRNA sequence"/>		
Background Correction		Oligo	33		
Air Bubble Recognition	<input type="checkbox"/>	Oligo Seq. DNA	<input type="text" value="Please enter DNA Oligo sequence"/>		
Dye Label		Oligo Seq. RNA	<input type="text" value="Please enter RNA Oligo sequence"/>		
Manual Dilution		Custom	<input type="text" value="Please enter Name"/>	<input type="text" value="Please enter Factor"/>	
		Custom (Mol. Ext.Coeff.)	<input type="text" value="Please enter Name"/>	<input type="text" value="Please enter Mol. Ext. Coeff.(nM-1*cm-1)"/>	

4. **For NanoVolume application:**
Select the volume of sample to be applied.

dsDNA	50	1-2 µl sample volume	Autoranging
Volume	1 µl - 2 µl	0.3 µl sample volume	Dilution 140 / 0.07 mm path

Note: 1 - 2 µl (default): automatic path length setting; 0.3 µl measures only the 0.07 mm path length (for samples with concentrations > 420 ng/µl dsDNA)

For cuvette application:
Select the path length depending on the used cuvette.
Options are: 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm and 10 mm

dsDNA	50	Pathlength	0.5 mm
Pathlength	10 mm	Pathlength	1 mm
Heat To 37°C	<input type="checkbox"/>	Pathlength	2 mm
Units	ng/µl	Pathlength	5 mm
		Pathlength	10 mm

If it is desired to heat the sample to 37°C use the toggle switch to turn on cell holder heater. When the cuvette holder has reached 37°C the toggle color changes to green.


Note: Only available for cuvette applications (NP80 and C40).

For NanoVolume application with submicroliter cell (C40 only):
Select a Lid depending on your sample concentration for concentration ranges of different lids (see page 53 Submicroliter Cell Measurements Basics).
Required sample volume for each lid is shown.


dsDNA	50	Lid 5	3.5 µl - 5 µl sample volume
Lid	50	Lid 10	1 µl - 3 µl sample volume
Units	ng/µl	Lid 50	0.3 µl - 2 µl sample volume
Background Correction		Lid 100	0.3 µl - 2 µl sample volume
		Lid 250	0.3 µl - 2 µl sample volume

Note: A new Blank is recommended when changing the dilution lid.

- Select the Units in which the concentration should be calculated. Options are ng/μl (default), μg/μl and μg/ml. Molar units: pmol/μl is available only if a nucleic acid sequence is entered for nucleic acid factor calculation; if a custom molar extinction coefficient is specified, the unit of measurement will automatically be switched to nmol/l.

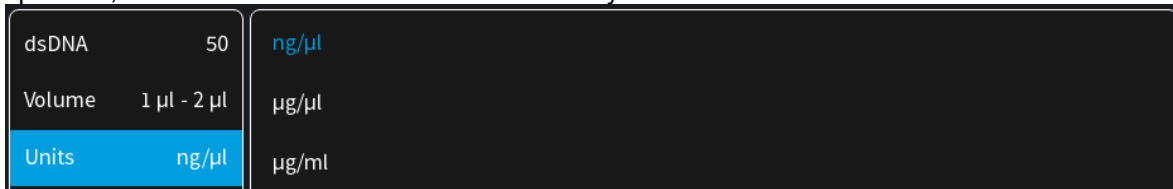

- The background correction is enabled at 320 nm by default. Selection options are 320 nm, 340 nm or any wavelength in the range of 220 – 350 nm. The background correction can be disabled with the toggle switch.

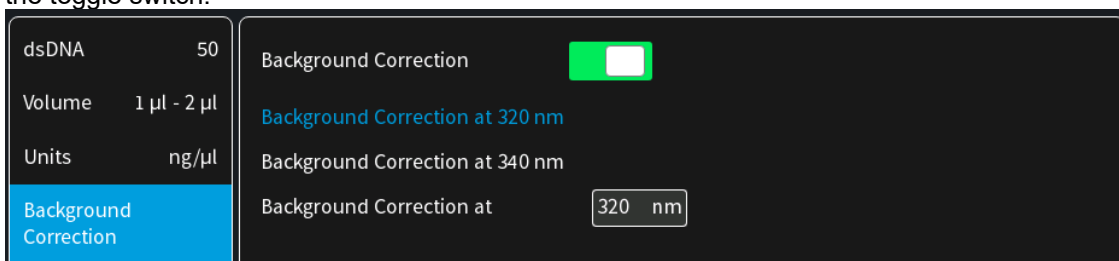

- Air bubble recognition is disabled by default. Setting to on detects air bubbles, lint residues and bad sample conditions of the sample.




Note: Lint residues and bad sample conditions are detected even if the air bubble recognition is set to off.


- For dye labelled samples tick the dye labels in the list, which should be used for result calculation. **Note:** If the used dye is not available in the list, please go to preferences and add a custom dye to the dye list.

There is an option for dye correction which can be enabled/disabled with a toggle switch.

Note: Dye correction is only available for single dye selection.

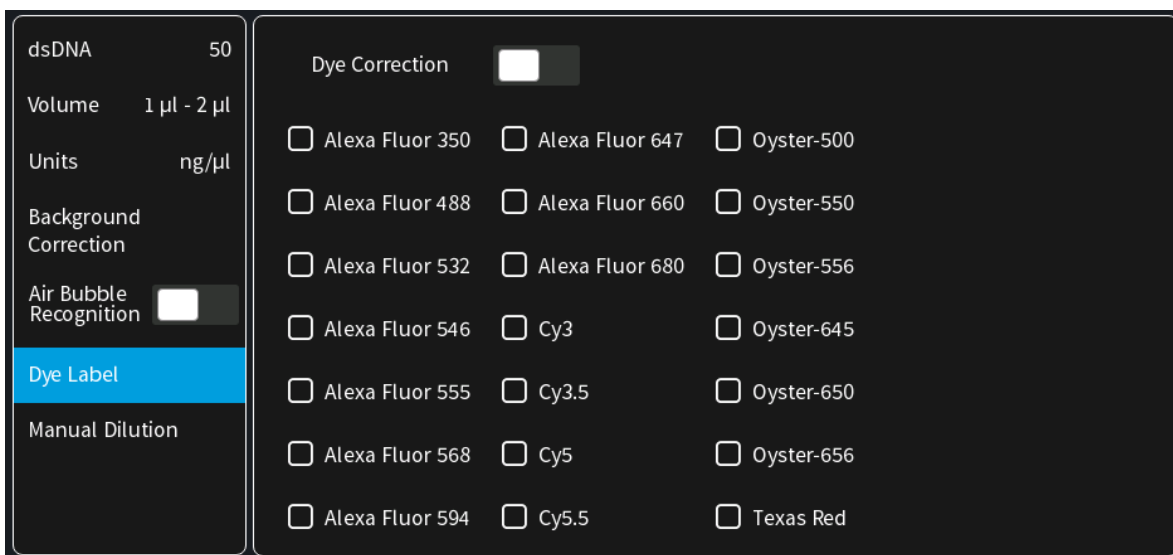

9. Option to set/calculate a dilution factor for manual diluted samples.

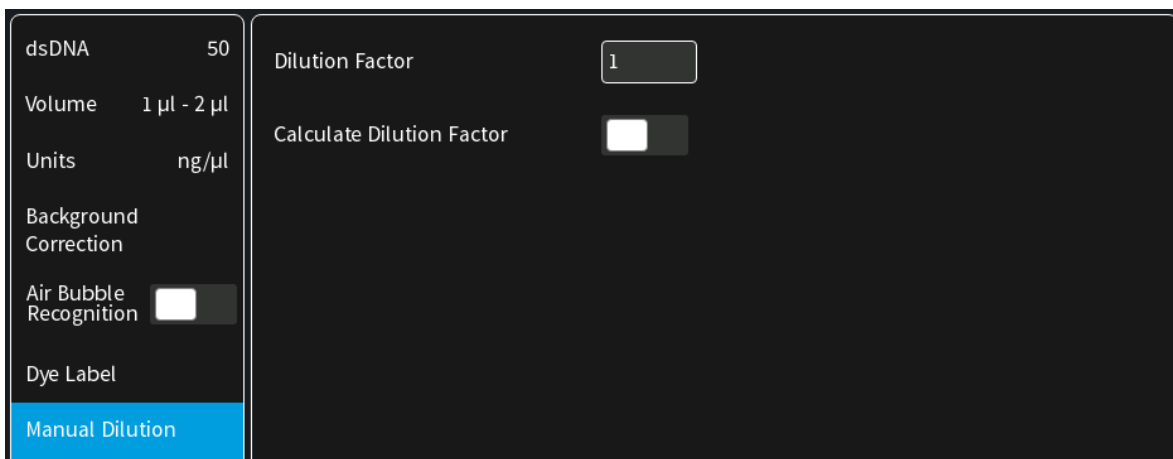

10. Apply the blank ddH₂O or buffer to the illuminated sample window on the pedestal and close the lid arm for the reference measurement and select blank to initiate the reading.



Note: The illumination of the sample window can be switched off in the preferences.

11. Use a lint-free laboratory wipe to clean both the sample window on pedestal and mirror in lid arm prior to applying the next sample.



Note: It could be helpful to apply the blank a second time and read it as a sample to ensure a proper blank.

12. Apply sample to the sample window on pedestal and press the sample button to initiate the measurement. If auto sample is active the sample measurement is automatically started after closing the lid arm.



Note: Auto sample function is only available NanoVolume methods and new NanoPhotometer® versions it may not be available after updating an older firmware version.

Measurement Protocol Multi Sample (N120)

1. Select the Nucleic Acids icon on the home screen.



2. To change between single and multi-sample application use the toggle switch Single Sample in the parameter area.



3. Parameter setting Nucleic Acid type:


To change the nucleic acid type, select either dsDNA, ssDNA, RNA, miRNA, miRNA Sequence, Oligo, Oligo Sequence or Custom (see Table 1 on page 66).

- The miRNA sequence and Oligo sequence options allow the sequence to be entered and the extinction coefficient will be automatically calculated. A minimum of 4 bases is required.
- The default setting for Custom is 50. The extinction coefficient (1/ε) can be set in a range of 15 - 150. It is possible to enter a name for the custom nucleic acid factor for documentation.

- The default setting for Custom Molar Extinction Coefficient (Mol. Ext. Coeff.) is 10 and be set within a range of 0 - 15. It is possible to enter a name for the custom molar extinction coefficient for documentation.

- Select the Units in which the concentration should be calculated. Options are ng/µl (default), µg/µl and µg/ml. Molar units: pmol/µl is available only if a nucleic acid sequence is entered for nucleic acid factor calculation; if a custom molar extinction coefficient is specified, the unit of measurement will automatically be switched to nmol/l.


- The background correction is enabled at 320 nm by default. It is possible to disable the background correction with the toggle switch. Selection options are 320 nm, 340 nm. It is also possible to add any wavelength in the range of 220 – 350 nm

- Air bubble recognition is disabled by default. Set to on it detects air bubbles, lint residues and bad sample conditions of the sample. **Note:** Lint residues and bad sample conditions are detected even if the air bubble recognition is set to off. 
- For dye labelled samples tick the dye labels in the list, which should be used for result calculation. **Note:** If the used dye is not available in the list, please go to preferences and add a custom dye to the dye list (see page 129


Dyes).

There is an option for dye correction which can be enabled/disabled with a toggle switch.

Note: Dye correction is only available for single dye selection.

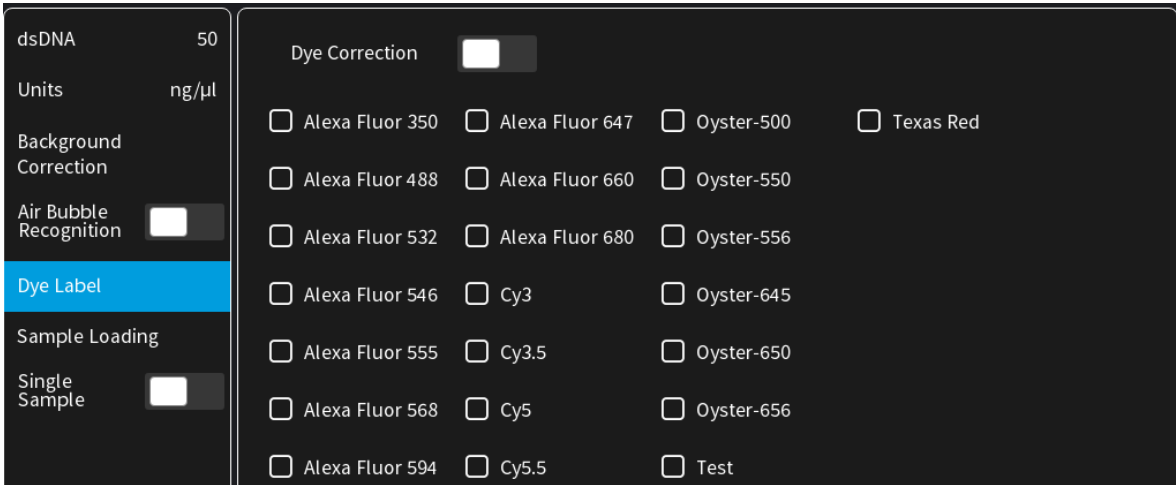


8. Select the sample loading orientation.

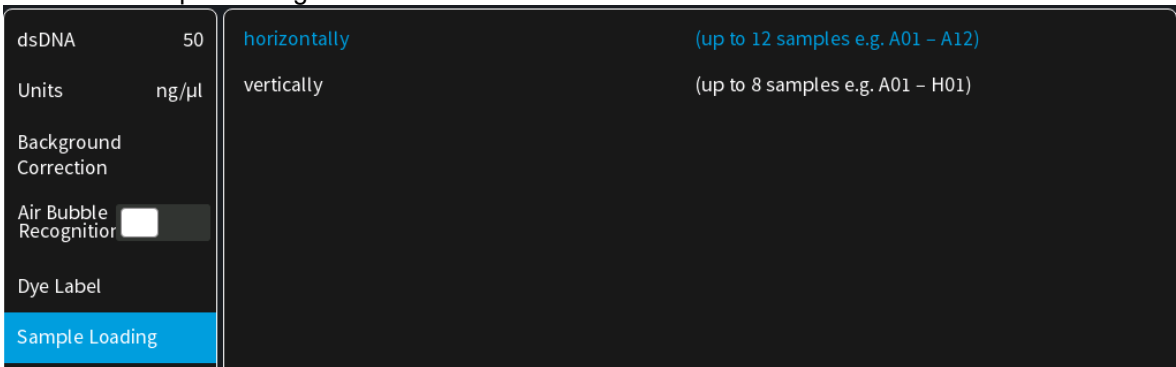


There are two options:


Horizontally: Measure up to 12 samples (A01 – A12 shown in sample map as row)

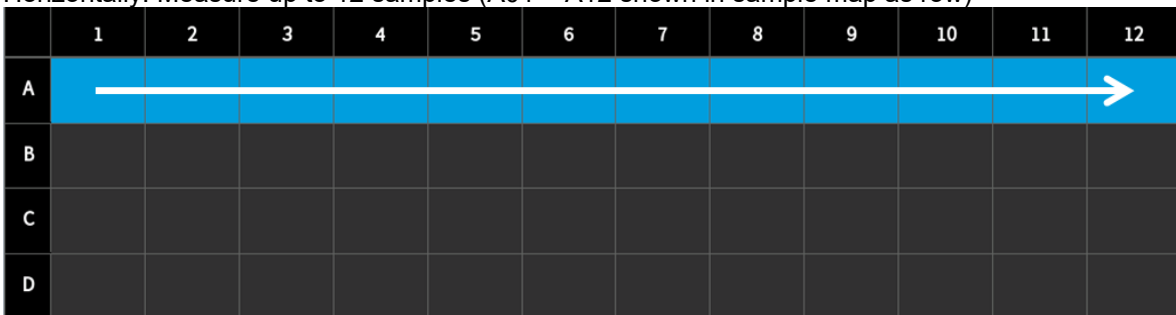

Vertically: Measure up to 8 samples (A01 – H01 shown in sample map as column)

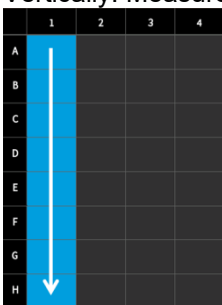

9. To confirm the parameter setting, swipe the screen to the left and the sample map screen is shown.

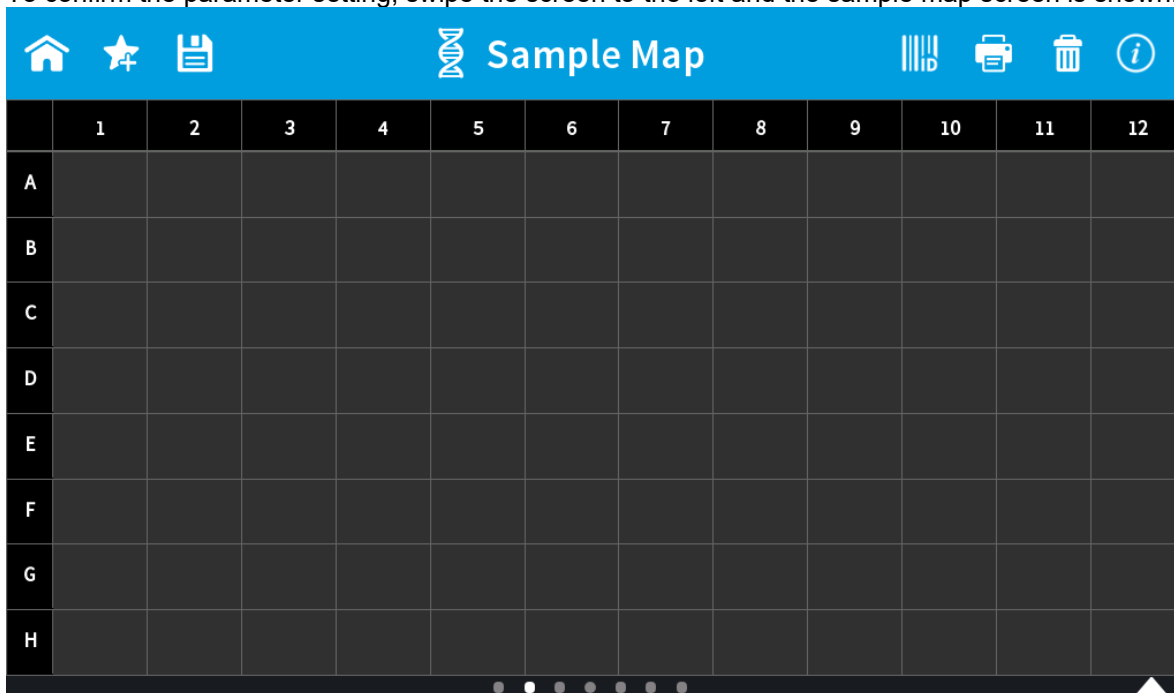

The sample map offers the possibility to select cells and define sample IDs for measurements. It is not necessary to make any selection. If cells are left empty without defined sample IDs for horizontal or vertical sample loading, all 12 positions for horizontal loading or all 8 positions for vertical loading are measured.

To measure a defined amount of samples select a cell pattern starting at A01.

Sample IDs can be defined by pressing the sample ID icon (|||||) in the navigation bar.

The opened pop up offers options to define, import, export or delete sample IDs.



Further information about cell selection and sample ID definition can be found in chapter 3 NanoPhotometer® Basics / Sample Map on page 37

10. Apply the blank ddH₂O or buffer to the illuminated sample windows on pedestal for the reference measurement and select blank to initiate the reading.
Note: The illumination of the sample window can be switched off in preferences.
Note: If the blank and sample buttons are not shown please either open the lid arm, push the ▲ on the right bottom corner or swipe from the bottom edge in the screen.





- Use a lint-free laboratory wipe to clean both the sample windows on pedestal and mirrors in lid arm prior to applying the next sample.

Note: It could be helpful to apply the blank a second time and read it as a sample to ensure a proper blank.



- Apply samples to the illuminated sample windows on pedestal and press the sample button to initiate the measurement. If auto sample is active the sample measurement is automatically started after closing the lid arm.

Note: Auto sample function is only available NanoVolume methods and new NanoPhotometer® versions it may not be available after updating an older firmware version.



Calculations

▪ Nucleic Acid Concentration

To determine the concentration of nucleic acids in solution, the absorbance is measured at a wavelength of 260 nm. The function describing the relationship between concentration and absorbance is a modification of the Beer-Lambert law equation. The concentration of the nucleic acid samples can be calculated with or without background correction depending on enabled/disabled background correction parameter.

Without background correction:

$$C = A_{260} * \text{Factor}_{\text{nuc}} * D$$

With background correction:

$$C = (A_{260} - A_{\text{BKG}}) * \text{Factor}_{\text{nuc}} * D$$

C	Concentration in ng/μl
A ₂₆₀	Absorbance at 260 nm (10 mm path)
A _{BKG}	Absorbance at selected background wavelength (10 mm path)
D	Manual dilution factor
Factor _{nuc}	Nucleic acid factor in ng*cm/μl

Table 1. Nucleic acids factors (Factor_{nuc})

Type	Factor _{nuc}
dsDNA	50 ng*cm/μl
ssDNA	37 ng*cm/μl
RNA	40 ng*cm/μl
miRNA	33 ng*cm/μl
Oligo	33 ng*cm/μl
miRNA Seq.	calculated via extinction coefficient of constituent nucleotides entered
Oligo Seq.	calculated via extinction coefficient of constituent nucleotides entered
Custom	Option to enter any factor between 15 and 150 ng*cm/μl

Custom (Mol. Ext. Coeff.)

Option to enter any molar extinction coefficient between 0 and 15 1/nM*cm

▪ Dye-labeled Nucleic Acid Concentration

For dye-labeled nucleic acids, the concentration of the nucleic acid is calculated using a modified form of the Beer-Lambert equation. For these calculations, the instrument considers the absorption maximum of the dye and a certain dye-specific correction factor at 260 nm (see Table 2 on page 69). The concentration of a dye-labeled nucleic acid is calculated with or without background/dye correction as follows:

With background and with dye correction:

$$C = \left[(A_{260} - A_{BKG}) - (cf_{dye} * (A_{max, dye} - A_{BKG})) \right] * Factor_{nuc} * D$$

With background and without dye correction:

$$C = (A_{260} - A_{BKG}) * Factor_{nuc} * D$$

Without background and with dye correction:

$$C = [A_{260} - (cf_{dye} * A_{max, dye})] * Factor_{nuc} * D$$

Without background and without dye correction:

$$C = A_{260} * Factor_{nuc} * D$$

C	Concentration in ng/μl
A ₂₆₀	Absorbance at 260 nm (10 mm path)
A _{BKG}	Absorbance at selected background wavelength (10 mm path)
A _{max, dye}	Absorbance value at the absorbance maximum of the dye (10 mm path)
Factor _{nuc}	Nucleic acid factor in ng*cm/μl
cf _{dye}	Dye-dependent correction factor at 260 nm
D	Manual dilution factor

Note: Dye correction is only available for single dye selection.

▪ Dye Concentration

For dye-labeled nucleic acids, the concentration of the dye is calculated using a modified form of the Beer-Lambert equation. For these calculations, the instrument considers the absorption maximum of the dye, the dye-specific extinction coefficient (see Table 2 on page 69). The dye concentration is calculated with or without background correction as follows:

With background correction:

$$C = \frac{(A_{max, dye} - A_{BKG}) * D}{m\epsilon_{dye} * 10^{-6}}$$

Without background correction:

$$C = \frac{A_{\max, \text{dye}} * D}{m\epsilon_{\text{dye}} * 10^{-6}}$$

C	Concentration in pmol/μl
$A_{\max, \text{dye}}$	Absorbance value at the absorbance maximum of the dye (10 mm path)
A_{BKG}	Absorbance at 320 nm (10 mm path)
$m\epsilon_{\text{dye}}$	Molar extinction coefficient of dye in $M^{-1} * \text{cm}^{-1}$
D	Manual dilution factor

▪ Frequency of Incorporation (FOI)

FOI is the degree of labeling based on dye incorporation in a labeled nucleic acid sample. It is generally expressed as the number of dye molecules incorporated per 1000 nucleotides. FOI can be calculated with or without background/dye correction as follows:

With background correction with dye correction:

$$\text{FOI} = \frac{324.5 * (A_{\max, \text{dye}} - A_{\text{BKG}})}{m\epsilon_{\text{dye}} * 10^{-6} * (A_{260} - A_{\text{BKG}} - \text{cf}_{\text{dye}} * (A_{\max, \text{dye}} - A_{\text{BKG}})) * \text{Factor}_{\text{nuc}}}$$

With background correction without dye correction:

$$\text{FOI} = \frac{324.5 * (A_{\max, \text{dye}} - A_{\text{BKG}})}{m\epsilon_{\text{dye}} * 10^{-6} * (A_{260} - A_{\text{BKG}}) * \text{Factor}_{\text{nuc}}}$$

Without background correction and with dye correction:

$$\text{FOI} = \frac{324.5 * A_{\max, \text{dye}}}{m\epsilon_{\text{dye}} * 10^{-6} * (A_{260} - \text{cf}_{\text{dye}} * A_{\max, \text{dye}}) * \text{Factor}_{\text{nuc}}}$$

Without background correction and without dye correction:


$$\text{FOI} = \frac{324.5 * A_{\max, \text{dye}}}{m\epsilon_{\text{dye}} * 10^{-6} * A_{260} * \text{Factor}_{\text{nuc}}}$$

FOI	Frequency of Incorporation (dye per 1,000 bases)
A_{260}	Absorbance at 260 nm (10 mm path)
A_{BKG}	Absorbance at selected background wavelength (10 mm path)
$A_{\max, \text{dye}}$	Absorbance value at the absorbance maximum of the dye (10 mm path)
$m\epsilon_{\text{dye}}$	molar extinction coefficient of dye in $M^{-1} * \text{cm}^{-1}$
$\text{Factor}_{\text{nuc}}$	Nucleic acid factor in $\text{ng} * \text{cm} / \mu\text{l}$
cf_{dye}	Dye-dependent correction factor at 260 nm

Table 2. Dye Types, Absorbance Max, Extinction coefficient, and dye-dependent correction factors

NanoPhotometer® Model	Dye Type	Absorbance maximum of Dye (nm)	molar ext. coeff. of dye $m\epsilon_{\text{dye}}$ in $M^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$	Dye-dependent correction factor at 260 nm cf_{dye}
NP80/N60/N50/C40	Alexa Fluor 350	346	19,000	0.25
NP80/N60/N50/C40	Alexa Fluor 488	495	71,000	0.30
NP80/N60/N50/C40	Alexa Fluor 532	532	81,000	0.24
NP80/N60/N50/C40	Alexa Fluor 546	554	112,000	0.21
NP80/N60/N50/C40	Alexa Fluor 555	555	150,000	0.08
NP80/N60/N50/C40	Alexa Fluor 568	578	91,300	0.45
NP80/N60/N50/C40	Alexa Fluor 594	590	90,000	0.43
NP80/N60/C40	Alexa Fluor 647	650	239,000	0.00
NP80/N60/C40	Alexa Fluor 660	663	132,000	0.00
NP80/N60/C40	Alexa Fluor 680	679	184,000	0.00
NP80/N60/N50/C40	Cy3	550	150,000	0.08
NP80/N60/N50/C40	Cy3.5	581	150,000	0.08
NP80/N60/C40	Cy5	649	250,000	0.05
NP80/N60/C40	Cy5.5	675	250,000	0.05
NP80/N60/N50/C40	Oyster-500	503	78,000	0.29
NP80/N60/N50/C40	Oyster-550	553	150,000	0.05
NP80/N60/N50/C40	Oyster-556	560	155,000	0.03
NP80/N60/C40	Oyster-645	649	220,000	0.05
NP80/N60/C40	Oyster-650	653	200,000	0.04
NP80/N60/C40	Oyster-656	660	200,000	0.04
NP80/N60/N50/C40	Texas Red	603	112,000	0.23

▪ Ratios

Reactions utilizing nucleic acids often require minimum purity standards. Common contaminants of nucleic acid samples include: proteins, organic compounds, and other. Based on the common contaminants of nucleic acid samples, the 260/280 and 260/230 ratios are calculated for nucleic acids to give an indication of the purity of the samples. Pure DNA and RNA preparations have expected 260/280 ratios of ≥ 1.8 and ≥ 2.0 respectively. An elevated absorbance at 230 nm can indicate the presence of impurities as well; 230 nm is near the absorbance maximum of peptide bonds and also indicates buffer contamination since TRIS, EDTA and other buffer salts absorb at 230nm. When measuring RNA samples, the 260/230 ratio should be > 2.0 ; a ratio lower than this is generally indicative of contamination with guanidinium thiocyanate, a reagent commonly used in RNA purification and which absorbs over the 230-260 nm range. If a ratio is detected out of the acceptable range an alert icon  is shown in the results/table area. A push on the alert icon shows additional information. The ranges for acceptable ratio values can be defined in

preferences.

The ratios are calculated with or without background correction according to if the background correction is activated during the measurements or not as follows:

Without background correction:

$$260/280 \text{ ratio} = \frac{A_{260}}{A_{280}}$$

$$260/230 \text{ ratio} = \frac{A_{260}}{A_{230}}$$

With background correction:

$$260/280 \text{ ratio} = \frac{A_{260} - A_{BKG}}{A_{280} - A_{BKG}}$$

$$260/230 \text{ ratio} = \frac{A_{260} - A_{BKG}}{A_{230} - A_{BKG}}$$



Protein UV

Method Overview


The Protein UV method exploits the inherent absorbance of proteins at 280 nm in combination with the Beer-Lambert Law, where each protein is characterized by a protein specific extinction coefficient (ϵ) which can be used to determine total protein concentration of a solution. The intrinsic absorbance of proteins is due to the presence of aromatic amino acids in their structure, primarily tryptophan and tyrosine, as well as cysteine (oxidized cysteine residues in a disulphide bond). The aromatic amino acid residues in a protein containing tryptophan and tyrosine exhibit strong intrinsic absorbance at 280 nm, with a lesser contribution by phenylalanine. Therefore, it is the aromatic amino acid residues which dictate the extinction coefficient at 280 nm for a protein.

The most straightforward method to determine concentration of a purified, homogenous protein with a known extinction coefficient (ϵ) is by direct measurement of UV280 provided as long as the protein contains no prosthetic groups with strong absorption in the same region. However, for unknown proteins including homogenous protein mixtures, it is possible to make direct A_{280} measurements using a composite ϵ value derived from comparison of many proteins, although this will only provide an approximate but close estimate of the true protein concentration.

The NanoPhotometer® determines protein concentration by performing calculations based on specific ϵ values, either pre-programmed in the instrument or entered manually by the user. Extinction coefficient (ϵ) values at 280 nm vary greatly for different proteins due to their particular aromatic amino acid content. Fixed ϵ values are pre-programmed in the software for certain proteins (see Table 3 on page 79). However, if the protein of interest is not included in the pre-programmed methods it is also possible to manually enter the specific ϵ for the protein of interest using the custom Mol. Ext. Coefficient, custom Ext. Coefficient or custom $1/\epsilon$ protein factor option. For correct calculation, it is necessary to supply either: a) the molar extinction coefficient (ϵ_M in $M^{-1} \cdot cm^{-1}$) and the molecular weight expressed in molar mass units (g/mol); b) the mass extinction coefficient (ϵ in $l/g \cdot cm$) or c) the protein factor $1/\epsilon$ of the protein.

To determine the degree of dye labelling of a protein, the absorbance measured at the wavelength corresponding to the absorbance maximum of the fluorescence dye is used (see Table 3 on page 79). The corresponding extinction coefficient of the dye is used along with the Beer-Lambert Law to determine the dye concentration.

Note: It is important to ensure the extinction coefficient and units entered are correct in order to ensure that calculations are performed properly for accurate concentration values.


Sample Control™ gives useful information about air bubbles, sample impurities, turbidity, lint residues and potential contaminations. If the Sample Control™ detects any inconstancy an alert icon  is shown in the result/table area. A push on the alert icon shows additional information about the inconstancy.

Measurement Protocol Single Sample

1. Select the Protein UV icon on the home screen.



2. To change between NanoVolume and Cuvette application (NP80/C40 only) use the Change to Cuvette/NanoVolume button below the parameter area.

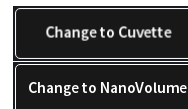

3. To change the protein type push on BSA and a list with available options opens on the right side. Options are: BSA, SA Mouse, SA Human, IgG Mouse, IgG Human, Lysozyme, OD1, Custom (Molar Extinction Coefficient), Custom (Extinction Coefficient) and Custom (1/ε).

- For Custom (Mol. Ext. Coefficient) enter Molecular Weight in g/mol and the Mol. Ext. Coefficient in $M^{-1} \cdot cm^{-1}$
- For Custom (Ext. Coefficient) enter the Ext. Coefficient in $l/g \cdot cm$
- For Custom (1/ε) enter the calculated protein factor 1/ε

BSA	1.499	BSA	1.499	SA Mouse	1.493	SA Human	1.718
Volume	1 μl - 2 μl	IgG Mouse	0.714	IgG Human	0.735	IgE Human	0.654
Wavelength	280 nm	Lysozyme	0.379	OD1	1.000	Custom (Mol. Ext. Coeff.)	Please enter MW (g/mol)
Units	mg/ml	Custom (Ext. Coeff.)	Please enter Ext. Coeff. (l/g*cm)	Custom (1/ε)	Please enter Protein Factor (1/ε)		
Background Correction							
Air Bubble Recognition	<input type="checkbox"/>						
Dye Label							
Manual Dilution							

4. **For NanoVolume application:**
Select the volume of sample to be applied.

BSA	1.5	1-2 μl sample volume	Autoranging
Volume	1 μl - 2 μl	0.3 μl sample volume	Dilution 140 / 0.07 mm path

Note: 1-2 μl (default): automatic path length setting; 0.3 μl measures only the 0.07 mm path length (possible for samples with concentrations e.g. BSA > 12.6 mg/ml)

For cuvette application:
Select the path length depending on the used cuvette.
Options are: 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm and 10 mm



BSA	1.5	Pathlength	0.5 mm
Pathlength	10 mm	Pathlength	1 mm
Heat To 37°C	<input type="checkbox"/>	Pathlength	2 mm
Wavelength	280 nm	Pathlength	5 mm
		Pathlength	10 mm

If it is desired to heat the sample to 37°C use the toggle switch to turn on cell holder heater. When the cuvette holder has reached 37°C the toggle color changes to green.

Note: Only available for cuvette applications (NP80 and C40).

For NanoVolume application with submicroliter cell (C40 only):

Select Lid depending on your sample concentration (for concentration ranges of different lids see page 53 Submicroliter Cell Measurements Basics).

Required sample volume for each lid is shown.

BSA	1.5	Lid 5	3.5 µl - 5 µl sample volume
Lid	50	Lid 10	1 µl - 3 µl sample volume
Wavelength	280 nm	Lid 50	0.3 µl - 2 µl sample volume
Units	mg/ml	Lid 100	0.3 µl - 2 µl sample volume
		Lid 250	0.3 µl - 2 µl sample volume

Note: A new Blank is recommended when changing the dilution lid.

- The wavelength for protein measurements can be changed in the range of 200 – 330nm depending on the wavelength peak of the protein. Default setting is 280 nm

- Select the Units in which the concentration should be calculated. Options are ng/µl, µg/µl, µg/ml and mg/ml (default).

BSA	1.499	ng/µl
Volume	1 µl - 2 µl	µg/µl
Wavelength	330 nm	µg/ml
Units	mg/ml	mg/ml

- The background correction is enabled at 320 nm by default. Selection options are 320 nm, 340 nm or any wavelength in the range of 220 – 350 nm. The background correction can be disabled with the toggle switch.

BSA	1.5	Background Correction	<input checked="" type="checkbox"/>
Volume	1 µl - 2 µl	Background Correction at 320 nm	
Wavelength	280 nm	Background Correction at 340 nm	
Units	mg/ml	Background Correction at	320 nm
Background Correction			

- Air bubble recognition is disabled by default. When enabled it detects air bubbles, lint residues and poor conditions of the sample.


Note: Lint residues and bad sample conditions are detected even if the air

bubble recognition is set to off.


- For dye labelled samples, tick the dye labels in the list which should be used for result calculation.
Note: If the used dye is not available in the list, please go to preferences and add a custom dye to the dye list.

There is an option for dye correction which can be enabled/disabled with a toggle switch.

Note: Dye correction is only available for single dye selection.

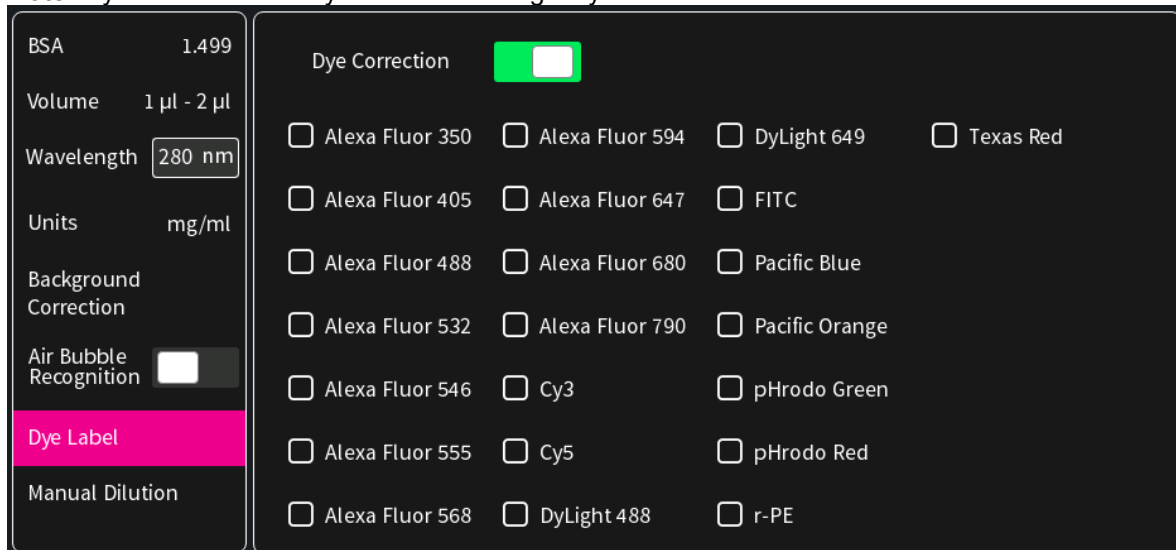

- Option to set/calculate a dilution factor for manual diluted samples.

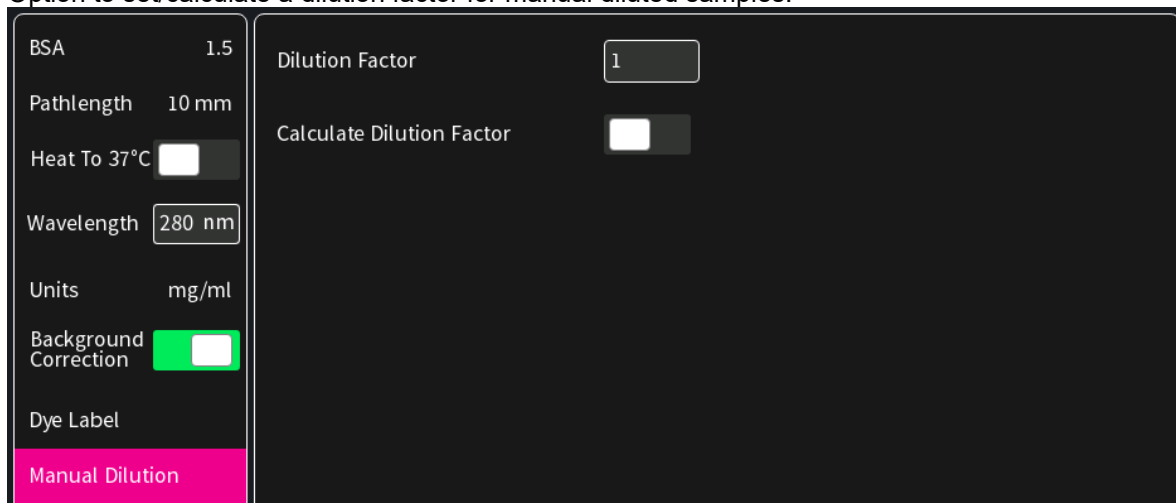

- Apply the blank ddH₂O or buffer to the illuminated sample window on pedestal for the reference measurement and select blank to initiate the reading.



Note: The illumination of the sample window can be switched off in the preferences.

- Use a lint-free laboratory wipe to clean both the sample window on pedestal and mirror in the lid arm prior to applying the next sample.



Note: It can be helpful to apply the blank a second time and read it as a sample to ensure a proper blank.



13. Apply sample to the sample window on pedestal and press the sample button to initiate the measurement.

If auto sample is active the sample measurement is automatically started after closing the lid arm.

Note: Auto sample function is only available NanoVolume methods and new NanoPhotometer® versions it may not be available after updating an older firmware version.



Measurement Protocol Multi Sample

1. Select the Protein UV icon on the home screen.



2. To change between single and multi-sample application use the toggle switch Single Sample in the parameter area.




3. To change the protein type push on BSA and a list with available options opens on the right side. Options are: BSA, SA Mouse, SA Human, IgG Mouse, IgG Human, IgE Human, Lysozyme, OD1, Custom (Molar Extinction Coefficient), Custom (Extinction Coefficient) and Custom (1/ε).

- For Custom (Mol. Ext. Coefficient) enter Molecular Weight in g/mol and the Mol. Ext. Coefficient in M⁻¹*cm⁻¹
- For Custom (Ext. Coefficient) enter the Ext. Coefficient in l/g*cm
- For Custom (1/ε) enter the calculated protein factor 1/ε

BSA	1.499		
Wavelength	<input type="text" value="280 nm"/>	SA Mouse	1.493
Units	mg/ml	IgG Mouse	0.714
Background Correction	<input type="checkbox"/>	IgE Human	0.654
Air Bubble Recognition	<input type="checkbox"/>	Lysozyme	0.379
Dye Label	<input type="checkbox"/>	OD1	1.000
Sample Loading	<input type="checkbox"/>	Custom (Mol. Ext. Coeff.)	<input type="text" value="Please enter MW (g/mol)"/>
Single Sample	<input type="checkbox"/>	Custom (Ext. Coeff.)	<input type="text" value="Please enter Mol.Ext.Coeff.(M<sup>-1</sup>*cm<sup>-1</sup>)"/>
		Custom (1/ε)	<input type="text" value="Please enter Ext. Coeff. (l/g*cm)"/>
			<input type="text" value="Please enter Protein Factor (1/ε)"/>

4. The wavelength for protein measurements can be changed in the range of 200 – 330nm depending on the wavelength peak of the protein. Default setting is 280 nm.

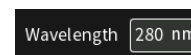

5. Select the Units in which the concentration should be calculated. Options are ng/μl, μg/μl, μg/ml and mg/ml (default).

BSA	1.5	ng/μl
Wavelength	280 nm	μg/μl
Units	mg/ml	μg/ml
Background Correction		mg/ml

6. The background correction is enabled at 320 nm by default. It is possible to disable the background correction with the toggle switch. Selection options are 320 nm, 340 nm or any wavelength in the range of 220 – 350 nm. The background correction can be disabled with the toggle switch.

BSA	1.5	Background Correction <input checked="" type="checkbox"/>
Wavelength	280 nm	Background Correction at 320 nm
Units	mg/ml	Background Correction at 340 nm
Background Correction		Background Correction at <input type="text" value="320 nm"/>

7. Air bubble recognition is disabled by default. When activated it detects air bubbles, lint residue and bad sample conditions.

Air Bubble Recognition

Note: Lint residue and bad sample conditions are detected even if the air bubble recognition is off.

8. For dye labelled samples tick the dye labels in the list, which should be used for result calculation. **Note:** If the used dye is not available in the list, please go to preferences and add a custom dye to the dye list.

There is an option for dye correction which can be enabled/disabled with a toggle switch.

Note: Dye correction is only available for single dye selection.

BSA	1.499	Dye Correction <input checked="" type="checkbox"/>
Wavelength	280 nm	<input type="checkbox"/> Alexa Fluor 350 <input type="checkbox"/> Alexa Fluor 647 <input type="checkbox"/> Pacific Blue
Units	mg/ml	<input type="checkbox"/> Alexa Fluor 405 <input type="checkbox"/> Alexa Fluor 680 <input type="checkbox"/> Pacific Orange
Background Correction		<input type="checkbox"/> Alexa Fluor 488 <input type="checkbox"/> Alexa Fluor 790 <input type="checkbox"/> pHrodo Green
Air Bubble Recognition	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alexa Fluor 532 <input type="checkbox"/> Cy3 <input type="checkbox"/> pHrodo Red
Dye Label		<input type="checkbox"/> Alexa Fluor 546 <input type="checkbox"/> Cy5 <input type="checkbox"/> r-PE
Sample Loading		<input type="checkbox"/> Alexa Fluor 555 <input type="checkbox"/> DyLight 488 <input type="checkbox"/> Texas Red
Single Sample	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Alexa Fluor 568 <input type="checkbox"/> DyLight 649
		<input type="checkbox"/> Alexa Fluor 594 <input type="checkbox"/> FITC

9. Select the sample loading orientation.

BSA	1.5	horizontally	(up to 12 samples e.g. A01 – A12)
Wavelength	280 nm	vertically	(up to 8 samples e.g. A01 – H01)
Units	mg/ml		
Background Correction			
Air Bubble Recognitor	<input type="checkbox"/>		
Dye Label			
Sample Loading			

There are two options:


Horizontally: Measure up to 12 samples (A01 – A12 shown in sample map as row)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	→											
B												
C												
D												

Vertically: Measure up to 8 samples (A01 – H01 shown in sample map as column)


	1	2	3	4
A	↓			
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				

10. To confirm the parameter setting, swipe the screen to the left and the sample map screen is shown.

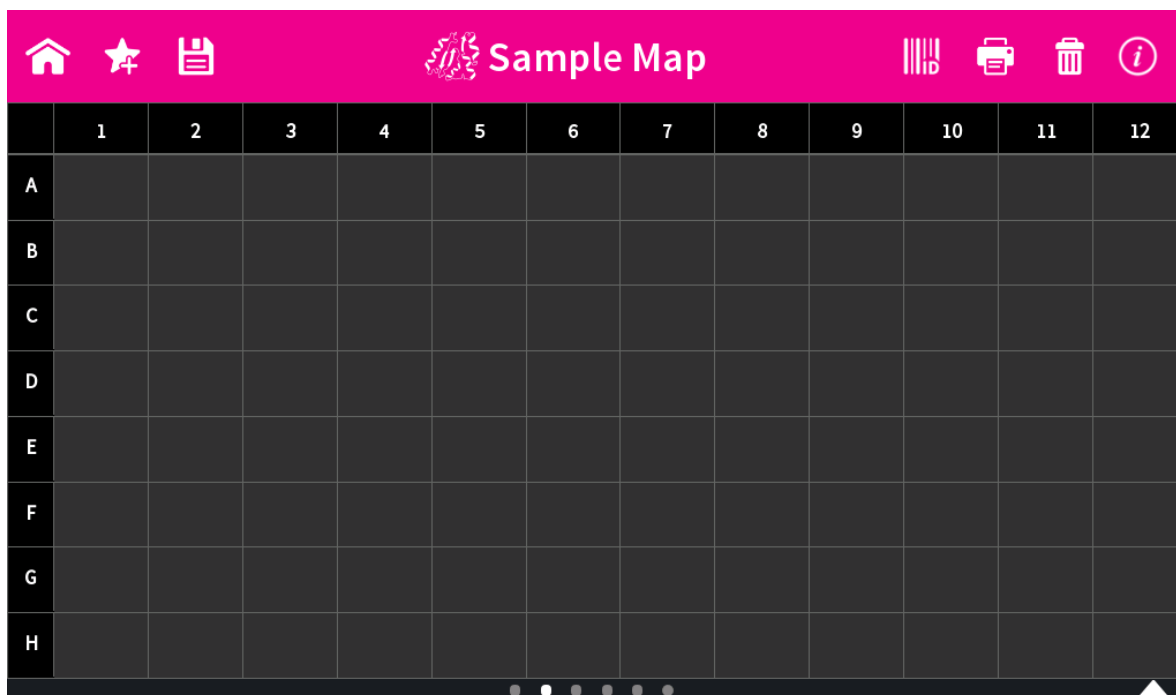

The sample map offers the possibility to select cells and define sample IDs for measurements. It is not necessary to make a selection. If cells are left empty without defined sample IDs for horizontal and vertical sample loading, all 12 positions for horizontal loading and all 8 positions for vertical loading are measured.

To measure a defined amount of samples select a cell pattern starting at A01. Sample IDs can be defined by pressing the sample ID icon (||||) in the navigation bar. The opened pop up offers options to define, import, export or delete sample IDs.

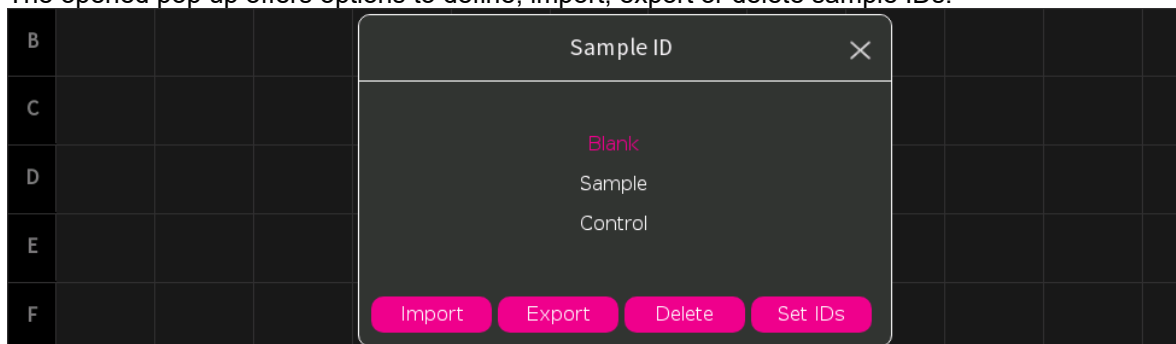

Further information about cell selection and sample ID definition can be found in chapter 3 NanoPhotometer® Basics / Sample Map on page 37.

- Apply the blank ddH₂O or buffer to the illuminated sample windows on pedestal for the reference measurement and select blank to initiate the reading.



Note: The illumination of the sample window can be switched off in the preferences.

Note: If the blank and sample buttons are not shown please either open the lid arm, push on ▲ on the right bottom corner or swipe from the bottom edge in the screen.

- Use a lint-free laboratory wipe to clean both the sample windows on pedestal and mirrors in lid arm prior to applying the next sample.



Note: It could be helpful to apply the blank a second time and read it as a sample to ensure a proper blank.



13. Apply samples to the illuminated sample windows on pedestal and press the sample button to initiate the measurement.
 If auto sample is active the sample measurement is automatically started after closing the lid arm.
Note: Auto sample function is only available NanoVolume methods and new NanoPhotometer® versions it may not be available after updating an older firmware version.

Calculations

▪ Protein UV280 Concentration

The protein concentration in the Protein UV method is calculated with the absorbance value of the sample at 280 nm or entered wavelength in the range of 220-350 nm along with the extinction coefficient defined by the user. The protein concentration is calculated with or without background correction as follows:

With background correction:

$$C = (A_{280} - A_{BKG}) * \text{Factor}_{\text{prot}} * D$$

Without background correction:

$$C = A_{280} * \text{Factor}_{\text{prot}} * D$$

- C Concentration (mg/ml)
- A₂₈₀ Absorbance at 280 nm (10 mm path) or entered wavelength
- A_{BKG} Absorbance at selected background wavelength (10 mm path)
- Factor_{prot} Protein factor in g*cm/l (1/Ext. Coeff. or MW/Mol. Ext. Coeff.)
- D Dilution factor

Table 3. Protein extinction coefficients

Type	Factor _{prot} [g*cm/l]	Ext. Coeff. [l/g*cm]	Mol. Ext. Coeff. [M ⁻¹ *cm ⁻¹]	MW [g/mol]
BSA	1.499	0.6670	44,289	66,400
SA Mouse	1.493	0.6700	44,220	66,000
SA Human	1.718	0.5820	40,370	69,365
IgG Mouse	0.714	1.4000	224,000	160,000
IgG Human	0.735	1.3600	204,000	150,000
IgE Human	0.654	1.5300	290,700	190,000
Lysozyme	0.379	2.6400	37,984	14,388
OD1	1.000	N/A	N/A	N/A

▪ Dye-labeled Protein UV280 Concentration

For dye-labeled proteins, the concentration of the protein is calculated using a modified form of the Beer-Lambert equation. For these calculations, the instrument considers the absorption maximum of the dye, and a certain dye-specific correction factor at 280 nm (see

Table 4 on page 81). The dye concentration is calculated with or without background/dye correction for are as follows:

With background and with dye correction:

$$C = \left[A_{280} - A_{\text{BKG}} - \left(cf_{\text{dye}} * (A_{\text{max, dye}} - A_{\text{BKG}}) \right) \right] * \text{Factor}_{\text{prot}} * D$$

With background and without dye correction:

$$C = (A_{280} - A_{\text{BKG}}) * \text{Factor}_{\text{prot}} * D$$

Without background and with dye correction:

$$C = (A_{280} - (cf_{\text{dye}} * A_{\text{max, dye}})) * \text{Factor}_{\text{prot}} * D$$

Without background and without dye correction:

$$C = A_{280} * \text{Factor}_{\text{prot}} * D$$

C	Concentration in mg/ml
A_{280}	Absorbance at 280 nm (10 mm path)
A_{BKG}	Absorbance at selected background wavelength (10 mm path)
$A_{\text{max, dye}}$	Absorbance value at the absorbance maximum of the dye (10 mm path)
$\text{Factor}_{\text{prot}}$	Protein factor in g*cm/l (1/Ext. Coeff. or MW/Mol. Ext. Coeff.)
cf_{dye}	Dye-dependent correction factor at 280 nm
D	Dilution factor

▪ **Dye Concentration**

For dye-labeled proteins, the concentration of the dye is calculated using a modified form of the Beer-Lambert equation. For these calculations, the instrument considers the absorption maximum of the dye, and a dye-specific extinction coefficient (see

Table 4 on page 81). The dye concentration is calculated with or without background correction for are as follows:

With background correction:

$$C = \frac{\left((A_{\text{max, dye}} - A_{\text{BKG}}) * D \right)}{m\epsilon_{\text{dye}} * 10^{-6}}$$

Without background correction:

$$C = \frac{\left(A_{\text{max, dye}} * D \right)}{m\epsilon_{\text{dye}} * 10^{-6}}$$

C	Concentration in pmol/μl
$A_{\text{max, dye}}$	Absorbance at the max dye absorbance value (10 mm path)
A_{BKG}	Absorbance at selected background wavelength (10 mm path)
$m\epsilon_{\text{dye}}$	Molar Extinction coefficient of dye in $M^{-1} * cm^{-1}$
D	Dilution factor

▪ Degree of Labeling (DOL)

DOL is the degree of labeling based on the average number of dye molecules coupled to a protein molecule. The degree of labeling can be determined from the absorption spectrum of the labeled antibody with or without background/dye correction as follows:

With background and with dye correction:

$$\text{DOL} = \frac{(A_{\text{max, dye}} - A_{\text{BKG}}) * m\epsilon_{\text{prot}}}{((A_{280} - A_{\text{BKG}}) - (cf_{\text{dye}} * (A_{\text{max, dye}} - A_{\text{BKG}}))) * m\epsilon_{\text{dye}}}$$

With background and w/o dye correction:

$$\text{DOL} = \frac{(A_{\text{max, dye}} - A_{\text{BKG}}) * m\epsilon_{\text{prot}}}{(A_{280} - A_{\text{BKG}}) * m\epsilon_{\text{dye}}}$$

W/o background and with dye correction:

$$\text{DOL} = \frac{A_{\text{max, dye}} * m\epsilon_{\text{prot}}}{(A_{280} - (cf_{\text{dye}} * A_{\text{max, dye}})) * m\epsilon_{\text{dye}}}$$

W/o background and w/o dye correction:

$$\text{DOL} = \frac{A_{\text{max, dye}} * m\epsilon_{\text{prot}}}{A_{280} * m\epsilon_{\text{dye}}}$$


DOL	Degree of labeling/dye per protein ratio
$A_{\text{max, dye}}$	Absorbance value at the absorbance maximum of the dye (10 mm path)
A_{280}	Absorbance at 280 nm (10 mm path)
A_{BKG}	Absorbance at selected background wavelength (10 mm path)
$m\epsilon_{\text{dye}}$	Molar extinction coefficient of dye ($\text{M}^{-1} * \text{cm}^{-1}$)
$m\epsilon_{\text{prot}}$	Molar extinction coefficient of protein ($\text{M}^{-1} * \text{cm}^{-1}$)
cf_{dye}	Dye-dependent correction factor at 280 nm

Table 4. Dye Types, Absorbance Max, Extinction coefficients, and dye-dependent correction factors

NanoPhotometer® Models	Dye Type	Absorbance maximum of Dye (nm)	Molar ext. coeff. of Dye $m\epsilon_{\text{dye}}$ in $\text{M}^{-1} * \text{cm}^{-1}$	Dye-dependent correction factor at 280 nm cf_{dye}
NP80/N60/N50/C40	Alexa Fluor 350	346	19,000	0.19
NP80/N60/N50/C40	Alexa Fluor 405	401	34,000	0.70
NP80/N60/N50/C40	Alexa Fluor 488	495	71,000	0.11
NP80/N60/N50/C40	Alexa Fluor 532	532	81,000	0.09
NP80/N60/N50/C40	Alexa Fluor 546	554	112,000	0.12
NP80/N60/N50/C40	Alexa Fluor 555	555	150,000	0.08
NP80/N60/N50/C40	Alexa Fluor 568	578	91,300	0.46
NP80/N60/N50/C40	Alexa Fluor 594	590	90,000	0.56
NP80/N60/C40	Alexa Fluor 647	650	239,000	0.03
NP80/N60/C40	Alexa Fluor 680	679	184,000	0.05
NP80/N60/C40	Alexa Fluor 790	785	260,000	0.08
NP80/N60/N50/C40	Cy3	550	150,000	0.05

NP80/N60/C40	Cy5	649	250,000	0.05
NP80/N60/C40	DyLight 649	654	250,000	0.04
NP80/N60/N50/C40	DyLight 488	493	70,000	0.15
NP80/N60/N50/C40	FITC	494	70,000	0.30
NP80/N60/N50/C40	Pacific Blue	409	30,000	0.20
NP80/N60/N50/C40	Pacific Orange	397	24,500	0.60
NP80/N60/N50/C40	pHrodo Green	505	75,000	0.20
NP80/N60/N50/C40	pHrodo Red	560	65,000	0.12
NP80/N60/N50/C40	r-PE	566	1,863,000	0.17
NP80/N60/N50/C40	Texas Red	595	80,000	0.18

▪ Ratios

Protein samples e.g. from whole cell lysates may contain nucleic acids. To check the purity of the isolated protein, the 260/280 ratio is calculated to give an indication of the nucleic acid contamination. A pure protein preparation has an expected 260/280 ratios of ~ 0.57. If a ratio is detected out of the acceptable range an alert icon  is shown in the results/table area. A push on the alert icon shows additional information. The ranges for acceptable ratio values can be defined in preferences.

The ratio is calculated with or without background correction according to if the background correction is activated during the measurements or not as follows:

Without background correction:

$$260/280 \text{ ratio} = \frac{A_{260}}{A_{280}}$$

With background correction:

$$260/280 \text{ ratio} = \frac{A_{260} - A_{BKG}}{A_{280} - A_{BKG}}$$



Protein Assays

Method Overview

Protein concentration may be measured using colorimetric assays, in which certain reagents are added to the protein solution to generate a colored product; either a protein-cupric ion chelate as in the Biuret, Lowry, BCA assays or a protein-dye complex as in the Bradford assay. In these colorimetric assays, the absorbance is measured in the visible range at the appropriate wavelength for each assay and compared against a standard curve prepared by serial dilution of a protein standard of known concentration. A linear, linear zero or 2nd order regression analysis of the calibration standard data points is calculated by the NanoPhotometer®. A correlation coefficient (R^2) in the range of 0.95 to 1.00 indicates a good fit to a straight line.

▪ Bradford Assay

Method depends on quantifying the binding of a dye, Coomassie Brilliant Blue, to an unknown protein and comparing this binding to that of a standard curve prepared from a set of known protein of known concentrations at 595 nm. This standard is usually BSA (bovine serum albumin).

▪ Biuret Assay

Method depends on a reaction between cupric ions and peptide bonds in an alkali solution, resulting in the formation of a complex absorbing at 546 nm.

Note: Biuret is only available for cuvette measurements (NP80 and C40).

▪ BCA Assay

Method depends on a reaction between cupric ions and peptide bonds coupled with the detection of cuprous ions using bicinchoninic acid (BCA), giving an absorbance maximum at 562 nm. The BCA process is less sensitive to the presence of detergents used to solubilize membranes.

▪ Lowry Assay

Method is based on the Biuret reaction. Under alkaline conditions the divalent copper ion forms a complex with peptide bonds in which it is reduced to a monovalent ion. Monovalent copper ion and the radical groups of tyrosine, tryptophan, and cysteine react with Folin reagent to produce an unstable product that becomes reduced to molybdenum/tungsten blue. The bound reagent changes color from yellow to blue. This binding is compared with that obtained with a standard protein at 750 nm; this is usually BSA (bovine serum albumin).


Note: Detailed protocols are customarily supplied with these assay kits, and must be closely followed to ensure that accurate results are obtained.

Measurement Protocol Single Sample

1. Select protein assays icon from home screen.



2. To change between NanoVolume and cuvette application, use the Change to Cuvette/NanoVolume button below the parameter area (NP80/C40 only).

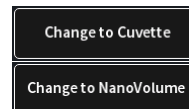

3. To change the assay type push on Bradford and a list with available options opens on the right side. Options are: BCA Assay, Biuret Assay (cuvette only), Bradford Assay, Lowry Assay (not for N50)

Bradford	BCA	562 nm
Dilution 15	Biuret	546 nm
Baseline Correction	Bradford	595 nm
Curve Fit	Lowry	750 nm

4. **For Cuvette Application:**
Select the path length depending on the used cuvette.
Options are: 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm and 10 mm

Bradford	Pathlength	0.5 mm
Pathlength 10 mm	Pathlength	1 mm
Heat To 37°C <input type="checkbox"/>	Pathlength	2 mm
Baseline Correction	Pathlength	5 mm
	Pathlength	10 mm

If it is desired to heat the sample to 37°C use the toggle switch to turn on cell holder heater. When the cuvette holder has reached 37°C the toggle color changes to green.

Note: Only available for cuvette applications (NP80 and C40).

For NanoVolume Application:
Select the dilution depending on the sample concentration

Bradford	Dilution 15 / 0.67 mm path	1 - 2 µl sample volume
Dilution 15	Dilution 140 / 0.07 mm path	0.3 - 2 µl sample volume

Note: There is no automatic path length setting available in this method. Select either a virtual dilution of 15 (path length 0.67 mm) or of 140 (path length 0.07 mm) depending on your sample concentration.

For NanoVolume application with submicroliter cell (C40 only):
Select Lid depending on your sample concentration (for concentration ranges of different lids see page 53 Submicroliter Cell Measurements Basics).
Required sample volume for each lid is shown.



Bradford	Lid 5	3.5 µl - 5 µl sample volume
Lid 50	Lid 10	1 µl - 3 µl sample volume
Baseline Correction	Lid 50	0.3 µl - 2 µl sample volume
Curve Fit	Lid 100	0.3 µl - 2 µl sample volume
	Lid 250	0.3 µl - 2 µl sample volume

Note: A new Blank is recommended when changing the dilution lid.

- Default values for the baseline correction are depending on selected protein assay type and instrument version:
 BCA default value 750 nm (N50 off)
 Biuret default off
 Bradford default value 750 nm (N50: 350 nm)
 Lowry default value 405 nm


Bradford	Baseline Correction	<input checked="" type="checkbox"/>
Dilution 15	Baseline Correction at 377 nm	
Baseline Correction	Baseline Correction at 604 nm	
Curve Fit	Baseline Correction at 650 nm	
Units mg/ml	Baseline Correction at 770 nm	
Concentration	Baseline Correction at 823 nm	
Replicates None	Baseline Correction at	<input type="text" value="750 nm"/>

Note: It is recommended to use the default baseline for each assay.


- Select curve fit type: Options are linear regression, zero regression (forces the straight line through the origin) and 2nd order regression

Bradford	Regression Linear
Dilution 15	Zero Regression Linear
Baseline Correction	Regression 2nd Order
CurveFit	


7. Select Unit

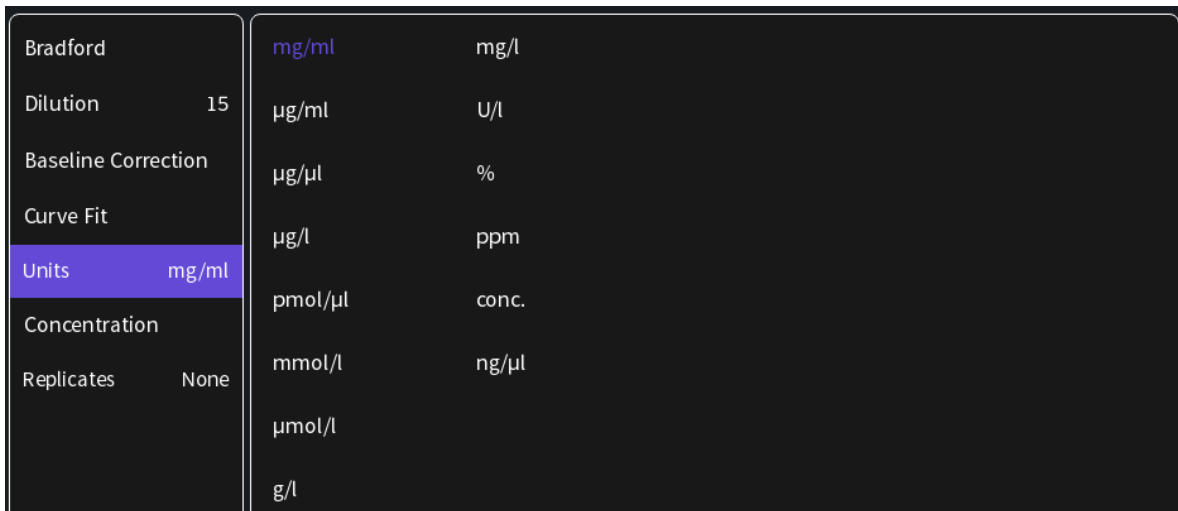

8. Add up to 20 Concentrations by pressing the Add Concentration button. Added concentrations can be deleted with ⊗
 Enter the concentrations of the standards for the standard curve.

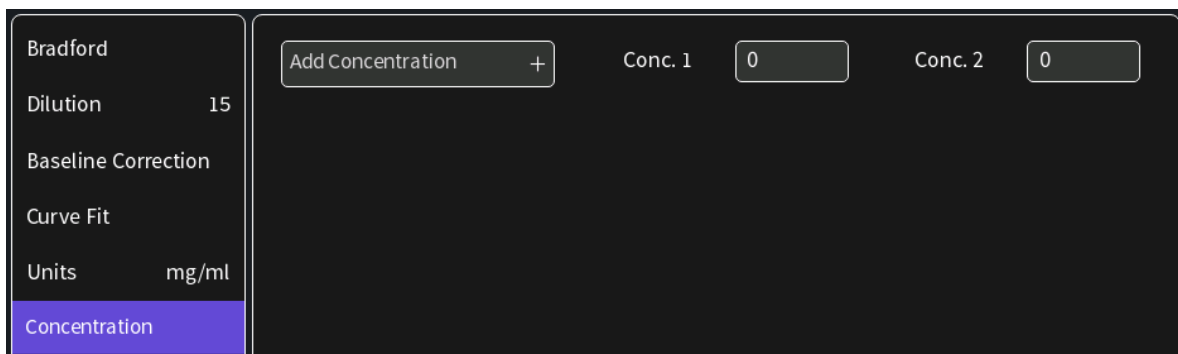

9. Select Replicates none, 2 or 3

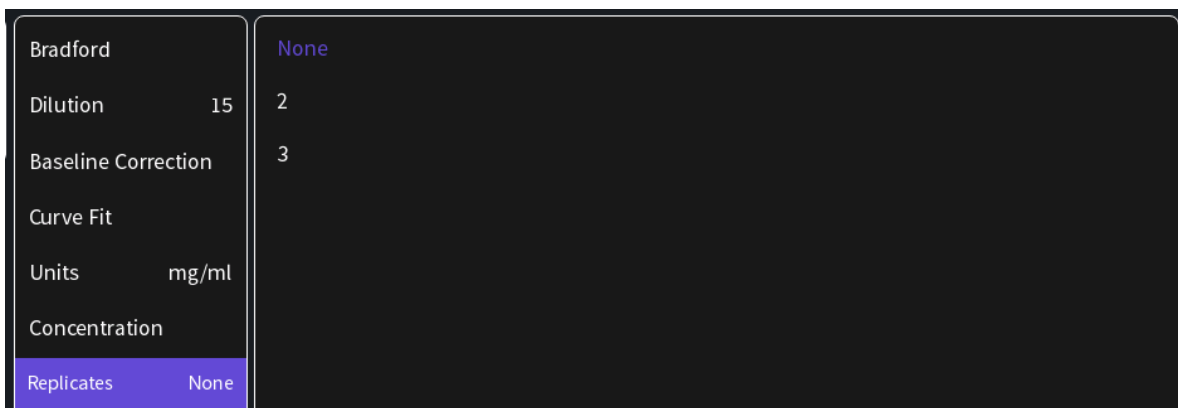



- Measure a blank and depending on the replicate selection, all required concentrations. Absorbances of the replicates will be shown in the results area and if replicates are selected a mean value for each standard. It is possible to exclude single measurements from the curve calculation by switching the toggle switch off.

Note: After the first sample measurement the standard curve can no longer be altered.



- Once a Standard curve is created or loaded from a stored method it will be used for concentration calculations of measured samples. It may be necessary to do a blank measurement.



- Apply sample and press the sample button to initiate the sample measurement. If auto sample is active the sample measurement is automatically started after closing the lid arm.

Note: Auto sample function is only available NanoVolume methods and new NanoPhotometer® versions it may not be available after updating an older firmware version.



Note: Once the sample measurement is initiated it is no longer possible to change the standard curve.


Measurement Protocol Multi Sample

The Protein Assay multi-channel method is an auto ranging method. There is no need to set any Dilution/Pathlength.

- Select protein assays icon from home screen.
- To change between single and multi-sample application use the toggle switch Single Sample in the parameter area.



- To change the assay type push on Bradford and a list with available options opens on the right side. Options are: BCA Assay, Bradford Assay, Lowry Assay and Custom (multichannel mode only)

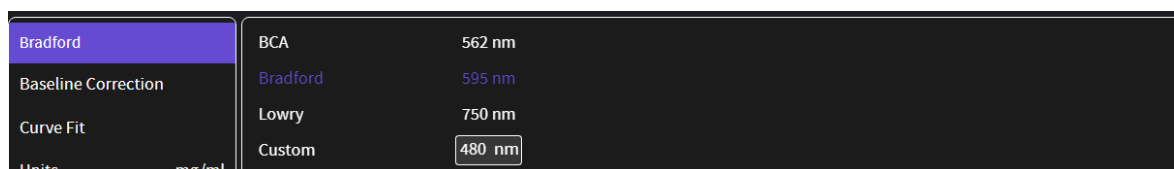

- Default values for the baseline correction are depending on selected protein assay type and instrument version:
 BCA default value 750 nm
 Bradford default value 750 nm
 Lowry default value 405 nm



Bradford	Baseline Correction <input checked="" type="checkbox"/>
Baseline Correction	Baseline Correction at 377 nm
Curve Fit	Baseline Correction at 604 nm
Units mg/ml	Baseline Correction at 650 nm
Concentration	Baseline Correction at 770 nm
Replicates None	Baseline Correction at 823 nm
Sample Loading	Baseline Correction at <input type="text" value="750 nm"/>

Note: It is recommended to use the default baseline for each assay.

5. Select curve fit type: Options are linear regression, zero regression (forces the straight line through the origin) and 2nd order regression

Bradford	Regression Linear
Baseline Correction	Zero Regression Linear
CurveFit	Regression 2nd Order

6. Select Unit

Bradford	mg/ml	U/l
Baseline Correction	µg/ml	%
Curve Fit	µg/µl	ppm
Units mg/ml	µg/l	conc.
Concentration	pmol/µl	ng/µl
Replicates None	mmol/l	
Sample Loading	µmol/l	
Single Sample <input type="checkbox"/>	g/l	
	mg/l	

7. Add up to 20 Concentrations by pressing the Add Concentration button. Added concentrations can be deleted with ⊗
Enter the concentrations of the standards for the standard curve.

Bradford	Add Concentration <input type="button" value="+"/> Conc. 1 <input type="text" value="0"/> Conc. 2 <input type="text" value="0"/>
Baseline Correction	⊗ Conc. 3 <input type="text" value="0"/>
Curve Fit	
Units mg/ml	
Concentration	



8. Select Replicates none, 2 or 3

Bradford	None
Baseline Correction	2
Curve Fit	3
Units	mg/ml
Concentration	
Replicates	None

9. Select sample loading orientation.

Bradford	horizontally	(up to 12 samples e.g. A01 – A12)
Baseline Correction	vertically	(up to 8 samples e.g. A01 – H01)
Curve Fit		
Units	mg/ml	
Concentration		
Replicates	None	
Sample Loading		

10. To confirm the parameter setting, swipe the screen to the left and the standard map screen is shown. The standard map is created automatically depending on the parameter settings (sample orientation, concentration and replicates). It is not possible to change the Sample IDs for standards.
 e.g. horizontally 5 standards and 2 replicates defined:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SA	BLK01	BLK02	BLK03	BLK04	BLK05	BLK06	BLK07	BLK08	BLK09	BLK10	BLK11	BLK12
SB	STD01-1	STD02-1	STD03-1	STD04-1	STD05-1							
SC	STD01-2	STD02-2	STD03-2	STD04-2	STD05-2							
SD												
	Position	Sample ID	Content	Conc.	Units	Abs.	Dilution					

e.g. vertically 6 standards and 3 replicates defined:



	1	2	3	4	Position	Sample ID	Content	Conc.	Units	Abs.	Dilution
SA	BLK01	STD01-1	STD01-2	STD01-3							
SB	BLK02	STD02-1	STD02-2	STD02-3							
SC	BLK03	STD03-1	STD03-2	STD03-3							
SD	BLK04	STD04-1	STD04-2	STD04-3							
SE	BLK05	STD05-1	STD05-2	STD05-3							
SF	BLK06	STD06-1	STD06-2	STD06-3							
SG	BLK07										
SH	BLK08										


Note: It is necessary to measure all defined blanks (horizontally 12 and vertically 8) as they might be needed for sample measurements.

- Measure blanks and standards as defined by initiating the blank button for blank measurements and sample button for the standard measurements. Results will be shown in the table of the standard map. Once all standards are measured the screen changes automatically to the standard curve screen.
- In the graph screen the standard curve is shown and if replicates are defined the results and mean calculation of each standard. It is possible to exclude single standard measurements with the toggle switches and standard curve is recalculated.

Note: After the first sample measurement the standard curve can no longer be altered.



- After the standard curve is finished, swipe the screen to the left and the sample map screen is shown.

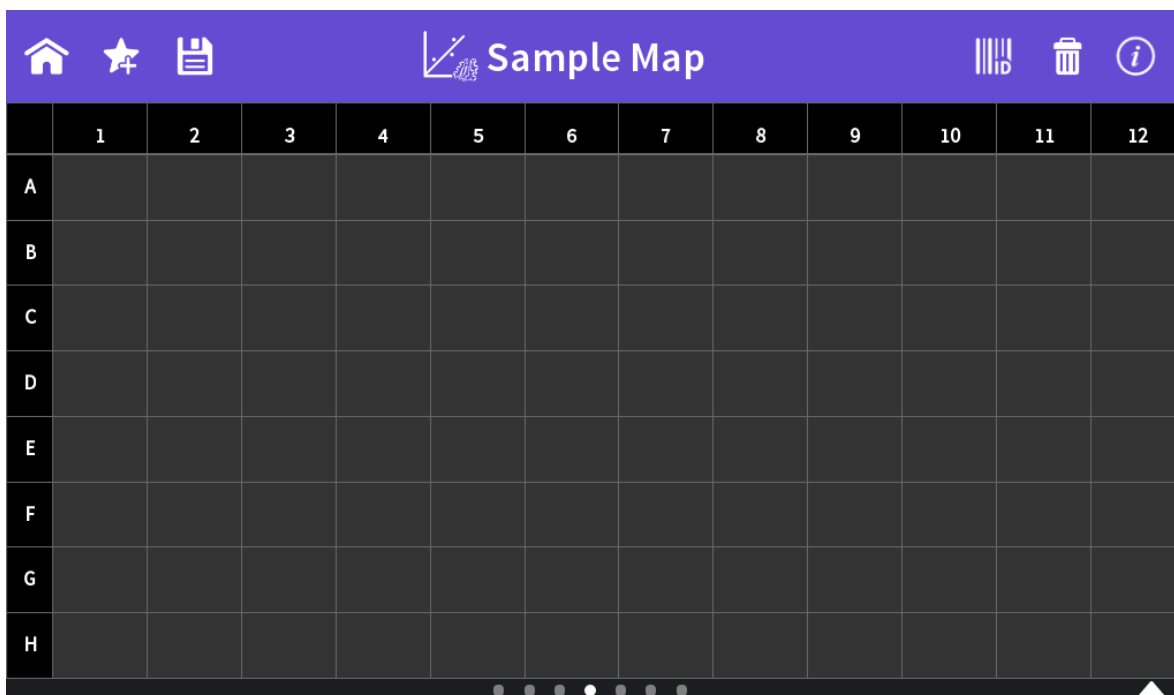

The sample map offers the possibility to select cells and define sample IDs for measurements. It is not necessary to make a selection. If cells are left empty without defined sample IDs for horizontal and vertical sample loading, all 12 positions for horizontal loading and all 8 positions for vertical loading are measured.

To measure a defined amount of samples select a cell pattern starting at A01. Sample IDs can be defined by pressing the sample ID icon (≡) in the navigation bar. The opened pop up offers options to define, import, export or delete sample IDs.



Further information about cell selection and sample ID definition can be found in chapter 3 NanoPhotometer® Basics / Sample Map on page 37

- 13. Depending on measuring or loading a standard curve a blank reading is required. To initiate a blank apply the blank and push the blank button.




- 14. Apply sample and press the sample button to initiate the sample measurement. If auto sample is active the sample measurement is automatically started after closing the lid arm.




Note: Auto sample function is only available NanoVolume methods and new NanoPhotometer® versions it may not be available after updating an older firmware version.

Note: Once the sample measurement is initiated it is no longer possible to change the standard curve.

Saving and Loading Standard Curves

It is possible to save measured standard curves as a Stored Method. To save the standard curve push the store method button  and enter a method name, select a folder and save with the Store button. Methods can be opened in the Stored Methods menu on the homescreen. Opening a saved Protein Assay method shows a message with the option to load or remeasure the standard curve.

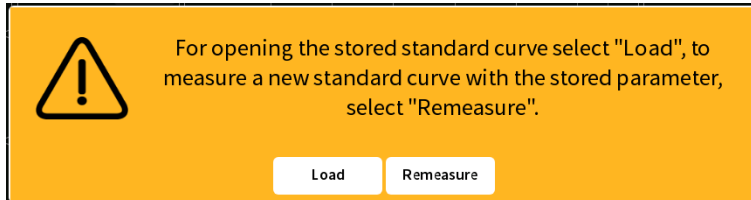

Calculations

Protein concentration is determined using the standard curve by correlating absorbance values of samples with known concentration to calculate the concentration of the unknown sample. In order to maintain accuracy and precision please ensure that the R^2 value of the standard curve is 0.95 or greater.



Kinetics



Method Overview

The Kinetics application is useful for: measuring initial rates of enzyme-catalyzed reactions, performing progress-curve analysis for complete reactions, calculating basic Michaelis-Menten parameters for single-substrate reactions, and measuring enzyme inhibition. Simple kinetics studies, where the change in absorbance is followed as a function of time at a fixed wavelength, can be readily performed with the NanoPhotometer®. The rate of a chemical reaction can be measured using spectrophotometric methods by studying the change in absorbance at a fixed wavelength as a function of time. These changes in absorbance reflect corresponding changes in the concentration of reactants or products as the reaction progresses. The rate of many chemical reactions can be markedly accelerated by the presence of catalysts, which remain chemically intact during the reaction. Catalysts in the case of biochemical reactions are generally represented by enzymes, which are specialized protein catalysts. However, a few examples of special reactions catalyzed by RNA molecules also exist. Studying the kinetics of a reaction can reveal important details of the catalytic mechanism involved in terms of sequence steps, transition state of reactants or nature of enzyme inhibitors.

Measurement Protocol

Note: If a kinetic is started from a control device via Wi-Fi® connection (tablet or smartphone) set the auto lock of the tablet or smartphone to never. Otherwise the kinetics will be interrupted when the smartphone or tablet is locked, because of losing the Wi-Fi® connection.

1. Select the Kinetics icon on the home screen
2. To change between NanoVolume and cuvette application, use the Change to Cuvette/NanoVolume button below the parameter area (NP80/C40 only).
3. **For Cuvette Application:**
Select the path length depending on the used cuvette.
Options are: 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm and 10 mm

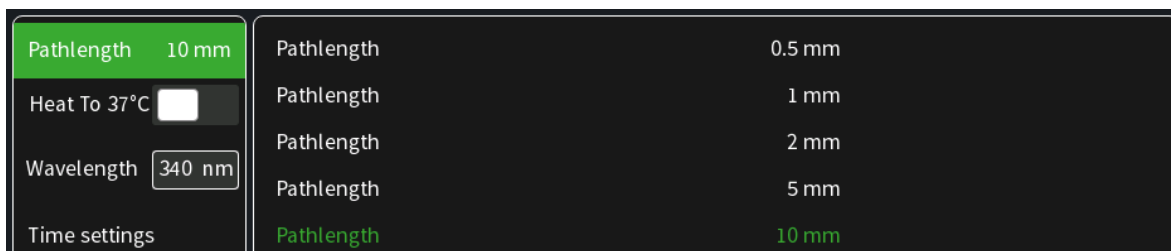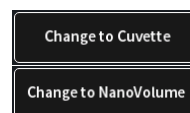

If it is desired to heat the sample to 37°C use the toggle switch to turn on cell holder heater. When the cuvette holder has reached 37°C the toggle color changes to green.

Note: Only available for cuvette applications (NP80 and C40).

For NanoVolume Application:

Select the dilution depending on the sample concentration.



Dilution	15	Dilution 15 / 0.67 mm path	1 - 2 µl sample volume
Wavelength	340 nm	Dilution 140 / 0.07 mm path	0.3 - 2 µl sample volume

Note: There is no automatic path length setting available in this method. Select either a virtual dilution of 15 (path length 0.67 mm) or of 140 (path length 0.07 mm).

For NanoVolume application with submicroliter cell (C40 only):

Select Lid depending on your sample concentration (for concentration ranges of different lids see page 53 Submicroliter Cell Measurements Basics). Required sample volume for each lid is listed to the right.

Lid	50	Lid 5	3.5 µl - 5 µl sample volume
Wavelength	340 nm	Lid 10	1 µl - 3 µl sample volume
Time settings		Lid 50	0.3 µl - 2 µl sample volume
		Lid 100	0.3 µl - 2 µl sample volume
		Lid 250	0.3 µl - 2 µl sample volume

Note: A new Blank is recommended when changing the dilution lid.

- Default wavelength (λ) is 340 nm but can be changed in the range of 200–900 nm (N50: 200–650 nm), depending on the application.

- Time settings:
 - Enter the duration time in minutes over which measurements are to be taken. Possible range is 1–3000 minutes.
 - Enter the interval time between measurements in seconds. Possible interval times are 5-3,600 seconds (N50: 10–3,600 sec.), depending on the duration time.
 - Enter the delay time in seconds before the first measurement is taken. Possible delay time is between 0–3,600 seconds, depending on the duration time.

Dilution	15	Duration (min)	10
Wavelength	340 nm	Interval (sec)	10
Time settings		Delay Time (sec)	0

Note: A maximum of 500 samples is possible. Please consider this when choosing the duration and interval time.

- Insert cuvette with the reference sample and select blank button to initiate the measurement.

- Insert cuvette with the sample and select the sample button to initiate the measurements. Once the kinetic is started the Blank button turns to a Pause/Continue button and the Sample button to a Stop button.

Note: While the kinetics measurement is running it is not possible to change the parameters or save data. Change of parameters is only possible before starting the kinetic readings. Save data is only available after the kinetic session is stopped.

Note: Auto print and cryo label print is not available in Kinetics.

Calculations

All absorbance values are normalized to a 10 mm path.

- A_0 = absorbance of start value (10 mm path)
 A_n = absorbance of actual value time n (10 mm path)
 dA = absorbance of actual value – absorbance of start value
Slope = linear regression fit of all actual measurement points
Final A = absorbance of final value
 R^2 = $R^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$ [O_i = observed slope value; E_i = expected slope value]



OD600

Method Overview

The growth of bacteria in liquid culture media is commonly monitored by measuring the optical density at 600 nm (OD600) in small samples taken from the cultures. OD600 measurements are typically used to determine the stage of growth of the bacterial culture, thereby ensuring that cells are harvested at an optimum point that corresponds to an appropriate density of live cells. Growth of bacterial cells typically progresses through a series of consecutive phases including: lag, log, stationary and decline (see Figure 1 on page 97). In general, cells should be harvested towards the end of the log phase using the optical density of the samples to determine when this point has been reached. Since optical density in the case of OD600 measurements results from light scattering rather than light absorption, this value varies depending on the type of bacterial cells in the culture in terms of size and shape. Cells are routinely grown until the absorbance at 600 nm (known as OD 600) reaches approximately 0.4 prior to induction or harvesting. A linear relationship exists between cell number (density) and OD 600 up to an absorbance value of 0.6, approximately.

As mentioned above, for turbid samples such as cell cultures, the absorbance measured is due to light scattering, and not the result of molecular absorption. Since the extent of scattering is affected by the optics of the system (distance between the cell holder and instrument exit slit, monochromator optics, slit geometry, etc.), different spectrophotometer types will tend to give different OD 600 readings for the same turbid sample. Therefore, if results from different spectrophotometers are to be compared, they must be normalized first using appropriate calibration curves. For more information see Technical Note #8 OD 600 which can be downloaded on the Implen webpage: www.implen.de/scientific-publications/

A calibration curve can be constructed by comparing measured OD 600 to expected OD 600. Expected OD 600 is determined by counting cell number using an alternative technique (for example microscope slide method) and converting to OD 600 using the rule of thumb that $1 \text{ OD } 600 = 5 \times 10^8 \text{ cells/ml}$ for *E. coli*.

The NanoPhotometer® comes with a correction factor of 1 as standard. To compare OD 600 values between different spectrophotometers, it is necessary to determine the constant deviation or ratio between the absorbance values for the same sample from each instrument and use this factor within the setting “correction factor” of your NanoPhotometer® Software.

Note: The use of 10 mm path length disposable cuvettes is recommended for optical density measurements of cell culture solutions. The amount of cells is reflected in the reading and the likelihood of fluctuating amount of cells in a drop from sample to sample can be considered as extremely significant. It is therefore recommended to use cuvettes since the amount of error in a bigger volume is not as significant. The cuvette measurements provide a bigger average and therefore more reproducible readings. Also, to prevent the suspension settling too quickly and giving an OD reading that changes with time, glycerol should be added to the sample.

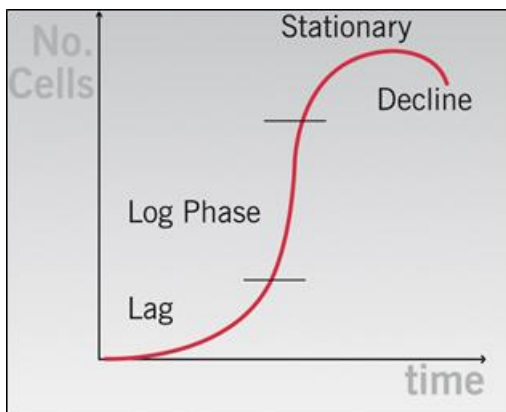



Figure 1 Bacterial growth curve

Measurement Protocol

1. Select the OD600 icon on the home screen



2. To change between NanoVolume and cuvette application, use the Change to Cuvette/Cuvette/NanoVolume button below the parameter area (NP80/C40 only).

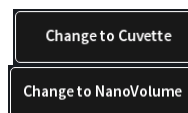

3. For **Cuvette Application**:
 Select the path length depending on the used cuvette.
 Options are: 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm and 10 mm

Pathlength	10 mm	Pathlength	0.5 mm
Heat To 37°C	<input type="checkbox"/>	Pathlength	1 mm
Wavelength	600 nm	Pathlength	2 mm
cells/ml	Off	Pathlength	5 mm
		Pathlength	10 mm

If it is desired to heat the sample to 37°C use the toggle switch to turn on cell holder heater. When the cuvette holder has reached 37°C the toggle color changes to green.

Note: Only available for cuvette applications (NP80 and C40).

For **NanoVolume Application**:
 Select the dilution depending on the sample concentration

Dilution	15	Dilution 15 / 0.67 mm path	1 - 2 µl sample volume
Wavelength	600 nm	Dilution 140 / 0.07 mm path	0.3 - 2 µl sample volume

Note: There is no automatic path length setting in this method. Select either a virtual dilution of 15 (path length 0.67 mm) or of 140 (path length 0.07 mm)

For **NanoVolume application with submicroliter cell (C40 only)**:
 Select Lid depending on your sample concentration (for concentration ranges of different lids see page 53 Submicroliter Cell Measurements Basics).
 Required sample volume for each lid is shown.



Lid	50	Lid 5	3.5 µl - 5 µl sample volume
Wavelength	600 nm	Lid 10	1 µl - 3 µl sample volume
cells/ml	Off	Lid 50	0.3 µl - 2 µl sample volume
Correction		Lid 100	0.3 µl - 2 µl sample volume
		Lid 250	0.3 µl - 2 µl sample volume

Note: A new Blank is recommended when changing the dilution lid.

- Default wavelength is 600 nm but the wavelength can be changed in the range of 200–900 nm (N50: 200–650 nm), depending on the application. Wavelength 600 nm
- Toggle switch cells/ml is disabled by default. Enable cells/ml to get the cells/ml calculated. Enter the cell specific factor and multiplier (e.g. 1 OD600 = 5 x 10⁸ cells/ml)

Pathlength	10 mm	cells/ml	<input checked="" type="checkbox"/>
Heat To 37°C	<input type="checkbox"/>	Factor	5
Wavelength	600 nm	Multiplier	1,000
cells/ml	On		1,000,000
Correction			100,000,000


- Enter the correction factor to compensate for different optical configurations between the NanoPhotometer® and other instruments.

Pathlength	10 mm	Correction Factor	1
Heat To 37°C	<input type="checkbox"/>		
Wavelength	600 nm		
cells/ml	On		
Correction			

- Option to smooth the graph with different boxcars. Options: Off, 1 = boxcar 11 (default), 2 = boxcar 21 and 3 = boxcar 61

Pathlength	10 mm	Smoothing	<input checked="" type="checkbox"/>
Heat To 37°C	<input type="checkbox"/>	Smoothing 1	
Wavelength	600 nm	Smoothing 2	
cells/ml	On	Smoothing 3	
Correction			
Smoothing			

- Option to set/calculate a dilution factor for manual diluted samples.

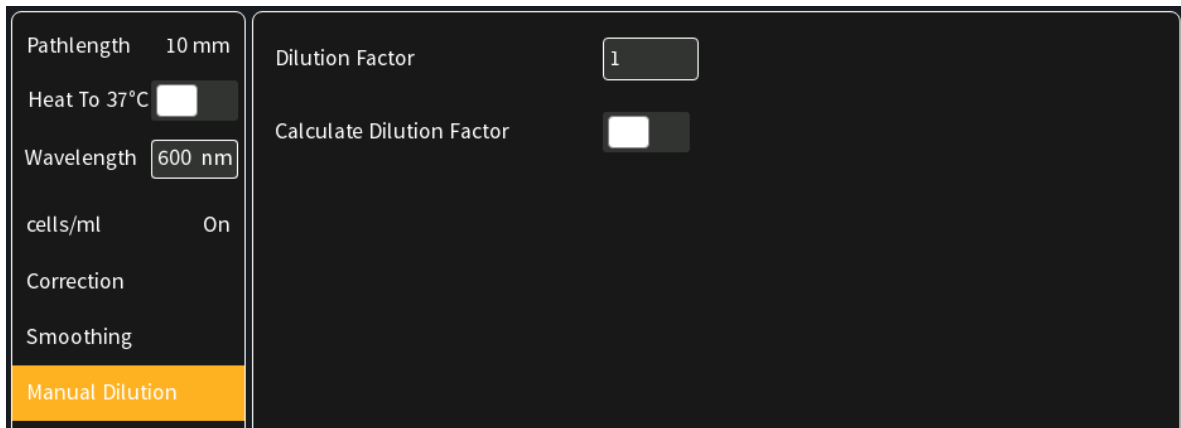

9. Insert cuvette with the reference sample and select blank button to initiate the measurement
10. Insert cuvette with the sample and select the sample button to initiate the measurement.



Calculations

$$OD_{600} = A_{600} * D * cf$$

- OD600 Optical density at 600 nm
- A₆₀₀ Absorbance at 600 nm (10 mm path)
- D Dilution factor
- cf Correction factor for spectrophotometer

$$Cells/ml = A_{600} * D * cf * multiplier$$

- A₆₀₀ Absorbance at 600 nm (10 mm path)
- D Dilution factor
- cf Correction factor for spectrophotometer
- multiplier Multiplier of sample



More Apps

The More Apps icon located on the home screen opens another menu screen with access to icons for additional applications available on the NanoPhotometer®. The applications featured in this menu include: wavelength, concentration, wavescan, absorbance/ratio, standard curve and custom applications.




More Apps: Wavelength


Method Overview

In the wavelength application it is possible to measure simple absorbance (A) and % transmittance (%Trans. / only in cuvette mode) of a sample at specific wavelengths. It is possible to add up to 20 different wavelengths.

The wavelength method includes a calculation tool to define and calculate customer defined formulas.

Measurement Protocol Single Sample

1. Select the More Apps icon  from the home screen and the Wavelength icon from the More Apps screen.
2. To change between NanoVolume and Cuvette application, use the Change to Cuvette/NanoVolume button below the parameter area (NP80/C40 only).
3. **For NanoVolume application:**
Select the dilution depending on the sample concentration.

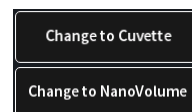

Dilution	15	Dilution 15 / 0.67 mm path	1 - 2 µl sample volume
Wavelength		Dilution 140 / 0.07 mm path	0.3 - 2 µl sample volume

Note: There is no automatic path length setting in this method. Select either a virtual dilution of 15 (path length 0.67 mm) or of 140 (path length 0.07 mm).

For cuvette application:

Select the path length depending on the used cuvette. Options are: 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm and 10 mm

Absorbance		Pathlength	0.5 mm
Pathlength	10 mm	Pathlength	1 mm
Heat To 37°C	<input type="checkbox"/>	Pathlength	2 mm
Wavelength		Pathlength	5 mm
		Pathlength	10 mm

If it is desired to heat the sample to 37°C use the toggle switch to turn on cell holder heater. When the cuvette holder has reached 37°C the toggle color changes to green.

Note: Only available for cuvette applications (NP80 and C40).



For NanoVolume application with submicroliter cell (C40 only):


Select Lid depending on your sample concentration (for concentration ranges of different lids see page 53 Submicroliter Cell Measurements Basics).

Required sample volume for each lid is shown.


Lid	50	Lid 5	3.5 µl - 5 µl sample volume
Wavelength		Lid 10	1 µl - 3 µl sample volume
Baseline Correction		Lid 50	0.3 µl - 2 µl sample volume
Smoothing		Lid 100	0.3 µl - 2 µl sample volume
		Lid 250	0.3 µl - 2 µl sample volume

Note: A new Blank is recommended when changing the dilution lid.


4. Enter desired wavelength (λ) to be measured. It is possible to measure up to 20 wavelengths simultaneously. More wavelength (λ) options can be added by selecting the Add Wavelength button. Added wavelength can be deleted with \otimes

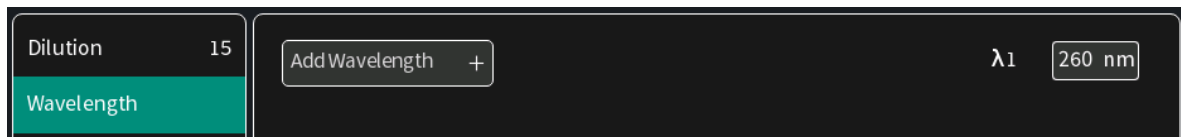


5. Baseline correction is set off by default. Enabling the baseline corrections shows a list with different wavelength options: 377 nm, 604 nm, 650 nm, 770 nm (N/A N50) and 823 nm (N/A N50). Option to enter any wavelength between 200 nm and 900 nm (N50: 650 nm).

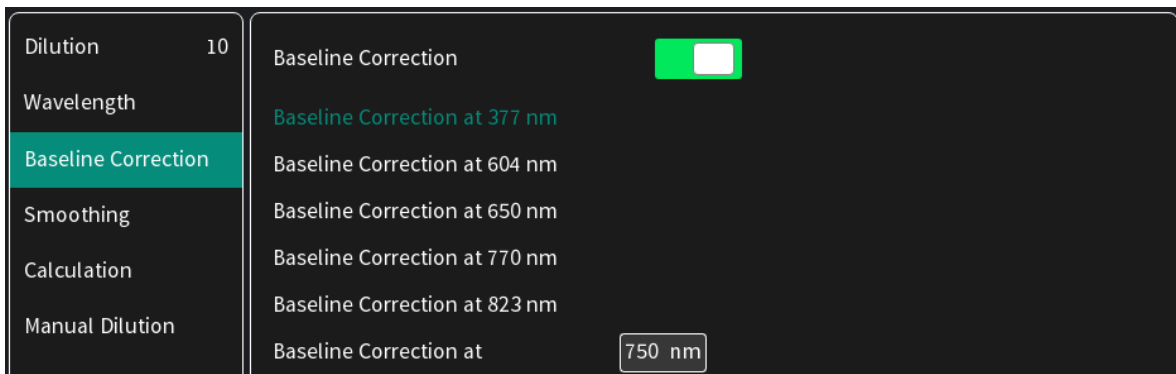

6. Option to smooth the graph with different boxcars. Options: Off, 1 = boxcar 11 (default), 2 = boxcar 21 and 3 = boxcar 61

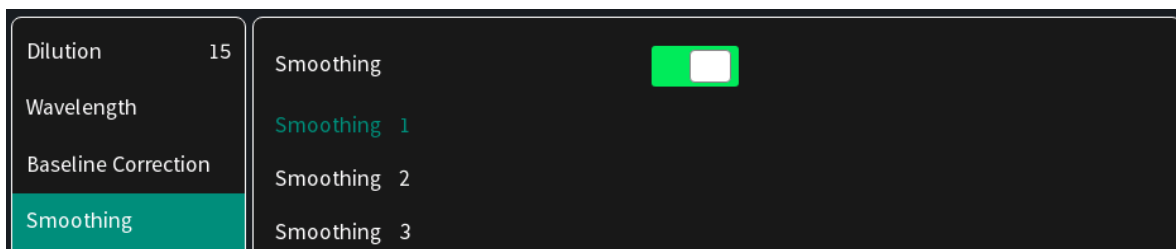

7. Option to enter formulas to calculate

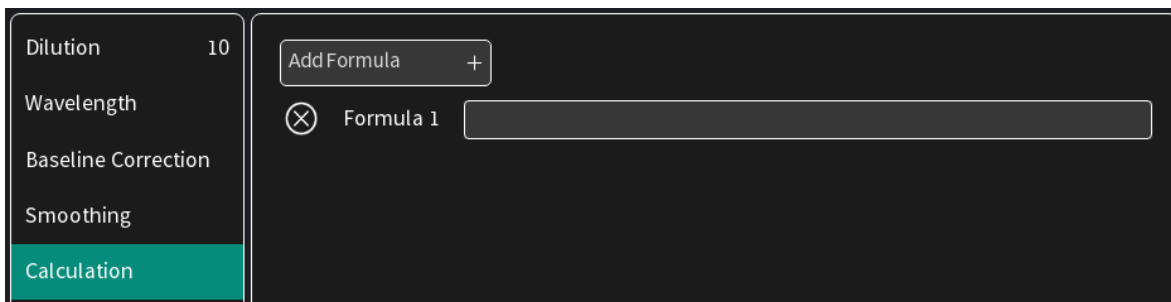

It is possible to enter up to 5 different custom formulas for result calculation.

Formula Acceptance Guidelines:


1. Numbers:
Up to 20 significant figures if no decimal separator is used
Up to 4 significant figures if a decimal separator (period ".") is used
2. Numeric Operations:
+ (add), - (subtract), * (multiply), / (divide) and parentheses ()
3. Absorbance:
Axxx e.g. for absorbance at 260 nm: A260

Note: Do not use blank character.

Example:

Nucleic Acid (dsDNA) concentration calculation with background correction at 320 nm:
(A260-A320)*50

8. Option to set/calculate a dilution factor for manual diluted samples.

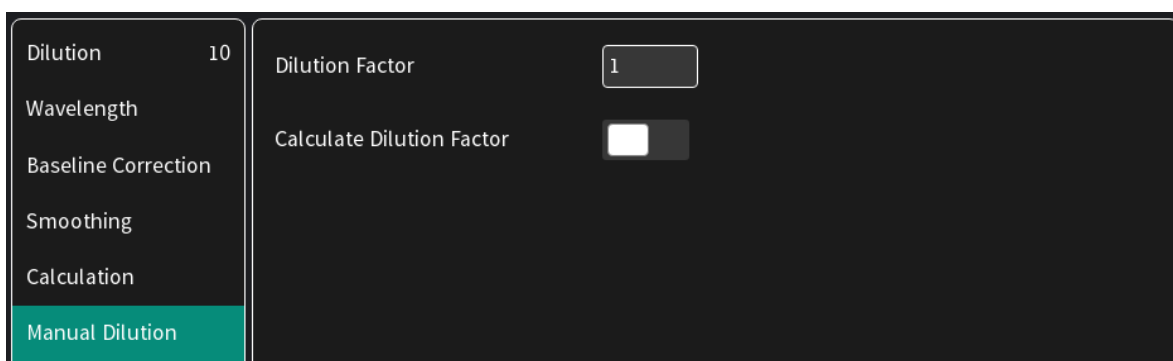


9. Apply the blank ddH₂O or buffer to the illuminated sample window on pedestal for the reference measurement and select blank to initiate the reading.



Note: The illumination of the sample window can be switched off in preferences.

10. Use a lint-free laboratory wipe to clean both the sample window on pedestal and mirror in lid arm prior to applying the next sample.

Note: It can be helpful to apply the blank a second time and read it as a sample to ensure a proper blank.

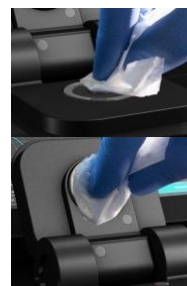

11. Apply sample to the sample window on pedestal and press the sample button to initiate the measurement.



If auto sample is active the sample measurement is automatically started after closing the lid arm.



Note: Auto sample function is only available NanoVolume methods and new NanoPhotometer® versions it may not be available after updating an older firmware version.

Measurement Protocol Multi Sample


1. Select the More Apps icon from the Home screen and the Wavelength icon from the More Apps screen




2. To change between single and multi-sample application use the toggle switch Single Sample in the parameter area.




3. Select the dilution depending on the sample concentration
Note: There is no automatic path length setting in this method. Select either a virtual dilution of 10 (path length 1 mm) or of 80 (path length 0.125 mm)

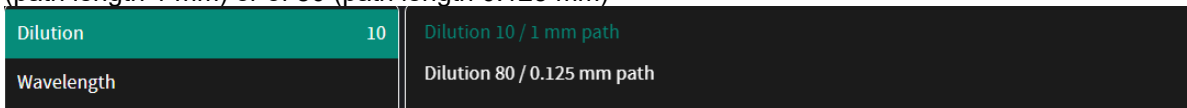


4. Enter desired wavelength (λ) to be measured. It is possible to measure up to 20 wavelengths simultaneously. More wavelength (λ) options can be added by selecting the Add Wavelength button. Added wavelength can be deleted with

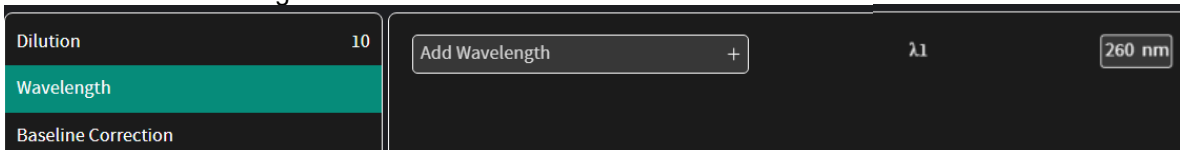


5. Baseline correction is set off by default. Enabling the baseline corrections shows a list with different wavelength options: 377 nm, 604 nm, 650 nm, 770 nm and 823 nm. Option to enter any wavelength between 200 nm and 900 nm.

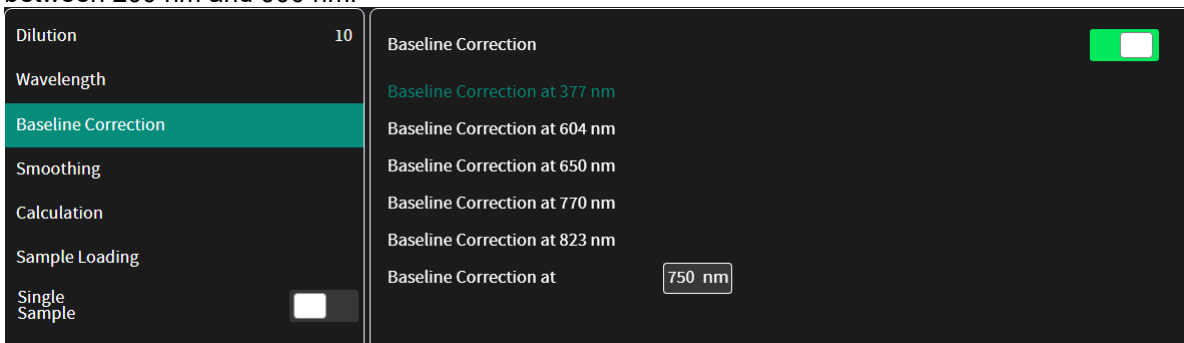

6. Option to smooth the graph with different boxcars. Options: Off, 1 = boxcar 11 (default), 2 = boxcar 21 and 3 = boxcar 61

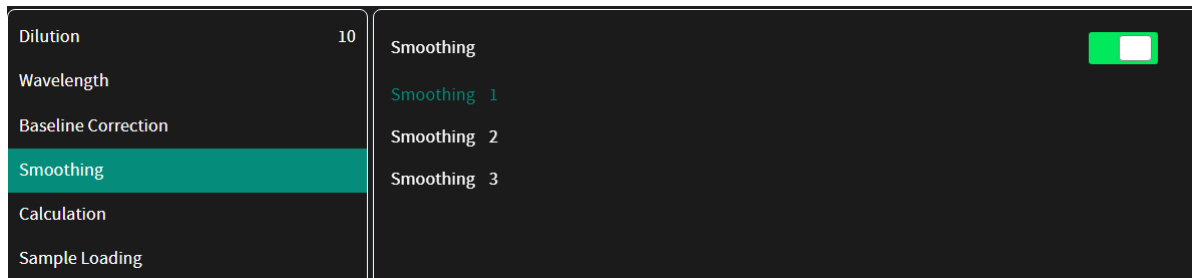

7. Select the sample loading orientation:

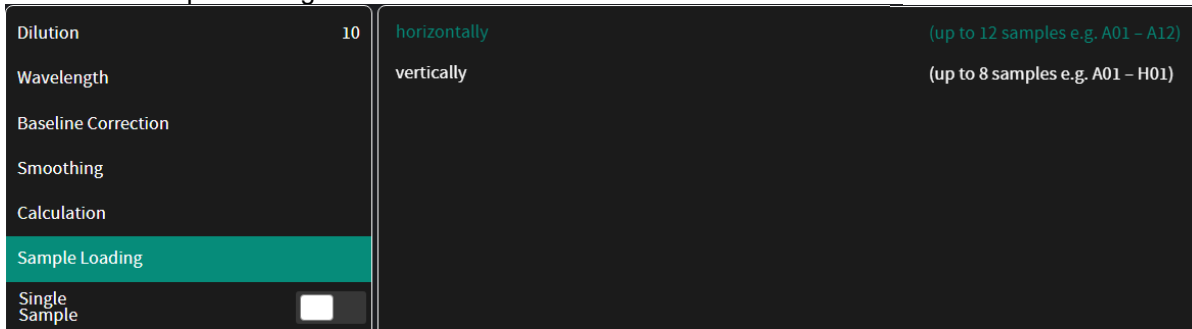

There are two options:


Horizontally: Measure up to 12 samples (A01 – A12 shown in sample map as row)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	→											
B												
C												

Vertically: Measure up to 8 samples (A01 – H01 shown in sample map as column)


	1	2	3
A	↓		
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			

8. To confirm the parameter setting, swipe the screen to the left and the sample map screen is shown.

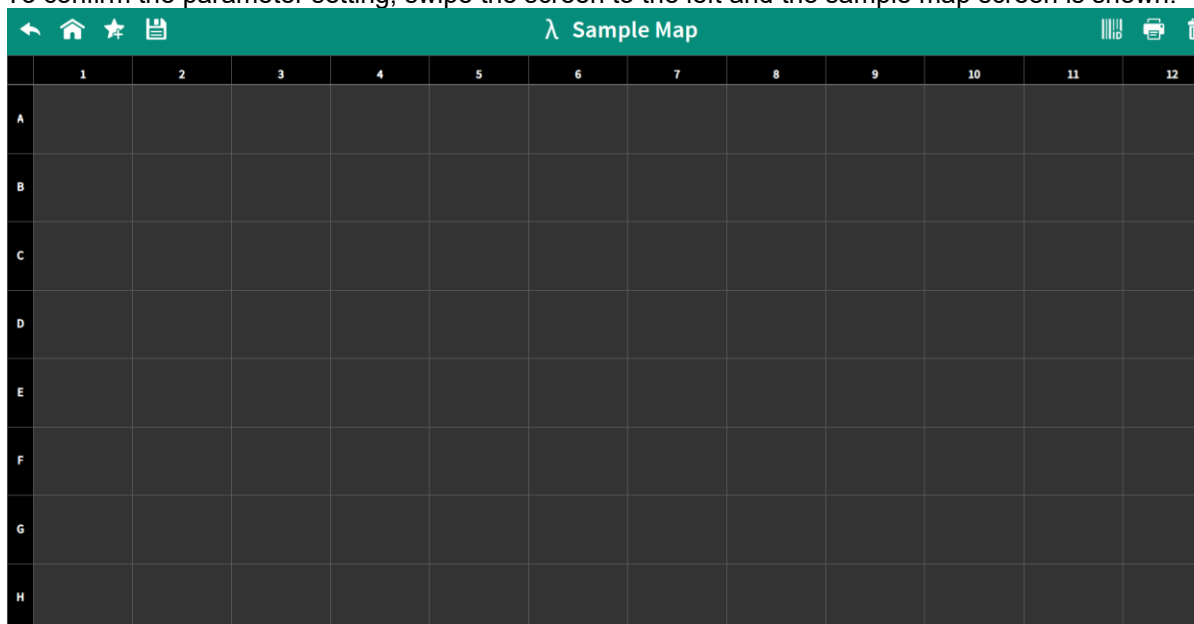

The sample map offers the possibility to select cells and define sample IDs for measurements. It is not necessary to make a selection. If cells are left empty without defined sample IDs for horizontal and vertical sample loading, all 12 positions for horizontal loading and all 8 positions for vertical loading are measured.

To measure a defined amount of samples select a cell pattern starting at A01. Sample IDs can be defined by pressing the sample ID icon (☰) in the navigation bar. The opened pop up offers options to define, import, export or delete sample IDs.

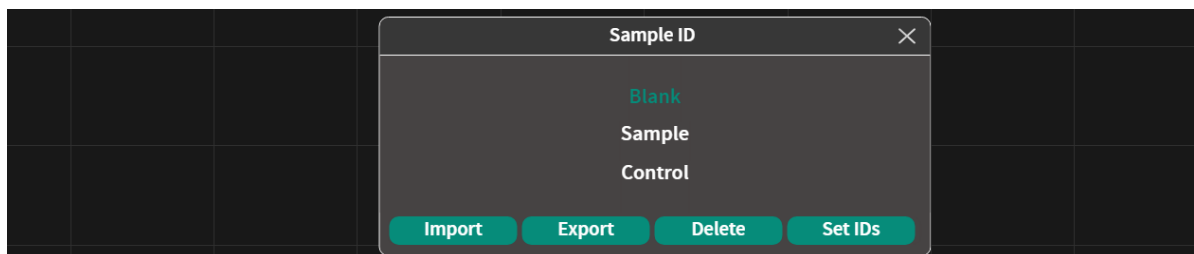

Further information about cell selection and sample ID definition can be found in chapter 3 NanoPhotometer® Basics / Sample Map on page 37.

9. Apply the blank ddH₂O or buffer to the illuminated sample windows on pedestal for the reference measurement and select blank to initiate the reading.



Note: The illumination of the sample window can be switched off in the preferences.

Note: If the blank and sample buttons are not shown please either open the lid arm, push on ▲ on the right bottom corner or swipe from the bottom edge in the screen.

10. Use a lint-free laboratory wipe to clean both the sample windows on pedestal and mirrors in lid arm prior to applying the next sample.



Note: It can be helpful to apply the blank a second time and read it as a sample to ensure a proper blank.



11. Apply samples to the illuminated sample windows on pedestal and press the sample button to initiate the measurement.
 If auto sample is active the sample measurement is automatically started after closing the lid arm.
Note: Auto sample function is only available NanoVolume methods and new NanoPhotometer® versions it may not be available after updating an older firmware version.

Calculations

- **Formula Calculation:**

Is depending on the entered formula in the parameter concentration.

- **Absorbance Calculation:**

Absorbance is formally defined as the decimal logarithm (base 10) of the reciprocal of transmittance:

$$A = \log\left(\frac{1}{T}\right) = -\log T$$

$$T = 10^{(-A)}$$

Note: Corresponding absorbance value e.g. Absorbance value ($\lambda = 230$) etc. normalized to 10 mm path length.

- **%Transmittance Calculations (cuvette mode only)**

In the wavelength application it is possible to measure the absorbance (A) and % transmittance (%T) of a sample with respect to a reference at a specific wavelength. Transmittance is the ratio of light intensity remaining after it has passed through the sample (*I*) to the initial incident light intensity (*I*₀):

$$T = \frac{I}{I_0} \qquad \%T = \frac{I}{I_0} \times 100$$

Note: %Transmittance values are only valid for cuvettes with a 10 mm path length.



More Apps: Wavescan

Method Overview


Using the wavescan application it is possible to obtain the complete spectral scan for a defined wavelength range between 200-900 nm (NP80/N60/C40) or from 200-650 nm (N50).

Measurement Protocol Single Sample

1. Select the More Apps icon from the Home screen and the Wavescan icon from the More Apps screen



2. To change between NanoVolume and Cuvette application, use the Change to Cuvette/NanoVolume button below the parameter area (NP80/C40 only).

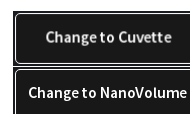

3. **For NanoVolume application:**

Select the dilution depending on the sample concentration

Note: There is no automatic path length setting in this method. Select either a virtual dilution of 15 (path length 0.67 mm) or of 140 (path length 0.07 mm)

Dilution	15	Dilution 15 / 0.67 mm path	1 - 2 µl sample volume
Wavelength Range		Dilution 140 / 0.07 mm path	0.3 - 2 µl sample volume

For cuvette application:

Select the path length depending on the used cuvette.

Options are: 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm and 10 mm

Absorbance	Pathlength	0.5 mm
Pathlength	10 mm	1 mm
Heat To 37°C <input type="checkbox"/>	Pathlength	2 mm
Wavelength Range	Pathlength	5 mm
	Pathlength	10 mm

If it is desired to heat the sample to 37°C use the toggle switch to turn on cell holder heater. When the cuvette holder has reached 37°C the toggle color changes to green.

Note: Only available for cuvette applications (NP80 and C40).

For NanoVolume application with submicroliter cell (C40 only):

Select Lid depending on your sample concentration (for concentration ranges of different lids see page 53 Submicroliter Cell Measurements Basics).

Required sample volume for each lid is shown.

Lid	50	Lid 5	3.5 µl - 5 µl sample volume
Wavelength Range		Lid 10	1 µl - 3 µl sample volume
Baseline Correction		Lid 50	0.3 µl - 2 µl sample volume
Smoothing		Lid 100	0.3 µl - 2 µl sample volume
		Lid 250	0.3 µl - 2 µl sample volume

Note: A new Blank is recommended when changing the dilution lid.

4. Set Start and End Wavelength to define the scan range.

Dilution	15	Start Wavelength (nm)	<input type="text" value="200 nm"/>
Wavelength Range		End Wavelength (nm)	<input type="text" value="900 nm"/>

Note: If samples with a different wavelength range are selected, the graphs are shown on full scan range of 200–900 nm (N50: 200-650 nm).

5. Baseline correction is set off by default. Enabling the baseline corrections shows a list with different wavelength options: 377 nm, 604 nm, 650 nm, 770 nm (N/A N50) and 823 nm (N/A N50). Option to enter any wavelength between 200 nm and 900 nm (N50: 650 nm)

Dilution	15	Baseline Correction	<input checked="" type="checkbox"/>
Wavelength Range		Baseline Correction at 377 nm	
Baseline Correction		Baseline Correction at 604 nm	
Smoothing		Baseline Correction at 650 nm	
Manual Dilution		Baseline Correction at 770 nm	
		Baseline Correction at 823 nm	
		Baseline Correction at	<input type="text" value="750 nm"/>

6. Option to smooth the graph with different boxcars. Options: Off, 1 = boxcar 11 (default), 2 = boxcar 21 and 3 = boxcar 61

Dilution	15	Smoothing	<input checked="" type="checkbox"/>
Wavelength Range		Smoothing 1	
Baseline Correction		Smoothing 2	
Smoothing		Smoothing 3	

7. Option to set/calculate a dilution factor for manual diluted samples.

Dilution	15	Dilution Factor	<input type="text" value="1"/>
Wavelength Range		Calculate Dilution Factor	<input type="checkbox"/>
Baseline Correction			
Smoothing			
Manual Dilution			

8. Apply the blank ddH₂O or buffer to the illuminated sample window on pedestal for the reference measurement and select blank to initiate the reading.



Note: The illumination of the sample window can be switched off in the preferences.



- Use a lint-free laboratory wipe to clean both the sample window on pedestal and mirror in lid arm prior to applying the next sample.

Note: It can be helpful to apply the blank a second time and read it as a sample to ensure a proper blank.




- Apply sample to the sample window on pedestal and press the sample button to initiate the measurement. If auto sample is active the sample measurement is automatically started after closing the lid arm.

Note: Auto sample function is only available NanoVolume methods and new NanoPhotometer® versions it may not be available after updating an older firmware version.



Measurement Protocol Multi Sample

- Select the More Apps icon  from the Home screen and the Wavescan icon from the More Apps screen




- To change between single and multi-sample application use the toggle switch Single Sample in the parameter area.



- Select the dilution depending on the sample concentration


Note: There is no automatic path length setting in this method. Select either a virtual dilution of 10 (path length 1 mm) or of 80 (path length 0.125 mm)

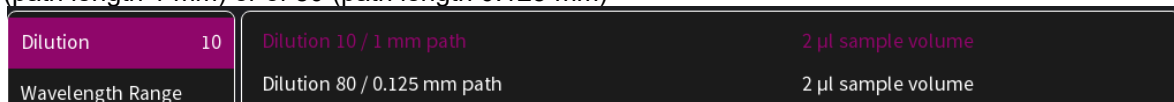


- Set Start and End Wavelength to define the scan range.




- Baseline correction is set off by default. Enabling the baseline corrections shows a list with different wavelength options: 377 nm, 604 nm, 650 nm, 770 nm and 823 nm. Option to enter any wavelength between 200 nm and 900 nm.

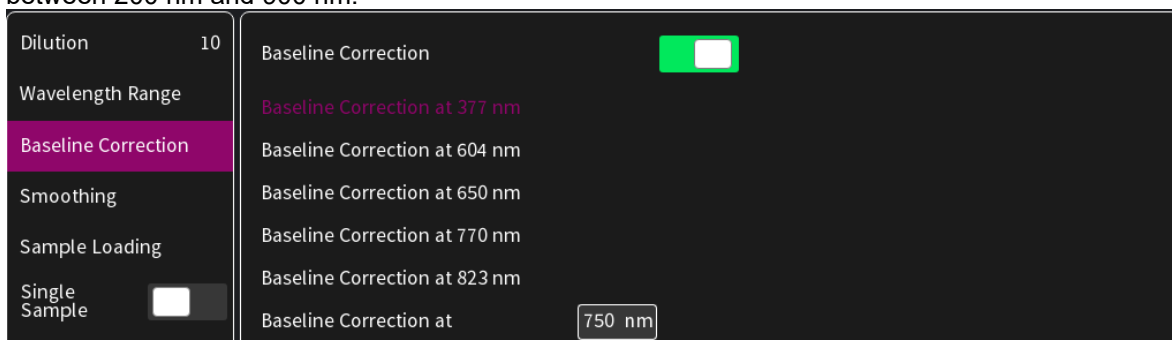

6. Option to smooth the graph with different boxcars. Options: Off, 1 = boxcar 11 (default), 2 = boxcar 21 and 3 = boxcar 61

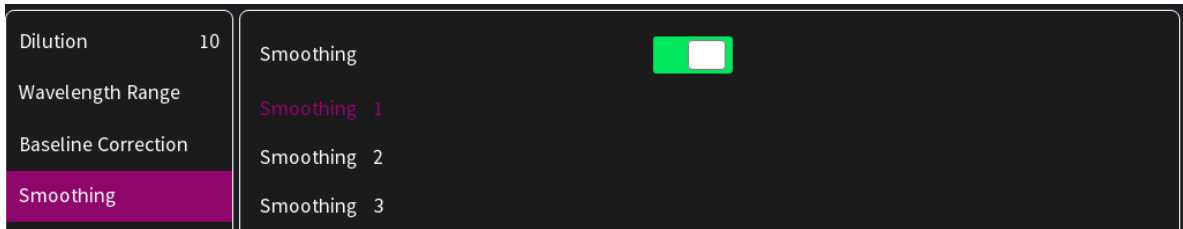

7. Select the sample loading orientation:

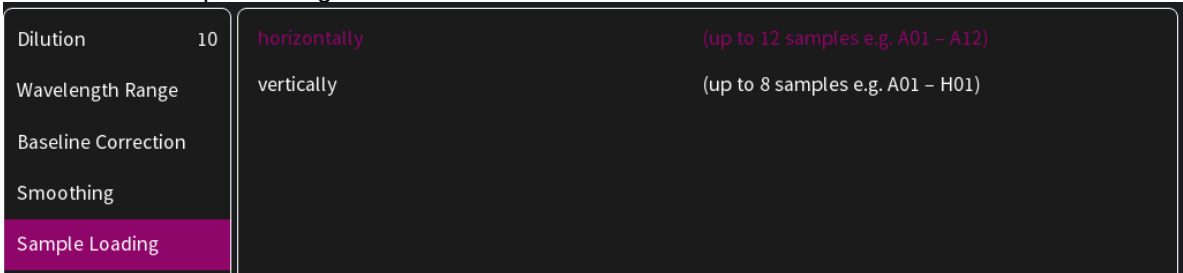

There are two options:


Horizontally: Measure up to 12 samples (A01 – A12 shown in sample map as row)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	→											
B												
C												
D												

Vertically: Measure up to 8 samples (A01 – H01 shown in sample map as column)


	1	2	3	4
A	↓			
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				

- To confirm the parameter setting, swipe the screen to the left and the sample map screen is shown.

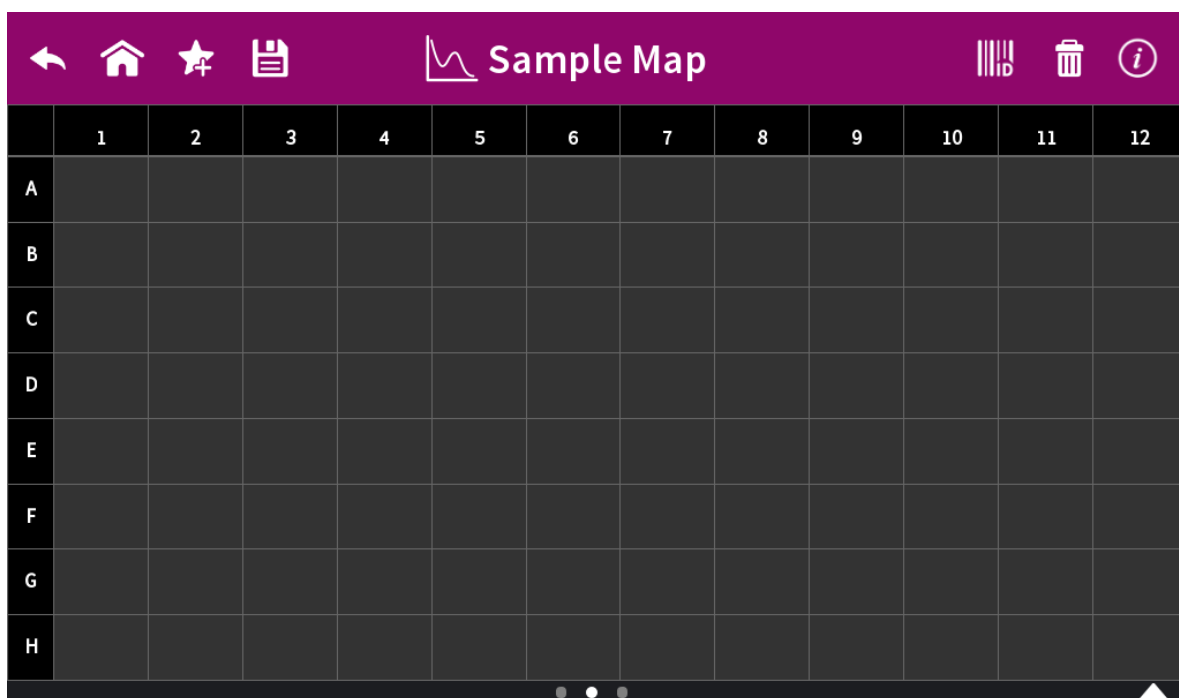

The sample map offers the possibility to select cells and define sample IDs for measurements. It is not necessary to make a selection. If cells are left empty without defined sample IDs for horizontal and vertical sample loading, all 12 positions for horizontal loading and all 8 positions for vertical loading are measured.

To measure a defined amount of samples select a cell pattern starting at A01. Sample IDs can be defined by pressing the sample ID icon (☰) in the navigation bar. The opened pop up offers options to define, import, export or delete sample IDs.

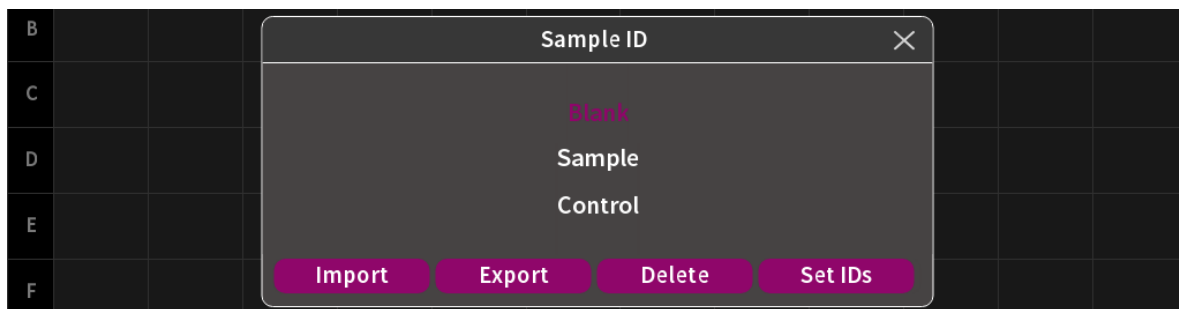

Further information about cell selection and sample ID definition can be found in chapter 3 NanoPhotometer® Basics / Sample Map on page 37.

- Apply the blank ddH₂O or buffer to the illuminated sample windows on pedestal for the reference measurement and select blank to initiate the reading.



Note: The illumination of the sample window can be switched off in the preferences.

Note: If the blank and sample buttons are not shown please either open the lid arm, push on ▲ on the right bottom corner or swipe from the bottom edge in the screen.



- 10. Use a lint-free laboratory wipe to clean both the sample windows on pedestal and mirrors in lid arm prior to applying the next sample.

Note: It can be helpful to apply the blank a second time and read it as a sample to ensure a proper blank.



- 11. Apply samples to the illuminated sample windows on pedestal and press the sample button to initiate the measurement.
If auto sample is active the sample measurement is automatically started after closing the lid arm.

Note: Auto sample function is only available NanoVolume methods and new NanoPhotometer® versions it may not be available after updating an older firmware version.



Calculations

No calculations necessary: values are reported based on 10 mm path length. The results show prominent peaks with wavelength and absorbance values. For cuvette measurements it is possible to change to the %Transmittance mode. If a peak of interest is not shown in the results the peak can be selected by tapping the graph. The peak can then be added to the results by tapping on the Add Peak button in the pop-up window.

Add peak	
Sample Name	Sample22
Wavelength	259
Absorbance	0.771



More Apps: Absorbance Ratio

Method Overview


In this mode, it is possible to determine simple absorbance ratios for a given sample by measuring the absorbance at two wavelengths specified in the parameters of the method relative to a blank.

Measurement Protocol

1. Select the More Apps icon from the home screen and the Absorbance/Ratio icon from the More Apps screen



2. To change between NanoVolume and Cuvette application, use the Change to Cuvette/NanoVolume button below the parameter area (NP80/C40 only).

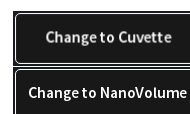

3. **For NanoVolume application:**
Select the dilution depending on the sample concentration

Dilution	15	Dilution 15 / 0.67 mm path	1 - 2 µl sample volume
Ratio		Dilution 140 / 0.07 mm path	0.3 - 2 µl sample volume

Note: There is no automatic path length setting in this method. Select either a virtual dilution of 15 (path length 0.67 mm) or of 140 (path length 0.07 mm).

For cuvette application:

Select the path length depending on the used cuvette. Options are: 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm and 10 mm

Pathlength	10 mm	Pathlength	0.5 mm
Heat To 37°C	<input type="checkbox"/>	Pathlength	1 mm
Ratio		Pathlength	2 mm
Baseline Correction		Pathlength	5 mm
		Pathlength	10 mm

If it is desired to heat the sample to 37°C use the toggle switch to turn on cell holder heater. When the cuvette holder has reached 37°C the toggle color changes to green.

Note: Only available for cuvette applications (NP80 and C40).


For NanoVolume application with submicroliter cell (C40 only):

Select Lid depending on your sample concentration (for concentration ranges of different lids see page 53 Submicroliter Cell Measurements Basics). Required sample volume for each lid is shown.


Lid	50	Lid 5	3.5 µl - 5 µl sample volume
Ratio		Lid 10	1 µl - 3 µl sample volume
Baseline Correction		Lid 50	0.3 µl - 2 µl sample volume
Smoothing		Lid 100	0.3 µl - 2 µl sample volume
		Lid 250	0.3 µl - 2 µl sample volume

Note: A new Blank is recommended when changing the dilution lid.


4. Enter desired wavelengths (λ 1-1 and λ 1-2) for ratio calculation. It is possible to measure up to 20 absorbance/ratios simultaneously. More wavelengths for ratio calculation can be added by selecting the Add Ratio button. Added ratios can be deleted with ⊗.

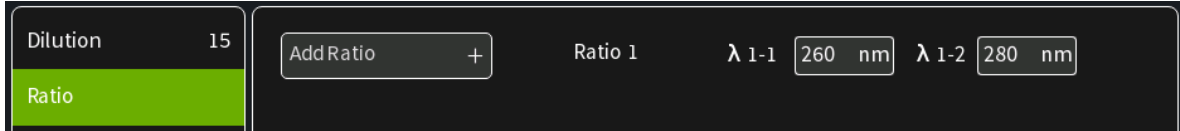


5. Baseline correction is set off by default. Enabling the baseline corrections shows a list with different wavelength options: 377 nm, 604 nm, 650 nm, 770 nm (N/A N50) and 823 nm (N/A N50). Option to enter any wavelength between 200 nm and 900 nm (N50: 650 nm)

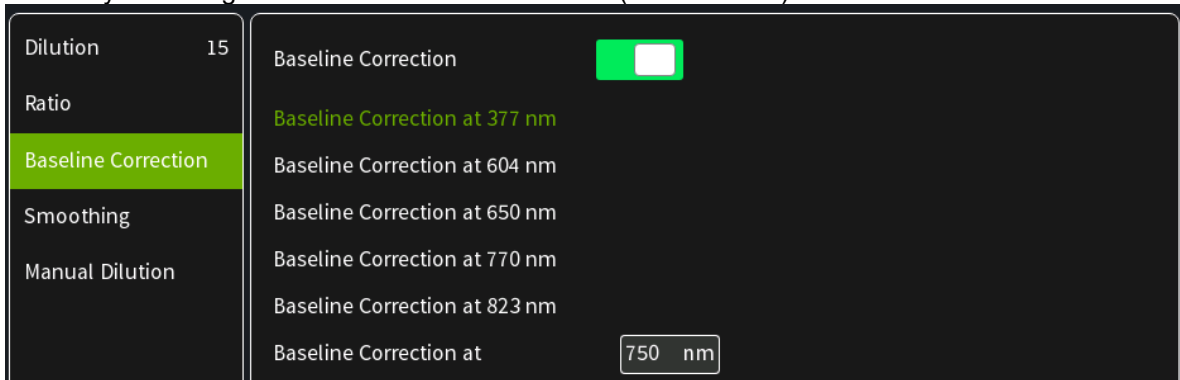

6. Option to smooth the graph with different boxcars. Options: Off, 1 = boxcar 11 (default), 2 = boxcar 21 and 3 = boxcar 61

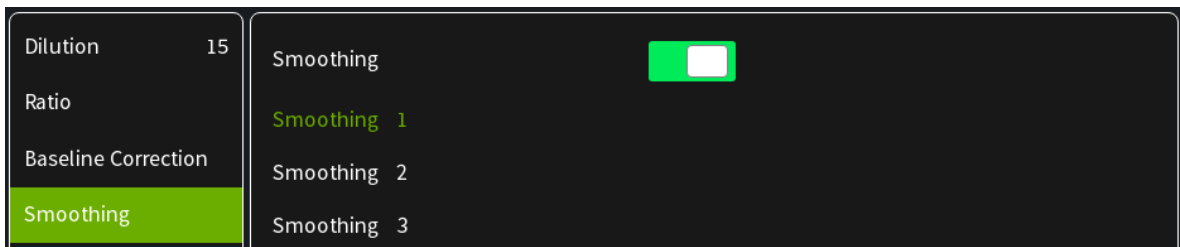

7. Option to set/calculate a dilution factor for manual diluted samples.

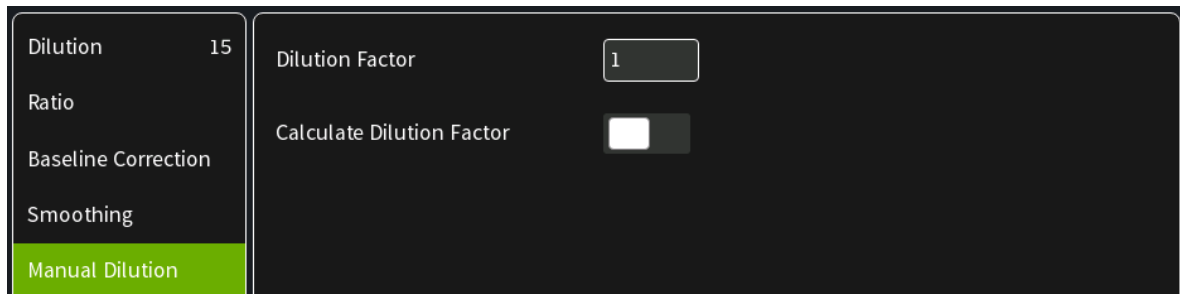


8. Apply the blank ddH₂O or buffer to the illuminated sample window on pedestal for the reference measurement and select blank to initiate the reading.



Note: The illumination of the sample window can be switched off in the preferences.


9. Use a lint-free laboratory wipe to clean both the sample window on pedestal and mirror in lid arm prior to applying the next sample.

Note: It can be helpful to apply the blank a second time and read it as a sample to ensure a proper blank.

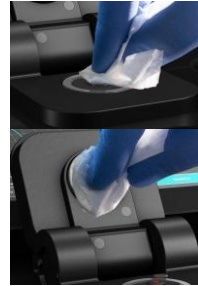

10. Apply sample to the sample window on pedestal and press the sample button to initiate the measurement.

Note: Auto sample function is only available NanoVolume methods and new NanoPhotometer® versions it may not be available after updating an older firmware version.

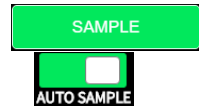

Calculations

The absorbance ratio is calculated from the two path lengths specified by the user in the parameters.

$$\lambda_1:\lambda_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

$\lambda_1:\lambda_2 =$ Absorbance Ratio

$\lambda_1 =$ Absorbance 1 corresponding absorbance value 1 selected normalized to 10 mm path

$\lambda_2 =$ Absorbance 2 corresponding absorbance value 2 selected normalized to 10 mm path




More Apps: Concentration

Method Overview


In this mode, concentration can be calculated for a sample by determining the absorbance at a specific wavelength relative to a reference. The concentration is then obtained by multiplying the measured absorbance by a specific factor. This factor may be known in advance and entered by the user, or it may be calculated by the instrument by measuring a set of standard (standard curve method) with known concentrations to create a standard curve.

Measurement Protocol


1. Select the More Apps icon  from the home screen and the Concentration icon from the More Apps screen.



2. To change between NanoVolume and Cuvette application, use the Change to Cuvette/NanoVolume button below the parameter area (NP80/C40 only).

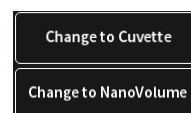


3. **For NanoVolume application:**
Select the dilution depending on the sample concentration.

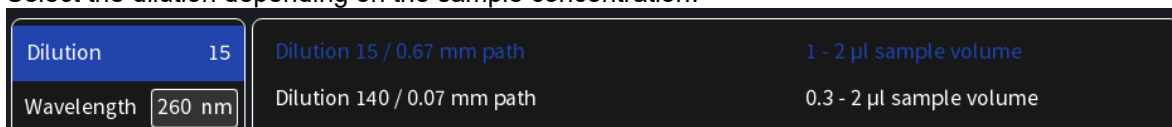

Note: There is no automatic path length setting in this method. Select either a virtual dilution of 15 (path length 0.67 mm) or of 140 (path length 0.07 mm).

For cuvette application:
Select the path length depending on the used cuvette.
Options are: 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 5 mm and 10 mm

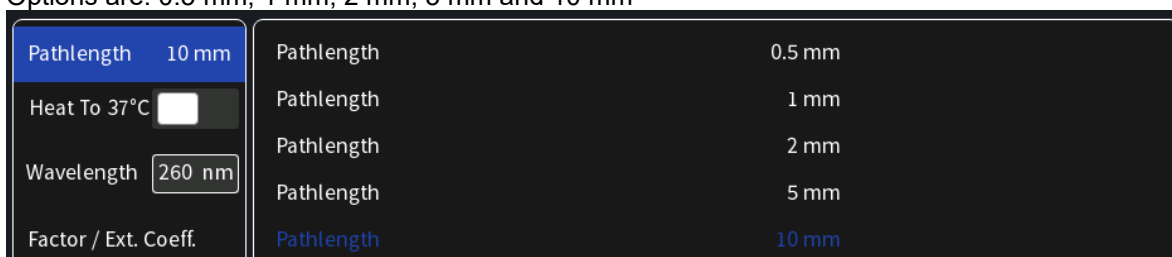

If it is desired to heat the sample to 37°C use the toggle switch to turn on cell holder heater. When the cuvette holder has reached 37°C the toggle color changes to green.

Note: Only available for cuvette applications (NP80 and C40).

For NanoVolume application with submicroliter cell (C40 only):

Select Lid depending on your sample concentration (for concentration ranges of different lids see page 53 Submicroliter Cell Measurements Basics). Required sample volume for each lid is shown.



Lid	50	Lid 5	3.5 µl - 5 µl sample volume
Wavelength	260 nm	Lid 10	1 µl - 3 µl sample volume
Factor / Ext. Coeff.		Lid 50	0.3 µl - 2 µl sample volume
Units	mg/ml	Lid 100	0.3 µl - 2 µl sample volume
		Lid 250	0.3 µl - 2 µl sample volume

Note: A new Blank is recommended when changing the dilution lid.

- Default wavelength is 260 nm but can be changed in the range of 200-900 nm (N50: 200–650 nm), depending on the sample/application.

Wavelength


- Enter a factor for concentration calculation.

Dilution	15	Factor (1/ε)	<input type="text" value="50"/>
Wavelength	<input type="text" value="260 nm"/>		
Factor / Ext. Coeff.			


- Unit selection

Dilution	15	mg/ml	mg/l
Wavelength	<input type="text" value="260 nm"/>	µg/ml	U/l
Factor / Ext. Coeff.		µg/µl	%
Units	mg/ml	µg/l	ppm
Baseline Correction		pmol/µl	conc.
Smoothing		mmol/l	ng/µl
Manual Dilution		µmol/l	nmol/l
		g/l	


- Baseline correction is set off by default. Enabling the baseline corrections shows a list with different wavelength options: 377 nm, 604 nm, 650 nm, 770 nm (N/A N50) and 823 nm (N/A N50). Option to enter any wavelength between 200 nm and 900 nm (N50: 650 nm)

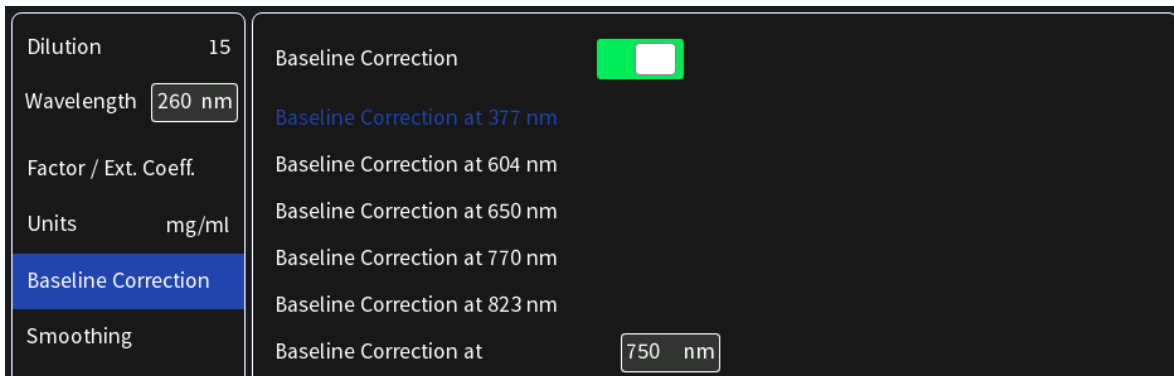

- 8. Option to smooth the graph with different boxcars. Options: Off, 1 = boxcar 11 (default), 2 = boxcar 21 and 3 = boxcar 61

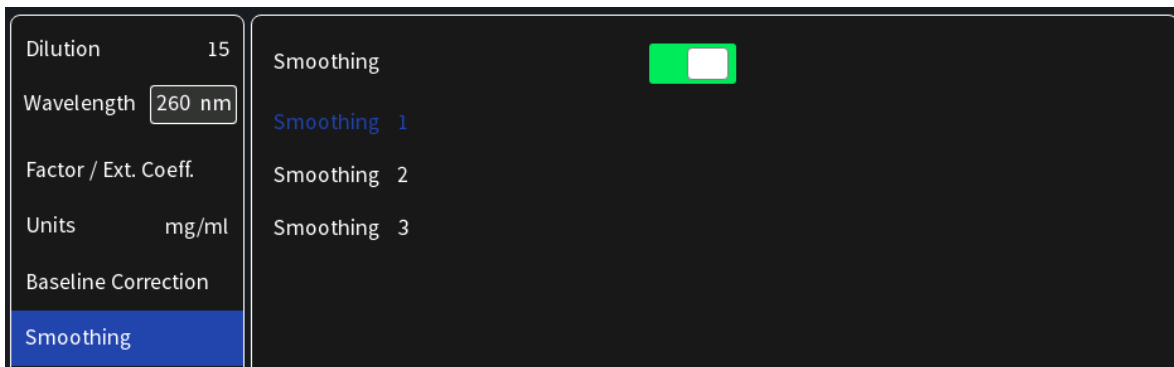

- 9. Option to set/calculate a dilution factor for manual diluted samples.

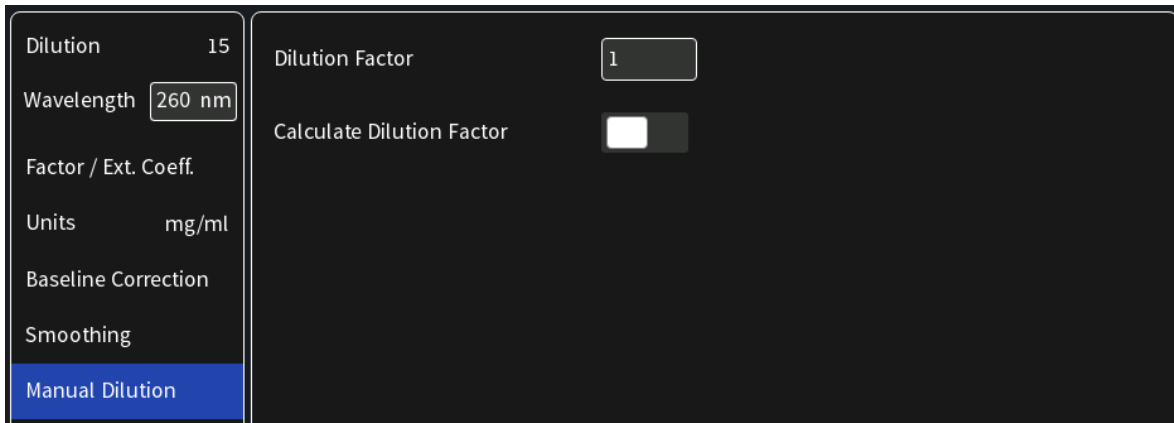

- 10. Apply the blank ddH₂O or buffer to the illuminated sample window on pedestal for the reference measurement and select blank to initiate the reading.




Note: The illumination of the sample window can be switched off in the preferences.

- 11. Use a lint-free laboratory wipe to clean both the sample window on pedestal and mirror in lid arm prior to applying the next sample.



Note: It can be helpful to apply the blank a second time and read it as a sample to ensure a proper blank.

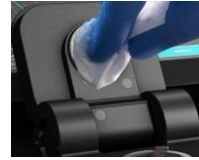

12. Apply sample to the sample window on pedestal and press the sample button to initiate the measurement.

If auto sample is active the sample measurement is automatically started after closing the lid arm.

Note: Auto sample function is only available NanoVolume methods and new NanoPhotometer® versions it may not be available after updating an older firmware version.



Calculations

In this method, the concentration of the sample is calculated based on the Beer-Lambert law given the user specified wavelength of interest and user defined extinction coefficient. The equations for calculating concentration without background correction are as follows:

Without background correction:

$$C = A_n * \epsilon * D$$

C	Concentration (ng/μl)
A_n	Absorbance at user specified path length n (10 mm path)
D	Dilution factor
ϵ	extinction coefficient/factor




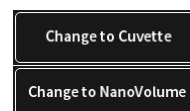
More Apps: Standard Curve

Method Overview

The construction of a calibration curve from multiple standards of known concentrations can be created and stored on the NanoPhotometer®. The standard curve can be used to quantify samples of the same type with unknown concentrations. This application provides an extremely useful tool with which to integrate, expedite and simplify the measurement and calculations involved in determining the concentration of analytes in unknown samples. If a zero concentration standard is required, include it in the number of standards to be entered using a reagent blank and entering 0.00 for concentration.

Measurement Protocol

1. Select the More Apps icon  from the home screen and the Standard Curve icon from the More Apps screen.
2. To change between NanoVolume and Cuvette application, use the Change to Cuvette/NanoVolume button below the parameter area (NP80/C40 only).
3. **For NanoVolume application:**
Select the dilution depending on the sample concentration



Dilution	15	Dilution 15 / 0.67 mm path	1 - 2 µl sample volume
Wavelength	260 nm	Dilution 140 / 0.07 mm path	0.3 - 2 µl sample volume

Note: There is no automatic path length setting in this method. Select either a virtual dilution of 15 (path length 0.67 mm) or of 140 (path length 0.07 mm).

For cuvette application:

Select the path length depending on the used cuvette.

Pathlength	10 mm	Pathlength	0.5 mm
Heat To 37°C	<input type="checkbox"/>	Pathlength	1 mm
Wavelength	260 nm	Pathlength	2 mm
Baseline Correction		Pathlength	5 mm
		Pathlength	10 mm

If it is desired to heat the sample to 37°C use the toggle switch to turn on cell holder heater. When the cuvette holder has reached 37°C the toggle color changes to green.

Note: Only available for cuvette applications (NP80 and C40).

For NanoVolume application with submicroliter cell (C40 only):

Select Lid depending on your sample concentration (for concentration ranges of different lids see page 53 Submicroliter Cell Measurements Basics).

Required sample volume for each lid is shown.



Wavelength	260 nm	Lid 5	3.5 µl - 5 µl sample volume
Lid	50	Lid 10	1 µl - 3 µl sample volume
Baseline Correction		Lid 50	0.3 µl - 2 µl sample volume
Curve Fit		Lid 100	0.3 µl - 2 µl sample volume
		Lid 250	0.3 µl - 2 µl sample volume

Note: A new Blank is recommended when changing the dilution lid.

- Baseline correction is set off by default. Enabling the baseline corrections shows a list with different wavelength options: 377 nm, 604 nm, 650 nm, 770 nm (N/A N50) and 823 nm (N/A N50). Option to enter any wavelength between 200 nm and 900 nm (N50: 650 nm)

Dilution	15	Baseline Correction	<input checked="" type="checkbox"/>
Wavelength	260 nm	Baseline Correction at 377 nm	
Baseline Correction		Baseline Correction at 604 nm	
Curve Fit		Baseline Correction at 650 nm	
Units	mg/ml	Baseline Correction at 770 nm	
Concentration		Baseline Correction at 823 nm	
		Baseline Correction at	750 nm


- Select the curve fit type: Options are linear regression, zero regression (forces the straight line through the origin) and 2nd order regression.

Dilution	15	Regression Linear
Wavelength	260 nm	Zero Regression Linear
Baseline Correction		Regression 2nd Order
Curve Fit		


- Select Unit

Dilution	15	mg/ml	mg/l
Wavelength	260 nm	µg/ml	U/l
Baseline Correction		µg/µl	%
Curve Fit		µg/l	ppm
Units	mg/ml	pmol/µl	conc.
Concentration		mmol/l	ng/µl
Replicates	None	µmol/l	
		g/l	

7. Add up to 20 Concentrations by pressing the Add Concentration button. Added concentrations can be deleted with ⊗
Enter the concentrations of the standard curve.

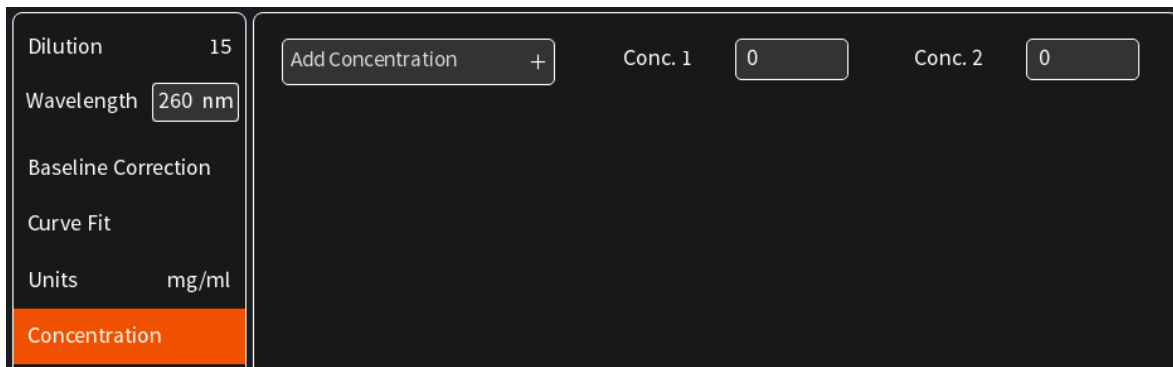

8. Select Replicates none, 2 or 3

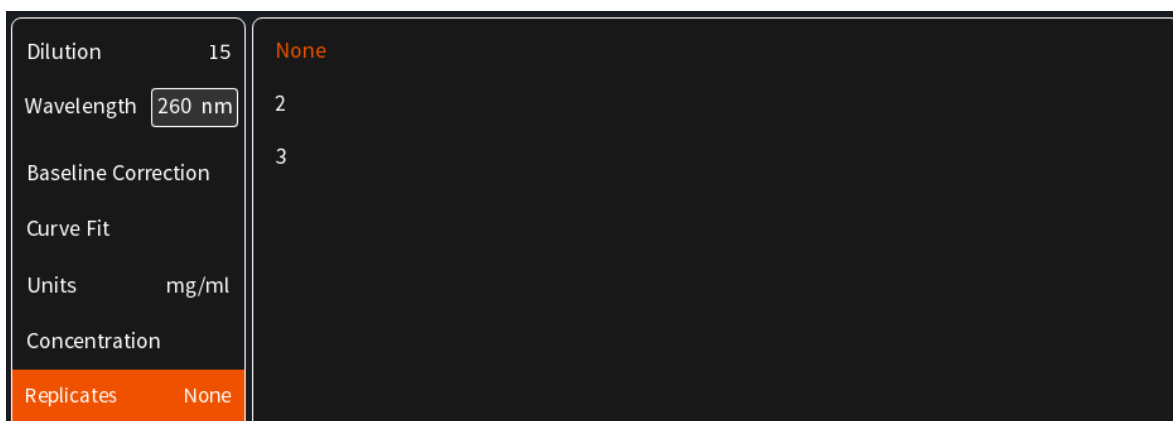

9. Once Standard curve is created or loaded it will be used for concentration calculations in the method. It might be necessary to do a blank measurement.



10. Apply sample and press the sample button to initiate the measurement. If auto sample is active the sample measurement is automatically started after closing the lid arm.




Note: Auto sample function is only available NanoVolume methods and new NanoPhotometer® versions it may not be available after updating an older firmware version.

Note: Once the sample measurement is initiated it is not possible to make changes to the standard curve.

Saving and Loading Standard Curves

It is possible to save measured standard curves as a Stored Method. To save the standard curve push the store method button ★ and enter a method name, select a folder and save with the Store button. Methods can be opened in the Stored Methods menu on the homescreen. Opening a saved Protein Assay method shows a message with the option to load or remeasure the standard curve.



For opening the stored standard curve select "Load", to measure a new standard curve with the stored parameter, select "Remeasure".

Load Remeasure

Calculations

Concentration is determined via the absorbance values provided by the standard curve based on the curve fit selection including the following options: linear regression, zero regression and 2nd order regression.




Custom Apps

There is an option for designing customer specific Custom Apps which can be loaded to the NanoPhotometer®. For more information about designing custom applications to suit individual research needs please contact Implen directly for assistance.





Stored Results

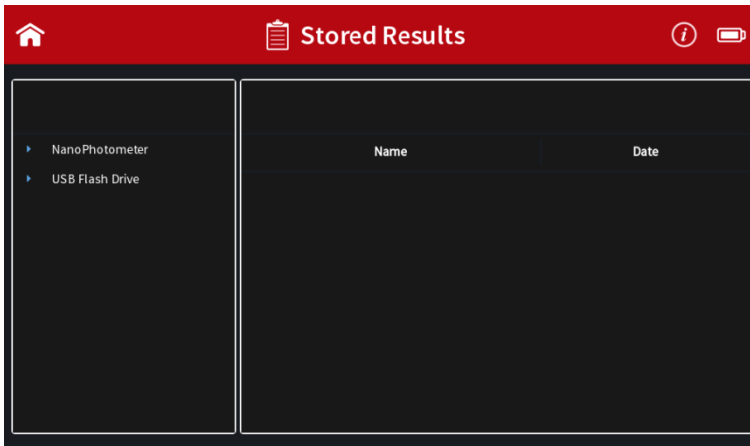The Stored Results icon opens a directory of folders containing files of results that have been previously saved.



On the left side of the screen all available directories/storages are shown: NanoPhotometer®, Control Device, Network and/or USB flash drive (depending on availability). By tapping on a storage folder, the subfolders of this storage folder will be shown on the left side and the individual files on the right side. On the right side of the screen all saved result files of the selected folder are shown and can be opened by a long or double click.

Folders can be deleted, renamed, moved or copied by pressing the  icon. It is also possible to delete, rename, move or copy files by pressing the  icon.


The file path of the selected folder is shown on the top of the right file area.

Note: PDF and Excel files cannot be opened on the NanoPhotometer®. Files need to be transferred to a computer or device where Excel or a PDF reader is installed.

Note: Control device is only available on computer, tablets and smartphones not on the NanoPhotometer® version of the software.

For data transfer via Ethernet or Wi-Fi® see page 56 Data Transfer.


Backup copies are saved in the Autosave folder of the NanoPhotometer® (Stored Results/NanoPhotometer/Autosave) for up to ten days. After ten days the autosave files are automatically moved to an autosave archive folder. The autosave archive folder can only be accessed via NanoPhotometer® file server. Data in the autosave archive folder are not automatically deleted.

The content of the Autosave Archive folder can be deleted via the action button  in Stored Results. Make sure that a backup is created before deleting the Autosave Archive folder content.





Stored Methods

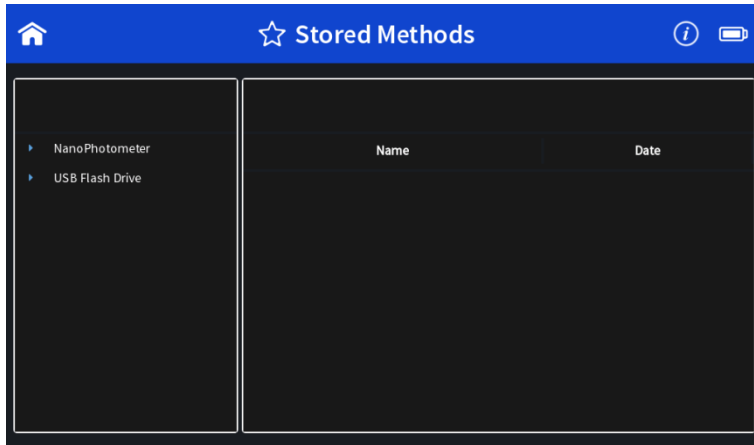
The stored methods icon opens the directories of folders containing methods stored by the user.



On the left side of the screen all available directories/storages are shown: NanoPhotometer®, Control Device, Network and/or USB flash drive (depending on availability). Tapping a storage folder shows the subfolders of this method folder on the left side and the individual files on the right side. On the right side of the screen all saved method files of the selected folder are shown and can be opened by a long or double click. On the top of the right area the file path of the selected folder is shown.

New folders can be created by pressing **+**. Folders can be deleted, renamed, moved or copied by pressing the  icon. It is also possible to delete, rename, move or copy methods by pressing the  icon.


5. Preferences

System preferences can be set by selecting preferences  on the home screen. The preferences menu includes: General, Dyes, Warning Messages, Network, Printer and CFR21. The preference options of the selected menu item are listed in the window on the right.

Note: Preferences are not available on smartphones with screen sizes less than 7 inches.

General


Selecting General in the Preferences menu opens a window to the right of the preferences menu with the following options: Date and Time, Display, About, Storage, Language and Illumination Sample Window (N120/NP80/N60/N50) or Enable NanoVolume (C40).

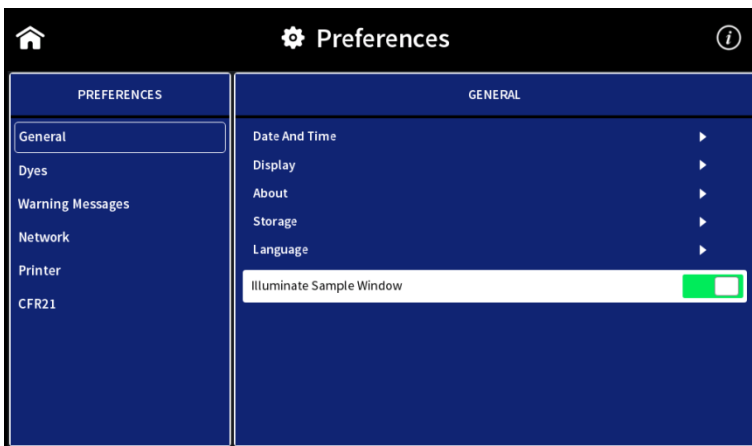

Date and Time

- **Manual date and time setting**

Within the Date and Time preferences it is possible to manually set the date and time of the

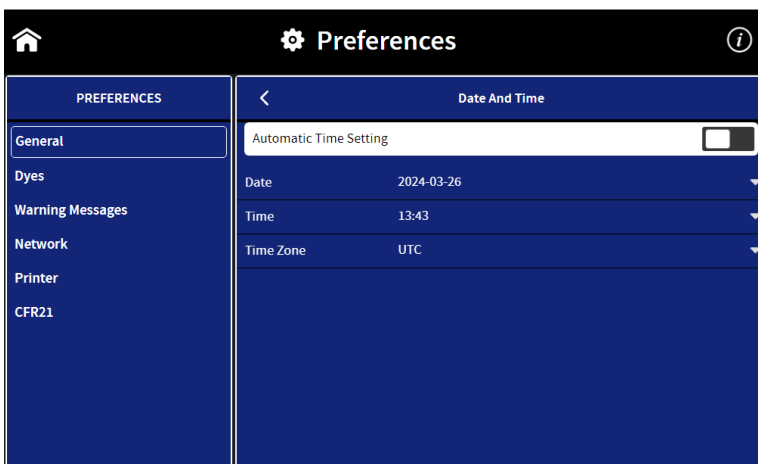

NanoPhotometer® or change the time zone.

To change the time zone or the date and/or time, push on the appropriate field to open the selection options. The changed settings are shown below the time zone field.

Note: Do not change the date and time at the same time as the time zone. Make sure that the UTC time is set correctly before changing the time zone.

Note: To apply the changes, the NanoPhotometer® must be rebooted. Start the reboot by pressing the Set and Reboot button.


▪ Automatic time setting via NTP server

The date and time can also be updated automatically via synchronisation of the device to a local NTP server (time server). This feature can be activated by tapping the toggle switch and entering the IP address for the NTP server.



Display

Brightness: adjustment of the built-in screen brightness

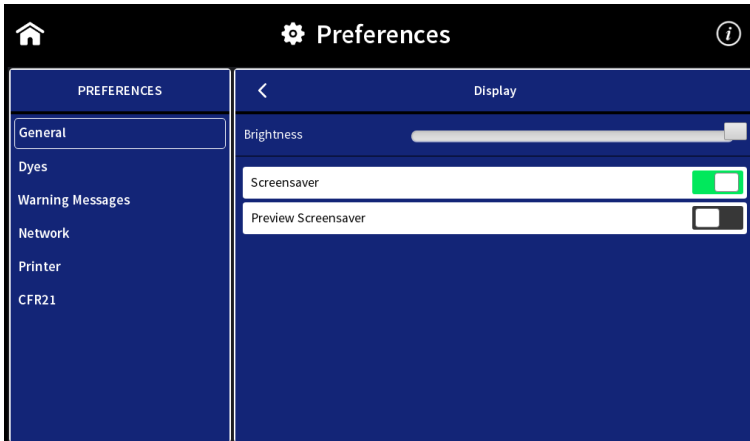

Screensaver: Option to switch the screensaver video on and off. With Preview Screensaver the screensaver can be started immediately.

Note: Screensaver activation will influence the time for battery operation. To prolong battery operation, switch the screensaver off.

Note: The screensaver option is not available when the CFR21 software is enabled.

About


In About the following information of the NanoPhotometer® are shown: NanoPhotometer® Version, Serial Number, Ethernet IP Address, Wi-Fi® IP Address, Hardware Version, Firmware Version, Time & Date of Initialization Test and Status of Initialization.

Storage

Shows the total storage capacity and the free space of the internal NanoPhotometer® storage.

Language

In language settings, the user has the option to change the language of the NanoPhotometer® software. The following languages are available: English, Chinese, French, German, Japanese, Portuguese, Russian or Spanish. The language is changed for the user interface, printouts and saved Excel and PDF files.

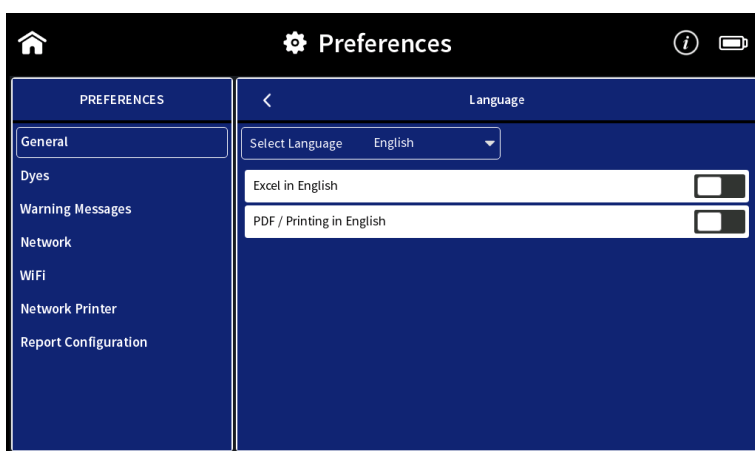

Note: The change will affect all methods.

Note: It is possible to work in users' desired language and change the selected language for Excel and PDF Printouts to English. This option can be selected with the toggle switches Excel in English and PDF/Printing in English. This is a global change for all methods. All Excel/PDF files and printouts will be in English. Independent from the language setting utilized in the method.

Illumination Sample Window

Toggle switch to switch on/off the illumination of the sample window (for N120/NP80/N60/N50 only)

Note: Only available for N120/NP80/N60/N50 models.


Enable NanoVolume

Toggle switch to enable the submicroliter cell option for the NanoPhotometer® C40.

Note: Only available for C40 model.

Dyes


There is a list of preprogrammed dye-labels for both nucleic acid dyes and protein dyes. To toggle between the nucleic acid and protein list push on the Nucleic Acid/Protein buttons in the header.

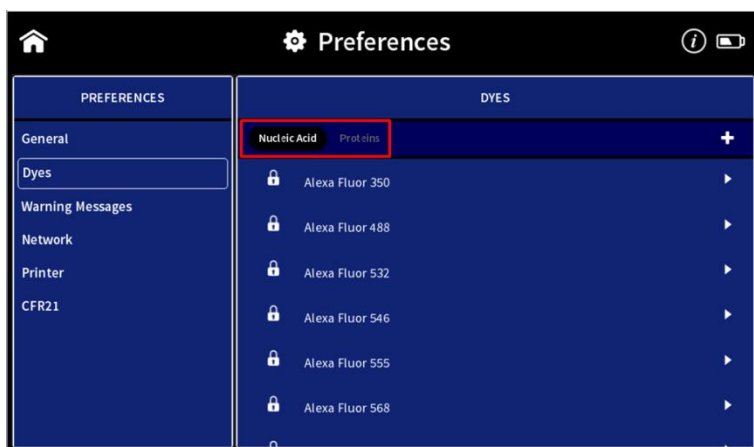

Each dye has either a lock icon (🔒) in front of the dye name indicating that the dye is locked and cannot be changed or a delete symbol (🗑️). The delete option is only available for unlocked and not preprogrammed dyes.


Selecting a dye name opens a new screen with the dye information: dye name, absorbance maximum dye (nm), dye-dependent extinction coefficient ϵ_{dye} ($\text{M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$), and dye-dependent correction factor as well as the option to show the dye in the parameter list of the application (Nucleic Acid or Protein UV). If you wish to have only a few dyes displayed within either of these applications, you can deselect them using the “Show” toggle switch.

Note: If the “Show” toggle switch is deactivated, the selected dye will also no longer appear in the Preferences list, and can only be restored by performing a factory reset.

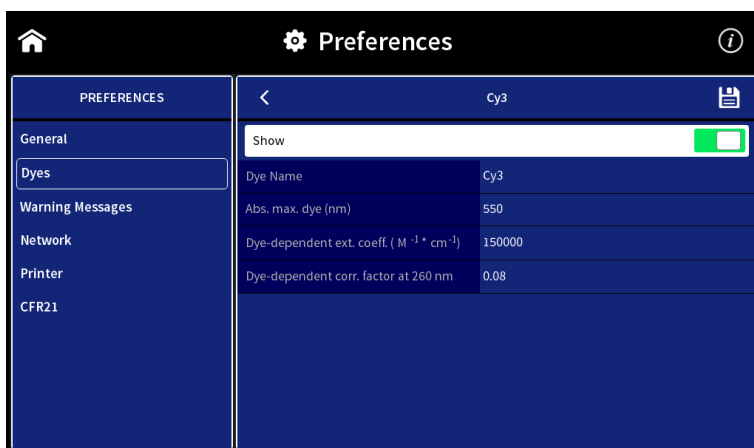

Note: It is not possible to delete a dye from the default factory list; custom dyes can be deleted if they are not locked.

It is possible to add a new dye to the list by selecting the + button to add a new dye. A window will open where it is possible to enter the: dye name, dye absorbance maximum (nm), dye-dependent extinction coefficient ϵ_{dye} ($\text{M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$), and dye-dependent correction factor. There is a toggle switch available to lock the dye to prevent deleting a dye from the dye list accidentally.

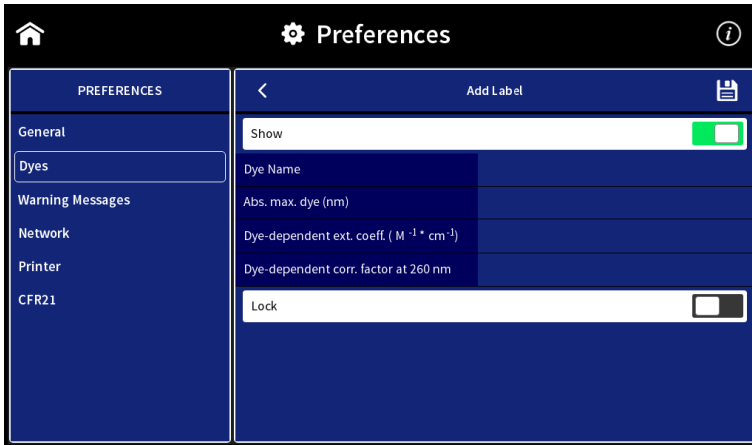


Warning Messages

Blank Control

Toggle switch to switch on/off the Blank Control™ of the NanoPhotometer®.

Note: Blank Control™ is available for all NanoVolume methods (for N120/NP80/N60/N50).

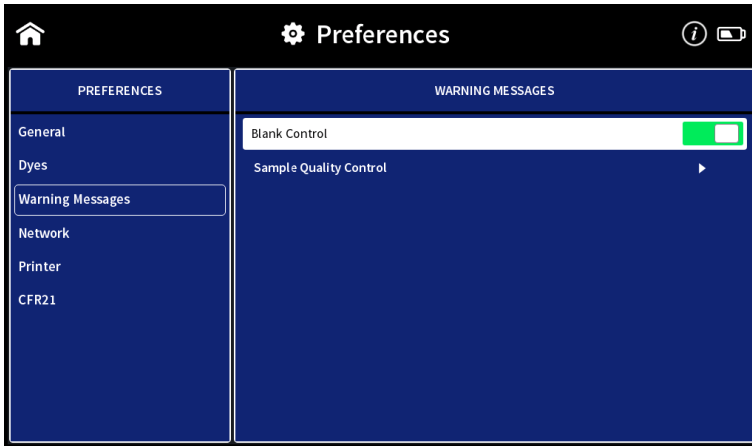

Sample Quality Control

It is possible to change the upper and the lower limit of the ratio alert warning messages. Default values for nucleic acid ratios are:

260/230 ratio 1.8 A - 3 A and 260/280 ratio 1.65 A - 2.5 A.


Default value for Protein UV ratio is:

260/280 ratio is 0.7 A.




Network

Selecting Network in the Preferences menu opens a window to the right of the preferences menu with the following options: Network Settings, WLAN Settings, File Server Access and Network Folder.

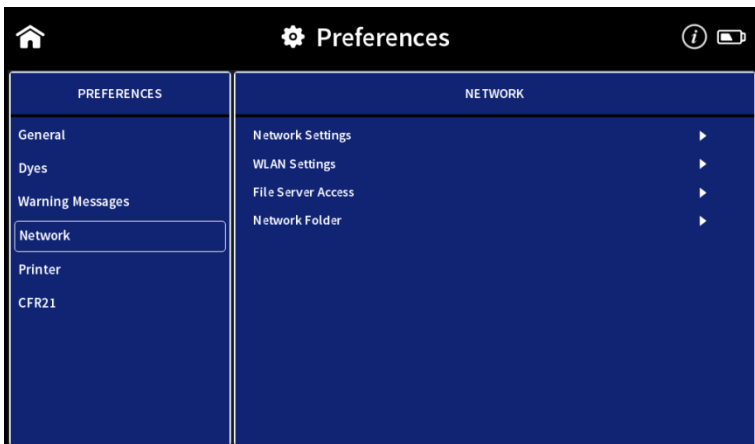


Network Settings

In Network Settings it is possible to choose between a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) and a static network configuration. The DHCP protocol is used by default. Connect the NanoPhotometer® with the Ethernet and the IP is automatically set during the startup of the NanoPhotometer®. If no IP Address is listed for Current IPv4, push the disk icon (📁) to search for an available IP address.

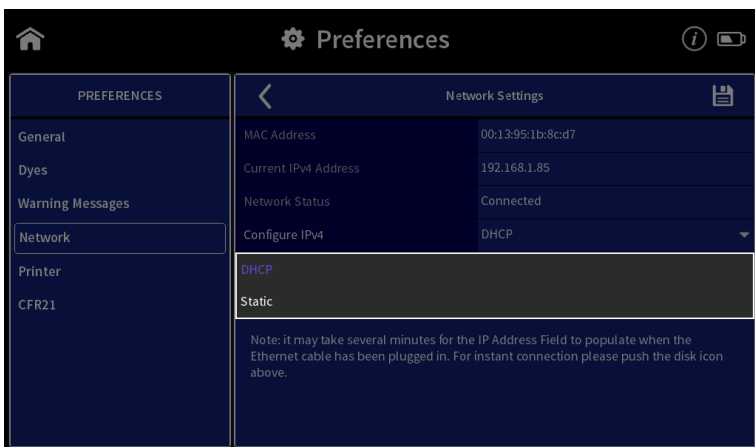

For static IP configuration select Static in the Configure IPv4 dropdown and enter the IPv4 address, netmask and gateway then confirm with disk icon (📁).

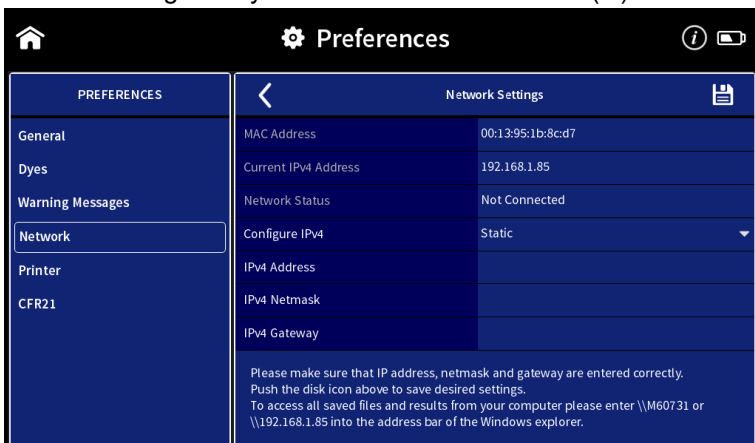


WLAN Settings


The WLAN Setting preferences allow the user to switch off the Wi-Fi® or to set up a Wi-Fi® Hotspot (Wi-Fi® Access Point) or a Wi-Fi® network.

To set up a Wi-Fi® Hotspot select “Enable NanoPhotometer Hotspot” in the dropdown and push on the save icon.

The Wi-Fi® Hotspot can be used to connect a computer, Android smartphone/tablet, iPad or iPhone via Wi-Fi® to the NanoPhotometer®.

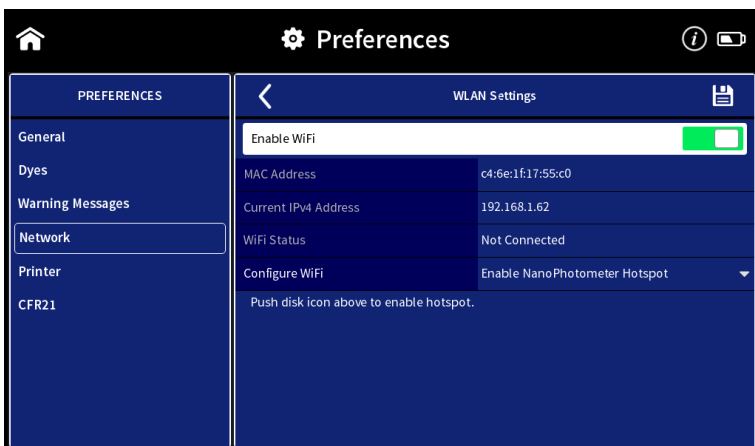


To set up a Wi-Fi® network select “Connect to Wi-Fi® Network” in the dropdown. Select an available Wi-Fi® network from the dropdown list or choose other for hidden networks and enter the password. Confirm with the disk icon (💾).

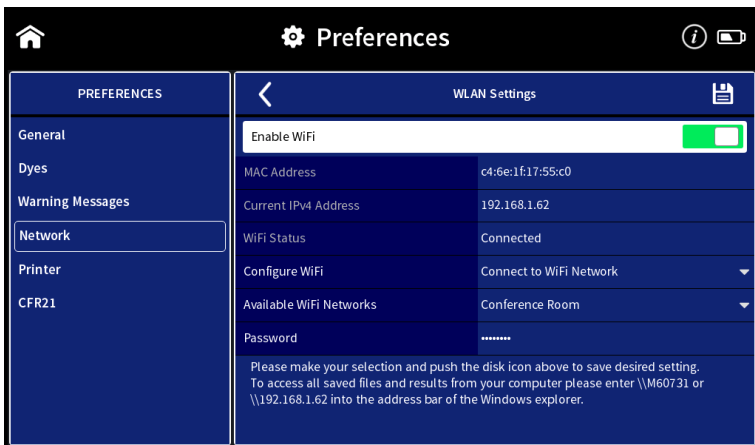


File Server Access

The File Server Access preferences allow creating user accounts to limit the access to the NanoPhotometer® file server via network. By default, access to the file server is open to any user. It is necessary to create at least one user account to activate the file server access option.

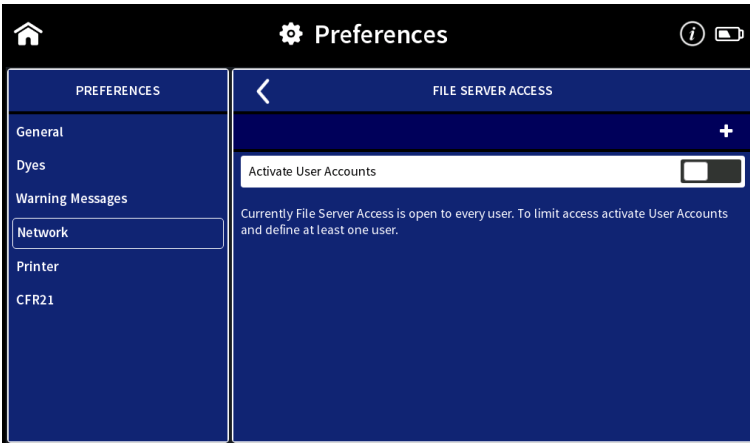


To create a user account push on the + button and enter a user name and password. Confirm with the disk icon (📁).

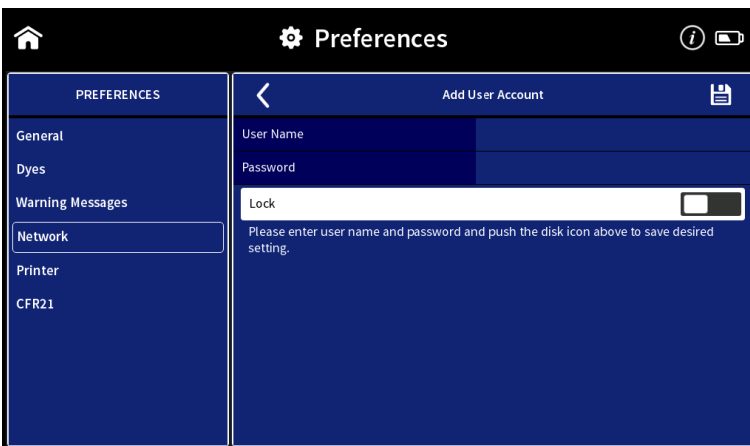


Note: Allowed characters for user name are: A...Z a...z 0...9 _ -
Do not use Blank character.

Network Folder

The network folder preferences allow creating network folder for saving data directly from the NanoPhotometer® to a network folder.

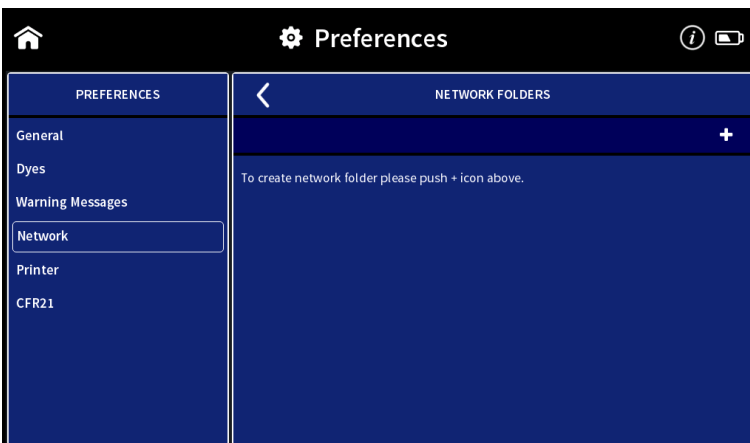


To add a network folder push the + icon and enter network folder nickname and network path of the network folder. If the local network requires authentication enter user name and password for login and if necessary the domain. To save the Network folder push the disk icon (📁).

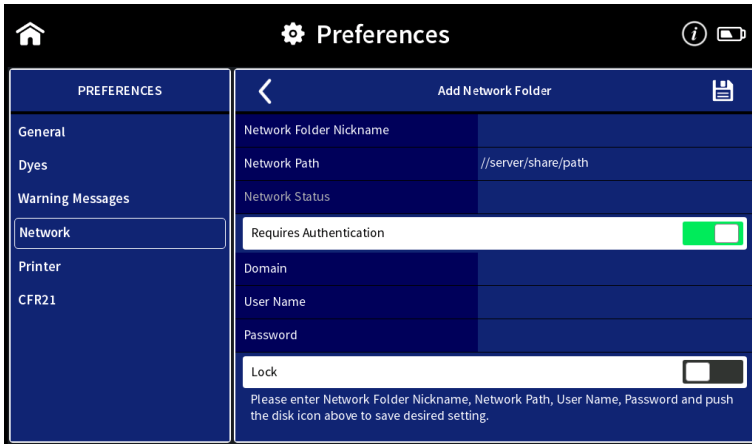

Note: To maintain stable access to network drives, the system uses a silent Keepalive mechanism. It periodically writes to a .cifs_keepalive file to keep the connection active. This mechanism runs in the background and is fully compatible with WORM-protected and access-restricted file systems, ensuring reliability without triggering errors.

Printer

Selecting Printer in the Preferences menu opens a window to the right of the preferences menu with the following options: Network Printer and Report Configuration.

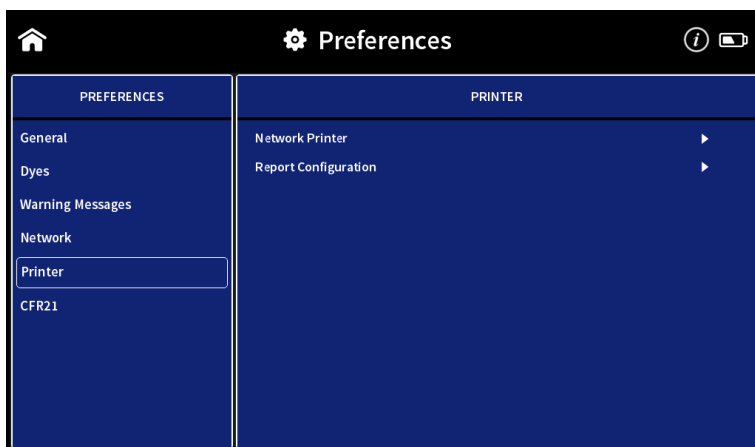

Network Printer


It is possible to print via network (Ethernet) or Airprint® / IPP compatible (supporting PDF format) printers in the network.

Note: IPP version 2.2 is required and some printer configuration settings might need to be changed in order to allow communication with the NanoPhotometer®.

Enter the IP of the network printer to the input window.


Note: For printing on network printer the NanoPhotometer® needs to be connected to the network either via Ethernet (LAN cable) or Wi-Fi® network.

Note: If a printer is directly connected to the NanoPhotometer® via USB, this printer will have the highest priority and will be the printer used by default when selecting Print on NanoPhotometer®. In order to print utilizing a printer on the network, please disconnect the installed USB printer.

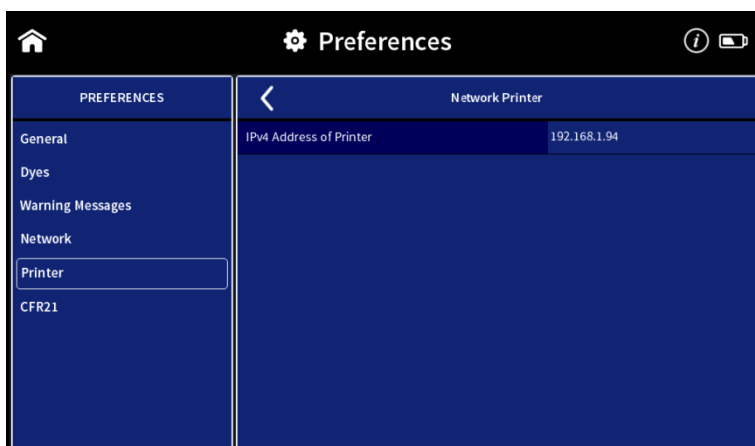

Report Configuration

In report configuration it is possible to define the table columns of PDF files and A4 printouts. This feature is available for the methods Nucleic Acids and Protein UV. To toggle between the nucleic acid and protein list push on the Nucleic Acid/Protein buttons in the header.

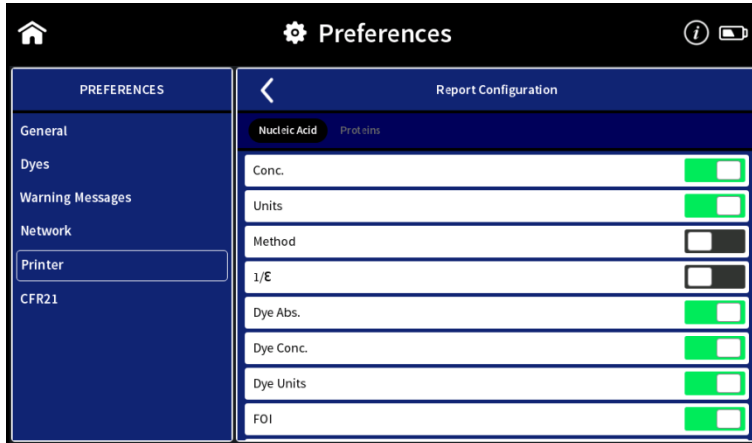

CFR21

The CFR21 Software is an optional software tool ideal for GxP laboratories, which require proper electronic record keeping. It includes user management, access control, electronic signatures, data integrity, security, and audit trail functionality.

In the CFR21 Preferences it is possible to enable the optional CFR21 Software. This is only possible with a license key. For further details please contact the Implen Support team or refer to the CFR21 software user manual.

6. Troubleshooting

Initialization test

The NanoPhotometer® initialization test is performed automatically every time the instrument is powered on. If the instrument passes the initialization test the home screen is shown. If the instrument does not pass the test, a message window will appear explaining the reason for the failed test along with the recommended solution. If the ok button is selected, the window is closed and the home screen will be shown. Initialization failed will be displayed on top of all method screens. If the initialization test fails please contact the Implen Support Team.

Messages

The software gives three different kind of messages: confirmation (green), warning (yellow) and alert (red) Confirmation messages are shown e.g. after the initialization test has passed successfully or if files or folders are copied or moved successfully. These messages are self-explaining and not listed in the user manual.

Important Warning Messages:

Message Text	Explanation/Solution
Air bubble, lint residue or bad sample. Please reapply sample.	Air bubble recognition is on and has detected either an air bubble, lint residue or a bad sample like e.g. a turbid sample. Check sample, clean the sample window on pedestal and mirror in the lid arm thoroughly and reapply sample carefully. To avoid air bubbles apply sample by reverse pipetting.
Another control device is currently connected.	Message is shown on a control device when another control device is currently connected with an open measurement session. Please close method on control device.
Battery is low. Please connect to power!	This message pops up twice. Between the first and second warning message, there is at least one hour battery power left for use of the NanoPhotometer® under standard conditions. After the second warning the instrument will automatically begin shutting down within 10 to 15 seconds.
Concentration too high. Change to lid10/lid50/lid100/lid250	The concentration of the sample used is too high for submicroliter cell measurements with the utilized lid. Change to the recommended lid. A new blank is recommended when changing the dilution lid.
Concentration too high. Dilute sample.	The concentration of the sample is too high for submicroliter cell measurements using Lid 250 with the C40. Sample concentration is above the detection limit of the instrument. Dilute sample manually to measure within the detection range of the instrument.
Concentration too low.	The concentration of the sample used is too low for submicroliter cell measurements using Lid 5 with the C40. Sample is below the detection limit of the instrument. Only cuvette measurement may be possible.
Concentration too low. Change to lid5/lid10/lid50/lid100	The concentration of the sample used is too low for submicroliter cell measurements with the used lid. Change to the recommended lid. A new blank is recommended when changing the dilution lid.
High absorbance at 250-280nm, 280-340nm, 340-400nm, 400-475nm, 475-550nm, 550-625nm, 625-700nm. Bad Blank or insufficient cleaning.	The warning message is shown when a blank measurement (NanoVolume) detects a significant absorbance a potential area of interest. The warning message shows the wavelength range where the absorbance is appearing. Two things can cause high absorbance in a blank

	measurement: either the blank solution/buffer has an absorbance in this wavelength range or the sample window on pedestal and the mirror in the lid arm was not cleaned properly after the last reading. Clean the sample window on pedestal and the mirror in the lid arm thoroughly and check the blank solution for absorbance (Use water for blank and measure the blank buffer as sample).
Instrument connected to control device! Do you really want to intercept?	This message is shown on the NanoPhotometer® when a method is open on another control device. Push on OK and the measurements session is interrupted and the data are saved in the auto save folder.
Lint residue or bad sample. Please reapply sample.	Displayed when Air Bubble Recognition is off. Software has detected either a lint residue or a bad sample like e.g. a turbid sample. Check sample, clean the sample window on pedestal and mirror in the lid arm thoroughly and reapply sample carefully.
Maximum absorbance level at specified wavelength reached. Calculations may lead to low/wrong results.	The concentration of the sample used is too high and exceeds the specified absorbance range. Maximum absorbance is 330 A (10 mm path) for NanoVolume and 2.65 A for cuvette measurements. Dilute sample and measure again.
Maximum level exceeded.	This message is shown when for example, too many dyes or wavelength are added with the Add + button. It is possible to add up to 20 dyes or wavelengths.
Measurement currently in progress. Please close method on device.	Displayed when there is an open measurement session on the NanoPhotometer® and the user is trying to connect via a control device (phone, tablet or computer). In order to move forward with connection of control device, please close method on NanoPhotometer®.
No printer present.	Printer connection is lost. Please check printer connection. If it is still not working go back to home screen reconnect the printer and wait for 30 seconds. If the message still appears please create a log file and send it to Implen customer support.
Sample concentration too low for 0.3 µl - change volume and parameter settings to 1 µl	The measurement parameters for 0.3 µl NanoVolume samples read only the 0.07 mm path length (dilution 140). The utilized sample concentration is too low. Please use 1 µl of the sample and change the volume setting to 1-2 µl. Minimum concentrations for the 0.07 mm path length for dsDNA 420 ng/µl and for BSA 12.6 mg/ml.

Important Alert Messages:

Cuvette port blocked - please check.	The automatic sliding cover of the NanoPhotometer® NP80 could not close properly. Please check if the cuvette port is empty. If message still appears please contact Implen Customer Support.
ERROR: Lid open - please close lid.	Lid arm is open during initialization test. Close lid arm and confirm with OK.
Firmware not found - NPOS.bin must be in root folder of USB flash drive	Make sure that the file name is NPOS.bin without any additions or extensions like from multiple downloads, otherwise rename file to NPOS.bin exactly. NPOS.bin file must be in the root folder of the USB flash drive. Make sure that the NPOS.bin file for installation has a higher software version than the installed one. NPOS software is not downward compatible.

Firmware not found - NPOSX.bin must be in root folder of USB flash drive	NPOSX.bin file must be in the root folder of the USB flash drive. If necessary unzip the downloaded installation file. The file name should not have any additions or extensions like from multiple download. Do NOT rename a NPOS.bin to NPOSX.bin. Make sure that the NPOS.bin file for installation has a higher software version than the installed one. NPOS software is not downward compatible.
Initialization failed – problem with optical path. Please contact Implen customer support.	Check if the cuvette port is empty and/or clean the sample window on pedestal and the mirror in the lid arm with 70% EtOH and distilled water then reboot the NanoPhotometer®. If the message still appears please create a log file and send it to Implen Customer Support.
Initialization failed 51/52/53/54/55. Please contact Implen customer support.	Possible hardware failure. Please create a log file and send it to Implen Customer Support.
Initialization failed. Please contact Implen customer support.	Clean the sample window on pedestal and the mirror in the lid arm with 70% EtOH and distilled water and then reboot the NanoPhotometer®. If the message still appears please create a log file and send it to Implen Customer Support.
Light path blocked – please remove cuvettes from port.	Make sure that the cuvette port is empty during initialization test. Restart the NanoPhotometer® with the cuvette port empty. If the message still appears please create a log file and send it to Implen Customer Support.
NanoVolume head not clean! Please clean sample windows thoroughly.	Clean the sample window on pedestal and the mirror in the lid arm with 70% EtOH and distilled water and then reboot the NanoPhotometer®. If the message still appears please create a log file and send it to Implen Customer Support.
No connection possible	Connection is lost between control devices and NanoPhotometer®. Check the connection. If the message still appears please create a log file and send it to Implen Customer Support.
Server Not Available	Internal software communication problem during an open measurement session. Reboot the NanoPhotometer®. If the message still appears please create a log file and send it to Implen Customer Support.
Server Side Failure	Internal software communication problem during an open measurement session. Reboot the NanoPhotometer®. If the message still appears please create a log file and send it to Implen Customer Support.
Software update failed. Please contact Implen customer support.	Ensure that the file name is NPOS.bin without any additions or extensions like from multiple downloads, otherwise rename file to be NPOS.bin exactly. NPOS.bin file must be in the root folder of the USB flash drive. Try the update a second time, if it still fails please create a log file and send it to Implen Customer Support.
Stored method/result was created for unavailable mode NanoVolume/Cuvette/Submicroliter Cell!	Message appears if stored results or a stored method made on another NanoPhotometer® type is opened with an unavailable mode like Cuvette or NanoVolume e.g. data or methods made in cuvette mode and opened on a N60 (NanoVolume only).

System Freeze

In case of harsh ESD impulses it could happen that the device does freeze or switch-off. Please wait first about 30 sec to see if the system recovers automatically itself. If there is no reaction please press the power key at the instrument rear 4 sec to switch-off and then again shortly to restart the system.


7. Assistance

The Assistance menu includes: support, report a problem (only available for tablet and computer versions), user manual, software maintenance, diagnostics and legal as functions to help with any technical issues or questions that may arise with the NanoPhotometer®.

Note: Assistance is not available on smartphones with screen sizes less than 7 inches.

Support

Selecting support on the left side assistance menu will show the available options for contacting Implen.

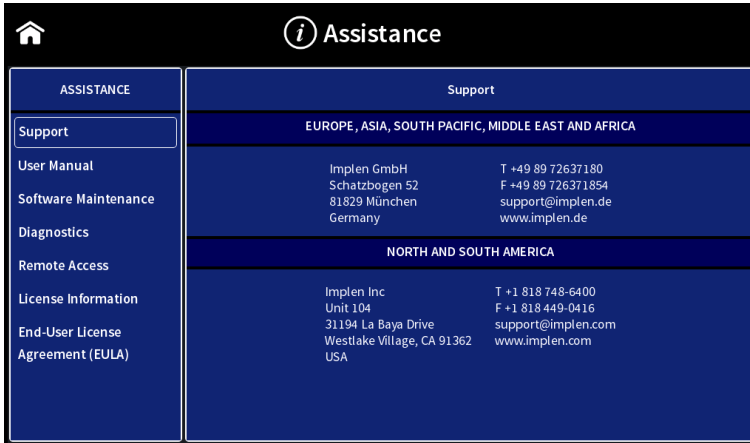


Report Problem

The function to report a problem is only available for computer and tablet versions. Selection of Report Problem in the assistance menu, a form with the following information is shown on the right side: first name, last name, phone number, email, and country. A dropdown menu provides the option to select the type of problem and includes the following choices: error message, software, firmware, measurements, and other. It is possible to enter a question or comment at the end of the form. Once the form is completed and the send button is selected a message will be sent directly to Implen and the appropriate support person will contact the end user as soon as possible to provide further support.


Note: The report a problem function is only available for computer and tablet versions.

User Manual

The actual user manual can be downloaded using the QR code or download link.

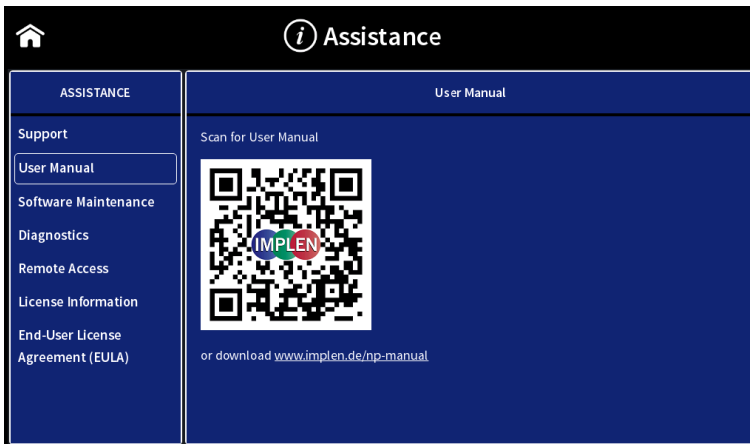

Software Maintenance

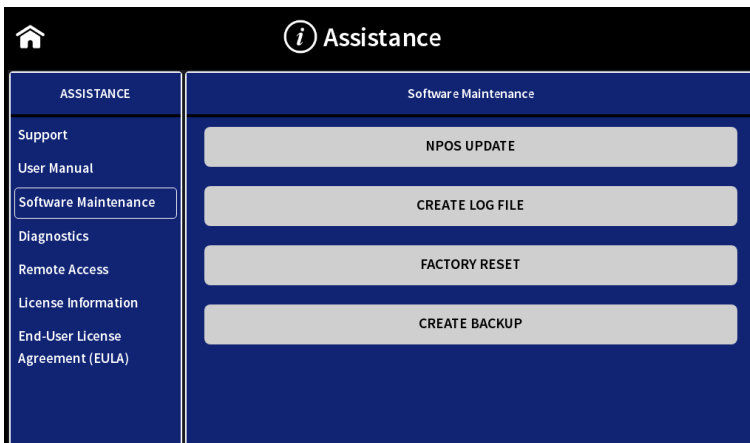

NPOS update

Download the firmware update file (zip folder) from the Implen homepage: www.implen.de/downloads/ and unzip the file into the root folder of a USB flash drive.

Note: Do not change the file names of the unzipped installation files.

Note: Save all data on the NanoPhotometer® before updating.

Note: Make sure that the NanoPhotometer® is connected to power and that the power connection is not interrupted during the update.

It is recommended to do the update via the built-in touchscreen. If the touchscreen is not available it is also possible to do the update via computer or tablet. In this case it is necessary to relaunch the NanoPhotometer® software after the reboot of the NanoPhotometer®. For tablets the Wi-Fi® connection needs to be reconnected.

Note: Always update the firmware of the NanoPhotometer® first and then update the client software (PC/Mac, smartphone, tablet).

Update procedure:

1. Unzip the installation file to a USB flash drive into the root folder
2. Insert in the USB flash drive to the USB port of the NanoPhotometer®
3. Select Assistance/Software Maintenance
4. Push on "Update" and wait until the NanoPhotometer® reboots

Note: Once you have updated the firmware of the NanoPhotometer®, please update the client software (PC/Mac, tablet, smartphone).

Create Log File

To create a log file insert a USB flash drive to the USB port of the NanoPhotometer®. Push on "Create Log File". The log (NPOS.log) file will be saved on the root folder of the USB flash drive.

Factory Reset

There is an option to reset the instrument to factory settings. By selecting the reset button a window will open that says "Reset the NanoPhotometer®?" Selecting the cancel button will close the window without changing the settings and selecting reset will open a window that will ask again "Reset the NanoPhotometer® to factory settings? All data, stored methods and settings will be lost." If it is confirmed the factory settings will be restored.

Note: All stored methods, settings and data on the NanoPhotometer® will be deleted if the reset option is executed.


Create Backup

Option to create backup file to recover data and settings of the NanoPhotometer® at a later date. To create a backup file insert a USB flash drive to the USB port of the NanoPhotometer®. Push on "Create Backup". The backup (NPOS.bak) file will be saved into the root folder of the USB flash drive.

Recovery of the NanoPhotometer® is only possible via the Implen support (remote access). In the case a NanoPhotometer® recovery is necessary please get in touch with the Implen support team (support@implen.de).


Diagnostics

Diagnostics offers the possibility of performing the self-test without rebooting the NanoPhotometer®. Make sure that the measurement head is clean and no sample is applied and push the self-test button to start the self-test. As result reference and signal counts and the wavelength shift are shown. If the self-test is fails, please contact the Implen support (support@implen.de).

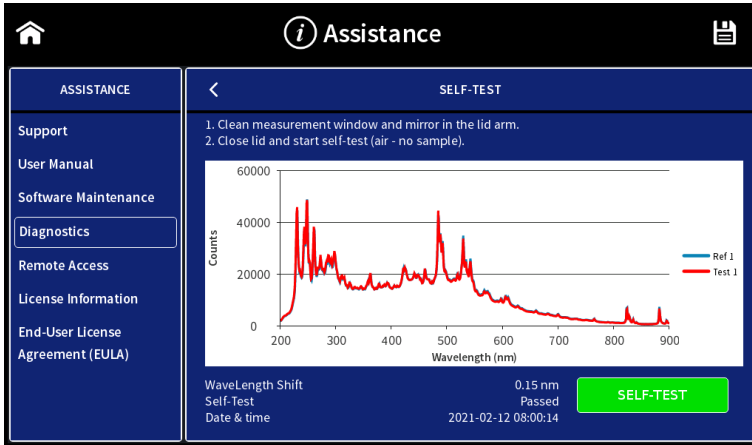

Remote Access

Option to enable remote acces, ping and Rest API Push Services.

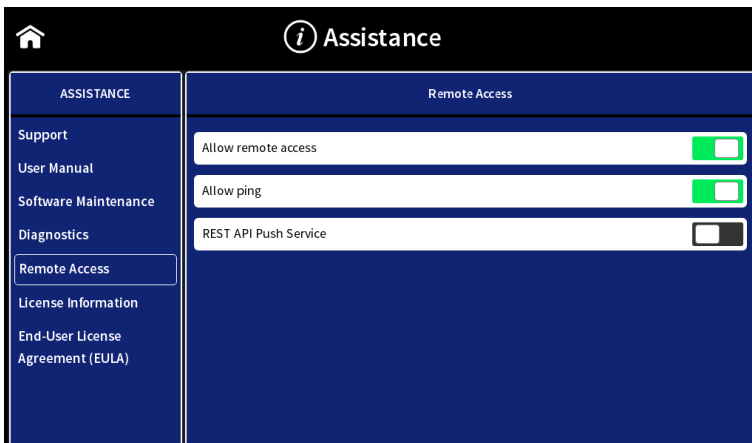

Remote access and ping are active after booting the NanoPhotometer® and are automatically switched off after 15 minutes. A renewed activation for remote access is possible for 30 minutes at a time. The activation of ping remains active until the next restart of the NanoPhotometer.

Rest API push service might be necessary for integration to LIMS systems. It is default off and can be switched on if necessary. It will stay active after switched on.

For further information contact the Implen support team (support@implen.de).



License Information

The NPOS software is Copyright of Implen and its affiliates. The NPOS software includes some open source software components under the licenses listed.

End-User License Agreement (EULA)

Shows the end-user license agreement.

Trademarks

Windows is a trademark of Microsoft. Airprint, Mac OS, OS X, iOS, iPhone and iPad are trademarks of Apple. Android OS is a trademark of Google. Linux is a trademark of Linus Torvalds.



Contact Implen

There is an option to contact Implen for instruments connected to the internet. For any support issues and questions please contact the Implen team directly:

Europe, Asia, South Pacific, Middle East and Africa

Implen GmbH
Schatzbogen 52
81829 München
Germany

Phone: +49 89 72637180
Fax +49 89 726371854
Email: support@implen.de
www.implen.de

North and South America

Implen, Inc.
Unit 104
31194 La Baya Drive
Westlake Village, CA 91362
USA

Phone +1 818 748-6400
Telefax +1 818 449-0416
Email: support@implen.com
Website www.implen.com

8. Maintenance

Maintenance Free Technology

The NanoPhotometer® technology is maintenance free. Regular maintenance and calibration is not necessary.

For facilities that are working according to national as well as international guidelines and standards including: Good Laboratory Practice (GLP), Good Manufacturing Practice (GMP), or ISO9000-9004; the proper performance of the spectrophotometer has to be tested and proven on a regular basis with individually set intervals. Implen provides certified NanoPhotometer® secondary standards as an optional accessory. These NanoPhotometer® Didymium glass filters and standard solution sets are suitable for the control and documentation of the wavelength accuracy and the photometric accuracy of your system. IQ/OQ documentation is also available. Please contact your local Implen office or an authorized Implen partner for further information.

Note: Further information on the secondary standards can be downloaded from the Implen website in the download area - quality control (www.implen.de/downloads).

Support agreements that help to fulfill the demands of regulatory guidelines concerning GLP/GMP include: calibration certification using filters traceable to international standards (during production and quality control), certified engineers and calibrated test equipment, approved to ISO 9001 standard, automatic self-diagnostic calibration test during start of the NanoPhotometer®, result is documented in each data output file, and possibility to save a Implen Document Source (IDS) file (no data manipulation possible).

Replacement Parts

▪ Lamp Replacement

The NanoPhotometer® is equipped with a xenon flash lamp with a lifetime of 10⁹ flashes (up to 10 years). This lamp should not need replacement for several years. In the unlikely event the lamp does need to be replaced, this should be done by the manufacturer or a certified service engineer from your supplier.

▪ Battery Replacement

The optional battery pack can only be assembled or replaced by the manufacturer or a certified service engineer from your supplier.

Note: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replacement only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer: Replacement needs to be done by a certified service engineer

Note: Battery operation time is depending on display usage. Activating the screen saver video may reduce the battery operation time.

Note: Recharging of deep discharged batteries is not possible they need to be replaced by new ones.

▪ **Touchscreen Replacement**

The optional touchscreen can only be assembled or replaced by the manufacturer or a certified service engineer from your supplier.

Cleaning and General Care

Switch off the NanoPhotometer® and disconnect the power cord prior to external cleaning. Use a soft wet cloth or dry microfiber cloth to clean all external surfaces. A mild liquid detergent may be used to remove stubborn marks.

Approved disinfectant solutions include: Apesin disinfection spray (Tana Chemi GmbH), Incidin Liquid & Inciddin Foam (Ecolab), and Lysoformin Spezial (Lysoform Dr. Hans Roseman GmbH).

Note: Observe all necessary precautions if dealing with hazardous samples or solvents.



9. Warranty

Implen guarantees that the product supplied has been thoroughly tested to ensure that it meets its published specification. The warranty is as defined in our current terms and conditions and is only valid if the product has been used according to the instructions supplied. Implen or your supplier can accept no liability of loss or damage arising from the faulty or incorrect use of this product

10. Appendix 1- Instalace Spektrofotometru

Bezpečnostní informace

Před zahájením instalace se prosím důkladně seznámte s výstražnými štítky a symboly na vašem přístroji a s jejich významem. Obsahují informace o tom, kde hrozí potenciální riziko a kde musíte být velmi obezřetní. Nevhodné používání může vést k poranění osob nebo poškození přístroje. Přístroj může obsluhovat pouze příslušným způsobem vyškolený a zkušený personál. Před používáním si prosím přečtete kompletní uživatelskou příručku.

 přímý proud

Kategorie přepětí: Třída II

Maximální provozní nadmořská výška: < 2000 m

Stupeň znečištění: 2

Přístroj neotevírejte, jinak bude obsluha vystavena nebezpečí elektrické energie, UV záření a jemné vláknové optiky, nebo může dojít k poškození přístroje.

Pokud používáte s přístrojem NanoPhotometer® C40 buňku na submikrolitry, nezapomeňte před zahájením měření zakrýt měřicí hlavici víkem.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí UV záření při měření bez krytu.

Nepoužívejte u přístroje NanoPhotometer® poškozené napájecí kabely, příslušenství ani další periferní součásti. Používejte pouze dodaný a stanovený napájecí / dobíjecí zdroj.

Nevystavujte přístroj NanoPhotometer® silnému magnetickému a elektrickému poli, vodě, chemikáliím ani jakýmkoli typům kapalin, jako je například silný déšť nebo vlhkost.

Nevhazujte přístroj do ohně, protože se může zdeformovat nebo explodovat (baterie). Neskladujte ani nepoužívejte přístroj v blízkosti jakéhokoli tepelného zdroje, především při teplotách nad 60°C nebo ve výbušné atmosféře.


Nenechávejte přístroj NanoPhotometer® na klíně nebo jakékoli části těla: zabráníte tak nepohodlí nebo poranění vlivem působení žáru.

Nepokládejte na přístroj NanoPhotometer® žádné předměty.

Přístroj NanoPhotometer® se sadou baterií (mobilní verze) je nutné před přepravou vypnout. Tlačítko zapínání / vypínání je nutné během přepravy zabezpečit, aby nedošlo k samovolnému sepnutí vlivem nárazu nebo vibracemi.

Biologické vzorky mohou obsahovat nebo přenášet nakažlivé nemoci. Mějte na paměti zdravotní rizika těchto vzorků a používejte odpovídající ochranné pomůcky. Dříve než začnete s takovým potenciálně nakažlivým materiálem pracovat, zacházejte s těmito vzorky s maximální opatrností v souladu s platnými požadavky orgánů a organizace.

Poznámka: Nelijte na součásti přístroje žádné biologické vzorky. Pokud k rozlítí dojde, přístroj neprodleně dezinfikujte podle laboratorního protokolu a pokynů k čištění přístroje (viz kapitola 8 Maintenance).

Symbol  umístěný na přístroji nebo v dokumentech přiložených k přístroji znamená, že tento přístroj nelze považovat za domovní odpad. Namísto toho je nutné jej odevzdat na příslušném sběrném místě, které zajišťuje recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidaci je nutné provést v souladu s místními ekologickými předpisy pro odstraňování odpadů.

Vybalení a umístění

Ověřte obsah balení podle dodacího listu. Pokud zjistíte jakékoli nedostatky, neprodleně informujte svého dodavatele.

Zkontrolujte u přístroje jakékoli známky poškození z přepravy. Pokud zjistíte jakákoli poškození, neprodleně informujte svého dodavatele.

Zajistěte, aby předpokládané stanoviště pro instalaci splňovalo podmínky prostředí pro bezpečný provoz: vnitřní prostory nebo suché prostředí.

NanoPhotometer® je navržen a vyvinut pro použití v kontrolovaném a zabezpečeném prostředí. Jedná se o laboratorní prostředí s omezeným fyzickým přístupem v rámci společnosti. K NanoPhotometer® mají přístup pouze kvalifikovaní uživatelé a může být provozován pouze v rámci lokální firemní sítě. Pokud není zajištěno bezpečné prostředí, NanoPhotometer® nesplňuje následující požadavky Směrnice o rádiových zařízeních (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Poznámka: Nevystavujte přístroj NanoPhotometer® do blízkosti kapalin, chemikálií, deště, vlhkosti nebo prašného prostředí.

Rozsah teplot 15 - 40°C (NP80, N60, N50 a C40) a 18 - 32°C (N120); v případě zahřívání pomocí kyvety je rozsah teplot 15 - 27°C.

Skladovací teplota je 0 - 40 ° C. Neskladujte přístroj pod touto teplotou nebo nad touto teplotou.

Pokud je přístroj vystaven extrémním změnám teplot, bude pravděpodobně nutné zajistit rovnováhu přístroje. Přístroj vypněte a poté znovu zapněte, jakmile bude dosaženo tepelné rovnováhy (asi 2 až 3 hodiny).

Maximální relativní vlhkost (bez kondenzace) 80 % a až 31°C s lineární sestupností k 50% při 40°C.

Přístroj musí být umístěn na stabilním, rovném povrchu s nosností 4 až 5 kg a musí být zajištěná volná cirkulace vzduchu okolo přístroje. Zajistěte, aby po zapnutí přístroje žádné materiály nebránily cirkulaci vzduchu. Vyhněte se přímému slunečnímu záření, protože může docházet k vyblednutí částí přístroje a poškození plastových dílů.

Přístroj byste měli umístit tak, aby v případě nouze bylo možné snadno vyhledat a odpojit hlavní přívod.

Přístroj přenášejte vždy tak, že jej budete držet za hlavní část a nikoli např. za volitelný připojený displej nebo podstavec NanoVolume.

Zařízení musí být zapojeno do sítě pomocí napájecího zdroje / kabelu 90 W od společnosti Implen. Síťová zásuvka musí být vybavena ochranným vodičem (uzemněním). Lze používat se systémy napájecích zdrojů 90-250 V ± 10%, 50-60 Hz.

U mobilních modelů nabijte baterii nejméně 3 hodiny před použitím přístroje. Aby nedošlo k hlubokému vybití akumulátoru, nabijte akumulátor alespoň jednou měsíčně, i když přístroj NanoPhotometer® nepoužíváte. Nabíjení baterií s hlubokým vybitím není možné, je třeba je vyměnit za nové.

Před prvním použitím si přečtete celý manuál.

Po zapojení zapněte přístroj pomocí tlačítka napájení na zadním panelu. Přístroj spustí několik kontrol vlastní diagnostiky.

Pokud zaznamenáte technické problémy nebo potíže s manipulací se vzorky, ihned kontaktujte původního dodavatele.

Poznámka: Pokud se zařízení používá způsobem, který nebyl stanoven, nebo v podmínkách prostředí, které nejsou vhodné pro bezpečný provoz, může dojít k poškození ochrany zařízení a ukončení platnosti záruky.

11. Appendix 2 - Installatie Spectrofotometer

Veiligheidsinformatie

Voordat u begint met de installatie, moet u de tijd nemen om de waarschuwingslabels en symbolen op het instrument te bekijken en te leren wat deze betekenen. Deze zijn aangebracht om u te informeren indien er een gevaar is of indien u specifieke voorzorgen moet nemen. Onjuist gebruik kan persoonlijk letsel of schade aan het instrument veroorzaken. Het instrument mag alleen worden bediend door geschoold en ervaren personeel. Lees de volledige gebruikershandleiding voordat u het instrument gebruikt.

 gelijkstroom

Overspanningscategorie: Klasse II
Maximale bedrijfshoogte: < 2000 m
Vervuilinggraad: 2

Open het instrument niet. Dit kan de gebruiker blootstellen aan elektrische stroom, UV-licht en gevoelige glasvezels en kan het instrument beschadigen.

Indien de submicrolitercel wordt gebruikt met de NanoPhotometer® C40 moet u voor de meting nagaan of het deksel op de meetkop is geplaatst.

WAARSCHUWING: UV-blootstelling wanneer u meet zonder deksel.

Gebruik geen beschadigde stroomsnoeren, accessoires en andere randapparatuur in combinatie met uw NanoPhotometer®. Gebruik alleen de meegeleverde en vermelde voeding/lader.

Stel de NanoPhotometer® niet bloot aan sterke magnetische, elektrische velden, water, chemische stoffen of andere vloeistoffen zoals zware regen of vocht.

Plaats het instrument niet in vuur. Dit kan opzwellen of ontploffen (batterij). Gebruik niet op of nabij een warmtebron, in het bijzonder temperaturen boven 60°C of in een explosieve omgeving.


Plaats uw NanoPhotometer® niet op uw schoot of een ander lichaamsdeel om ongemak of letsel door warmte te voorkomen.

Plaats geen voorwerpen bovenop de NanoPhotometer®.

De NanoPhotometer® met batterijpack (mobiele versie) moet tijdens het vervoer worden uitgeschakeld. De aan/uit-knop moet tijdens het vervoer worden beschermd zodat deze niet door schokken of trillingen wordt ingeschakeld.

Biologische monsters kunnen infectieziekten bevatten of overdragen. Let op het gezondheidsgevaar die dergelijke monsters vormen en draag aangepaste beschermende kledij. Behandel deze monsters met de grootst mogelijke zorg overeenkomstig de geldende regelgeving en organisationele vereisten voordat u met dergelijke risicohoudende materialen werkt.

Opmerking: Mors geen biologische monsters op onderdelen van het instrument. Indien dit gebeurt, moet u het instrument onmiddellijk desinfecteren volgens uw laboratoriumprotocols en de reinigingsinstructies van het instrument (zie 8 Maintenance).

Het symbool  op het product of op de documenten die bij het product werden meegeleverd, geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. U moet dit naar een geschikt inzamelpunt brengen voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Het apparaat moet worden afgevoerd overeenkomstig lokale milieuregelgeving voor afvalverwerking.

Uitpakken en plaatsen

Controleer de inhoud van de verpakking volgens de leveringsbon. Indien u ontbrekende items vaststelt, moet u uw leverancier onmiddellijk op de hoogte brengen.

Inspecteer het instrument op tekenen van schade die is ontstaan tijdens vervoer. Indien u schade vaststelt, moet u uw leverancier onmiddellijk op de hoogte brengen.

Ga na of uw gewenste installatielocatie voldoet aan de omgevingsvereisten voor een veilig gebruik: alleen binnen en in droge omgevingen te gebruiken.

De NanoPhotometer® is ontworpen en ontwikkeld voor gebruik in een gecontroleerde, veilige omgeving. Dit wordt beschreven als een laboratoriumomgeving met beperkte fysieke toegang binnen een bedrijf. De NanoPhotometer® mag alleen worden gebruikt door gekwalificeerde gebruikers en mag alleen worden bediend binnen een lokaal bedrijfsnetwerk. Indien een veilige omgeving niet is gegarandeerd, voldoet de NanoPhotometer® niet aan de volgende eisen van de Richtlijn Radioapparatuur (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Opmerking: Plaats uw NanoPhotometer® niet in de buurt van vloeistoffen, chemische stoffen, regen, vocht of stoffige omgevingen.

Temperatuurbereik 15 - 40°C (NP80, N60, N50 en C40) en 18 – 32°C (N120): indien een cuvetverwarmer wordt gebruikt, is het bereik 15 - 27°C.

Het opslagtemperatuurbereik is 0 - 40°C. Bewaar het instrument niet onder of boven deze temperatuur.

Indien het instrument wordt blootgesteld aan extreme temperatuurschommelingen, moet u het instrument mogelijk even laten acclimatiseren. Schakel het instrument uit en schakel het opnieuw in nadat het de omgevingstemperatuur heeft bereikt (2 tot 3 uur).

Maximale relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) 80% en tot 31°C, lineair afnemend tot 50% bij 40°C.

Het instrument moet op een stabiel, vlak oppervlak worden geplaatst dat 4-5 kg kan dragen en moet zo worden geplaatst dat lucht vrij rond het instrument kan stromen. Zorg ervoor dat de luchtcirculatie niet wordt geblokkeerd wanneer het instrument is ingeschakeld. Voorkom rechtstreeks zonlicht omdat dit delen van het instrument kan laten verbleken en plastic onderdelen kan beschadigen.

De apparatuur moet zo geplaatst worden dat in een noodgeval de stekker snel kan worden gevonden en losgekoppeld.

Draag het instrument steeds door het hoofdgedeelte van het instrument vast te nemen en niet door bijvoorbeeld het optionele scherm of de NanoVolume-steun vast te nemen.

De apparatuur moet zijn aangesloten met het 90W-netsnoer/voedingskabel door Implen meegeleverd. Het stopcontact moet een aarding hebben. Het instrument is geschikt voor voedingen van 90-250 V ± 10%, 50-60 Hz.

Bij mobiele modellen moet u het batterijpack vóór het eerste gebruik ten minste 3 uur laden. Om diepe ontlading van de accu te voorkomen, moet de accu ten minste eenmaal per maand worden opgeladen, zelfs als de NanoPhotometer® niet in gebruik is. Het opladen van diep ontladen accu's is niet mogelijk, deze moeten door nieuwe worden vervangen.

Lees de volledige gebruikershandleiding voor het eerste gebruik.

Schakel het instrument in met de aan/uit-knop op het achterpaneel nadat het netsnoer is aangesloten. Het systeem zal een aantal zelftests uitvoeren.

Neem onmiddellijk contact op met de originele leverancier indien u technische problemen ervaart of problemen merkt met het verwerken van monsters

Opmerking: Indien deze apparatuur wordt gebruikt op een andere manier dan hierboven vermeld of in een omgeving die niet geschikt is voor veilig gebruik, kan de voorziene bescherming van de apparatuur beschadigd raken en vervalt de garantie van het instrument.

12. Appendix 3 - Installation du spectrophotomètre

Informations de sécurité

Avant de commencer l'installation, veuillez prendre le temps de vous familiariser avec les étiquettes et symboles de mise en garde de votre instrument, ainsi qu'avec leur signification. Ces étiquettes et symboles vous indiquent les situations dans lesquelles un risque potentiel existe, ou les cas où des précautions particulières sont nécessaires. Vous pourriez vous blesser ou endommager l'instrument si vous ne l'utilisez pas correctement. L'instrument ne doit être utilisé que par du personnel expérimenté et formé de manière appropriée. Veuillez lire l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'employer l'équipement.

 Courant direct

Catégorie de surtension : Classe II

Altitude maximale de fonctionnement : < 2000 m

Degré de pollution : 2

N'ouvrez pas l'équipement car vous pourriez vous exposer à un courant électrique, de la lumière UV ou aux délicates fibres, ou encore endommager l'équipement.

Si vous utilisez la cellule Sous-microlitre avec le NanoPhotometer® C40, assurez-vous que le couvercle est bien en place sur la tête de mesure avant de mesurer.

AVERTISSEMENT: exposition aux UV lorsque vous mesurez sans le couvercle.

N'utilisez pas de cordons d'alimentation, d'accessoires ou autres périphériques endommagés avec votre NanoPhotometer®. N'utilisez que le bloc d'alimentation/chargeur fourni.

N'exposez pas le NanoPhotometer® à de puissants champs magnétiques/électriques, à de l'eau, à des produits chimiques, ou à d'autres types de liquide, par exemple, à de fortes précipitations ou à de l'humidité.

N'exposez pas l'instrument au feu, car il pourrait gonfler ou exploser (batterie). Ne stockez pas et n'utilisez pas l'instrument à proximité d'une source de chaleur, tout particulièrement à des températures supérieures à 60°C ou dans une atmosphère explosive.

Ne laissez pas votre NanoPhotometer® sur vos genoux ou à proximité d'une autre partie de votre corps pour éviter les inconforts ou de vous brûler avec la chaleur dégagée par l'équipement.

Ne placez pas d'objets sur le dessus du NanoPhotometer®.

Le NanoPhotometer® à batterie (version mobile) doit être mis hors tension durant le transport. Le bouton On/Off doit être protégé durant le transport pour éviter les mises sous tension accidentelles liées à un choc ou à des vibrations.


Les échantillons biologiques peuvent contenir ou ont le potentiel de transmettre des maladies infectieuses. Soyez conscient des risques sanitaires que présentent ces échantillons et portez les équipements de protection appropriés. Manipulez lesdits échantillons avec le plus de précautions possibles, en respectant les exigences réglementaires et professionnelles applicables avant de travailler avec ces matériaux potentiellement infectieux.

Remarque: ne renversez aucun échantillon biologique sur les composants de l'instrument. Si cela se

produit, désinfectez immédiatement l'instrument conformément aux protocoles de votre laboratoire et aux consignes de nettoyage de votre instrument (voir 8 Maintenance).

Les échantillons biologiques peuvent contenir des maladies infectieuses ou avoir le potentiel de les transmettre. Connaître les risques pour la santé présentés par ces échantillons et porter l'équipement de protection approprié. Manipulez ces échantillons avec le plus grand soin et conformément aux exigences réglementaires et organisationnelles applicables avant de travailler avec de tels matériaux potentiellement infectieux.

Note : Ne pas renverser d'échantillons biologiques sur les composants de l'instrument. En cas de déversement, désinfectez l'appareil immédiatement en suivant les protocoles de votre laboratoire et les instructions de nettoyage de l'appareil (voir page 147 Maintenance).

Le symbole  figurant sur le produit et dans les documents qui l'accompagnent indique que cet appareil ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Au lieu de cela, il doit être remis au point de collecte applicable, afin que ses composants électriques et électroniques puissent être recyclés. La mise au rebut doit être exécutée conformément aux réglementations environnementales locales applicables à la mise au rebut de déchets.

Déballage et positionnement

Vérifiez le contenu de l'emballage en le comparant au bon de livraison. Si des éléments sont manquants, informez-en immédiatement votre fournisseur.

Inspectez l'instrument pour vérifier qu'il ne présente pas de signes d'endommagement liés au transport. Si vous constatez la présence de tels signes d'endommagement, informez-en immédiatement votre fournisseur.

Assurez-vous que le site d'installation que vous avez prévu est conforme aux conditions environnementales nécessaires au fonctionnement sécurisé de l'équipement : utilisation en intérieur ou dans un environnement sec.

Le NanoPhotometer® est conçu et développé pour être utilisé dans un environnement contrôlé et sécurisé. Cela correspond à un environnement de laboratoire avec un accès physique restreint au sein d'une entreprise. Le NanoPhotometer® ne peut être utilisé que par des utilisateurs qualifiés et ne peut être exploité que dans le réseau local de l'entreprise. Si un environnement sécurisé n'est pas garanti, le NanoPhotometer® ne répond pas aux exigences suivantes de la Directive sur les équipements radio (RED DA) : ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Remarque : ne placez pas votre NanoPhotometer® à proximité de liquides, de produits chimiques, de précipitations, d'humidité ou d'environnements poussiéreux.

Plage de températures de 15 - 40°C (NP80, N60, N50 et C40) et 18 – 32°C (N120); si vous utilisez le chauffage de la cuvette, la plage de températures est de 15 - 27°C.

La température de stockage est comprise entre 0 et 40°C. Ne stockez pas l'instrument en dessous ou au-dessus de cette température.

Si l'instrument est soumis à des changements de température extrêmes, il peut s'avérer nécessaire de le laisser s'équilibrer. Mettez l'instrument hors tension puis remettez-le sous tension une fois que l'équilibre thermique est atteint (environ 2 à 3 heures).

Humidité relative maximale (sans condensation) de 80 % à une température maximale de 31°C, puis réduction linéaire jusqu'à 50 % à 40°C.

L'instrument doit être placé sur une surface stable et à niveau pouvant supporter 4 à 5 kg. L'air doit en outre pouvoir circuler librement autour de l'instrument. Lorsque l'équipement est sous tension, assurez-vous qu'aucun matériau ne réduit la circulation d'air. Évitez d'exposer l'équipement à la lumière directe du

soleil, car cela pourrait décolorer certaines de ses pièces ou endommager certaines de ses parties en plastique.

L'équipement doit être positionné de manière à ce qu'en cas d'urgence, la fiche de son câble d'alimentation soit facilement accessible et débranchable.

Transportez toujours l'instrument en maintenant sa structure, et non, par exemple, en le tenant par l'écran optionnel qui y est connecté ou par le support NanoVolume.

L'équipement doit être relié à l'alimentation secteur à l'aide du câble/bloc d'alimentation 90 W fourni par Implen. La prise électrique doit être équipée d'un conducteur protecteur (mise à la terre). L'équipement peut être utilisé avec un système d'alimentation 90–250 V ± 10%, 50–60 Hz.

Pour les modèles mobiles, veuillez recharger leur batterie pendant au moins 3 heures avant la première utilisation. Pour éviter une décharge profonde de la batterie, chargez la batterie au moins une fois par mois, même si le NanoPhotometer® n'est pas utilisé. Il n'est pas possible de recharger les batteries profondément déchargées, elles doivent être remplacées par des batteries neuves.

Veuillez lire le manuel d'utilisation complet avant la première utilisation.

Mettez l'équipement sous tension à l'aide du bouton marche/arrêt qui se trouve sur son panneau arrière une fois que vous l'avez branché. L'instrument procédera à une série de vérifications d'autodiagnostic.

Veuillez contacter immédiatement le fournisseur d'origine si vous rencontrez des difficultés techniques ou de manipulation d'échantillons.

Remarque: si cet équipement est utilisé d'une manière non conforme à ce qui est spécifié ou dans des conditions environnementales inadaptées à son fonctionnement sécurisé, la protection qu'il offre peut s'en trouver impactée, ce qui annulerait sa garantie.

13. Appendix 4 – Installation Spectrophotometer

Sicherheitsinformationen

Vor Beginn der Installation nehmen Sie sich bitte die Zeit sich mit den Beschriftungen und Warnsymbolen auf Ihrem Instrument vertraut zu machen. Diese dienen als Information wo potenzielle Gefahren auftreten können bzw. wo besondere Vorsicht geboten ist.

 Gleichstrom

Überspannungskategorie: Klasse II

Maximale Betriebshöhe: < 2000 m

Verschmutzungsgrad: 2

Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, UV-Licht Freisetzung und Beschädigung der empfindlichen Faseroptik.

Bei Verwendung der Submikroliter Messzelle in Verbindung mit dem NanoPhotometer® C40 ist sicher zu stellen, dass vor jeder Messung der Deckel auf der eingesteckten Submikrolitermesszelle liegt.

ACHTUNG: Potentiell schädliche UV- Strahlung tritt aus dem Messkopfenster aus, wenn ohne Deckel gemessen wird.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel, Zubehör und andere Peripheriegeräte in Verbindung mit dem NanoPhotometer®. Verwenden Sie nur mitgelieferte und spezifizierte Netzteile / Ladegeräte.

Setzen sie das NanoPhotometer® keinen starken magnetischen, elektrischen Feldern, Wasser oder jeglicher Art von Flüssigkeit wie Regen oder Feuchtigkeit aus.

Das Instrument nicht in der Nähe von Brandquellen bringen bzw. nicht verbrennen, da die integrierte Batterie explodieren kann. Nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen bzw. verwenden, insbesondere keinen Temperaturen über 60° C aussetzen.


Betreiben sie das NanoPhotometer® nicht auf Ihrem Schoß oder in der Nähe eines Körperteils, um Unannehmlichkeiten oder Verletzungen durch Hitzeeinwirkung zu verhindern.

Stellen Sie keine Gegenstände auf dem NanoPhotometer® ab.

NanoPhotometer® mit Akku-Pack (mobile Version) müssen während des Transports ausgeschaltet werden. Der Ein- / Ausschalter muss während des Transports gegen Stöße und Vibrationen geschützt werden, um ein selbständiges Einschalten zu verhindern (siehe auch 8 Maintenance).

Biologische Proben können Infektionskrankheiten enthalten oder haben das Potenzial, diese zu übertragen. Achten Sie auf die Gesundheitsgefährdung durch solche Proben und tragen Sie geeignete Schutzausrüstung. Behandeln Sie diese Proben mit größter Sorgfalt und gemäß den geltenden gesetzlichen und organisatorischen Anforderungen, bevor Sie mit solchen potenziell infektiösen Materialien arbeiten.

Hinweis: Verschütten Sie keine biologischen Proben auf die Gerätekomponenten. Wenn es zu einem Verschütten kommt, desinfizieren Sie das Gerät sofort nach Ihren Laborprotokollen und der Reinigungsanweisung des Gerätes (siehe Seite 147 Maintenance)

Das Symbol  auf dem Produkt bzw. auf dem Gerät beiliegenden Dokumenten, gibt an, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallentsorgung erfolgen.

Auspacken und Platzieren

Überprüfen Sie den Inhalt des Pakets anhand des Lieferscheins. Falls der Lieferumfang nicht vollständig ist, informieren Sie unverzüglich Ihren Lieferanten.

Überprüfen Sie das Gerät auf Anzeichen von Transportschäden. Falls ein Transportschaden aufgetreten ist, informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Lieferanten.

Stellen Sie sicher, dass der Installationsort die Umgebungsbedingungen für den sicheren Betrieb erfüllt: Gebrauch nur in geschlossenen Räumen bzw. trockener Umgebung.

Der NanoPhotometer® ist für den Einsatz in einer kontrollierten, sicheren Umgebung konzipiert und entwickelt. Dies wird als Laborumgebung mit eingeschränktem physischem Zugang innerhalb eines Unternehmens beschrieben. Auf den NanoPhotometer® dürfen nur qualifizierte Benutzer zugreifen, und er darf nur innerhalb eines lokalen Firmennetzwerks betrieben werden. Wenn keine sichere Umgebung gewährleistet ist, erfüllt der NanoPhotometer® nicht die folgenden Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Hinweis: Das NanoPhotometer® keinen großen Mengen an Flüssigkeiten, Regen, Feuchtigkeit oder staubiger Umgebung aussetzen.

Temperaturbereich 15 - 40° C (NP80, N60, N50 und C40) und 18 – 32°C (N120); Bei Verwendung der Küvettenheizung ist der Temperaturbereich 15 bis 27° C.

Der Lagertemperaturbereich liegt bei 0 - 40°C. Lagern Sie das Gerät nicht außerhalb dieses Bereichs.

Wenn das Gerät extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist (z.B. Transport bei niedrigen Außentemperaturen), kann es notwendig sein das Gerät der Raumtemperatur anzugleichen. Schalten sie das Gerät für ca. 2-3 Stunden aus und nach Erreichen der Raumtemperatur wieder ein.

Maximale relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) von 80% und bis zu 31°C bei einer abnehmenden Linearität von 50% bei 40°C.

Das Gerät muss auf einer stabilen, ebenen Fläche aufgestellt werden, die für 4 - 5 kg ausgelegt ist. Weiterhin sollte die Luft frei um das Gerät zirkulieren können. Stellen Sie sicher, dass während des Betriebs keine Gegenstände die Luftzirkulation behindern. Direktes Sonnenlicht sollte vermieden werden, da es Teile des Gerätes ausbleichen und Kunststoffteile beschädigen kann.

Das Gerät sollte so positioniert sein, dass im Falle eines Notfalls der Stromstecker leicht identifiziert und entfernt werden kann.

Beim Transport des Gerätes nicht am optionalen Display oder Hebelarm tragen, sondern immer am Hauptgehäuse.

Für den Betrieb des NanoPhotometers darf ausschließlich das 90W Netzteil / Kabel welches von Implen geliefert wurde verwendet werden.

Stromversorgung: 90 - 250 V \pm 10%, 50 - 60 Hz

Für Mobile Versionen bitte den Akku vor dem ersten Gebrauch für mindestens 3 Stunden laden. Um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat, auch wenn das NanoPhotometer® nicht in Betrieb ist. Das Aufladen von tiefentladenen Akkus ist nicht möglich, sie müssen durch neue ersetzt werden.

Schalten Sie das Gerät mit der Power-Taste auf der Rückseite des Gerätes ein, nachdem es eingesteckt ist. Das Instrument führt automatisch eine Reihe von Selbstdiagnoseprüfungen durch.

Bitte lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch.

Bitte kontaktieren Sie die ursprünglichen Lieferanten sofort, falls technische oder Handhabungs-Probleme auftreten.

Hinweis: Wenn dieses Gerät in einer Art und Weise verwendet wird, die nicht spezifiziert ist oder in für einen sicheren Betrieb nicht geeigneten Umgebungsbedingungen, können die Schutzfunktionen des Geräts beeinträchtigt werden und die Gerätegarantie verfällt.

14. Appendix 5 – Installazione dello Spettrofotometro

Informazioni di sicurezza

Prima di cominciare l'installazione, acquisire familiarità con i simboli e le etichette di avvertenza presenti sullo strumento e il loro significato. Simboli ed etichette segnalano potenziali pericoli oppure se occorre esercitare particolare cautela. Un utilizzo scorretto può causare lesioni personali o danni allo strumento. Lo strumento deve essere utilizzato esclusivamente da personale esperto e specificamente addestrato. Leggere per intero il manuale dell'utente prima dell'uso.

 corrente continua

Categoria di sovratensione: Classe II

Altitudine massima di funzionamento: < 2000 m

Grado di inquinamento: 2

Non aprire lo strumento per non esporre l'operatore al rischio di scossa elettrica o ai raggi UV e per evitare di danneggiare le delicate fibre ottiche o lo strumento.

Se con il NanoPhotometer® C40 si utilizza una cuvetta Submicroliter, verificare che il coperchio venga collocato sulla testa di misurazione prima di effettuare la misurazione.

AVVISO: la misurazione senza coperchio espone ai raggi UV.

Non utilizzare con il NanoPhotometer® cavi di alimentazione, accessori e/o altre periferiche danneggiati. Utilizzare solo il caricabatteria/l'alimentatore specifico in dotazione.

Non esporre il NanoPhotometer® a forti campi elettrici e/o magnetici, acqua, sostanze chimiche o qualsiasi tipo di liquido, ad esempio pioggia fitta o umidità.

Non porre lo strumento sul fuoco poiché può gonfiarsi o esplodere (la batteria). Non conservarlo e non utilizzarlo in prossimità di fonti di calore, specificamente a temperature maggiori di 60°C o in un'atmosfera esplosiva.


Il NanoPhotometer® non deve essere poggiato sulle gambe o stare in prossimità di altre parti del corpo poiché l'esposizione al calore può causare disagi o lesioni.

Non poggiare oggetti in cima al NanoPhotometer®.

Il NanoPhotometer® con il gruppo batteria (versione portatile) deve essere spento durante il trasporto. Durante il trasporto, il pulsante di accensione/spegnimento deve essere bloccato in modo da impedire che urti o vibrazioni provochino un'accensione accidentale.

I campioni biologici possono contenere patogeni infettivi o essere potenzialmente infettivi. Attenzione al rischio sanitario presentato dai campioni biologici e indossare l'equipaggiamento di protezione appropriato. Tali campioni vanno maneggiati con la massima cautela e conformemente ai requisiti aziendali e di legge che si applicano per queste sostanze potenzialmente infettive.

Nota: attenzione a non versare i campioni biologici sui componenti della strumentazione. In caso di versamenti, disinfettare immediatamente lo strumento osservando i protocolli di laboratorio e le istruzioni per la pulizia dello strumento (v. 8 Maintenance).

Il simbolo  che si trova sul prodotto oppure nella documentazione che accompagna il prodotto indica che questo dispositivo non può essere gettato con i rifiuti domestici. Deve, invece, essere portato presso il punto di raccolta idoneo per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento va eseguito in conformità delle normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Disimballaggio e collocazione

Controllare i contenuti della confezione confrontandoli con la bolla di consegna. Ove il prodotto non sia completo, informarne immediatamente il fornitore.

Ispezionare lo strumento per rilevare eventuali segni di danneggiamento subiti durante il trasporto. In caso si rilevino dei danni, informarne immediatamente il fornitore.

Accertare che il sito d'installazione proposto sia conforme ai requisiti ambientali per un utilizzo sicuro: ambiente chiuso o asciutto.

Il NanoPhotometer® è progettato e sviluppato per l'uso in un ambiente controllato e sicuro. Ciò è descritto come un ambiente di laboratorio con accesso fisico limitato all'interno di un'azienda. Il NanoPhotometer® può essere utilizzato solo da utenti qualificati e può essere operato solo all'interno della rete aziendale locale. Se non viene garantito un ambiente sicuro, il NanoPhotometer® non soddisfa i seguenti requisiti della Direttiva sulle apparecchiature radio (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Nota: non esporre il NanoPhotometer® a liquidi, sostanze chimiche, pioggia, umidità o polvere.

Intervallo di temperatura 15 - 40°C (NP80, N60, N50 e C40) e 18 – 32°C (N120); se il riscaldamento avviene tramite la cuvetta, l'intervallo è di 15 - 27°C.

La temperatura di stoccaggio è compresa tra 0 e 40°C. Non conservare lo strumento al di sotto o al di sopra di questa temperatura.

Se lo strumento subisce variazioni repentine della temperatura, può essere necessario attendere che si stabilizzi. Spegner e riaccendere lo strumento una volta che ha raggiunto la stabilità termica (~2-3 ore).

Umidità relativa massima (non condensante) dell'80% e fino a 31°C con riduzione fino al 50% a 40°C.

Lo strumento va collocato su una superficie stabile e orizzontale in grado di sostenere un peso di 4-5 kg e tale da consentire la libera circolazione dell'aria intorno allo strumento. Assicurarsi che, quando lo strumento è acceso, non vi siano materiali a ostruire la circolazione dell'aria. Non esporre ai raggi solari diretti per evitare lo scolorimenti di parti dello strumento e/o danni alle parti in plastica.

L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo che, in caso di emergenza, la spina principale possa essere individuata ed estratta facilmente.

Lo strumento deve essere trasportato sempre afferrandone il corpo principale e non, ad esempio, il display opzionale attaccato o il piedistallo NanoVolume.

L'apparecchio deve essere collegato all'alimentazione utilizzando il cavo di alimentazione/l'alimentatore da 90 watt fornito da Implen. La presa di alimentazione deve essere provvista di conduttore di protezione (terra/massa). Può essere utilizzata con sistemi di alimentazione a 90-250 V ± 10% e 50-60 Hz.

Per i modelli portatili, il gruppo batteria deve essere caricato per almeno 3 ore prima del primo utilizzo. Per evitare la scarica profonda del pacco batteria, caricare il pacco batteria almeno una volta al mese anche se il NanoPhotometer® non è in uso. Non è possibile ricaricare le batterie completamente scariche che devono essere sostituite con batterie nuove.

Si prega di leggere il manuale utente completo prima del primo utilizzo.

Dopo averlo collegato, accendere lo strumento utilizzando il pulsante di accensione sul pannello posteriore. Lo strumento esegue una serie di test di autodiagnostica.

In caso di difficoltà di natura tecnica o con la manipolazione dei campioni, contattare immediatamente il fornitore originale.

Nota: se questa apparecchiatura viene utilizzata secondo modalità diverse da quelle specificate oppure in condizioni ambientali non idonee a un utilizzo sicuro, la protezione di cui è dotata potrebbe risultare compromessa, invalidando così la garanzia sullo strumento.

15. Appendix 6 – Instalacja Spektrofotometru

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z etykietami ostrzegawczymi i symbolami umieszczonymi na urządzeniu oraz z ich znaczeniem. Informują one o możliwym zagrożeniu lub o konieczności zachowania szczególnej uwagi. Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony i doświadczony personel. Przed użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi.

⚡ prąd stały

Kategoria przepięciowa: Klasa II

Maksymalna wysokość pracy: < 2000 m

Stopień zanieczyszczenia: 2

Nie wolno otwierać urządzenia, ponieważ może to narazić użytkownika na kontakt z energią elektryczną i światłem ultrafioletowym, odsłonić delikatne obwody światłowodowe lub spowodować uszkodzenie urządzenia.

Przed pomiarem komórek o pojemności ułamka mikrolitra przy użyciu modelu NanoPhotometer® C40 należy nałożyć pokrywę na głowicę pomiarową.

OSTRZEŻENIE: pomiar bez pokrywy naraża na kontakt ze światłem ultrafioletowym.

Z urządzeniem NanoPhotometer® nie wolno używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów i innych urządzeń peryferyjnych. Używać należy wyłącznie dostarczonego w zestawie i zgodnego ze specyfikacją zasilacza lub ładowarki.

Nie wolno narażać urządzenia NanoPhotometer® na działanie mocnych pól magnetycznych i elektrycznych, wody, chemikaliów ani jakichkolwiek płynów, takich jak mocne opady atmosferyczne lub wilgoć.

Urządzenia nie wolno wrzucać do ognia, ponieważ może napęcznieć lub eksplodować (akumulator). Urządzenia nie wolno przechowywać ani używać w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła, szczególnie o temperaturze powyżej 60°C, ani w atmosferze grożącej wybuchem.


Nie wolno pozostawiać urządzenia NanoPhotometer® na kolanach ani w pobliżu innych części ciała, aby zapobiec poczuciu dyskomfortu oraz obrażeniom ciała wskutek oddziaływania wysokiej temperatury.

Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu NanoPhotometer®.

Przed przeniesieniem urządzenia NanoPhotometer® z akumulatorem (wersji mobilnej) należy je wyłączyć. Przycisk zasilania należy chronić podczas transportu, aby uniknąć samoczynnego włączenia wskutek wstrząsu lub wibracji.

Próbki biologiczne mogą zawierać mikroorganizmy zakaźne lub przenosić choroby. Należy zdawać sobie sprawę z zagrożenia dla zdrowia powodowanego przez takie próbki i stosować odpowiednie wyposażenie ochronne. Z próbkami zawierającymi materiały potencjalnie zakaźne należy się obchodzić z największą ostrożnością oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i procedurami organizacyjnymi.

Uwaga: Należy unikać rozlewania próbek biologicznych na elementach urządzenia. Jeżeli dojdzie do rozlania, należy niezwłocznie zdezynfekować urządzenie zgodnie z procedurami laboratoryjnymi oraz instrukcją czyszczenia urządzenia (zob. 8 Maintenance).

Symbol  umieszczony na produkcie lub na dokumentach dodanych do produktu oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jako odpadu komunalnego. Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu odbiorczego, zajmującego się utylizacją urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Utylizacji należy dokonać zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi odnoszącymi się do utylizacji odpadów.

Rozpakowywanie i umiejscowienie

Sprawdź zawartość zestawu pod kątem zgodności z dowodem dostawy. W przypadku jakichkolwiek braków niezwłocznie poinformuj dostawcę.

Sprawdź, czy na urządzeniu nie ma żadnych śladów uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń niezwłocznie poinformuj dostawcę.

Sprawdź, czy zamierzone miejsce instalacji jest zgodne ze środowiskowymi warunkami bezpiecznej obsługi: eksploatacja w pomieszczeniu lub w suchym otoczeniu.

NanoPhotometer® został zaprojektowany i opracowany do użytku w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku. Oznacza to środowisko laboratoryjne z ograniczonym dostępem fizycznym w firmie. Do NanoPhotometer® mają dostęp wyłącznie wykwalifikowani użytkownicy i może on być obsługiwany jedynie

w ramach lokalnej sieci firmowej. Jeśli nie zapewniono bezpiecznego środowiska, NanoPhotometer® nie spełnia następujących wymagań Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Uwaga: NanoPhotometer® należy trzymać z daleka od płynów, chemikaliów, deszczu, wilgoci oraz zapyłonego otoczenia.

Zakres temperatury: 15 – 40°C (NP80, N60, N50 i C40) i 18 – 32°C (N120). Jeżeli jest stosowane podgrzewanie kuwety, zakres ten wynosi 15 – 27°C.

Zakres temperatur przechowywania wynosi 0 - 40°C. Nie przechowuj urządzenia poniżej lub powyżej tej temperatury.

W przypadku ekstremalnych zmian temperatury może być konieczne zrównoważenie temperatury urządzenia. W tym celu należy je wyłączyć i włączyć ponownie po osiągnięciu równowagi termicznej (po około 2–3 godzinach).

Maksymalna wilgotność względna (bez kondensacji) wynosi 80% w temperaturze do 31°C i zmniejsza się liniowo do 50% w temperaturze 40°C.

Urządzenie należy umieścić na stabilnej i równej powierzchni, która utrzyma 4–5 kg, w taki sposób, by zapewnić swobodny obieg powietrza wokół urządzenia. Kiedy urządzenie jest włączone, żadne materiały nie powinny ograniczać obiegu powietrza. Należy unikać bezpośredniego wystawienia urządzenia na działanie światła słonecznego, ponieważ może to powodować płowienie jego części i uszkodzenie elementów plastikowych.

Urządzenie należy ustawić tak, by w sytuacji awaryjnej można było łatwo odnaleźć i odłączyć jego wtyk przewodu zasilania.

Urządzenie należy przenosić, trzymając je zawsze za główny korpus, a nie np. za opcjonalny dołączany wyświetlacz lub podstawę NanoVolume.

Urządzenie należy połączyć ze źródłem zasilania przewodem zasilania o mocy 90 W dostarczonym przez firmę Implen. Gniazdo zasilania musi być uziemione. Urządzenie można stosować z systemami zasilania o napięciu 90–250 V ± 10%, 50/60 Hz.

Akumulator modeli mobilnych należy naładować przez co najmniej 3 godziny przed pierwszym użyciem. Aby uniknąć głębokiego rozładowania akumulatora, akumulator należy ładować przynajmniej raz w miesiącu, nawet jeśli NanoPhotometer® nie jest używany. Ładowanie głęboko rozładowanych akumulatorów nie jest możliwe, ponieważ muszą one zostać wymienione na nowe.

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać pełną instrukcję obsługi.

Po połączeniu urządzenia ze źródłem zasilania należy je włączyć przyciskiem zasilania na panelu tylnym. Urządzenie wykona serię testów diagnostycznych.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych lub z próbką należy niezwłocznie skontaktować się z pierwotnym dostawcą urządzenia.

Uwaga: Eksploatacja urządzenia w sposób niezgodny ze specyfikacją lub w warunkach niesprzyjających bezpiecznemu działaniu może zmniejszyć skuteczność jego zabezpieczeń i doprowadzić do unieważnienia gwarancji.

16. Appendix 7 – Instalación del Espectrofotómetro

Información de seguridad

Antes de comenzar con la instalación, dedique un tiempo a familiarizarse con las etiquetas y símbolos de advertencia del instrumento y con su significado. Son para informarle cuando existan daños potenciales o

se requiera una precaución particular. El uso incorrecto podría causar lesiones personales o daños en el instrumento. El instrumento solo debe ser usado por personal debidamente formado y con experiencia. Lea el manual del usuario en su totalidad antes de usar la unidad.

— corriente continua

Categoría de sobretensión: Clase II
Altitud máxima de trabajo: < 2000 m
Grado de contaminación: 2

No abra el instrumento, pues ello podría exponer al operario a corriente eléctrica, luz UV y fibra óptica sensible, o dañar el instrumento

Si se usa la celda submicrolitro con el NanoPhotometer® C40, asegúrese de que la tapa está colocada en el cabezal de medición antes de tomar la medida.

ADVERTENCIA: Exposición a UV si se mide sin tapa.

No utilice cables eléctricos, accesorios u otros periféricos deteriorados con el NanoPhotometer®. Utilice únicamente la fuente de alimentación/cargador suministrados y especificados.

No exponga el NanoPhotometer® a campos magnéticos o eléctricos intensos ni tampoco a agua, productos químicos o ningún otro tipo de líquido, como lluvia o humedad elevada.

No arroje el instrumento al fuego, pues podría inflamarse o explotar (la batería). No lo guarde ni lo utilice en las proximidades de fuentes de calor, en especial a temperaturas superiores a 60°C o en una atmósfera explosiva.

No se apoye el NanoPhotometer® en el regazo ni cerca de ninguna parte de su cuerpo para evitar molestias o lesiones debidas a la exposición al calor.

No coloque objetos encima del NanoPhotometer®.


El NanoPhotometer® con batería (versión portátil) deberá apagarse durante su transporte. El botón de encendido/apagado deberá protegerse durante el transporte para evitar su encendido accidental debido a golpes o vibraciones.

Las muestras biológicas podrían contener o tener el potencial de transmitir enfermedades infecciosas. Tenga en cuenta los riesgos para la salud que suponen dichas muestras y lleve un equipo protector adecuado. Manipule estas muestras con el máximo cuidado y siguiendo los requisitos normativos y de su organización aplicables antes de trabajar con dichos materiales potencialmente infecciosos.

Nota: No vierta muestras biológicas sobre los componentes del instrumento. Si se produjeran vertidos accidentales, desinfecte de inmediato el instrumento siguiendo los protocolos de su laboratorio y las instrucciones de limpieza del instrumento (consulte 8 Maintenance).

Las muestras biológicas pueden contener o tener el potencial de transmitir enfermedades infecciosas. Tenga en cuenta los riesgos para la salud que presentan dichas muestras y use el equipo de protección adecuado. Manipule dichas muestras con el mayor cuidado y de acuerdo con los requisitos reglamentarios y organizativos aplicables antes de trabajar con dichos materiales potencialmente infecciosos.

Nota: No derrame ninguna muestra biológica sobre los componentes del instrumento. Si se produce un derrame, desinfecte el instrumento inmediatamente siguiendo sus protocolos de laboratorio y las instrucciones de limpieza del instrumento (véase la página 147 Maintenance)

El símbolo  situado sobre el producto, o en la documentación que acompaña al producto, indica que este dispositivo no debe ser tratado como residuo doméstico. Deberá llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El desecho deberá llevarse a cabo siguiendo las normativas medioambientales locales sobre el desecho de residuos.

Desembalaje e instalación

Compruebe que el contenido del embalaje coincide con la nota de entrega. Si observa que falta algún componente, informe a su distribuidor de inmediato.

Inspeccione el instrumento por si hubiera signos de daños producidos durante el transporte. Si se observan daños, informe de inmediato a su distribuidor.

Asegúrese de que el lugar donde desea instalar la unidad cumple las condiciones ambientales sobre funcionamiento seguro: uso en interiores o en un ambiente seco.

El NanoPhotometer® está diseñado y desarrollado para su uso en un entorno controlado y seguro. Esto se describe como un entorno de laboratorio con acceso físico restringido dentro de una empresa. El NanoPhotometer® solo puede ser utilizado por usuarios cualificados y solo puede operar dentro de la red local de la empresa. Si no se garantiza un entorno seguro, el NanoPhotometer® no cumple con los siguientes requisitos de la Directiva de Equipos de Radio (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Nota: No coloque el NanoPhotometer® cerca de líquidos o productos químicos, ni en entornos con lluvia, humedad o polvo.

Rango de temperatura 15 - 40°C (NP80, N60, N50 y C40) y 18 – 32°C (N120); si se usa la calefacción de la cubeta, el rango es de 15 - 27°C.

El rango de temperatura de almacenamiento es de 0 - 40°C. No almacene el instrumento por debajo o por encima de esta temperatura.

Si se somete el instrumento a cambios de temperatura extremos, podría ser necesario dejar que se equilibre el instrumento. Apague el instrumento y vuelva a encenderlo una vez alcanzado el equilibrio térmico (~2-3 horas).

Humedad relativa máxima (sin condensación) del 80% y hasta 31°C con reducción lineal hasta 50% a 40°C.

El instrumento debe colocarse sobre una superficie estable y plana que pueda soportar 4-5 kg y que permita que el aire circule con libertad alrededor del instrumento. Asegúrese de que ningún material reduzca la circulación del aire con la unidad encendida. Evite la luz solar directa, pues podría decolorar algunas partes del instrumento y dañar las piezas de plástico.

El equipo deberá colocarse de modo que, en caso de emergencia, el enchufe principal pueda localizarse y desenchufarse con facilidad.

Sujete el instrumento en todo momento por su cuerpo principal y no por la pantalla opcional acoplada o por el pedestal NanoVolume.

El equipo deberá conectarse a la corriente con la fuente de alimentación/cable de 90 W suministrada por. La toma de corriente deberá tener protección con toma de tierra. Puede usarse con fuentes de alimentación de 90-250 V \pm 10%, 50-60 Hz.

Para el caso de modelos portátiles, la batería deberá cargarse durante al menos 3 horas antes de su primer uso. Para evitar una descarga profunda de la batería, cargue la batería al menos una vez al mes, incluso si el NanoPhotometer® no está en uso. No es posible recargar las baterías completamente descargadas, ya que deben ser sustituidas por otras nuevas.

Por favor, lea el manual de usuario completo antes de la primera utilización.

Encienda el instrumento con el botón de encendido situado en el panel posterior una vez enchufado. El instrumento llevará a cabo una serie de pruebas de autodiagnóstico.

Contacte con el distribuidor original de inmediato si experimenta dificultades técnicas o de manipulación de muestras.

Nota: Si se usara este equipo de un modo no especificado o en condiciones ambientales no adecuadas para un funcionamiento seguro, la protección proporcionada por el equipo podría verse afectada y se anularía la garantía del instrumento.

17. Appendix 8 – Spektrofotometerinstallation

Säkerhetsinformation

Innan installationen påbörjas, var vänlig ägna tid åt att bekanta dig med ditt instruments varningsetiketter och symboler samt deras innebörd. De finns där för att informera dig om var det föreligger en risk eller särskild försiktighet krävs. Felaktig användning kan orsaka personskador eller skada instrumentet. Instrumentet får endast användas av personal som har lämplig utbildning och erfarenhet. Var vänlig och läs hela användarhandboken innan första användningen.

— — likström

Överspänningskategori: klass II

Maximal arbetshöjd: < 2000 m

Föroreningsgrad: 2

Öppna inte det här instrumentet eftersom det kan exponera operatören för elektrisk ström, UV-ljus och känslig fiberoptik eller skada instrumentet.

Om submikrolitercellen används med NanoPhotometer® C40, var noga med att sätta på locket på mät huvudet innan mätningen.

WARNING: UV-exponering vid mätning utan lock.

Använd inte skadade elkablar, tillbehör eller annan kringutrustning med din NanoPhotometer®. Använd bara den medföljande och föreskrivna strömförsörjningen/laddaren.

Exponera inte NanoPhotometer® för starka magneter, elektriska fält, vatten, kemikalier eller någon typ av vätska som kraftigt regn eller fukt.

Lägg inte instrumentet i eld, det kan då svälla och explodera (batteriet). Förvara inte och använd inte heller i närheten av någon typ av värmekälla, särskilt inte temperaturer över 60°C, eller i en explosiv atmosfär.


För att förhindra obehag av eller skada från värmeexponering ska din NanoPhotometer® inte läggas i ditt knä eller i närheten av någon kroppsdel.

Placera inte föremål ovanpå NanoPhotometer®.

NanoPhotometer® med batteripaket (mobil version) måste stängas av under transport. Knappen för att slå på/av måste skyddas under transport, så att den inte slås på av sig själv på grund av stöt eller vibration.

Biologiska prover kan innehålla eller har potential att överföra smittsamma sjukdomar. Var medveten om hälsorisen som sådana prover innebär och använd lämplig skyddsutrustning. Hantera sådana prover med största aktsamhet och i enlighet med tillämpliga reglerande och organisatoriska bestämmelser innan arbete med sådant potentiellt infektiöst material utförs.

Obs: Spill inte några biologiska prover på instrumentkomponenter. Om något spills, desinficera instrumentet omedelbart i enlighet med laboratorieregler och rengöringsanvisningarna för instrumentet (se 8 Maintenance).

Symbolen  på produkten eller på dokumenten som medföljer produkten visar på att den här apparaten inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska istället lämnas in på lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassering måste göras i enlighet med lokala miljöbestämmelsers föreskrifter för avfallshantering.

Uppackning och placering

Kontrollera innehållet i förpackningen mot följesedeln. Om det saknas något ska din leverantör omedelbart informeras.

Inspektera instrumenten för alla tecken på skador uppkomna under transport. Om någon skada upptäcks ska din leverantör omedelbart informeras.

Kontrollera att din föreslagna installationsplats överensstämmer med de miljömässiga villkoren för säker användning: inomhusanvändning eller torr miljö.

NanoPhotometer® är designad och utvecklad för användning i en kontrollerad, säker miljö. Detta beskrivs som en laboratoriemiljö med begränsad fysisk åtkomst inom ett företag. NanoPhotometer® får endast användas av kvalificerade användare och får endast driftas inom ett lokalt företagsnätverk. Om en säker miljö inte säkerställs uppfyller NanoPhotometer® inte följande krav enligt Radio Equipment Directive (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Obs: Låt inte din NanoPhotometer® komma nära vätskor, kemikalier, regn, fukt eller dammiga miljöer.

Temperaturområde 15 - 40°C (NP80, N60, N50 och C40) och 18 – 32°C (N120); Om kuvettuppvärmning används är området 15 - 27°C.

Förvaringstemperaturintervallet är 0 - 40 ° C. Förvara inte instrumentet under eller över denna temperatur.

Om instrumentet utsätts för extrema temperaturförändringar kan det bli nödvändigt att låta instrumentet utbalanseras. Stäng av instrumentet för att sedan slå på det igen när termisk jämvikt har uppnåtts (ca 2-3 timmar).

Maximal relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) 80% och upp till 31°C linjärt minskande till 50 % vid 40°C.

Instrumentet måste placeras på en stabil, jämn yta som kan bära 4-5 kg och tillåter att luft fritt kan cirkulera runt instrumentet. Kontrollera när den är påslagen att inget material minskar luftcirkulationen. Undvik direkt solljus eftersom det kan bleka delar av instrumentet och orsaka skada på delar som är tillverkade av plast.

Utrustningen ska placeras på så sätt att det, i händelse av en nödsituation, är enkelt att hitta och dra ur elkontakten.

Bär alltid instrumentet genom att hålla i instrumentets huvudkropp och inte i t.ex. den display som finns ansluten som tillval eller NanoVolume-pelaren.

Utrustningen måste vara ansluten till ström med 90 W strömförsörjning/sladd som levererats av Implen. Strömuttaget måste ha en skyddsledare (jord). Den kan användas med strömförsörjningssystem med 90-250 V ± 10%, 50-60 Hz.

För mobila modeller, var vänlig ladda batteripaketet minst 3 timmar innan första användning. För att undvika djupladdning av batteriet ladda batteriet minst en gång i månaden även om NanoPhotometer® inte används. Uppladdning av djupa urladdade batterier är inte möjligt, de behöver bytas ut av nya.

Läs den kompletta bruksanvisningen innan du börjar använda den.

Slå på instrumenten med strömknappen på den bakre panelen, efter att det har anslutits. Instrumentet utför då en serie självdiagnostiska kontroller.

Var vänlig kontakta genast ursprungsleverantören vid svårigheter av teknisk art eller med att hantera prov.

Obs: Om den här utrustningen används på ett sätt som inte är föreskrivet eller i miljöförhållanden som inte är lämpliga för säker drift kan skyddet som utrustningen tillhandahåller försämrats och instrumentets garanti förverkas.

18. Appendix 9 – Instalação de Espectrofotómetro

Informações de Segurança

Antes de começar a instalação, procure familiarizar-se com os símbolos e as etiquetas de aviso no instrumento e o respetivo significado. Destinam-se a informá-lo sobre onde se encontram os potenciais perigos ou onde é necessário aplicar um cuidado especial. A utilização inadequada pode provocar ferimentos pessoais ou danificar o instrumento. O instrumento apenas deve ser operado por pessoal experiente e com a devida formação. Antes de usar, leia integralmente o manual de utilizador.

— — — corrente contínua

Categoria de sobretensão: classe II
Altura máxima de trabalho: < 2000 m
Grau de poluição: 2

Não abra o instrumento, dado que pode expor o operador à corrente elétrica, a luz UV e a delicadas fibras óticas, além do risco de o danificar.

Se for usado o alvéolo submicroliter com o NanoPhotometer® C40, certifique-se de que a tampa está colocada no ponto de medição, antes de proceder à medição.

AVISO: Exposição a UV se a medição for realizada sem a tampa.

Não utilize cabos de corrente, acessórios ou outros instrumentos periféricos danificados com o seu NanoPhotometer®. Utilize apenas a bateria/carregador especificado fornecido.

Não exponha o NanoPhotometer® a campos magnéticos potentes, cargas elétricas excessivas, água, produtos químicos ou qualquer outro tipo de líquido, como a chuva forte ou a humidade.

Não submeta o instrumento a fogo, dado que pode dilatar ou explodir (bateria). Não guarde nem use o instrumento na proximidade de qualquer tipo de fonte de calor, especialmente a temperaturas superiores a 60°C ou em ambientes explosivos.

Não use o NanoPhotometer® sobre o seu colo ou regaço nem junto a qualquer parte do seu corpo, para evitar o desconforto ou ferimentos provocados pela exposição ao calor.


Não coloque quaisquer objetos sobre o NanoPhotometer®.

O NanoPhotometer® com bateria (versão portátil) deve estar desligado durante o transporte. O botão on/off (ligar/desligar) deve estar protegido durante o transporte, para não se ligar acidentalmente devido aos choques ou vibrações.

As amostras biológicas podem conter ou ter o potencial para transmitir doenças infecciosas. Tome consciência do perigo para a saúde decorrente dessas amostras e use o equipamento de proteção adequado. Manuseie essas amostras com o maior cuidado e em conformidade com a regulamentação e os requisitos de organização aplicáveis antes de trabalhar com esses potenciais materiais infecciosos.

Nota: Tenha o cuidado de não derramar amostras biológicas sobre os componentes do instrumento. Se

ocorrer um derrame, desinfete imediatamente o instrumento, seguindo os protocolos do seu laboratório e as instruções para limpeza do aparelho (consulte 8 Maintenance).

O símbolo  no instrumento, ou nos documentos que o acompanham, indica que o aparelho não pode ser tratado como resíduo doméstico. Pelo contrário, deverá ser encaminhado para um ponto de recolha adequado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. A eliminação deverá ser realizada em conformidade com as regulamentações ambientais locais para a eliminação de resíduos.

Desembalamento e Posicionamento

Confirme se o conteúdo da embalagem corresponde à nota de entrega. Se detetar a falta de algum componente, informe imediatamente o fornecedor.

Examine se o instrumento apresenta alguns sinais de danos provocados pelo transporte. Se detetar a existência de algum dano, informe imediatamente o fornecedor.

Certifique-se de que o local onde pretende instalar o instrumento cumpre as condições ambientais para o funcionamento em segurança: utilização em espaços interiores ou ambiente seco.

O NanoPhotometer® foi concebido e desenvolvido para uso num ambiente controlado e seguro. Isto é descrito como um ambiente de laboratório com acesso físico restrito dentro de uma empresa. O NanoPhotometer® só pode ser acedido por utilizadores qualificados e só pode ser operado dentro de uma rede local da empresa. Se não for garantido um ambiente seguro, o NanoPhotometer® não cumpre os seguintes requisitos da Diretiva de Equipamentos de Rádio (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Nota: Não instale o NanoPhotometer® na proximidade de líquidos ou produtos químicos, nem à chuva ou em ambientes húmidos ou com poeiras.

A amplitude da temperatura é de 15 - 40°C (NP80, N60, N50 e C40) e 18 - 32°C (N120). Se for utilizada a cubeta de aquecimento, a amplitude é de 15 - 27°C.

A faixa de temperatura de armazenamento é de 0 - 40°C. Não armazene o instrumento abaixo ou acima desta temperatura.

Se o instrumento for submetido a alterações extremas de temperatura, pode ser necessário permitir o respetivo equilíbrio. Desligue o instrumento e volte a ligar depois de alcançar o equilíbrio térmico (~2-3 horas).

A humidade relativa máxima (não condensação) é de 80% e até 31°C, reduzindo progressivamente até 50% a 40°C.

O instrumento deve ficar posicionado numa superfície nivelada e estável e que suporte 4 - 5 kg e que permita que o ar circule livremente em redor do instrumento. Ao ligar o instrumento, certifique-se de que não existem materiais que reduzam a circulação do ar. Evite a luz solar direta, dado que pode descolorar e danificar as peças plásticas do instrumento.

O equipamento deve estar posicionado de forma a permitir que, em caso de emergência, a ficha elétrica possa ser facilmente localizada e removida da tomada de corrente.

Para transportar o instrumento, segure sempre pelo corpo principal e não pelos acessórios opcionais, por exemplo, pelo visor ou pela base do NanoVolume.

O equipamento deve ser ligado à corrente através do cabo elétrico de 90W fornecido pela Implen. A tomada de corrente deve dispor de um condutor de proteção (ligação à terra). Pode ser usado num sistema de alimentação elétrica de 90-250 V ± 10%, 50-60 Hz.

Para modelos Portáteis, carregue a bateria pelo menos durante 3 horas antes de usar pela primeira vez. Para evitar uma descarga profunda da bateria, carregue a bateria pelo menos uma vez por

mês, mesmo que o NanoPhotometer® não esteja em uso. A recarga de baterias descarregadas em profundidade não é possível, elas precisam ser substituídas por outras novas.

Leia o manual do usuário completo antes da primeira utilização.

Ligue o instrumento no botão de energia situado no painel traseiro, depois de ligado na tomada de corrente. O instrumento realiza um conjunto de verificações em auto-diagnóstico.


Contacte imediatamente o fornecedor original se ocorrerem dificuldades técnicas ou no manuseamento de amostras.

Nota: Se este equipamento for utilizado de forma não especificada ou em condições ambientais não adequadas para o funcionamento em segurança, a proteção proporcionada pelo equipamento pode ficar comprometida e a garantia do instrumento pode ser anulada.

19. Appendix 10 - ИНСТАЛАЦИЯ НА СПЕКТРОФОТОМЕТЪР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да започнете инсталацията, моля, отделете време да се запознаете с етикетите и предупредителните символи на вашето устройство. Те предоставят информация за потенциални опасности и места, където е необходима специална предпазливост.

 Постоянен ток

Напреженова категория: Клас II

Максимална височина на експлоатация: < 2000 м

Степен на замърсяване: 2

По никакъв начин не отваряйте устройството. Съществува риск от електрически удар, освобождаване на UV светлина и повреда на чувствителната фиброоптика.

При използване на субмикролитрова измервателна клетка с NanoPhotometer® C40, уверете се, че капакът на поставената субмикролитрова измервателна клетка е на място преди всяко измерване.

ВНИМАНИЕ: Потенциално вредно UV лъчение излиза от прозореца за измерване, ако измервате без капак.

Не използвайте повредени захранващи кабели, аксесоари и други периферни устройства с NanoPhotometer®. Използвайте само предоставените и специфицирани захранващи устройства / зарядни.

Не излагайте NanoPhotometer® на силни магнитни или електрически полета, вода или каквато и да е течност като дъжд или влага.

Не поставяйте устройството близо до източници на огън или го изгаряйте, тъй като вградена батерия може да експлодира. Не го поставяйте или използвайте близо до източници на топлина, особено не на температури над 60° C.


Не използвайте NanoPhotometer® на скута си или в близост до част от тялото, за да предотвратите дискомфорт или наранявания от топлинно въздействие.

Не поставяйте предмети на NanoPhotometer®.

NanoPhotometer® с акумулаторна батерия (мобилна версия) трябва да бъде изключен по време на транспорт. Включвателят / изключвателят трябва да бъде защитен от удари и вибрации по време на транспорт, за да се предотврати самостоятелно включване (вижте също 8 Поддръжка).

Биологичните проби могат да съдържат инфекциозни заболявания или да имат потенциал да ги предават. Внимавайте за здравословните рискове от такива проби и носете подходяща защитна екипировка. Обработвайте тези проби с голямо внимание и съобразно действащите законови и организационни изисквания, преди да работите с такива потенциално инфекциозни материали.

Бележка: Не разливайте биологични проби върху компонентите на устройството. Ако се случи разливане, дезинфекцирайте устройството веднага след вашите лабораторни протоколи и инструкциите за почистване на устройството (вижте страница 150 Поддръжка).

Символът на  продукта или в приложените документи показва, че това устройство не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Вместо това трябва да бъде предадено на място за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърлянето трябва да става съгласно местните разпоредби за управление на отпадъците.

РАЗПАКОВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ

Проверете съдържанието на пакета съгласно товарителницата. Ако съдържанието не е пълно, незабавно уведомете вашия доставчик.

Проверете устройството за признаци на транспортни повреди. Ако има транспортни повреди, моля, незабавно уведомете вашия доставчик.

Уверете се, че мястото за инсталация отговаря на условията за безопасна работа: използване само в закрити помещения или суха среда.

NanoPhotometer® е проектиран и разработен за използване в контролирана и сигурна среда. Това се описва като лабораторна среда с ограничен физически достъп в рамките на компанията. До NanoPhotometer® имат достъп само квалифицирани потребители и може да се използва само в рамките на локалната фирмена мрежа. Ако не се гарантира сигурна среда, NanoPhotometer® не отговаря на следните изисквания на Директивата за радиоустройства (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Бележка: Не излагайте NanoPhotometer® на големи количества течности, дъжд, влага или прашна среда.

Температурен обхват 15 - 40° C (NP80, N60, N50 и C40) и 18 - 32° C (N120); При използване на нагревателя за кювети температурният обхват е от 15 до 27° C.

Обхват на съхранение: 0 - 40° C. Не съхранявайте устройството извън този обхват.

Ако устройството е изложено на екстремни температурни колебания (напр. транспорт при ниски външни температури), може да се наложи устройството да се адаптира към стайна температура. Изключете устройството за около 2-3 часа и го включете отново след достигане на стайната температура.

Максимална относителна влажност (без кондензация) от 80% и до 31° C при намаляваща линейност от 50% при 40° C.

Устройството трябва да бъде поставено на стабилна, равна повърхност, предназначена за 4 - 5 кг. Освен това, въздухът трябва да може да циркулира свободно около устройството. Уверете се, че по време на работа не се поставят предмети, които да пречат на циркулацията на въздуха.

Прекомерната слънчева светлина трябва да се избягва, тъй като може да избелва части от устройството и да повреди пластмасовите части.

Устройството трябва да бъде позиционирано така, че в случай на спешност захранващият кабел да може лесно да бъде идентифициран и изключен.

По време на транспорт не носете устройството за опционалния дисплей или лост, а винаги за основния корпус.

За работа на NanoPhotometer трябва да се използва само захранващото устройство / кабел с 90W, предоставено от Implen.

Захранване: 90 - 250 V ± 10%, 50 - 60 Hz

За мобилни версии моля, заредете батерията поне 3 часа преди първата употреба. За да се избегне дълбоко разреждане на батерията, зареждайте батерията поне веднъж месечно, дори ако NanoPhotometer® не е в експлоатация. Зареждането на дълбоко разредени батерии не е възможно, те трябва да бъдат заменени с нови.

Включете устройството с бутон Power на задната страна на устройството, след като е включено в електрическата мрежа. Устройството автоматично извършва серия от самодиагностични тестове.

Моля, прочетете пълната ръководство за употреба преди употреба.

Моля, свържете се незабавно с оригиналните доставчици, ако възникнат технически или обслужващи проблеми

Бележка: Ако това устройство се използва по начин, който не е специфициран или в условия, които не са подходящи за безопасна работа, защитните функции на устройството могат да бъдат нарушени и гаранцията на устройството става невалидна.

20. Appendix 11 - SPEKTROFOTOMEETRI PAIGALDAMINE

OHUTUSTEAVE

Enne paigalduse alustamist võtke palun aega, et tutvuda oma seadme etikettide ja hoiatussümbolitega. Need annavad teavet võimalike ohtude kohta ja kohtades, kus on vajalik eriline ettevaatus.

 Pidev vool

Pinge kategooria: Klass II

Maksimaalne töö kõrgus: < 2000 m

Saastumise aste: 2

Ärge mingil juhul avage seadet. On oht elektrilöögiks, UV-valguse vabastamiseks ja tundliku kiudoptilise süsteemi kahjustamiseks.

Kui kasutate submikrolitrit mõõtmisrakku koos NanoPhotometer® C40-ga, veenduge, et iga mõõtmise eel oleks kaan submikrolitrit mõõtmisrakul kohal.

HOIATUS: Potentsiaalselt kahjulik UV-kiirgus pääseb mõõtmisaknast välja, kui mõõdate ilma kaaneta.

Ärge kasutage kahjustatud toitekaableid, tarvikuid ja muid perifeerseadmeid koos NanoPhotometer®-iga. Kasutage ainult tarnitud ja spetsifitseeritud toiteallikaid / laadijaid.

Ärge seadke NanoPhotometer® tugevale magnetilisele või elektrilisele väljale, veele ega mingit tüüpi vedelikele nagu vihm või niiskus.

Ärge asetage seadet tuleallikate lähedusse ega põletage seda, kuna sisemised akud võivad plahvatada. Ärge asetage ega kasutage seadet kuumusallikate läheduses, eriti mitte üle 60° C temperatuuridel.


Ärge kasutage NanoPhotometer®-i oma süles või kehaosa läheduses, et vältida kuumusest põhjustatud ebamugavusi või vigastusi.

Ärge asetage esemeid NanoPhotometer® peale.

NanoPhotometer® akupakiga (mobiilne versioon) tuleb transportimise ajal välja lülitada. Lülitus peab transportimise ajal olema kaitstud löökide ja vibratsioonide eest, et vältida seadme iseeneslikku sisse lülitamist (vt ka 8 Hooldus).

Bioloogilised proovid võivad sisaldada nakkushaigusi või neil on potentsiaal neid edasi anda. Olge ettevaatlik nende proovide terviseriskide osas ja kandke sobivat kaitsevarustust. Kohtle neid proove suure ettevaatlikkuse ja vastavalt kohalikele seaduslikele ja organisatsioonilistele nõuetele, enne kui töötate nende potentsiaalselt nakkusohlike materjalidega.

Märkus: Ärge pritsige bioloogilisi proove seadme komponentidele. Kui pritsimine toimub, desinfitseerige seade kohe vastavalt oma laboriprotokollidele ja seadme puhastusjuhiste (vt leht 150 Hooldus).

Sümbol tootel  või kaasasolevates dokumentides näitab, et seda seadet ei tohi kodumajapidamiste jäätmete hulka visata. Selle asemel tuleb see anda elektriliste ja elektrooniliste seadmete ringlussevõtupunkti. Jäätmete kõrvaldamine peab toimuma vastavalt kohalikele jäätmehooldusmäärustele.

PAKENDAMINE JA PAIGALDAMINE

Kontrollige pakendi sisu saadetisega. Kui saadetis ei ole täielik, teavitage viivitamatult oma tarnijat.

Kontrollige seadet transpordikahjustuste tunnuste suhtes. Kui on ilmnenud transpordikahjustusi, teavitage viivitamatult oma tarnijat.

Veenduge, et paigaldamiskoht vastaks turvalise töötamise tingimustele: kasutamine ainult siseruumides või kuivas keskkonnas.

NanoPhotometer® on loodud ja arendatud kasutamiseks kontrollitud ja turvalises keskkonnas. See on kirjeldatud kui laborikeskkond, kus ettevõttes on piiratud füüsiline juurdepääs. NanoPhotometer®-ile pääsevad juurde ainult kvalifitseeritud kasutajad ning seda tohib kasutada ainult ettevõtte kohaliku võrgu piires. Kui turvalist keskkonda ei tagata, ei vasta NanoPhotometer® järgmistele Raadioseadmete direktiivi (RED DA) nõuetele: ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Märkus: Ärge asetage NanoPhotometer® suurte vedelikuhulkade, vihma, niiskuse või tolmu keskkonna alla.

Temperatuurivahemik 15 - 40° C (NP80, N60, N50 ja C40) ja 18 - 32° C (N120); Kui kasutatakse kuveti kütteseadet, on temperatuurivahemik 15 kuni 27° C.

Säilitustemperatuurivahemik on 0 - 40°C. Ärge hoidke seadet väljaspool seda vahemikku.

Kui seade on äärmuslike temperatuurikõikumiste all (nt transport madalate välistemperatuuride ajal), võib osutada vajalikuks seade kohandada ruumi temperatuuriga. Lülitage seade välja umbes 2-3 tunni jooksul ja lülitage see uuesti sisse pärast ruumi temperatuuri saavutamist.

Maksimaalne suhteline õhuniiskus (ilma kondenseerumiseta) 80% ja kuni 31°C temperatuuril, 50% vähenemine 40°C juures.

Seade peab olema paigutatud stabiilsele, tasasele pinnale, mis on ette nähtud 4 - 5 kg jaoks. Lisaks peaks õhk saama seadme ümber vabalt ringelda. Veenduge, et töö ajal ei takistaks ükski ese õhuringlust. Otsese päikesevalguse vältimine on soovitatav, kuna see võib kahjustada seadme osi ja plastiku osi.

Seade peaks olema paigutatud nii, et hädaolukorras saaks toitekaabli kergesti identifitseerida ja eemaldada.

Seadet transportides ärge kandke seda valikulise ekraani või käepideme kaudu, vaid alati peamisest korpusest.

NanoPhotometer® tööks tuleb kasutada ainult 90W toiteplokki / kaablit, mille on tarninud Implen.

Toide: 90 - 250 V ± 10%, 50 - 60 Hz

Mobiilsete versioonide puhul laadige aku vähemalt 3 tundi enne esmakordset kasutamist. Sügavlaadimise vältimiseks laadige akut vähemalt kord kuus, isegi kui NanoPhotometer® ei ole töös. Sügavalt tühjenenud akusid ei saa laadida, need tuleb asendada uute vastu.

Lülitage seade sisse, kasutades seadme tagaküljel asuvat Power-nuppu pärast selle ühendamist elektrivõrguga. Seade sooritab automaatselt rea isediagnoosimisteste.

Palun lugege enne kasutamist täielikku kasutusjuhendit.

Palun võtke kohe ühendust algsete tarnijatega, kui ilmnevad tehnilised või kasutusprobleemid.

Märkus: Kui seadet kasutatakse viisil, mis ei ole määratud või ebasobivates keskkondades, võivad seadme kaitsefunktsioonid olla kahjustatud ja seadme garantii kehtetuks.

21. Appendix 12 – SPEKTROFOTOMETRIN ASENNUS

TURVALLISUUSTIEDOT

Ennen asennuksen aloittamista, ota aikaa tutustua laitteesi etiketteihin ja varoitussymboleihin. Ne antavat tietoa mahdollisista vaaroista ja paikoista, joissa on oltava erityisen varovainen.

 Tasavirtasähkö

Ylijännitekategoria: Luokka II

Maksimaalinen käyttökorkeus: < 2000 m

Saastumisen aste: 2

Älä missään tapauksessa avaa laitetta. On vaara sähköiskulle, UV-valon vapautumiselle ja herkän kuituoptisen järjestelmän vaurioitumiselle.

Kun käytät submikrolitra-mittasolua NanoPhotometer® C40 ä, varmista, että mittasolun päällä on kansi ennen jokaista mittausta.

HUOMIO: Mahdollisesti haitallista UV-säteilyä pääsee mittausikkunasta ulos, jos mittaus tehdään ilman kantta.

Älä käytä vaurioituneita virtajohdoja, lisävarusteita tai muita oheislaitteita NanoPhotometer®-laitteen kanssa. Käytä vain mukana toimitettuja ja määriteltyjä virtalähteitä / latureita.

Älä altista NanoPhotometer®-laitetta voimakkailla magneettisille tai sähköisille kentille, vedelle tai millekään nesteille kuten sateelle tai kosteudelle.

Älä aseta laitetta tulilähteiden lähelle tai polta sitä, sillä sisäinen akku voi räjähtää. Älä aseta tai käytä laitetta lämpölähteiden lähellä, erityisesti älä altista yli 60°C lämpötiloille.


Älä käytä NanoPhotometer®-laitetta polvellasi tai kehon osan lähellä estääksesi lämpöhäiriöistä johtuvaa epämukavuutta tai vammoja.

Älä aseta esineitä NanoPhotometer®-laitteen päälle NanoPhotometer®.

akkupaketilla (mobiiliversio) on pidettävä pois päältä kuljetuksen aikana. Kytkin / virtapainike on suojattava iskuilta ja tärinöiltä kuljetuksen aikana, jotta sen ei tapahdu itsestään kytkeytyä päälle (katso myös 8 Huolto).

Biologiset näytteet voivat sisältää tartuntatauteja tai niillä voi olla potentiaalia levittää niitä. Ole varovainen tällaisten näytteiden terveystarvikkeiden kanssa ja käytä asianmukaista suojausvarustusta. Käsittele näytteitä suurimmalla huolellisuudella ja noudattaen voimassa olevia lainsäädännöllisiä ja organisatorisia vaatimuksia, ennen kuin työskentelet näiden mahdollisesti tartuttavien materiaalien kanssa.

Huomio: Älä kaada biologisia näytteitä laitteen osille. Jos kaatamista tapahtuu, desinfioi laite heti laboratorio-ohjeidesi ja laitteen puhdistusohjeiden mukaan (katso sivu 150 Huolto).

Symboli tuotteessa  tai mukana olevissa asiakirjoissa osoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Hävittäminen on suoritettava paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

PAKKAAMINEN JA Sijoittaminen

Tarkista pakkauksen sisältö lähetykslomakkeen mukaan. Jos toimitus ei ole täydellinen, ilmoita heti toimittajallesi.

Tarkista laite kuljetusvaurioiden varalta. Jos kuljetusvaurioita on ilmennyt, ilmoita heti toimittajallesi.

Varmista, että asennuspaikka täyttää turvallisen toiminnan ympäristövaatimukset: käytettävä vain suljetuissa tiloissa tai kuivassa ympäristössä.

NanoPhotometer® on suunniteltu ja kehitetty käytettäväksi kontrolloidussa ja turvallisessa ympäristössä. Tämä kuvataan laboratorioympäristöksi, jossa fyysinen pääsy yrityksen sisällä on rajoitettu. NanoPhotometer®:iin voivat käyttää vain pätevät käyttäjät, ja sitä saa käyttää vain yrityksen paikallisessa verkossa. Jos turvallista ympäristöä ei taata, NanoPhotometer® ei täytä seuraavia Radio Equipment Directive (RED DA) -direktiivin vaatimuksia: ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC

Huomio: Älä altista NanoPhotometer®-laitetta suurille nesteiden määrille, sateelle, kosteudelle tai pölyiselle ympäristölle.

Lämpötila-alue 15 - 40° C (NP80, N60, N50 ja C40) ja 18 - 32°C (N120); Kuvetinlämmittimen käytön yhteydessä lämpötila-alue on 15 - 27° C.

Säilytyslämpötila-alue on 0 - 40°C. Älä säilytä laitetta tämän alueen ulkopuolella.

Jos laite altistuu äärimmäisille lämpötilavaihteluille (esim. kuljetus matalissa ulkolämpötiloissa), saattaa olla tarpeen sopeuttaa laite huoneen lämpötilaan. Sammuta laite noin 2-3 tunniksi ja käynnistä se uudelleen huoneen lämpötilan saavuttua.

Maksimaalinen suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitunut) 80% ja jopa 31°C lämpötilassa, 50% väheneminen 40°C.

Laitteen on oltava vakaalla, tasaisella pinnalla, joka on tarkoitettu 4 - 5 kg

. Lisäksi ilman on pystyttävä kiertämään vapaasti laitteen ympärillä. Varmista, että toiminnan aikana ei ole esineitä, jotka estävät ilman kiertämisen. Suora auringonvalo tulisi välttää, koska se voi haalistuttaa laitteen osia ja vahingoittaa muoviosia.

Laitteen tulisi olla sijoitettu siten, että hätätilanteessa virtajohdon voi helposti tunnistaa ja irrottaa.

Kuljetettaessa laitetta, älä kannata sitä valinnaisen näytön tai varren kautta, vaan aina pääkotelosta.

NanoPhotometer®

käytettäessä tulee käyttää vain Implen toimittamaa 90W virtalähdettä / johtoa.

Virransyöttö: 90 - 250 V ± 10%, 50 - 60 Hz

Mobiiliversioiden kohdalla lataa akku vähintään 3 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä. Syväpurkautumisen välttämiseksi lataa akku vähintään kerran kuukaudessa, vaikka NanoPhotometer® ei olisi käytössä. Syvästi purkautuneita akkuja ei voi ladata, ne on vaihdettava uusiin.

Käynnistä laite käyttämällä laitteen takaosassa olevaa Power-nappia sen jälkeen, kun se on kytketty sähköverkkoon. Laite suorittaa automaattisesti sarjan itsearviointitestejä.

Lue täydellinen käyttöohje ennen käyttöä.


Ota välittömästi yhteyttä alkuperäisiin toimittajiin, jos teknisiä tai käsittelyongelmia ilmenee.

Huomio: Jos tätä laitetta käytetään tavalla, joka ei ole määritelty tai sopimattomissa ympäristöissä, laitteen suojausominaisuudet voivat heikentyä ja laitteen takuu raukeaa.

22. Appendix 13 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΕΚΤΡΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις ετικέτες και τα προειδοποιητικά σύμβολα της συσκευής σας. Αυτά παρέχουν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς κινδύνους και περιοχές όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

 Συνεχές ρεύμα

Κατηγορία υπερτάσεως: Κατηγορία II

Μέγιστο ύψος λειτουργίας: < 2000 μ

Βαθμός ρύπανσης: 2

Μην ανοίξετε τη συσκευή σε καμία περίπτωση. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, απελευθέρωσης UV φωτός και ζημιάς στην ευαίσθητη οπτική ίνα.

Κατά τη χρήση της υπομικρολιτρικής κυψελίδας με το NanoPhotometer® C40, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της κυψελίδας είναι στη θέση του πριν από κάθε μέτρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδέχεται να απελευθερωθεί επιβλαβής UV ακτινοβολία από το παράθυρο μέτρησης εάν πραγματοποιηθεί μέτρηση χωρίς καπάκι.

Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας, αξεσουάρ ή άλλες περιφερειακές συσκευές με το NanoPhotometer®. Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα και καθορισμένα τροφοδοτικά / φορτιστές.

Μην εκθέτετε το NanoPhotometer® σε ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία, νερό ή σε οποιοδήποτε είδος υγρού όπως βροχή ή υγρασία.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές φωτιάς ή μην την καίτε, καθώς η ενσωματωμένη μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Μην την τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε κοντά σε πηγές θερμότητας, ειδικά σε θερμοκρασίες άνω των 60°C.


Μην χρησιμοποιείτε το NanoPhotometer® στην αγκαλιά σας ή κοντά σε μέρος του σώματος, για να αποφύγετε την ενόχληση ή τραυματισμούς από θερμικές επιδράσεις.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο NanoPhotometer®.

Το NanoPhotometer® με μπαταρία (φορητή έκδοση) πρέπει να είναι απενεργοποιημένο κατά τη μεταφορά. Ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης πρέπει να προστατεύεται από κτυπήματα και δονήσεις κατά τη μεταφορά, ώστε να αποτραπεί η αυθόρμητη ενεργοποίηση (βλ. επίσης 8 Συντήρηση).

Τα βιολογικά δείγματα μπορεί να περιέχουν μολυσματικές ασθένειες ή να έχουν τη δυνατότητα να τις μεταδώσουν. Να είστε προσεκτικοί με τους κινδύνους για την υγεία από τέτοια δείγματα και να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Χειριστείτε τα δείγματα με τη μεγαλύτερη προσοχή και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και οργανωτικές απαιτήσεις, πριν εργαστείτε με αυτά τα δυνητικά μολυσματικά υλικά.

Σημείωση: Μην χύσετε βιολογικά δείγματα πάνω στα εξαρτήματα της συσκευής. Σε περίπτωση χυσιμάτων, απολυμάνετε τη συσκευή αμέσως σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του εργαστηρίου σας και τις οδηγίες καθαρισμού της συσκευής (βλ. σελίδα 150 Συντήρηση).

Το σύμβολο  στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν δείχνει ότι η συσκευή αυτή δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, πρέπει να παραδοθεί σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων.

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας σύμφωνα με το δελτίο αποστολής. Εάν η παράδοση δεν είναι πλήρης, ενημερώστε αμέσως τον προμηθευτή σας.

Ελέγξτε τη συσκευή για σημάδια ζημιών από τη μεταφορά. Εάν υπάρχει ζημιά από τη μεταφορά, ενημερώστε αμέσως τον προμηθευτή σας.

Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης πληροί τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις για ασφαλή λειτουργία: χρήση μόνο σε κλειστούς χώρους ή ξηρό περιβάλλον.

Το NanoPhotometer® έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για χρήση σε ελεγχόμενο και ασφαλές περιβάλλον. Αυτό περιγράφεται ως εργαστηριακό περιβάλλον με περιορισμένη φυσική πρόσβαση εντός μιας εταιρείας. Στο NanoPhotometer® μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο εξειδικευμένοι χρήστες και μπορεί να λειτουργεί μόνο εντός τοπικού εταιρικού δικτύου. Εάν δεν εξασφαλιστεί ασφαλές περιβάλλον, το NanoPhotometer® δεν πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις της Οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Σημείωση: Μην εκθέτετε το NanoPhotometer® σε μεγάλες ποσότητες υγρών, βροχή, υγρασία ή σκόνη.

Εύρος θερμοκρασίας 15 - 40° C (NP80, N60, N50 και C40) και 18 - 32° C (N120); Όταν χρησιμοποιείται θερμαντήρας κυπελών, το εύρος θερμοκρασίας είναι 15 έως 27° C.

Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης 0 - 40° C. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή εκτός αυτού του εύρους.

Εάν η συσκευή εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές (π.χ. μεταφορά σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες), μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσετε τη συσκευή στη θερμοκρασία του δωματίου. Απενεργοποιήστε τη συσκευή για περίπου 2-3 ώρες και ενεργοποιήστε την ξανά μόλις η θερμοκρασία του δωματίου επανέλθει.

Μέγιστη σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) 80% έως 31° C θερμοκρασία, 50% μείωση στους 40° C.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια που είναι σχεδιασμένη για 4 - 5 kg. Επίσης, ο αέρας πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι κατά τη λειτουργία δεν υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα. Συνιστάται να αποφεύγεται η άμεση ηλιακή ακτινοβολία, καθώς μπορεί να βλάψει τα μέρη της συσκευής και τα πλαστικά μέρη.

Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να είναι εύκολο να εντοπιστεί και να αποσυνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας.

Κατά τη μεταφορά της συσκευής, μην την κρατάτε από την προαιρετική οθόνη ή τη λαβή, αλλά πάντα από την κύρια θήκη.

Για τη λειτουργία του NanoPhotometer® πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ο τροφοδοτικός 90W που παρέχεται από την Implen.

Τροφοδοσία: 90 - 250 V ± 10%, 50 - 60 Hz

Για τις φορητές εκδόσεις, φορτίστε τη μπαταρία τουλάχιστον 3 ώρες πριν από την πρώτη χρήση. Για να αποφύγετε τη βαθιά αποφόρτιση, φορτίστε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ακόμα κι αν το NanoPhotometer® δεν χρησιμοποιείται. Οι βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες δεν μπορούν να φορτιστούν, πρέπει να αντικατασταθούν με νέες.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί Power που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, αφού την συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η συσκευή θα εκτελέσει αυτόματα μια σειρά από αυτοδιαγνωστικά τεστ.

Παρακαλούμε διαβάστε τον πλήρη οδηγό χρήσης πριν από τη χρήση.

Επικοινωνήστε άμεσα με τους αρχικούς προμηθευτές εάν παρουσιαστούν τεχνικά ή λειτουργικά προβλήματα.

Σημείωση: Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν έχει καθοριστεί ή σε ακατάλληλα περιβάλλοντα, μπορεί να επηρεαστούν οι λειτουργίες προστασίας της συσκευής και να ακυρωθεί η εγγύηση της συσκευής.

23. Appendix 14 - SPEKTROFOTOMÉTER TELEPÍTÉS

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az installáció előtt kérjük, szánjon időt arra, hogy megismerkedjen az eszközön található feliratokkal és figyelmeztető szimbólumokkal. Ezek információkat nyújtanak arról, hogy hol fordulhatnak elő potenciális veszélyek, illetve hol szükséges különös elővigyázatosság.

 Egyenáram

Túlfeszültség kategória: II. osztály

Maximális üzemeltetési magasság: < 2000 m

Szennyeződési fok: 2

Ne nyissa ki az eszközt. Elektromos sokk, UV fény kibocsátás és a finom optikai szálak károsodásának veszélye áll fenn.

Amikor a nanoPhotometer® C40-hez al-mikroliteres mérőcellát használ, győződjön meg róla, hogy minden mérés előtt a fedél a behelyezett al-mikroliteres mérőcellán van.

FIGYELEM: Potenciálisan káros UV-sugárzás léphet ki a mérőablakból, ha a mérés fedél nélkül történik.

Ne használjon sérült tápkábeleket, tartozékokat és egyéb perifériákat a NanoPhotometer®-rel. Csak a mellékelt és specifikált tápegységeket / töltőket használja.

Ne tegye ki a NanoPhotometer®-t erős mágneses, elektromos mezőknek, víznek vagy bármilyen folyadéknak, például esőnek vagy párának.

Ne helyezze az eszközt tűzforráshoz közel, és ne égesse el, mivel az integrált akkumulátor felrobbanhat. Ne állítsa az eszközt hőforrások közelébe, és ne használja 60°C fölötti hőmérsékleten.


Ne működtesse a NanoPhotometer®-t az ölében vagy a test bármely részéhez közel, hogy elkerülje a hőből eredő kényelmetlenségeket vagy sérüléseket.

Ne helyezzen tárgyakat a NanoPhotometer®-re.

A NanoPhotometer® akkumulátorral (mobil változat) szállítása során az akkumulátort ki kell kapcsolni. A be- / kikapcsoló gombot meg kell védeni az ütközésektől és rezgésektől a szállítás során, hogy megakadályozza az önálló bekapcsolást (lásd még 8 Karbantartás).

A biológiai minták fertőző betegségeket tartalmazhatnak, vagy képesek lehetnek azok átvitelére. Legyen óvatos az ilyen minták egészségügyi kockázataival kapcsolatban, és viseljen megfelelő védőfelszerelést. Kezelje ezeket a mintákat a legnagyobb gondossággal és az alkalmazandó jogi és szervezeti követelmények szerint, mielőtt potenciálisan fertőző anyagokkal dolgozik.

Megjegyzés: Ne öntse ki a biológiai mintákat a készülék komponentjeire. Ha kiömlés történik, azonnal fertőtlenítsen a készüléket a laboratóriumi protokollok és a készülék tisztítási utasításai szerint (lásd 150. oldal Karbantartás).

A terméken  vagy a készülékhez mellékelt dokumentumokon található szimbólum azt jelzi, hogy ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként eltüntetni. Ehelyett a készüléket elektronikai és elektromos

készülékek újrahasznosítási gyűjtőhelyére kell leadni. Az eltávolításnak a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell történnie.

CSOMAGOLÁS ÉS HELYEZÉS

Ellenőrizze a csomag tartalmát a szállítólevél alapján. Ha a szállítmány nem teljes, azonnal értesítse szállítóját.

Ellenőrizze az eszközt szállítási károk szempontjából. Ha szállítási kár történt, azonnal értesítse szállítóját.

Győződjön meg róla, hogy az installációs helyszín megfelel a biztonságos működés környezeti követelményeinek: használja csak zárt helyiségekben vagy száraz környezetben.

A NanoPhotometer® úgy lett tervezve és kifejlesztve, hogy ellenőrzött, biztonságos környezetben használható legyen. Ez egy laboratóriumi környezetet jelent, ahol a fizikai hozzáférés korlátozott a vállalaton belül. A NanoPhotometer®-hez csak képzett felhasználók férhetnek hozzá, és csak a helyi vállalati hálózaton működtethető. Ha a biztonságos környezet nem biztosított, a NanoPhotometer® nem felel meg a Rádióberendezés-irányelv (RED DA) következő követelményeinek: ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Megjegyzés: Ne tegye ki a NanoPhotometer®-t nagy mennyiségű folyadéknak, esőnek, párának vagy poros környezetnek.

Hőmérsékleti tartomány 15 - 40°C (NP80, N60, N50 és C40) és 18 - 32°C (N120); Küvettánfűtő használata esetén a hőmérsékleti tartomány 15 - 27°C.

A tárolási hőmérsékleti tartomány 0 - 40°C. Ne tárolja a készüléket ezen tartományon kívül.

Ha az eszközt extrém hőmérsékleti ingadozásoknak teszik ki (pl. alacsony külső hőmérsékleten történő szállítás), lehet, hogy szükséges a készüléket szobahőmérsékletre hozni. Kapcsolja ki a készüléket körülbelül 2-3 órára, és kapcsolja be újra, amikor a szobahőmérséklet elérhető.

Maximális relatív páratartalom (nem kondenzálódó) 80% és akár 31°C hőmérsékleten, 50% csökkenés 40°C-nál.

Az eszközt stabil, sík felületen kell elhelyezni, amely 4 - 5 kg-ot képes elviselni. Ezen kívül a levegő szabadon kell, hogy keringjen az eszköz körül. Biztosítsa, hogy működés közben semmi ne akadályozza a levegő áramlását. A közvetlen napfényt kerülni kell, mert az a készülék egyes részeit kifakíthatja és a műanyag alkatrészeket károsíthatja.

Az eszközt úgy kell elhelyezni, hogy vészhelyzet esetén könnyen azonosítható és eltávolítható legyen a tápvezeték.

Szállításkor ne fogja az opcionális kijelzőt vagy karját, hanem mindig a fő házát.

A NanoPhotometer® működtetéséhez csak az Implen által biztosított 90W tápegységet / kábelt használja.

Tápellátás: 90 - 250 V ± 10%, 50 - 60 Hz

Mobil verzióknál töltsse fel az akkumulátort legalább 3 órán keresztül az első használat előtt. A mély kisülés elkerülése érdekében töltsön fel az akkumulátort legalább havonta egyszer, akkor is, ha a NanoPhotometer® nincs használatban. A mélyen kisült akkumulátorok nem tölthetők fel, újjakkal kell őket helyettesíteni.

Kapcsolja be az eszközt a készülék hátulján található Power gomb segítségével, miután csatlakoztatta azt az áramforráshoz. Az eszköz automatikusan végrehajt egy sor önellenőrző tesztet.

Kérjük, olvassa el a teljes használati útmutatót a használat előtt.

Azonnal lépjen kapcsolatba az eredeti beszállítókkal, ha technikai vagy kezelési problémák merülnek fel.

Megjegyzés: Ha ezt az eszközt olyan módon használják, ami nem szerepel a specifikációk között, vagy nem megfelelő környezeti feltételek mellett, a készülék védelmi funkciói megsérülhetnek, és a készülék garanciája érvényét veszti.

24. Appendix 15 - SPEKTROFOTOMETRA INSTALĒŠANA

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms uzsākt instalāciju, lūdzu, veltiet laiku, lai iepazītos ar iekārtas apzīmējumiem un brīdinājuma simboliem. Tie sniedz informāciju par vietām, kur var rasties potenciāli bīstamas situācijas vai kur nepieciešama īpaša piesardzība.

 Stabilizētais strāvas avots

Pārsprieguma kategorija: II klase

Maksimālā darbības augstums: < 2000 m

Apsārņojuma pakāpe: 2

Nekādā gadījumā neizjauciet ierīci. Pastāv elektriskās strāvas trieciena, UV gaismas izdalīšanās un jutīgo optisko šķiedru bojājumu risks.

Izmantojot submikrolitru mēršanas šūnu ar NanoPhotometer® C40, pārliecinieties, ka katras mērīšanas laikā vāciņš ir uz ievietotās submikrolitru mēršanas šūnas.

UZMANĪBU: Potenciāli kaitīgas UV starojuma emisijas var rasties no mērīšanas loga, ja mērīšana tiek veikta bez vāciņa.

Nelietojiet bojātus tīkla vadus, aksesuārus un citus perifērijas ierīces ar NanoPhotometer®. Izmantojiet tikai piegādātos un specifiskos barošanas blokus / lādētājus.

Nepakļaujiet NanoPhotometer® stipriem magnētiskiem, elektriskiem laukiem, ūdenim vai jebkurām šķidrums formām, piemēram, lietus vai mitrumam.

Nepielieciet ierīci pie uguns avotiem un neiznīciniet to, jo iebūvētais akumulators var uzsprāgt. Neskatieties ierīci pie siltuma avotiem, īpaši nepakļaujot temperatūrām virs 60°C.

Nedarbiet NanoPhotometer® savās klēpī vai tuvumā ķermeņa daļai, lai izvairītos no diskomforta vai ievainojumiem, kas saistīti ar siltuma ietekmi.


Neizvietojiet priekšmetus uz NanoPhotometer®.

NanoPhotometer® ar akumulatoru (mobilā versija) ir jāizslēdz transportēšanas laikā. Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzim jābūt aizsargātam pret triecieniem un vibrācijām transportēšanas laikā, lai novērstu nejaušu ieslēgšanos (skatīt arī 8. nodaļu Par apkopi).

Bioloģiskie paraugi var saturēt infekcijas slimības vai būt potenciāli bīstami to pārnesei. Esiet uzmanīgs ar šādiem paraugiem un valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus. Apstrādājiet šos paraugus ar lielāko

rūpību un atbilstoši piemērojamajiem likumdošanas un organizatoriskajiem prasībām pirms darba ar šādiem potenciāli infekcioziem materiāliem.

Piezīme: Neizšļakstiet bioloģiskos paraugus uz ierīces komponentiem. Ja notiek izliešana, nekavējoties dezinficējiet ierīci atbilstoši saviem laboratorijas protokoliem un ierīces tīrīšanas instrukcijām (skatīt 150. lapu Par apkopi).

Simbols uz  produkta vai pievienotajos dokumentos norāda, ka šo ierīci nedrīkst iznīcināt kā mājsaimniecības atkritumus. Tā vietā to jānodod elektronikas un elektrisko iekārtu pārstrādes punktā. Atkritumu iznīcināšana jāveic saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

IEPAKOŠANA UN NOVIETOŠANA

Pārbaudiet iepakojuma saturu pēc piegādes dokumenta. Ja piegāde nav pilnīga, nekavējoties informējiet savu piegādātāju.

Pārbaudiet ierīci par iespējamajiem transportēšanas bojājumiem. Ja ir noticis transportēšanas bojājums, nekavējoties informējiet savu piegādātāju.

Pārliecinieties, ka instalācijas vieta atbilst drošas darbības vides prasībām: lietojiet tikai slēgtās telpās vai sausā vidē.

NanoPhotometer® ir izstrādāts un izveidots lietošanai kontrolētā, drošā vidē. Tas tiek aprakstīts kā laboratorijas vide ar ierobežotu fizisku piekļuvi uzņēmuma ietvaros. NanoPhotometer® var piekļūt tikai kvalificēti lietotāji, un tas drīkst darboties tikai uzņēmuma lokālajā tīklā. Ja netiek nodrošināta droša vide, NanoPhotometer® neatbilst Radioiekārtu direktīvas (RED DA) šādajām prasībām: ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Piezīme: Nepakļaujiet NanoPhotometer® lieliem šķidrumu daudzumiem, lietus, mitrumam vai putekļainai videi.

Temperatūras diapazons 15 - 40°C (NP80, N60, N50 un C40) un 18 - 32°C (N120); Ja tiek izmantots cuvettes sildītājs, temperatūras diapazons ir no 15 līdz 27°C.

Uzglabāšanas temperatūras diapazons ir 0 - 40°C. Nemēģiniet uzglabāt ierīci ārpus šī diapazona.

Ja ierīce tiek pakļauta ekstrēmiem temperatūras svārstībām (piemēram, transportēšana zemās ārējās temperatūrās), var būt nepieciešams ierīci pielāgot telpas temperatūrai. Izslēdziet ierīci uz aptuveni 2-3 stundām un ieslēdziet to vēlreiz, kad telpas temperatūra būs atjaunojusies.

Maksimālā relatīvā gaisa mitruma (nekondensējoša) robeža ir 80% un līdz 31°C temperatūrai, 50% samazinājums pie 40°C.

Ierīcei jābūt novietotai uz stabilas, līdzenas virsmas, kas ir izturīga līdz 4 - 5 kg. Tāpat gaisam jāspēj brīvi cirkulēt ap ierīci. Pārliecinieties, ka darbības laikā nav priekšmetu, kas traucē gaisa cirkulāciju. Tiešā saules gaisma jāizvairās, jo tā var izbalināt ierīces daļas un bojāt plastmasas komponentus.

Ierīce jānovieto tā, lai avārijas gadījumā viegli varētu identificēt un izslēgt barošanas vadu.

Transportējot ierīci, neņemiet to pie opciju displeja vai roktura, bet vienmēr turiet pie galvenā korpusa.

NanoPhotometer® darbībai jāizmanto tikai Implen piegādātais 90W barošanas bloks / kabelis.

Barošana: 90 - 250 V ± 10%, 50 - 60 Hz

Mobilajām versijām lādējiet akumulatoru vismaz 3 stundas pirms pirmās lietošanas reizes. Lai novērstu dziļas izlādēšanās, lādējiet akumulatoru vismaz reizi mēnesī, pat ja NanoPhotometer® nav lietots. Dziļi izlādētus akumulatorus nav iespējams uzlādēt, tie jāaizstāj ar jauniem.

Ieslēdziet ierīci, izmantojot Power pogu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pēc tās pievienošanas elektriskajam tīklam. Ierīce automātiski veiks virkni pašdiagnostikas pārbaudes.

Lūdzu, izlasiet pilnu lietošanas rokasgrāmatu pirms lietošanas.

Lūdzu, nekavējoties sazinieties ar sākotnējiem piegādātājiem, ja rodas tehniskas vai lietošanas problēmas.

Piezīme: Ja šī ierīce tiek izmantota neparedzētā veidā vai nepiemērotos vides apstākļos, ierīces aizsardzības funkcijas var tikt traucētas un ierīces garantija var tikt anulēta.

25. Appendix 16 - SPEKTROFOTOMETRO ĪRENGIMAS

SAUGOS INFORMACIJA

Prieš pradēdant ģrengimā, prašome skirti laiko susipažinti su savo prietaise esančiomis etiketēmis ir ģspējimo simboliais. Jie suteikia informacijā apie potencialias pavoingas vietas ir kur reikia ypatingo atsargumo.

 Nuolatinē srovē

Perdavimo ģtampa: II klasē

Maksimali veikimo aukštis: < 2000 m

Užterštumo lygis: 2

Niekada neatidarykite ģrenginio. Yra pavojus elektriniam smūgiui, UV spindulių išsiskyrimui ir jautrių optinių skaidulų pažeidimui.

Naudojant submikrolitrų matavimo kamerā su NanoPhotometer® C40, ģsitikinkite, kad kiekvieno matavimo metu dangtelis yra ant ģdėtos submikrolitrų matavimo kameros.

ĢSPĖJIMAS: Potencialiai kenksmingi UV spinduliai gali išsiskirti iš matavimo langelio, jei matavimas atliekamas be dangtelio.

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų, priedų ir kitų periferinių ģrenginių su NanoPhotometer®. Naudokite tik pristatytus ir specifikuosius maitinimo blokus / ģkroviklius.

Neeksponuokite NanoPhotometer® stipriems magnetiniams, elektriniams laukams, vandeniui ar bet kokioms skysčių formoms, tokioms kaip lietus ar drėgmė.

Nelaikykite ģrenginio šalia ugnies šaltinių ir nesudeginkite jo, nes integruotas akumulatorius gali sprogo. Neeksponuokite ģrenginio šilumos šaltiniams, ypač neviršykite 60°C temperatūros.


Nenaudokite NanoPhotometer® ant kelių ar arti kūno dalių, kad išvengtumėte diskomforto ar sužalojimų dėl šilumos poveikio.

Nedėkite daiktų ant NanoPhotometer®.

NanoPhotometer® su akumulatoriumi (mobilioji versija) transportavimo metu turi būti išjungtas. Maitinimo jungiklis turi būti apsaugotas nuo smūgių ir vibracijos transportavimo metu, kad būtų išvengta savaiminio įjungimo (žr. 8 skyrių Priežiūra).

Biologiniai mėginiai gali turėti infekcinių ligų arba turėti potencialą perduoti jas. Būkite atsargūs su tokiais mėginiais ir dėvėkite tinkamus apsaugos įrankius. Tvarkykite šiuos mėginius su didžiausia atsakomybe ir laikydamiesi galiojančių teisinių bei organizacinių reikalavimų prieš dirbdami su potencialiai infekcinėmis medžiagomis.

Pastaba: Nesuklijuokite biologinių mėginių ant įrenginio komponentų. Jei įvyksta išsiliejimas, nedelsdami dezinfekuokite įrenginį pagal savo laboratorijos protokolus ir įrenginio valymo instrukcijas (žr. 150 psl. Priežiūra).

Simbolis ant  produkto ar prie įrenginio pridedamuose dokumentuose rodo, kad šios įrangos negalima šalinti kaip namų šiukšlių. Vietoj to, ją reikia perduoti elektronikos ir elektrinių įrenginių perdirbimo surinkimo vietoje. Šalinimas turi būti atliekamas pagal vietinius atliekų tvarkymo reikalavimus.

PAKAVIMAS IR PLACIRAVIMAS

Patikrinkite paketo turinį pagal siuntos dokumentą. Jei siunta yra nekomplektiška, nedelsdami informuokite savo tiekėją.

Patikrinkite įrenginį dėl transportavimo pažeidimų. Jei įvyksta transportavimo pažeidimas, nedelsdami informuokite savo tiekėją.

Įsitinkite, kad įrengimo vieta atitinka saugios veikimo sąlygas: naudokite tik uždaroje patalpose arba sausoje aplinkoje.

NanoPhotometer® sukurtas ir pritaikytas naudoti kontroliuojamoje, saugioje aplinkoje. Tai apibūdinama kaip laboratorinė aplinka su ribota fizine prieiga įmonės viduje. NanoPhotometer® gali naudotis tik kvalifikuoti vartotojai ir jį galima eksploatuoti tik vietiniame įmonės tinkle. Jei saugi aplinka nėra užtikrinta, NanoPhotometer® neatitinka šių Radijo įrangos direktyvos (RED DA) reikalavimų: ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Pastaba: Nesudėkite NanoPhotometer® dideliame skysčių kiekiui, lietai, drėgmei ar dulkėtai aplinkai.

Temperatūros diapazonas 15 - 40°C (NP80, N60, N50 ir C40) ir 18 - 32°C (N120); Naudojant cuvettes šildytuvą, temperatūros diapazonas yra 15 - 27°C.

Saugojimo temperatūros diapazonas yra 0 - 40°C. Neeksponuokite įrenginio už šio diapazono ribų.

Jei įrenginys buvo veikiamas ekstremaliems temperatūros svyravimams (pvz., transportavimas žemose lauko temperatūrose), gali tekti pritaikyti įrenginį prie kambario temperatūros. Išjunkite įrenginį maždaug 2-3 valandoms ir įjunkite jį dar kartą, kai kambario temperatūra bus atkurta.

Maksimali santykinė drėgmė (ne kondensuojanti) 80% ir iki 31°C temperatūroje, 50% sumažėjimas esant 40°C.

Įrenginys turi būti pastatytas ant stabilios, lygaus paviršiaus, kuris yra skirtas 4 - 5 kg apkrovai. Be to, oras turi laisvai cirkuluoti aplink įrenginį. Užtikrinkite, kad darbo metu jokie daiktai netrukdytų oro cirkuliacijai. Venkite tiesioginių saulės spindulių, nes jie gali išblukinti įrenginio dalis ir pažeisti plastikinės dalis.

Įrenginys turėtų būti pozicionuotas taip, kad ekstremalių situacijų atveju elektros kištuką būtų lengva identifikuoti ir išjungti.

Transportuojant įrenginį, neimkite jo prie pasirinktinio ekrano ar rankenos, o visada laikykite pagrindinėje korpuso dalyje.

NanoPhotometer® veikimui naudokite tik Implen tiekimo 90W maitinimo bloką / kabelį.

Maitinimas: 90 - 250 V ± 10%, 50 - 60 Hz

Mobiliosioms versijoms įkraukite akumuliatorių bent 3 valandas prieš pirmą naudojimą. Norėdami išvengti gilaus išsikrovimo, įkraukite akumuliatorių bent kartą per mėnesį, net jei NanoPhotometer® nenaudojamas. Giliai išsikrovusių akumuliatorių negalima įkrauti, jie turi būti pakeisti naujais.

Įjunkite įrenginį naudodami Power mygtuką, esantį įrenginio gale, po jo prijungimo prie elektros tinklo. Įrenginys automatiškai atliks keletą savidiagnostikos testų.

Prašome perskaityti visą naudotojo vadovą prieš naudojimą.


Prašome nedelsdami susisiekti su originaliais tiekėjais, jei atsiranda techninių ar naudojimo problemų.

Pastaba: Jei šis įrenginys naudojamas nspecifikuotu būdu arba netinkamomis veikimo sąlygomis, įrenginio apsaugos funkcijos gali būti sutrikdytos ir įrenginio garantija praras galiojimą.

26. Appendix 17 - INSTALLAZZJONI SPETTROFOTOMETRU

INFORMAZZJONI TA' SIGURTÀ

Qabel tibda l-installazzjoni, jekk jogħġbok, dedika ħin biex tifhem l-etiketti u s-simboli ta' twissija fuq il-ġugarell tiegħek. Dawn jipprovdu informazzjoni dwar fejn jistgħu jinqalgħu perikli potenzjali jew fejn hija meħtieġa ħarsien partikulari.

 Sors ta' Elettriku Duwi

Kategorija ta' Overvoltage: Klassi II

Altitudni massima ta' operazzjoni: < 2000 m

Grad ta' kontaminazzjoni: 2

Qatt ma fthilx l-apparat. Jeżisti riskju ta' xokk elettriku, ħruġ ta' dawl UV u t-telf ta' fiber ottiku sensitiv.

Meta tuża l-kamera ta' mibilitru submikro ma' NanoPhotometer® C40, kun żgur li qabel kull mierz f'kull waqt li l-kopertura hija fuq il-kamera ta' mibilitru submikro imqabbla.

ATTENZJONI: Radjazzjoni UV potenzjalment ħarxa tista' toħroġ mid-window tal-mirja, jekk il-mirja ssir mingħajr kopertura.

Ma tużax kabli ta' enerġija, aċċessorji u apparati periferali oħra bil NanoPhotometer® li huma mħassra. Uża biss l-istrument u l-ikkunċettati tat-tellieqa / il-ħajta li ġew fornit.

Ma poġġix il-NanoPhotometer® għal kampijiet maġġuri ta' magnjetiċi, elettriči, ilma jew xi forma ta' likwidi bħall-mewġ jew damp.

M'għandekx tqiegħed il-ġugarell qrib sorsi ta' ħruq u ma jiġux imburnjati, peress li l-batterija integrata tista' toħroġ. Ma tpoġġix il-ġugarell qrib sorsi ta' sħana, speċjalment ma tpoġġix għal temperatura oġhla minn 60°C.


Ma wżidx il-NanoPhotometer® fil-ġenbejn jew qrib parti tal-ġisem biex tevita fastidju jew ħsarat minħabba l-efett tas-sħana.

Ma tpoġġix oġġetti fuq il-NanoPhotometer®.

Il-NanoPhotometer® b'batterija (verżjoni mobbli) għandu jinqaleb waqt it-trasport. Il-buttuna ta' ċittadin / id-difiża għandha tkun protetta kontra xokkijiet u vibrazzjonijiet waqt it-trasport biex tiġi evitata l-attivazzjoni ħaġa (ara wkoll 8. Sezzjoni Manutenzjoni).

Il-probbi bijoloġiċi jistgħu jinkludu mard infettiv jew ikunu potenzjalment perikolużi għall-trasmissjoni tagħhom. Kun attent ma' dawn il-probbi u indossa l-istrumenti ta' protizzjoni adegwati. Trattaw dawn il-probbi b'kura akbar u skont il-leġiżlazzjoni u r-rekwiżiti organizzattivi rilevanti qabel tibda taħdem ma' dawn il-materjali potenzjalment infettivi.

Nota: Ma taqtax probbi bijoloġiċi fuq il-komponenti tal-apparat. Jekk ikun hemm tixrid, deħilja l-apparat immedjatament skont il-protokoll tal-laboratorju tiegħek u l-istruzzjonijiet tat-tindif tal-apparat (ara l-paġna 150 Manutenzjoni).

Is-simbolu  fuq il-prodott jew fil-documents inklużi jindika li din il-magna ma għandhiex tiġi skartata bħala skart domestiku. Minflok, għandha tiġi ttrasferita għal punt ta' rikiklaġġ ta' apparat elettroniku u elettriku. Skartament għandu jsir skont ir-rekwiżiti lokali tal-iskart.

IMBALLAGĠ U POŻIZZJONAMENT

Iddekkja l-kontenut tal-pakkett skont id-dokumenti tal-kunsinna. Jekk il-kunsinna mhix kompluta, informi lit-tinfiet tiegħek immedjatament.

Iddekkja l-apparat għal ħsarat tat-trasport. Jekk ikun hemm ħsara tat-trasport, informi lit-tinfiet tiegħek immedjatament.

Ħu ħsieb li l-post ta' installazzjoni jikkonforma ma' il-ħtiġijiet ta' ambjent sigur ta' operazzjoni: uża biss f'kamra magħluqa jew ambjent niexef.

In-NanoPhotometer® ġie ddisinjat u żviluppat biex jintuża f'ambjent kontrollat u sigur. Dan huwa deskritt bħala ambjent laboratorju b'aċċess fiżiku limitat ġewwa kumpanija. In-NanoPhotometer® jista' jintuża biss minn utenti kwalifikati u jista' joperah biss ġewwa netwerk lokali tal-kumpanija. Jekk ma tiġix assigurata ambjent sigur, in-NanoPhotometer® ma jissodisfax ir-rekwiżiti li ġejjin tad-Direttiva dwar l-Apparati tar-Radio (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Nota: Ma poġġix il-NanoPhotometer® għal ammonti kbar ta' likwidi, xita, damp jew ambjent imdallam.

Temperatura operattiva: 15 - 40°C (NP80, N60, N50 u C40) u 18 - 32°C (N120); Meta tuża s-sedili tal-cuvette, it-temperatura hi bejn 15 u 27°C.

Temperatura ta' ħażna: 0 - 40°C. Ma ppruvax ħażna l-apparat barra minn dan id-dijapazon.

Jekk il-apparat ikun espost għal varjazzjonijiet estremi tat-temperatura (eż. trasport f'temperaturi baxxi esterni), jista' jkun meħtieġ li tgħaqqad l-apparat mal-temperatura tal-kamra. Stqarr il-apparat għal madwar 2-3 sigħat u stqarr darba oħra meta t-temperatura tal-kamra tkun ġiet ristabbilita.

L-umdità relativa massima (non kondensata) hija 80% u sal-31°C, 50% tnaqqis għal 40°C.

L-apparat għandu jkun posizzjonat fuq pjan stabil u livell, li jista' jiflaħ għal 4 - 5 kg. Barra minn hekk, l-arja għandha tkun libera li tiċċirkola madwar l-apparat. Kun żgur li waqt it-tmexxija ma jkunx hemm oġġetti li jinterferixxu mal-kirkulazzjoni tal-arja. Evita d-dawl tax-xemx dirett, peress li jista' jiddizinvoka partijiet tal-apparat u jikkawża ħsarat fil-komponenti tal-plastik.

L-apparat għandu jkun pozzizzjonat sabiex ikun faċli li tidentifika u tikkonnetti l-cable ta' enerġija fil-każ ta' emerġenzi.

Meta tkun qed tittrasporta l-apparat, ma tqax xi haġa mal-mostra tal-għażliet jew bil-handl, iżda dejjem poġġih fiċ-ċentru tal-korp prinċipali.

Il-NanoPhotometer® għandu jintuża biss bl-90W tal-blokka / cabled tal-enerġija li jitwassal minn Implen.

Enerġija: 90 - 250 V ± 10%, 50 - 60 Hz

Għall-verżjonijiet mobbli, ħalli l-batterija titlesta għal mill-inqas 3 sigħat qabel l-ewwel użu. Biex tevita l-iskurament profundu, ħalli l-batterija tiġi ħażina mill-inqas darba fix-xahar, anke jekk NanoPhotometer® ma jintużax. Batteriji profund skurati ma jistgħux jitlestu, għandhom jiġu sostitwiti b'oħrajn godda.

Iċċekkja l-apparat billi tuża l-buttuna Power, li tinsab fil-parti ta' wara tal-apparat, wara li tkun konnessa mal-elettriku. L-apparat awtomatikament se jsir xi testijiet ta' diagnostika.

Jekk jogħġbok, aqra l-gwida tal-utent sħiħa qabel l-użu.

Jekk jogħġbok, ikkuntattja lil fornitur oriġinali tiegħek jekk ikun hemm problemi tekniki jew operattivi.

Nota: Jekk dan l-apparat jintuża f'kondizzjonijiet mhux previsti jew ambjent mhux adattat, il-funzjonijiet ta' sigurtà tal-apparat jistgħu jiġu compromessi u l-garanzija tal-apparat tista' tiġi annullata.

27. Appendix 18 - INSTALLATION AF SPEKTROFOTOMETER

SIKKERHEDSINFORMATION

Før installationen skal du tage dig tid til at gøre dig bekendt med mærker og advarselsikoner på dit instrument. Disse fungerer som information om, hvor der kan opstå potentielle farer, eller hvor særlig forsigtighed er påkrævet.

 Jævnstrøm

Overspændingskategori: Klasse II

Maksimal driftshøjde: < 2000 m

Forureningsgrad: 2

Åbn under ingen omstændigheder enheden. Der er risiko for elektrisk stød, UV-lys eksponering og beskadigelse af det følsomme fiberoptik.

Ved brug af submikroliter-cellen i forbindelse med NanoPhotometer® C40, skal det sikres, at låget er på den indsatte submikroliter-celle før hver måling.

ADVARSEL: Potentielt skadelig UV-stråling udsendes fra målehovedvinduet, hvis der måles uden låg.

Brug ikke beskadigede strømkabler, tilbehør og andre perifere enheder i forbindelse med NanoPhotometer®. Brug kun medfølgende og specificerede strømforsyninger/opladere.

Udsæt ikke NanoPhotometer® for stærke magnetiske, elektriske felter, vand eller nogen form for væske som regn eller fugt.

Anbring ikke instrumentet i nærheden af brandkilder eller brænd det, da det integrerede batteri kan eksplodere. Anbring eller brug det ikke i nærheden af varmekilder, især ikke ved temperaturer over 60° C.


Betjen ikke NanoPhotometer® på dit skød eller i nærheden af en kropsdel for at undgå ubehag eller skader på grund af varme.

Anbring ikke genstande på NanoPhotometer®.

NanoPhotometer® med batteripakke (mobil version) skal være slukket under transport. Tænd-/slukknappen skal beskyttes mod stød og vibrationer under transport for at forhindre utilsigtet tænding (se også 8 Maintenance).

Biologiske prøver kan indeholde eller have potentiale til at overføre infektionssygdomme. Vær opmærksom på sundhedsrisiciene forbundet med sådanne prøver og bær passende beskyttelsesudstyr. Behandl disse prøver med største omhu og i overensstemmelse med gældende lovgivning og organisatoriske krav, før du arbejder med sådanne potentielt infektiøse materialer.

Bemærk: Spild ikke biologiske prøver på enhedens komponenter. Hvis der opstår spild, desinficer straks enheden efter dine laboratorieprotokoller og enhedens rengøringsanvisninger (se side 150 Maintenance).

Symbolet på  produktet eller dokumenter, der følger med enheden, indikerer, at denne enhed ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. I stedet skal den afleveres på et indsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale bestemmelser om affaldshåndtering.

UDPAKNING OG PLACERING

Kontroller indholdet af pakken i forhold til følgesedlen. Hvis leveringsomfanget ikke er fuldstændigt, skal du straks informere din leverandør.

Kontroller enheden for tegn på transportskader. Hvis der er opstået transportskader, skal du straks informere din leverandør.

Sørg for, at installationsstedet opfylder miljøforholdene for sikker drift: Brug kun indendørs i tørre omgivelser.

NanoPhotometer® er designet og udviklet til brug i et kontrolleret, sikkert miljø. Dette beskrives som et laboratiemiljø med begrænset fysisk adgang inden for en virksomhed. NanoPhotometer® må kun tilgås af kvalificerede brugere og må kun betjenes inden for et lokalt virksomhedsnetværk. Hvis et sikkert miljø ikke sikres, opfylder NanoPhotometer® ikke følgende krav i Radio Equipment Directive (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Bemærk: Udsæt ikke NanoPhotometer® for store mængder væsker, regn, fugt eller støvede omgivelser.

Temperaturområde 15 - 40° C (NP80, N60, N50 og C40) og 18 - 32°C (N120); Ved brug af kuvettenopvarmning er temperaturområdet 15 til 27° C.

Lageringstemperaturområdet er 0 - 40°C. Opbevar ikke enheden uden for dette område.

Hvis enheden udsættes for ekstreme temperatursvingninger (f.eks. transport ved lave udendørstemperaturer), kan det være nødvendigt at tilpasse enheden til stuetemperatur. Sluk enheden i ca. 2-3 timer og tænd den igen, når den har nået stuetemperaturen.

Maksimal relativ luftfugtighed (ikke kondenserende) på 80 % og op til 31°C med en faldende linearitet på 50 % ved 40°C.

Enheden skal placeres på en stabil, plan overflade, der kan bære 4 - 5 kg. Desuden skal luften frit kunne cirkulere rundt om enheden. Sørg for, at ingen genstande forhindrer luftcirkulationen under drift. Direkte sollys bør undgås, da det kan blege dele af enheden og beskadige plastikdele.

Enheden skal placeres, så strømskiftet let kan identificeres og fjernes i en nødsituation.

Bær ikke enheden ved det valgfrie display eller håndtag under transport, men altid ved hovedhuset.

Kun den 90W strømforsyning/kabel, der leveres af Implen, må bruges til betjening af NanoPhotometer.

Strømforsyning: 90 - 250 V ± 10%, 50 - 60 Hz.

For mobile versioner skal batteriet oplades i mindst 3 timer før første brug. For at undgå dyb afladning af batteriet skal du oplade batteriet mindst en gang om måneden, selvom NanoPhotometer® ikke er i drift. Det er ikke muligt at genoplade dybafloadede batterier, og de skal udskiftes med nye.

Tænd enheden med tænd/sluk-knappen på bagsiden af enheden, når den er tilsluttet. Instrumentet udfører automatisk en række selvdiagnosetest.

Læs venligst hele brugermanualen før brug.

Kontakt straks de oprindelige leverandører, hvis der opstår tekniske eller håndteringsproblemer.

Bemærk: Hvis denne enhed bruges på en måde, der ikke er specificeret, eller under forhold, der ikke er egnede til sikker drift, kan enhedens sikkerhedsfunktioner blive kompromitteret, og enhedens garanti bortfalder.

28. Appendix 19 - SUITEÁIL SPECTROFÓTÓIMÉADAIR

EOLAÍOCHT SHABHÁILTEACHTA

Sula dtosaíonn tú ar an suiteáil, tóg an t-am chun tú féin a chur ar an eolas faoi na lipéid agus na siombailí rabhaidh ar d'ionstraim. Feidhmíonn siad seo mar fhaisnéis maidir le háiteanna a bhféadfadh contúirtí a bheith ann nó áiteanna ina bhfuil gá le rabhadh ar leith.

 DC

Catagóir Ró-voltais: Aicme II

Airde Oibríochta Uasta: < 2000 m

Grád Éillithe: 2

Ná hoscail an gléas ar aon nós. Tá baol ann go dtarlódh turraing leictreach, nochtadh solas UV, agus damáiste do na snáithíní optúla íogaire.

Agus tú ag baint úsáide as an chill fhomhmeicrileitriúil in éineacht leis an NanoPhotometer® C40, cinntigh go bhfuil an clúdach ar an chill fhomhmeicrileitriúil atá curtha isteach roimh gach tomhas.

RABHADH: Scaoiltear radaíocht UV atá dainséarach amach as fuinneog an chinn tomhais nuair a dhéantar tomhais gan clúdach.

Ná húsáid cáblaí cumhachta, gabhálaí, nó feistí imeallacha atá damáiste le NanoPhotometer®. Úsáid amháin an tsoláthar cumhachta/luchtaitheora a cuireadh ar fáil agus atá sonraithe.

Ná nocht an NanoPhotometer® do réimsí maignéadacha láidre, réimsí leictreacha, uisce nó aon chineál leachta cosúil le báisteach nó taise.

Ná cuir an ionstraim in aice le foinsí tine nó ná dóigh í, mar is féidir leis an gceallraí comhtháite pléascadh. Ná húsáid in aice le foinsí teasa, go háirithe ná nocht do theochtaí os cionn 60° C.


Ná húsáid an NanoPhotometer® ar do lap ná in aice le páirt de do chorp chun míchompord nó gortuithe de bharr teasa a sheachaint.

Ná cuir rudaí ar an NanoPhotometer®.

Caithfidh an NanoPhotometer® le pacáiste ceallraí (leagan soghluaiste) a bheith múchta le linn iompair. Caithfidh an lasc cumhachta a bheith cosanta ó chreathanna agus turraingí le linn iompair chun cosc a chur ar chasadh air féin (féach freisin 8 Cothabháil).

D'fhéadfadh samplaí bitheolaíoch a galair thógálacha a bheith iontu nó an cumas a bheith acu iad a tharchur. Tabhair aird ar na rioscaí sláinte a bhaineann leis na samplaí seo agus caithfear trealamh cosanta oiriúnach. Caith leis na samplaí seo le himeaglám agus de réir na rialachán reachtúil agus eagraíochta ábhartha sula n-oibríonn tú leis na hábhair phointeáilte seo.

Nóta: Ná spíll samplaí bitheolaíoch ar chomhpháirteanna an ghléis. Má tharlaíonn sé sin, díghalraigh an gléas láithreach de réir do phrótacail saotharlainne agus na treoracha glantacháin don gléas (féach leathanach 150 Cothabháil).

Tugann an  tsiombail ar an táirge nó ar na doiciméid a thagann leis an gléas le fios nach féidir an gléas seo a dhiúscairt mar dhramhaíl tí. Ina ionad sin, caithfidh tú é a thabhairt chuig pointe bailithe don athchúrsáil trealamh leictreach agus leictreonach. Caithfidh diúscairt a bheith déanta de réir na rialachán áitiúil ar dhiúscairt dramhaíola.

DÍPHACÁIL AGUS SUÍOMH

Seiceáil ábhar an phacáiste i gcomparáid leis an liosta seachadta. Má tá an t-ábhar seachadta neamhiomlán, cuir ar an eolas do sholáthraí láithreach.

Seiceáil an gléas le haghaidh comharthaí damáiste iompair. Má tá damáiste iompair ann, cuir ar an eolas do sholáthraí láithreach.

Déan cinnte go gcomhlíonann an suíomh suiteála na coinníollacha comhshaoil le haghaidh oibriú sábháilte: Úsáid taobh istigh amháin i dtimpeallacht thirim.

Tá NanoPhotometer® deartha agus forbartha le húsáid i dtimpeallacht rialaithe agus shlán. Déantar cur síos air seo mar thimpeallacht saotharlainne le rochtain fhisiciúil teoranta laistigh de chomhlacht. Ní féidir ach le húsáideoirí cáilithe rochtain a fháil ar NanoPhotometer®, agus ní féidir é a oibriú ach laistigh de líonra áitiúil an chomhlachta. Mura gcinntítear timpeallacht shlán, ní chomhlíonann NanoPhotometer® na riachtanais seo a leanas den Treoir um Threalamh Raidió (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Nóta: Ná nocht an NanoPhotometer® do chainníochtaí móra leachtanna, báisteach, taise nó timpeallachtaí deannaigh.

Raon teochta 15 - 40° C (NP80, N60, N50 agus C40) agus 18 - 32°C (N120); Agus tú ag úsáid téamh cuvette, tá an raon teochta 15 go 27° C.

Tá raon teochta stórála ag 0 - 40°C. Ná stóráil an gléas lasmuigh den raon seo.

Má bhíonn an gléas nochtaithe do luaineachtaí teochta móra (m.sh. iompar ag teochtaí ísle lasmuigh), b'fhéidir go mbeadh gá leis an gléas a thabhairt chun teochta seomra. Cas amach an gléas ar feadh thart ar 2-3 uair an chloig agus cas air arís nuair a shroicheann sé teocht an tseomra.

Taise coibhneasta uasta (gan comhdhlúthú) de 80% agus suas le 31°C le linearacht ag laghdú de 50% ag 40°C.

Caithfidh an gléas a bheith suite ar dhromchla cobhsaí agus réidh atá deartha chun 4 - 5 kg a sheasamh. Ina theannta sin, caithfidh an t-aer a bheith in ann dul timpeall an ghléis gan srian. Seachain solas díreach na gréine, mar is féidir leis cuid den ghléas a dhathú agus damáiste a dhéanamh do na codanna plaisteacha.

Caithfidh an gléas a bheith suite ar bhealach go bhfuil an plugán cumhachta inaitheanta agus inbhainte go héasca i gcás éigeandála.

Ná hiompair an gléas ag an taispeántas roghnach nó lámhshleamhnáin, ach i gcónaí ag an bpríomhchorp.

Níor cheart ach an soláthar cumhachta/cábala 90W a sholáthraíonn Implen a úsáid chun an NanoPhotometer a oibriú.

Soláthar cumhachta: 90 - 250 V ± 10%, 50 - 60 Hz.

Le haghaidh leaganacha soghluaiste, muirir an ceallraí ar feadh 3 uair an chloig ar a laghad sula n-úsáideann tú é den chéad uair. Chun ídiú domhain na ceallraí a sheachaint, muirir an ceallraí ar a laghad uair amháin in aghaidh na míosa, fiú mura bhfuil an NanoPhotometer® á oibriú. Ní féidir ceallraí ídithe go domhain a athluchtú; caithfidh tú iad a athsholáthar le cinn nua.

Cas ar an ngléas leis an gcnaipe cumhachta ar chúl an ghléis tar éis é a phlugáil isteach. Déanann an ionstraim sraith tástálacha féindiagnóise go huathoibríoch.

Léigh le do thoil an lámhleabhar iomlán úsáideora roimh úsáid.

Déan teagmháil láithreach leis na soláthraithe bunaidh má tharlaíonn fadhbanna teicniúla nó láimhseála.

Nóta: Má úsáidtear an gléas seo ar bhealach nach bhfuil sonraithe nó i dtimpeallachtaí nach bhfuil oiriúnach le haghaidh oibriú sábháilte, d'fhéadfadh sé go mbeadh feidhmeanna cosanta an ghléis faoi bhagairt, agus d'fhéadfadh go mbeadh an bharántas ar an gléas neamhbháilí.

29. Appendix 20 - INSTALAREA SPECTROFOTOMETRULUI

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să acordați timp pentru a vă familiariza cu etichetele și simbolurile de avertizare de pe instrumentul dvs. Acestea sunt destinate să informeze unde pot apărea pericole potențiale sau unde este necesară o prudență deosebită.

 Curent continuu

Categorie de supratensiune: Clasa II

Înălțimea maximă de funcționare: < 2000 m

Grad de poluare: 2

Nu deschideți sub nicio formă dispozitivul. Există riscul de șoc electric, expunere la lumină UV și deteriorarea fibrelor optice sensibile.

Atunci când utilizați celula submicrolitru împreună cu NanoPhotometer® C40, asigurați-vă că capacul este pe celula submicrolitru introdusă înainte de fiecare măsurare.

ATENȚIE: Radiațiile UV potențial dăunătoare sunt emise din fereastra capului de măsurare atunci când se măsoară fără capac.

Nu utilizați cabluri de alimentare, accesorii și alte periferice deteriorate în legătură cu NanoPhotometer®. Utilizați doar sursele de alimentare/incărcătoarele furnizate și specificate.

Nu expuneți NanoPhotometer® la câmpuri magnetice sau electrice puternice, apă sau orice fel de lichid, cum ar fi ploaie sau umezeală.

Nu aduceți instrumentul în apropierea surselor de foc și nu îl ardeți, deoarece bateria integrată poate exploda. Nu îl amplasați și nu îl utilizați în apropierea surselor de căldură, în special nu-l expuneți la temperaturi peste 60° C.


Nu utilizați NanoPhotometer® pe genunchi sau în apropierea unei părți a corpului pentru a preveni disconfortul sau rănila cauzate de căldură.

Nu așezați obiecte pe NanoPhotometer®.

NanoPhotometer® cu pachet de baterii (versiunea mobilă) trebuie să fie oprit în timpul transportului. Comutatorul de pornire/oprire trebuie protejat împotriva șocurilor și vibrațiilor în timpul transportului pentru a preveni pornirea accidentală (vezi și 8 Maintenance).

Probele biologice pot conține sau au potențialul de a transmite boli infecțioase. Fiți conștienți de riscurile pentru sănătate asociate acestor probe și purtați echipament de protecție adecvat. Manevrați aceste probe cu cea mai mare atenție și în conformitate cu cerințele legale și organizatorice aplicabile înainte de a lucra cu astfel de materiale potențial infecțioase.

Notă: Nu vărsați probe biologice pe componentele dispozitivului. Dacă se întâmplă acest lucru, dezinfecțați imediat dispozitivul conform protocolului de laborator și instrucțiunilor de curățare ale dispozitivului (vezi pagina 150 Maintenance).

Simbolul de  pe produs sau pe documentele însoțitoare indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie eliminat ca deșeu menajer. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Eliminarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea deșeurilor.

DESFACEREA AMBALAJULUI ȘI AMPLASARE

Verificați conținutul pachetului în raport cu nota de livrare. Dacă conținutul livrat nu este complet, informați imediat furnizorul dvs.

Verificați dispozitivul pentru semne de deteriorare în timpul transportului. Dacă a apărut o deteriorare în timpul transportului, vă rugăm să informați imediat furnizorul dvs.

Asigurați-vă că locația de instalare îndeplinește condițiile de mediu pentru o operare sigură: utilizare numai în interior, într-un mediu uscat.

NanoPhotometer® este proiectat și dezvoltat pentru utilizare într-un mediu controlat și sigur. Acesta este descris ca un mediu de laborator cu acces fizic restricționat în cadrul unei companii. NanoPhotometer® poate fi accesat doar de utilizatori calificați și poate fi operat doar în cadrul rețelei locale a companiei. Dacă nu este asigurat un mediu sigur, NanoPhotometer® nu îndeplinește următoarele cerințe ale Directivei privind echipamentele radio (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Notă: Nu expuneți NanoPhotometer® la cantități mari de lichide, ploaie, umiditate sau medii cu praf.

Interval de temperatură 15 - 40° C (NP80, N60, N50 și C40) și 18 – 32°C (N120); Când utilizați încălzirea cuvei, intervalul de temperatură este de 15 până la 27° C.

Intervalul de temperatură de depozitare este de 0 - 40°C. Nu depozitați dispozitivul în afara acestui interval.

Dacă dispozitivul este expus la fluctuații extreme de temperatură (de exemplu, transport la temperaturi scăzute în aer liber), poate fi necesar să aduceți dispozitivul la temperatura camerei. Opriți dispozitivul timp de aproximativ 2-3 ore și porniți-l din nou după ce a atins temperatura camerei.

Umiditatea relativă maximă (fără condensare) de 80% și până la 31°C cu o linearitate descrescătoare de 50% la 40°C.

Dispozitivul trebuie să fie amplasat pe o suprafață stabilă și plană, capabilă să susțină 4 - 5 kg. În plus, aerul trebuie să circule liber în jurul dispozitivului. Asigurați-vă că în timpul funcționării niciun obiect nu blochează circulația aerului. Evitați lumina directă a soarelui, deoarece aceasta poate decolora și deteriora componentele din plastic ale dispozitivului.

Dispozitivul ar trebui să fie amplasat astfel încât, în caz de urgență, conectorul de alimentare să fie ușor de identificat și de deconectat.

Nu transportați dispozitivul ținând de afișajul opțional sau de brațul de pârghie, ci întotdeauna de corpul principal.

Pentru a opera NanoPhotometer-ul trebuie să utilizați exclusiv sursa de alimentare/cablul de 90W furnizat de Implen.

Alimentare: 90 - 250 V ± 10%, 50 - 60 Hz.

Pentru versiunile mobile, încărcați bateria cel puțin 3 ore înainte de prima utilizare. Pentru a evita descărcarea profundă a bateriei, încărcați bateria cel puțin o dată pe lună, chiar dacă NanoPhotometer® nu este în funcțiune. Reîncărcarea bateriilor descărcate profund nu este posibilă, acestea trebuie înlocuite cu unele noi.

Porniți dispozitivul cu butonul de alimentare din spatele dispozitivului după ce l-ați conectat la priză. Instrumentul efectuează automat o serie de teste de autodiagnosticare.

Vă rugăm să citiți manualul complet de utilizare înainte de utilizare.

Vă rugăm să contactați imediat furnizorii originali dacă apar probleme tehnice sau de manipulare.

Notă: Dacă acest dispozitiv este utilizat într-un mod care nu este specificat sau în medii care nu sunt adecvate pentru funcționare în siguranță, funcțiile de protecție ale dispozitivului pot fi compromise, iar garanția dispozitivului poate deveni invalidă.

30. Appendix 21 - INŠTALÁCIA SPEKTROFOTOMETRA

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred začatím inštalácie si prosím nájdite čas na oboznámenie sa so štítkami a výstražnými symbolmi na vašom prístroji. Sú určené na informovanie o potenciálnych nebezpečenstvách alebo o miestach, kde je potrebná osobitná opatnosť.

 Jednosmerný prúd

Kategória prepätia: Trieda II

Maximálna prevádzková výška: < 2000 m

Trieda znečistenia: 2

V žiadnom prípade neotvárajte zariadenie. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, vystavenia UV žiareniu a poškodenia citlivej optiky.

Pri použití submikrolitrovej bunky v spojení s NanoPhotometer® C40 sa uistite, že veko je pred každým meraním nasadené na vložení submikrolitrovú bunku.

UPOZORNENIE: Pri meraní bez krytu vyžaruje z meracej hlavy potenciálne škodlivé UV žiarenie.

Nepoužívajte poškodené napájacie káble, príslušenstvo a iné periférne zariadenia v spojení s NanoPhotometer®. Používajte len dodávané a špecifikované napájacie zdroje/nabíjačky.

Nevystavujte NanoPhotometer® silným magnetickým alebo elektrickým poliam, vode alebo akýmkoľvek kvapalinám, ako je dážď alebo vlhkosť.

Neprenášajte prístroj do blízkosti zdrojov požiaru ani ho nespáľujte, pretože integrovaná batéria môže explodovať. Neumiestňujte ho ani nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, najmä nevystavujte teplotám nad 60 °C.


Nepoužívajte NanoPhotometer® na kolenách alebo v blízkosti časti tela, aby ste predišli nepríjemnostiam alebo zraneniam spôsobeným teplom.

Na NanoPhotometer® neumiestňujte žiadne predmety.

NanoPhotometer® s batériovým modulom (mobilná verzia) musí byť počas prepravy vypnutý. Počas prepravy musí byť vypínač chránený proti nárazom a vibráciám, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu (pozri aj časť 8 Údržba).

Biologické vzorky môžu obsahovať alebo môžu prenášať infekčné ochorenia. Buďte si vedomí zdravotných rizík spojených s týmito vzorkami a noste vhodné ochranné vybavenie. Manipulujte s týmito vzorkami s maximálnou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi a organizačnými požiadavkami pred prácou s takýmto potenciálne infekčným materiálom.

Poznámka: Nevylievajte biologické vzorky na komponenty zariadenia. Ak sa tak stane, okamžite prístroj vydezinfikujte podľa laboratórnych protokolov a pokynov na čistenie prístroja (pozri stranu 150 Údržba).

Symbol na  výrobku alebo na sprievodnej dokumentácii znamená, že tento prístroj nesmie byť likvidovaný ako domový odpad. Namiesto toho musí byť odovzdaný na zbernom mieste na recykláciu

elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.

VYBALENIE A UMIESTNENIE

Skontrolujte obsah balenia podľa dodacieho listu. Ak dodávka nie je úplná, ihneď informujte svojho dodávateľa.

Skontrolujte prístroj na známky poškodenia pri preprave. Ak došlo k poškodeniu počas prepravy, ihneď informujte svojho dodávateľa.

Uistite sa, že miesto inštalácie spĺňa environmentálne podmienky pre bezpečnú prevádzku: použitie len v interiéri alebo v suchom prostredí.

NanoPhotometer® je navrhnutý a vyvinutý na použitie v kontrolovanom, zabezpečenom prostredí. Ide o laboratórne prostredie s obmedzeným fyzickým prístupom v rámci spoločnosti. K NanoPhotometer® majú prístup iba kvalifikovaní používatelia a môže byť prevádzkovaný iba v rámci lokálnej firemnej siete. Ak nie je zabezpečené bezpečné prostredie, NanoPhotometer® nespĺňa nasledujúce požiadavky Smernice o rádiových zariadeniach (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Poznámka: Nevystavujte NanoPhotometer® veľkému množstvu tekutín, dažďu, vlhkosti alebo prašnému prostrediu.

Teplotný rozsah 15 - 40 °C (NP80, N60, N50 a C40) a 18 - 32 °C (N120); Pri použití ohrevu kyviek je teplotný rozsah 15 až 27 °C.

Skladovacia teplota je 0 - 40 °C. Zariadenie neskladujte mimo tohto rozsahu.

Ak je zariadenie vystavené veľkým teplotným výkyvom (napríklad preprava pri nízkych teplotách vonku), môže byť potrebné prístroj uviesť na izbovú teplotu. Zariadenie vypnite približne na 2-3 hodiny a znovu ho zapnite po dosiahnutí izbovej teploty.

Maximálna relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) 80 % až do 31 °C s lineárnym poklesom na 50 % pri 40 °C.

Zariadenie musí byť umiestnené na stabilnom a rovnom povrchu, ktorý unesie 4 - 5 kg. Okrem toho musí byť okolo zariadenia zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu. Počas prevádzky dbajte na to, aby cirkuláciu vzduchu neblokovali žiadne predmety. Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu, pretože môže dôjsť k zafarbeniu a poškodeniu plastových častí prístroja.

Zariadenie by malo byť umiestnené tak, aby v prípade núdze bolo možné konektor napájania ľahko identifikovať a odpojiť.

Zariadenie neprepravujte za voliteľný displej alebo ovládacie rameno, ale vždy za hlavné teleso.

Na prevádzku NanoPhotometra je potrebné používať výlučne 90W napájací zdroj/kábel dodaný spoločnosťou Implen.

Napájanie: 90 - 250 V ± 10 %, 50 - 60 Hz.

V prípade mobilných verzií nabíjajte batériu pred prvým použitím najmenej 3 hodiny. Aby sa zabránilo hlbokému vybitiu batérie, nabíjajte batériu najmenej raz za mesiac, aj keď sa NanoPhotometer® nepoužíva. Batérie s hlbokým vybitím nie je možné nabíť; je potrebné ich vymeniť za nové.

Zariadenie zapnite vypínačom na zadnej strane zariadenia po pripojení do zásuvky. Prístroj automaticky vykoná sériu autotestov.

Pred použitím si prosím prečítajte celý návod na obsluhu.


V prípade technických alebo manipulačných problémov ihneď kontaktujte pôvodných dodávateľov.

Poznámka: Ak sa toto zariadenie používa spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný, alebo v prostrediach, ktoré nie sú vhodné na bezpečnú prevádzku, môžu byť ohrozené ochranné funkcie zariadenia a záruka zariadenia môže byť neplatná.

31. Appendix 22 - NAMESTITEV SPEKTROFOTOMETRA

VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred začatkom namestitve si vzemite čas in se seznajte z opozorilnými nalepkami in symbolmi na vašem instrumentu. Ti so namenjeni obveščanju o morebitnih nevarnostih ali krajih, kjer je potrebna posebna previdnosť.

 Enosmerni tok

Kategorija prenapetosti: Razred II

Največja obratovalna výšina: < 2000 m

Razred onesnaženia: 2

V nobenem prímeru ne odpirajte naprave. Obstaja nevarnosť električného udaru, izpostavenosti UV-sevanju in poškodbe občutljive optike.

Ko uporabljate submikrolitrsko celico v povezavi z NanoPhotometer® C40, se prepričajte, da je pokrov nameščen na vstavljenú submikrolitrsko celico pred vsakim merjenjem.

OPOZORILLO: Pri merjenju brez pokrova iz merilne glave sije potencialno škodljivo UV-sevanje.

Ne uporabljajte poškodených napajalných káblov, dodatkov in druhe periferne opreme v povezavi z NanoPhotometer®. Uporabljajte samo priložené in špecifikované napajalníke/polnílníky.

NanoPhotometerja® ne izpostavljajte močným magnetným ali električným poljem, vodi ali kakršným koli tekočinám, kot so dež ali vlaga.

Naprave ne nosite v blížinu ognja ali je ne sežígajte, saj lahko vgrajená baterija explodíra. Prav tako je ne postavljajte ali uporabljajte v blížinu virov toplote, še posebej je ne izpostavljajte teperaturem nad 60 °C.


NanoPhotometerja® ne uporabljajte na kolenih ali v blížinu katerega koli dela telesa, da se izognete neugodju ali poškodbám zaradi toplote.

Na NanoPhotometer® ne postavljajte nobených predmetov.

NanoPhotometer® z baterijským modulom (mobilná različica) mora byť med prevozom izklopľný. Med prevozom mora byť stikalo zaščiteno pred udarcami in vibráciami, da prepričíte nenameren vľop (glejte túdi pľlavje 8 Vzdrževanie).

Biološki vzorci lahko vsebujejo ali majú potencial za prenos nalezľivých boľezní. Zavedajte se zdravstvených tveganí, pľvezaných s temi vzorcami, in nosite ústrednú zaščitnú opremu. Z vzorcami ravnajte z največou skrbnosťou in v súľadu z veljavnými zákonskými in organizačijskými zahtevami pred delom s takšným potencialno kužným materiálom.

Opomba: Ne razlivajte bioloških vzorcev po komponentah naprave. Če se to zgodi, napravo takoj razkužite v skladu z laboratorijskimi protokoli in navodili za čiščenje naprave (glejte stran 150 Vzdrževanje).

Simbol na  izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da te naprave ne smete zavržiti kot gospodinjski odpadki. Namesto tega jo morate oddati na zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Odstranjevanje mora biti v skladu z lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

ODPAKIRANJE IN NAMESTITEV

Preverite vsebino paketa glede na dobavnico. Če dobavljena vsebina ni popolna, takoj obvestite svojega dobavitelja.

Preverite napravo za znake poškodb med prevozom. Če je prišlo do poškodb med prevozom, takoj obvestite svojega dobavitelja.

Prepričajte se, da mesto namestitve izpolnjuje okoljske pogoje za varno delovanje: uporaba samo v zaprtih prostorih, v suhem okolju.

NanoPhotometer® je zasnovan in razvit za uporabo v nadzorovanem, varnem okolju. To je opisano kot laboratorijsko okolje z omejenim fizičnim dostopom znotraj podjetja. Do NanoPhotometer® imajo dostop samo usposobljeni uporabniki in ga je mogoče upravljati samo v lokalnem omrežju podjetja. Če varnega okolja ni zagotovljenega, NanoPhotometer® ne izpolnjuje naslednjih zahtev Direktive o radijski opremi (RED DA): ACM, AUM, SUM, SSM, SCM, CCK, GEC.

Opomba: NanoPhotometerja® ne izpostavljajte velikim količinam tekočin, dežju, vlagi ali prašnim okoljem.

Temperaturno območje 15 - 40°C (NP80, N60, N50 in C40) in 18 - 32°C (N120); Pri uporabi ogrevanja kivate je temperaturno območje 15 do 27°C.

Temperaturno območje za shranjevanje je 0 - 40°C. Naprave ne shranjujte izven tega območja.

Če je naprava izpostavljena velikim temperaturnim nihanjem (na primer prevoz na nizkih zunanjih temperaturah), je morda treba napravo prilagoditi sobni temperaturi. Napravo izklopite za približno 2-3 ure in jo znova vklopite, ko doseže sobno temperaturo.

Največja relativna vlažnost (brez kondenzacije) 80% do 31°C z linearnim zmanjšanjem na 50% pri 40°C.

Naprava mora biti nameščena na stabilno in ravno površino, ki lahko prenese 4 - 5 kg. Poleg tega mora biti okoli naprave omogočen prost pretok zraka. Med delovanjem pazite, da noben predmet ne blokira pretoka zraka. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi, saj lahko pride do razbarvanja in poškodbe plastičnih delov naprave.

Naprava mora biti nameščena tako, da je v nujnih primerih mogoče hitro prepoznati in odklopiti napajalni priključek.

Naprave ne prevažajte z dodatnim zaslonom ali ročico, temveč vedno z glavnim ohišjem.

Za delovanje NanoPhotometra® uporabljajte izključno 90W napajalnik/kabel, ki ga zagotovi Implen.

Napajanje: 90 - 250 V ± 10%, 50 - 60 Hz.

Za mobilne različice napolnite baterijo vsaj 3 ure pred prvo uporabo. Da preprečite globoko praznjenje baterije, polnite baterijo vsaj enkrat na mesec, tudi če NanoPhotometer® ni v uporabi. Globoko izpraznjene baterije ni mogoče ponovno napolniti; potrebno jih je zamenjati z novimi.

Napravo vklopite z gumbom za vklop na zadnji strani naprave po priklopu v vtičnico. Naprava samodejno izvede vrsto samodiagnostičnih testov.

Pred uporabo preberite celoten priročnik za uporabo.

V primeru tehničnih ali manipulativnih težav takoj obvestite prvotne dobavitelje.

Opomba: Če se ta naprava uporablja na način, ki ni določen ali v okoljih, ki niso primerna za varno delovanje, so lahko zaščitne funkcije naprave ogrožene in garancija naprave lahko postane neveljavna.



32. Alphabetical Appendix

A

Absorbance Ratio.....	113
Calculations.....	115
Measurement Protocol.....	113
Accessories.....	17
Optional Accessories.....	18
Standard Accessories.....	17
Air Bubble Recognition.....	61, 63, 73, 76
Alert Message.....	139
Applications.....	31
Assistance.....	141
Diagnostics.....	144
End-User License Agreement.....	145
License Information.....	145
Remote Access.....	144
Report Problem.....	141
Software Maintenance.....	142
Support.....	141
User Manual.....	142
Auto Print.....	44
Autosave.....	46, 124

B

Backup.....	143
Barcode Reader.....	20
Basic Operation.....	49
Battery.....	57, 147
BCA Assay.....	83
Biuret Assay.....	83
Blank Control.....	10, 131
Bradford Assay.....	83
Buttons.....	34

C

CFR21 Software.....	137
Cleaning.....	148
Compatibility.....	27
Solvent.....	50, 56
Concentration.....	116
Calculations.....	119
Measurement Protocol.....	116
Connecting Cable.....	17
Connectivity	
HDMI.....	22
LAN.....	22
USB.....	22
WiFi.....	22
Contact.....	146
Cryo Label.....	20, 44
Custom Apps.....	123
Cuvette.....	52

D

Data Transfer.....	56
Date and Time.....	126
Delete Data.....	47
Diagnostics.....	144
Didymium Glass Filter.....	18
DiluCell.....	19
Display.....	127
DYMO Printer.....	20

E

Edit.....	36
Editor.....	101
Excel.....	45

F

Field Kit.....	19
File Server.....	56, 134

G

Graph area.....	36
Graph Overlay.....	36

H

Handling Tips	
Cuvette.....	55
Multi Channel.....	55
NanoVolume.....	54
Hard Reset.....	16
HDMI.....	22
HP Printer.....	21

I

Icons.....	33
IDS.....	45
Illumination Sample Window.....	128
Implen Document Source.....	45
Initialization Test.....	138
Installation	
Computer.....	27
Multi-User.....	28
Printer.....	29
Single-User.....	28
Smart Phone.....	29
Software.....	27
Tablet.....	29
IQ/OQ documentation.....	18

R

Rear Panel	16
Replacement Parts	147
Battery	147
Lamp	147
Touch Screen	148
Report Configuration	137
Reset	143
Results area	35

S

Safety Information	25
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	150
Información de seguridad	162
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	160
Informações de Segurança	166
Informations de sécurité	154
Informazioni di sicurezza	158
Säkerhetsinformation	164
Sicherheitsinformationen	156
Veiligheidsinformatie	152
Sample Control™	10, 59, 71
Sample ID	39
Sample Map	37
horizontally	40
Selection Options	38
vertically	40
Sample Name	
Change	196
Sample Quality Control	10, 131
Save	45
Save Data	45
Self-Test	144
Serial Number	16
Side Tab Bar	35, 41
Software	
Backup	143
Reset	143
Update	142
Solvent Compatibility	50, 56
Specifications	23
Standard Curve	120
Calculations	123
Load	92
Measurement Protocol	120

Remeasure	92
Standard Solution	18
Stored Methods	125
Stored Results	124
Submicroliter Cell	34, 53
System Freeze	140

T

Table area	35
Technical Specifications	23
Touch Screen	148
Trademarks	145
Troubleshooting	138

U

Unpacking	26
Auspacken	157
Déballage	155
Desembalaje	163
Desembalamento	167
Disimballaggio	159
Rozpakowywanie	161
Uitpakken	153
Uppackning	165
Vybalení	151
Update	142
USB	22
User Manual	142

W

Warning Message	138
Warning Messages	131
Warranty	149
Wavelength	100
Calculation / Formula	101
Calculations	106
Measurement Protocol	100
Wavescan	107
Calculations	112
Measurement Protocol Multi Channel ...	103, 109
Measurement Protocol Single Channel	107
WiFi	22
WLAN	133